

Краткое руководство

Составьте график проведения процедур удаления волос прибором SensEpi™ для достижения наилучшего результата!

Периоды между 1-4 процедурами составляют приблизительно две недели.

Периоды между 5-7 процедурами составляют приблизительно четыре недели.

Восьмая процедура и далее выполняются при необходимости, до достижения желаемого результата.

Настройте эпилятор SensEpi™!

1. Выньте из коробки БАЗУ, АППЛИКАТОР и другие компоненты эпилятора SensEpi™.

2. Удостоверьтесь, что СМЕННЫЙ ЛАМПОВЫЙ КАРТРИДЖ правильно вставлен в головку прибора.

3. Вставьте сетевой шнур в разъем БАЗЫ эпилятора SensEpi™.

4. Вставьте другой конец сетевого шнура в розетку. Загорится СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР «ОЖИДАНИЕ».

Теперь эпилятор SensEpi™ готов к работе.

Обращайтесь с эпилятором SensEpi™ внимательно и осторожно!

Обработайте зоны, которые в недавнее время не подвергались воздействию солнца.

5. Кожа зон обработки должна быть побритой, чистой и сухой. На ней не должно быть пудры, антиперспирантов и дезодорантов.

Не удаляйте волосы воском, не выдергивайте и не выщипывайте их.

Бритье – важный шаг к достижению желаемого результата!

6. Нажмите переключатель «ВКЛЮЧЕНО»/«РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ». Загорится световой индикатор «Включено» (оранжевый) и появится звук вентилятора (похожий на звук фена).

7. Приблизительно через 3,5 секунды после нажатия ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ «ВКЛЮЧЕНО»/«РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ» загорится СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР ГОТОВНОСТИ (зеленый). Теперь устройство готово к работе, и вы можете произвести первый импульс на самом низком уровне энергии.

8. Если это ваша первая процедура, выберите подходящий уровень энергии.

Эпилятор SensEpi™ имеет 5 уровней энергии от 1 (самого низкого) до 5 (самого высокого).

Чтобы выбрать правильный уровень энергии для первой процедуры, отдельно протестируйте каждую зону обработки: плечо/руку:

- Поместите ОБРАБАТЫВАЮЩУЮ ПОВЕРХНОСТЬ на кожу и нажмите кнопку "ИМПУЛЬС" для генерирования одного импульса.
- Если вы не почувствовали дискомфорта, нажмите кнопку + один раз и сгенерируйте один импульс на другом участке при уровне энергии 2.
- Продолжайте пробовать, увеличивая уровень энергии до того, как достигнете наивысшего уровня, при котором все еще чувствуете себя комфортно.
- Если в течение одного часа вы не почувствуете нежелательных эффектов, можете начать полную процедуру при этом уровне энергии.
- Повторите этот тест на каждом участке тела, который собираетесь обработать.

96

9. Установите уровень энергии. Если уровень энергии должен быть выше самого нижнего уровня, нажмите КНОПКИ РЕГУЛИРОВАНИЯ УРОВНЯ ЭНЕРГИИ «-» или «+», чтобы соответственно уменьшить или увеличить уровень энергии, пока желаемый уровень не будет установлен и отображен световым индикатором уровня энергии.

10. Поместите ОБРАБАТЫВАЮЩУЮ ПОВЕРХНОСТЬ на тело, убедившись, что кожа ровная и гладкая. Когда ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПОВЕРХНОСТЬ полностью соприкоснется с кожей, загорится СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР ГОТОВНОСТИ.

11. Нажмите кнопку «ИМПУЛЬС». Сначала прибор определит цвет вашей кожи. Если цвет кожи достаточно светлый для безопасного применения, устройство произведет импульс света на кожу, а СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР ГОТОВНОСТИ погаснет.

Вы увидите яркую вспышку света и одновременно услышите слабый хлопок, что является нормальным для устройства. Вы почувствуете слабое тепло и покалывание.

Эпилятор SensEpi™ тотчас же подзарядится для генерирования следующего импульса. Через 3,5 секунды снова включится СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР ГОТОВНОСТИ.

12. Уберите ОБРАБАТЫВАЮЩУЮ ПОВЕРХНОСТЬ с обработанного участка кожи.

13. Переместите ОБРАБАТЫВАЮЩУЮ ПОВЕРХНОСТЬ на другой участок кожи. Ориентируясь по вмятинам на коже, оставленным эпилятором, правильно разместите его для генерирования следующего импульса, избегая пропусков и наложения участков импульсов один на другой.



Старайтесь не допускать наложения импульсов один на другой!



Предупреждение: не обрабатывайте один и тот же участок кожи более одного раза за один сеанс удаления волос!
Обработка одного и того же участка кожи более одного раза за сеанс увеличивает вероятность возникновения нежелательных эффектов.

14. Повторяйте процедуру, пока не обработаете всю необходимую зону.



Если на коже появились пузыри или ожоги, НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЕ ПРОЦЕДУРУ!

«Хоум Скиновэшнс Лтд.» оставляет за собой право вносить изменения в свои продукты и спецификации для повышения производительности, надежности, технологичности. Информация, предоставленная «Хоум Скиновэшнс Лтд.», считается точной и достоверной на момент публикации. Однако «Хоум Скиновэшнс Лтд.» не несет никакой ответственности за ее использование. Лицензия не предоставляется косвенно или иным образом в соответствии с каким-либо патентом или патентными правами «Хоум Скиновэшнс Лтд.». Никакая часть этого документа не может быть воспроизведена или передана в любой форме и любыми средствами, электронными или механическими, для любых целей без письменного разрешения «Хоум Скиновэшнс Лтд.». Данные могут измениться без предварительного уведомления.

«Хоум Скиновэшнс Лтд.» является владельцем патентов и заявок на патент, находящихся на рассмотрении, торговых знаков, авторских прав и других прав интеллектуальной собственности, относящихся к предмету данного документа. За исключением случаев, прямо оговоренных в письменном лицензионном соглашении «Хоум Скиновэшнс Лтд.», предоставление данного документа не дает Вам никакой лицензии на использование этих патентов, торговых знаков, авторских прав или других прав интеллектуальной собственности.

Specifications are subject to change without notice.
«Хоум Скиновэшнс Лтд.», ИЗРАИЛЬ, 20692 Йокнеам, Шаар Йокнеам а/н 533, Здание Anono www.silk'n.com, info@silk'n.com
Specifications are subject to change without notice.

Home Skinovations Ltd., Tabor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 20692, ISRAEL www.silk'n.com, info@silk'n.com

Содержание

1. Перед началом использования.....	99
1.1. Описание прибора Silk'n SensEpil™.....	99
1.2. Комплект поставки.....	100
1.3. Одноразовый ламповый картридж.....	100
2. Предполагаемое использование Silk'n SensEpil™.....	100
3. Обеспечение безопасности с Silk'n SensEpil™.....	100
4. Противопоказания.....	101
5. Не используйте эпилятор SensEpil™, если.....	103
6. Не используйте эпилятор SensEpil™ в следующих случаях.....	104
7. Возможные побочные эффекты при использовании Silk'n SensEpil™.....	105
8. Долговременная эпиляция методом Silk'n SensEpil™.....	106
8.1. Каким образом свет удаляет волосы?.....	106
8.2. Каким образом цикл роста волос влияет на световую эпиляцию?.....	106
8.3. Планирование Вашей эпиляции с Silk'n SensEpil™ для достижения наилучших результатов.....	107
9. Первые шаги с Silk'n SensEpil™.....	108
9.1. Настройка Silk'n SensEpil™.....	111
9.2. Первая обработка с помощью Silk'n SensEpil™.....	111
10. Техническое обслуживание Silk'n SensEpil™.....	112
10.1. Чистка Silk'n SensEpil™.....	112
10.2. Замена ЛАМПОВОГО КАРТРИДЖА.....	112
11. Выявление и устранение неисправностей.....	113
11.1. «Мой Silk'n SensEpil™ не запускается».....	113
11.2. «Световой импульс не излучается, когда я нажимаю ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ИМПУЛЬС».....	113
12. Сервисное обслуживание клиентов.....	114
13. Спецификации.....	114
14. Маркировка.....	115
Заявление о соответствии ЕС.....	116

Перед тем как впервые воспользоваться Silk'n SensEpil™, пожалуйста, внимательно прочитайте данное Руководство Пользователя целиком. Уделите особое внимание разделам, посвященным процедурам использования прибора, работе прибора, и процедурам, совершаемым после использования прибора. Мы рекомендуем Вам повторно просматривать данное Руководство Пользователя перед каждым использованием Silk'n SensEpil™.



Silk'n SensEpil™ - это мощный электрический прибор. В этой связи при его использовании следует уделять особое внимание вопросам безопасности. Перед использованием, пожалуйста, ознакомьтесь со всеми предупреждениями и мерами предосторожности для обеспечения безопасности, и неукоснительно их придерживайтесь в процессе использования Silk'n SensEpil™.


1. Перед началом работы

Silk'n SensEpil™ - это световое устройство для долгосрочного удаления волос в домашних условиях.

1.1. Описание прибора Silk'n SensEpil™

Ваш прибор Silk'n SensEpil™ состоит из БАЗЫ с ПАНЕЛЬЮ УПРАВЛЕНИЯ, АППЛИКАТОРА и ОДНОРАЗОВОГО ЛАМПОВОГО КАРТРИДЖА.

На АППЛИКАТОРЕ эпилятора Silk'n SensEpil™ есть кнопка «ИМПУЛЬС», а также СМЕННЫЙ КАРТРИДЖ С ЛАМПОЙ и ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ.

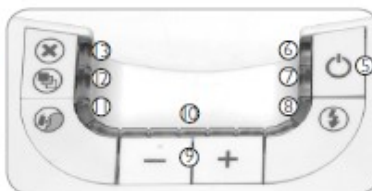

- ① База
- ② Панель управления
- ③ Аппликатор
- ④ Одноразовый ламповый картридж

- ⑤ Переключатель Включения питания/ В режиме ожидания
- ⑥ Световой индикатор Режим ожидания
- ⑦ Световой индикатор Включение питания
- ⑧ Световой Индикатор Режим Ожидания

- ⑨ Кнопки настройки уровня интенсивности энергии
- ⑩ Световые индикаторы интенсивности энергии
- ⑪ Световой индикатор Заменить картридж
- ⑫ Предупредительный световой индикатор цвета кожи

- ⑬ Предупредительный световой индикатор системы
- ⑭ Кнопка Импульс
- ⑮ Одноразовый ламповый картридж
- ⑯ Обрабатывающая поверхность

1.2. Комплект поставки

В комплект поставки Silk'n SensEpil™ входит следующее:

- БАЗА и АППЛИКАТОР Silk'n SensEpil™
- Сетевой шнур
- Руководство Пользователя
- Инструкция на DVD

1.3. Одноразовый ламповый картридж

СМЕННЫЙ ЛАМПОВЫЙ КАРТРИДЖ эпилятора Silk'n SensEpil™ способен производить ограниченное и заранее установленное количество световых импульсов (вне зависимости от уровня энергии данных импульсов). Количество световых импульсов СМЕНОГО ЛАМПОВОГО КАРТРИДЖА указано на упаковке.

Для вашего сведения: для полного курса эпиляции всего тела обычно требуется 5000 - 7000 световых импульсов.

2. Предполагаемое использование Silk'n SensEpil™

Silk'n SensEpil™ предназначен для удаления нежелательных волос.

Silk'n SensEpil™ может быть использован для удаления нежелательных волос на теле.

Идеальными участками на теле для использования эпилятора Silk'n SensEpil™ являются лицо, подмышки, зона бикини, руки и ноги.

3. Обеспечение безопасности с Silk'n SensEpil™

Для прибора Silk'n SensEpil™ безопасность стоит на первом месте.

- **Технология HPL™ в Silk'n SensEpil™** - Исключительная степень безопасности с меньшим уровнем интенсивности энергии. Технология Импульсное излучение в домашних условиях (HPL)™ позволяет добиться долговременных результатов эпиляции с помощью всего лишь части того уровня интенсивности энергии, который используется в других образцах оборудования световой эпиляции. Малый объем энергии, используемый в приборе Silk'n SensEpil™, сокращает потенциальную возможность причинения вреда и появления осложнений при его применении, а также способствует обеспечению Вашей безопасности в целом.

- **Silk'n SensEpil™ защищает Вашу кожу**

Световая эпиляция не подходит для кожи естественных темных оттенков или загорелой кожи. Silk'n SensEpil™ поставляется со встроенным ДАТЧИКОМ ЦВЕТА КОЖИ, который предназначен для определения цвета кожи на обрабатываемой поверхности и разрешения применения только в случае подходящих оттенков цвета кожи. Эта уникальная мера обеспечения безопасности не позволит Вам подвергнуть воздействию Вашу кожу на тех участках, где она слишком темная или слишком загорелая.

Кроме того, ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПОВЕРХНОСТЬ размером 2X3 см², через которую поступают импульсы, установлена в углублении внутри КАРТРИДЖА С ЛАМПОЙ на ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ. Это позволяет устройству Silk'n SensEpil™ защитить кожу, избегая прямого контакта ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ с кожей.

- **Silk'n SensEpil™ защищает Ваши глаза**

АППЛИКАТОР Silk'n SensEpil™ имеет встроенную функцию безопасности для защиты глаз. Она предусмотрена для того, чтобы не допустить генерирования светового импульса, когда АППЛИКАТОР не касается кожи. Эта блокировка отключается только тогда, когда ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПОВЕРХНОСТЬ контактирует с кожей.

100

4. Противопоказания

Важная информация о мерах обеспечения безопасности – Прочтите перед использованием!

Эпилятор Silk'n SensEpil™ не предназначен для всех. Перед использованием прочтите и примите к сведению информацию из следующего раздела. Более подробную информацию и персональные рекомендации вы можете получить на сайтах www.silkn.com, www.silkn.eu или на региональном сайте Silk'n™.

Предупреждение	Возможные результаты	Рекомендации по безопасности
Не используйте эпилятор SensEpil™ на смуглой по природе коже.  Смотрите таблицу цвета кожи на внутренней стороне крышки.	Применение эпилятора SensEpil™ на смуглой коже может привести к нежелательным эффектам, таким как покраснение и дискомфорт.	В эпилятор SensEpil™ встроен уникальный ДАТЧИК ЦВЕТА КОЖИ, который определяет оттенок кожи перед каждым сеансом и периодически во время сеанса. ДАТЧИК ЦВЕТА КОЖИ гарантирует, что импульсы будут производиться только на коже подходящего тона.
Не используйте эпилятор SensEpil™ на загорелой коже или после недавнего пребывания на солнце (включая аппараты искусственного загара). Не подвергайте обработанные зоны солнечному воздействию.	Использование эпилятора SensEpil™ до или после любого солнечного воздействия может привести к нежелательным эффектам, таким как покраснение и дискомфорт. Загорелая кожа, особенно после солнечного воздействия, содержит большое количество пигмента меланина. Это относится к коже всех типов и оттенков, включая те, на которые, как кажется, загар долго не ложится. Наличие большого количества меланина подвергает кожу более высокому риску при использовании любого светового метода удаления волос.	До проведения процедуры эпилятором SensEpil™ необходимо в течение 4 недель избегать пребывания на солнце. Под пребыванием на солнце подразумевается непрерывное пребывание под открытыми солнечными лучами более 15 минут или непрерывное незащищенное пребывание под рассеянными солнечными лучами более 1 часа. Чтобы защитить от солнечного воздействия кожу, которая недавно подвергалась процедуре удаления волос, в течение 2 недель после каждого сеанса удаления волос используйте солнцезащитным кремом с коэффициентом защиты 30 или выше.
Никогда не пользуйтесь эпилятором SensEpil™ вокруг или возле глаз.	Хотя прибор SensEpil™ можно использовать для удаления волос на лице, следует быть очень внимательным, чтобы не приблизиться к глазам.	Устройство SensEpil™ имеет встроенную функцию безопасности для защиты глаз. Она предусмотрена для того, чтобы не допустить генерирования светового импульса, когда ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПОВЕРХНОСТЬ не касается кожи. Механизм защиты позволяет проводить процедуру только тогда, когда ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПОВЕРХНОСТЬ контактирует с кожей.

101

Предупреждение	Возможные результаты	Рекомендации по безопасности
Не используйте эпилятор на татуировках, перманентном макияже, темно-коричневых или черных пятнах (таких как большие веснушки, родимые пятна, родинки или бородавки), сосках, гениталиях или губах.	Применение эпилятора SensEpil™ на любом темном или содержащем больше пигмента участке может привести к нежелательным эффектам, таким как ожоги, волдыри и изменение цвета кожи (гипер- или гипопигментация).	Накройте область материалом, который не поглощает свет, таким как белая ткань или белая медицинская лента.
Не используйте прибор на участках, пораженных экземой или псориазом, при повреждениях, открытых ранах или инфицированных зонах (герпес), на коже в атипичном состоянии, причиной которого стали общие заболевания или болезни обмена веществ (например, диабет).	Световые процедуры могут привести к нежелательным реакциям чувствительных зон.	Прежде чем использовать аппарат SensEpil™, дождитесь заживления пораженного участка.
Обработка зоны, на которой в прошлом возник герпес.	Световые процедуры могут привести к нежелательным реакциям чувствительных зон.	Проконсультируйтесь с врачом на предмет проведения профилактического лечения перед использованием устройства SensEpil™.
Не используйте эпилятор SensEpil™ в период беременности или кормления грудью.	Гормональные изменения во время беременности могут увеличить чувствительность кожи и риск возникновения нежелательных эффектов.	
Не обрабатывайте участки, на которых, возможно, захотите, чтобы волосы выросли.	Результаты долгосрочны.	
Храните все части эпилятора SensEpil™ вдали от воды! Не кладите или не храните прибор SensEpil™ там, где он может упасть, его могут столкнуть или поместить в ванну, раковину или в любой другой сосуд с водой.	Это может привести к серьезному поражению электрошок.	Не используйте эпилятор SensEpil™: во время купания или в сыром и мокром месте. Немедленно выньте вилку из розетки, если устройство упало в воду.
Не пытайтесь вскрыть или самостоятельно починить эпилятор SensEpil™.	При вскрытии устройства SensEpil™ вы можете коснуться опасных электрических деталей и подвергнуться воздействию импульсной световой энергии. Все это может причинить серьезные телесные повреждения и/или необратимые травмы глаз. Это также может привести к поломке аппарата и аннулированию гарантии.	Обратитесь в Службу обслуживания клиентов Silk'n™, если вы сломали или повредили устройство и нуждаетесь в его починке.

102

5. Не используйте эпилятор SensEpil™, если:

поврежден СМЕННЫЙ ЛАМПОВЫЙ КАРТРИДЖ или если его ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПОВЕРХНОСТЬ треснула, имеет щербинки или отсутствует.		Немедленно прекратите пользоваться устройством и свяжитесь со Службой обслуживания клиентов Silk'n™.
компания Home Skinovations Ltd. не рекомендует использование дополнительных приспособлений или аксессуаров.		Немедленно прекратите пользоваться устройством и свяжитесь со Службой обслуживания клиентов Silk'n™.
в устройстве поврежден шнур или вилка.	Держите сетевой шнур подальше от горячих поверхностей.	Немедленно прекратите пользоваться устройством и свяжитесь со Службой обслуживания клиентов Silk'n™.
вы видите или чувствуете запах дыма во время работы устройства.		Немедленно прекратите пользоваться устройством и свяжитесь со Службой обслуживания клиентов Silk'n™.
прибор плохо работает или поврежден.		Немедленно прекратите пользоваться устройством и свяжитесь со Службой обслуживания клиентов Silk'n™.
его ДАТЧИК ЦВЕТА КОЖИ поврежден или сломан.		Немедленно прекратите пользоваться устройством и свяжитесь со Службой обслуживания клиентов Silk'n™.
внешний корпус поврежден или распадается на части.		Немедленно прекратите пользоваться устройством и свяжитесь со Службой обслуживания клиентов Silk'n™.

103

6. Когда не следует использовать эпилятор SensEpil™:

Если в прошлом вы были предрасположены к образованию келоидных рубцов.	Проконсультируйтесь с врачом перед началом использования устройства SensEpil.
если страдаете эпилепсией.	
если страдаете заболеванием, связанным со светочувствительностью, таким как порфирия, полиморфный фотодерматоз, солнечная крапивница, волчанка и др.	
если в прошлом у вас был рак кожи или наблюдались участки кожи с потенциальными злокачественными образованиями.	
если в течение последних 3 месяцев вы проходили процедуры лучевой терапии и химиотерапии.	
если у вас есть любые другие обстоятельства, из-за которых использование устройства, по мнению вашего врача, будет небезопасно.	
проконсультируйтесь с врачом, если в течение 6 последних месяцев вы обрабатывали кожу выписанным им лекарством.	

104

7. Возможные побочные эффекты при использовании Silk'n SensEpil™

При использовании в соответствии с инструкцией побочные эффекты и осложнения, связанные с применением Silk'n SensEpil™, случаются редко. Однако любая косметическая процедура, включая процедуры, предназначенные для домашнего использования, несет в себе определенную степень риска. Поэтому важно, чтобы Вы понимали и принимали риски и осложнения, которые могут возникнуть в связи с применением систем импульсно-световой эпиляции, предназначенных для домашнего использования.

Нежелательная реакция	Степень риска
Полное или частичное наложение нескольких импульсов на одном и том же участке кожи	Низкая
Незначительный дискомфорт на коже – Несмотря на то, что процедура удаления волос с помощью световых импульсов в домашних условиях обычно очень хорошо переносится, многие пользователи ощущают небольшой дискомфорт, который можно описать как незначительное покалывание в области обработки кожи. Ощущение покалывания обычно длится во время использования прибора или в течение нескольких минут после процедуры. Все ощущения, которые выходят за рамки незначительного дискомфорта, ненормальны и означают, что вы должны либо прекратить использование эпилятора SensEpil™, поскольку плохо переносите процедуру удаления волос, либо установлен слишком высокий уровень энергии.	Низкая
Покраснение кожи – Кожа может покраснеть сразу после использования прибора SensEpil™ или в течение 24 часов после его использования. Краснота обычно проходит в течение 24 часов. Обратитесь к врачу, если краснота не проходит в течение 2-3 дней.	Низкая
Повышенная чувствительность кожи – Кожа на обработанном участке более чувствительна, поэтому вы можете столкнуться с сухостью или шелушением кожи.	Низкая
Изменения пигмента – SensEpil™ воздействует на стержень волоса, в частности, на пигментированные клетки волосяного фолликула и на сам волосяной фолликул. Тем не менее, остается риск временной гиперпигментации (увеличение количества пигмента или коричневатая депигментация) или гипопигментации (отбеливание) окружающих участков кожи. Данный риск изменений в пигментации кожи выше у людей с более темными оттенками кожи. Обычно депигментация или изменения пигмента кожи носят временный характер, а необратимая гиперпигментация или гипопигментация случаются в очень редких случаях.	Редко
Чрезмерное покраснение и напухание – В редких случаях обработанная кожа может очень покраснеть и напухнуть. Это чаще случается на чувствительных участках тела. Покраснение и припухлость должны пройти в течение 2-7 дней. На эту область необходимо часто прикладывать лед. Допускается мягкая очистка, но необходимо избегать солнечного воздействия.	Редко


105

8. Долговременная эпиляция методом Silk'n SensEpil™


Silk'n SensEpil™ - это персональный световой прибор для долговременной эпиляции. Процедура лазерной и световой эпиляции широко известна и завоевала себе прочную репутацию. Она зарекомендовала себя в ходе клинического применения по всему миру на протяжении более 15 лет в качестве безопасного и эффективного способа достижения долговременного сокращения волос.

8.1. Каким образом свет удаляет волосы?


Световая эпиляция основывается на теории селективного фототермолиза, согласно которой оптическая энергия используется для блокировки роста волос. Для достижения подобного термического эффекта стержень волоса должен селективно поглощать световую энергию и трансформировать ее в тепловую энергию.

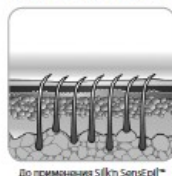

До применения Silk'n SensEpil™

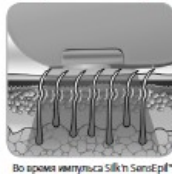

Во время применения Silk'n SensEpil™

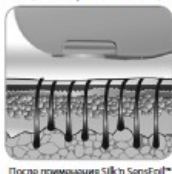

После применения Silk'n SensEpil™

Такая селективность достигается, если оптическая энергия, передаваемая тканям, главным образом поглощается пигментом стержня волоса, в то время как кожа и окружающие ткани остаются холодными. Меланин - это пигмент в стержне волоса, отвечающего за поглощение света, который генерирует тепло, в конечном счете, блокирующее рост волос. Поэтому чем больше меланина присутствует в волосах (т.е. чем темнее волосы), тем больше света может быть поглощено и тем более эффективным может быть свет для эпиляции.

8.2. Каким образом цикл роста волос влияет на световую эпиляцию?

Каждый волосок на нашем теле проходит три стадии цикла роста волос: анаген, катаген и телоген. Данные стадии имеют большое влияние на функционирование процесса световой эпиляции. Анаген - это стадия роста волос, в то время как катаген и телоген - это две стадии покоя.

Время, необходимое для завершения полного цикла роста волос, варьируется в зависимости от каждого конкретного человека и расположения волос на теле, но, как правило, составляет 18-24 месяца. В любой момент времени большинство волосных фолликулов на любом участке кожи находятся в стадиях покоя. Silk'n SensEpil™ не может оказывать воздействие на эти волосы в стадии покоя.



Анаген - стадия роста



Катаген - стадия покоя



Телоген - стадия покоя

Однако волоски на стадии роста Анаген будут реагировать на применения Silk'n SensEpil. Важно понимать, что может потребоваться прохождение полного цикла роста волос для достижения результатов окончательного удаления волос с помощью Silk'n SensEpil™.

8.3. Планирование Вашей эпиляции с Silk'n SensEpil™ для достижения наилучших результатов

Как правило, полный цикл роста волос может занимать 18-24 месяца. В течение этого периода может потребоваться проведение нескольких сеансов процедур с Silk'n SensEpil™ для достижения результата долговременной эпиляции.

Эффективность эпиляции варьируется в зависимости от каждого конкретного человека, в соответствии с участком тела, цветом волос и способом применения Silk'n SensEpil™.

Типичный план эпиляции с помощью Silk'n SensEpil™ в течение полного цикла роста волос:

Периоды между 1-4 процедурами приблизительно составляют две недели.

Периоды между 5-7 процедурами приблизительно составляют четыре недели.

Восьмая процедура и далее выполняются при необходимости, до достижения желаемого результата.



Ожидаемый результат эпиляции

Тип кожи Фенцатрикс	Цвет волос	Плотность светового потока (Дж/см²)	Анатомический участок тела²	Среднее число обработок 1	Эффективность (% эпиляции/повторного³ роста) 1
I-IV	От светло- коричневого до корич- невого	3-4.5	Голень или бедро	10-12 сеансов, с перерывом между ними приб. четыре недели	Сокращение волос на 60%
			Руки		Сокращение волос на 50%
			Линия бикини		Сокращение волос на 60%
			Подмышки		Сокращение волос на 55%
I-IV	От коричне- вого до черного	3-4.5	Голень или бедро	Session 8-10, approx. four weeks apart	Сокращение волос на 70%
			Руки		Сокращение волос на 60%
			Линия бикини		Сокращение волос на 70%
			Подмышки		Сокращение волос на 65%

1 Индивидуальная реакция зависит от типа волос, а так же от биологических факторов, который могут повлиять на модель роста волос. У некоторых пациентов реакция может возникать быстрее или медленнее, относительно среднего числа обработок.

2 Нельзя ожидать результатов долговременной эпиляции после проведения одного или даже двух сеансов обработки. Продолжительность периода покоя для волосных фолликулов зависит также от участка тела.

9. Первые шаги с Silk'n SensEpil™

1. Выньте из коробки БАЗУ, АППЛИКАТОР и другие части эпилятора SensEpil™.
2. Удостоверьтесь, что СМЕННЫЙ ЛАМПОВЫЙ КАРТРИДЖ правильно вставлен в головку аппликатора и не поврежден.
3. Вставьте СЕТЕВОЙ ШНУР в разъем БАЗЫ эпилятора SensEpil™.
4. Вставьте другой конец СЕТЕВОГО ШНУРА в розетку. Загорится СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР "ОЖИДАНИЕ" (зеленый).
Теперь эпилятор SensEpil™ готов к работе.

Обращайтесь с эпилятором SensEpil™ внимательно и осторожно!

Обрабатывайте зоны, которые в недавнее время не подвергались воздействию солнца.

5. Кожа зон обработки должна быть побритой, чистой и сухой. На ней не должно быть пудры, антиперспирантов и дезодорантов. Не удаляйте волосы воском, не выдергивайте и не выщипывайте их. Бритье – важный шаг к достижению желаемого результата!
6. Нажмите ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ «ВКЛЮЧЕНО»/«РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ». Загорится световой индикатор «Включено» (оранжевый) и появится звук вентилятора (похожий на звук фена).
7. bПРиблизительно через 3,5 секунды после нажатия ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ «ВКЛЮЧЕНО»/«РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ» загорится СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР ГОТОВНОСТИ (зеленый). Теперь устройство готово к работе, и вы можете произвести первый импульс на самом низком уровне энергии.
8. Если это ваша первая процедура, выберите подходящий уровень энергии. Эпилятор SensEpil™ имеет 5 уровней энергии от 1 (самого низкого) до 5 (самого высокого). Чтобы выбрать правильный уровень энергии для первой процедуры, отдельно протестируйте каждую зону обработки:

- Поместите ОБРАБАТЫВАЮЩУЮ ПОВЕРХНОСТЬ на кожу и нажмите КНОПКУ «ИМПУЛЬС» для генерирования одного импульса. Если вы не почувствовали дискомфорта, нажмите кнопку + один раз и сгенерируйте один импульс на другом участке при уровне энергии 2.
- Продолжайте пробовать, увеличивая уровень энергии до того, как достигнете наивысшего уровня, при котором все еще чувствуете себя комфортно. Если в течение одного часа вы не почувствуете нежелательных эффектов, можете начать полную процедуру при этом уровне энергии.
- Повторите этот тест на каждом участке тела, который собираетесь обработать.

9. Установите уровень энергии. Если уровень энергии должен быть выше самого нижнего уровня, нажмите КНОПКУ РЕГУЛИРОВАНИЯ УРОВНЯ ЭНЕРГИИ «-» или «+», чтобы соответственно уменьшить или увеличить уровень энергии, пока желаемый уровень не будет установлен и отображен световым индикатором уровня энергии.
10. Поместите ОБРАБАТЫВАЮЩУЮ ПОВЕРХНОСТЬ на тело, убедившись, что кожа ровная и гладкая.
11. Нажмите КНОПКУ «ИМПУЛЬС». Сначала прибор определит цвет вашей кожи. Если цвет кожи достаточно

108

светлый для безопасного применения, устройство произведет импульс света на кожу, а СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР ГОТОВНОСТИ погаснет.

Вы увидите яркую вспышку света и одновременно услышите слабый хлопок, что является нормальным для устройства. Вы почувствуете слабое тепло и покалывание.

Эпилятор SensEpil™ тотчас же подзарядится для генерирования следующего импульса.

Через 3,5 секунды снова включится СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР ГОТОВНОСТИ.

12. Уберите ОБРАБАТЫВАЮЩУЮ ПОВЕРХНОСТЬ с обработанного участка кожи.

13. Переместите ОБРАБАТЫВАЮЩУЮ ПОВЕРХНОСТЬ на другой участок кожи. Ориентируясь по вмятинам на коже, оставленным эпилятором, правильно разместите его для генерирования следующего импульса, избегая пропусков и наложения участков импульсов один на другой.

Импульсы эпилятора SensEpil™ следует производить рядами, начиная с одного конца каждого ряда, последовательно продвигаясь к другому концу. Такая техника позволяет лучше контролировать покрытие кожи и помогает избежать обработки одного и того же участка более одного раза или наложения участков обработки. При соприкосновении с кожей ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПОВЕРХНОСТЬ SensEpil™ должна оставлять временные следы на обрабатываемом участке. Эти видимые следы можно использовать для правильного размещения следующего импульса.



Старайтесь не допускать наложения зон импульсов друг на друга!



Предупреждение: не обрабатывайте один и тот же участок кожи более одного раза за один сеанс удаления волос!
Обработка одного и того же участка кожи более одного раза за сеанс увеличивает вероятность возникновения нежелательных эффектов.

14. Повторяйте процедуру, пока не обработаете всю необходимую зону.



Если на коже появились пузыри или ожоги, НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЕ ПРОЦЕДУРУ!

Уровень интенсивности энергии

Уровень интенсивности энергии определяет интенсивность светового импульса Silk'n SensEpil™, который проецируется на Вашу кожу, начиная от минимального уровня (-) до максимально высокого уровня (+). Соответствующие СВЕТОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ на ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ показывают увеличения интенсивности энергии. По мере увеличения уровня интенсивности энергии возрастает результативность эпиляции, а также увеличивается риск возникновения побочных эффектов и осложнений.

Русский

109

При любом включении Silk'n SensEpiil™ уровень интенсивности энергии будет автоматически сбрасываться до минимального уровня интенсивности энергии.
Будет гореть только один **СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР УРОВНЯ ЭНЕРГИИ**.
Для настройки уровня интенсивности энергии используйте **КНОПКИ НАСТРОЙКИ УРОВНЯ ИНТЕНСИВНОСТИ ЭНЕРГИИ**, регулируя с помощью «+» или «-» соответственно для увеличения или уменьшения уровня интенсивности энергии. Количество **СВЕТОВЫХ ИНДИКАТОРОВ УРОВНЯ ИНТЕНСИВНОСТИ ЭНЕРГИИ** будет совпадать с изменением уровня интенсивности энергии.

Датчик цвета кожи

Световая эпиляция на темных оттенках кожи может привести к нежелательным последствиям, например, ожогам, волдырям и изменениям цвета кожи (гипер- или гипопигментация).

Для предотвращения случаев подобного неправильного использования уникальный **ДАТЧИК ЦВЕТА КОЖИ** Silk'n SensEpiil™ определяет цвет обрабатываемой кожи в начале каждого сеанса и периодически во время сеанса. Если **ДАТЧИК ЦВЕТА КОЖИ** устанавливает, что оттенок кожи слишком темный для применения Silk'n SensEpiil™, прибор автоматически прекратит испускать импульсы.

Если Вы не наблюдаете светового импульса, и **ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР ЦВЕТА КОЖИ** мигает в течение 3 секунд, это означает, что Ваш оттенок кожи, установленный с помощью **ДАТЧИКА ЦВЕТА КОЖИ**, слишком темный для безопасного применения. Попробуйте использовать прибор на другом участке тела или свяжитесь со службой поддержки Silk'n SensEpiil™.

Покрывание участков кожи

Импульсы Silk'n SensEpiil™ следует производить рядами, начиная с одного конца каждого ряда и продвигаясь последовательно к другому концу. Данная техника позволяет лучше контролировать покрытие кожи и помогает Вам избежать обработки одного и того же участка более одного раза или же наложения участков кожи.
При соприкосновении с кожей **ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПОВЕРХНОСТЬ** Silk'n SensEpiil™ должна оставлять временные следы на обрабатываемом участке. Эти видимые следы можно использовать для правильного размещения следующего импульса.



Старайтесь избегать наложения импульсов друг на друга!

Запрещается обрабатывать один и тот же участок кожи более одного раза за один сеанс эпиляции!



Если Ваша кожа покрылась волдырями или ожогами, **НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ!**

9.1. Чего следует ожидать при обработке с помощью Silk'n SensEpiil™?

Для многих людей использование Silk'n SensEpiil™ может быть их первым опытом обращения с подобным прибором, предназначенным для домашнего использования. Прибор Silk'n SensEpiil™ прост в использовании и сеансы эпиляции проходят быстро. Во время сеанса обработки с помощью Silk'n SensEpiil™ это нормально, если Вы испытываете или чувствуете следующее:

- **Шум вентилятора** - Охлаждающий вентилятор Silk'n SensEpiil™ издает звук, похожий на шум фена. Это нормально.
- **Хлопок при каждом импульсе** - При активации светового импульса HPL™ считается нормальным слышать едва уловимый хлопок одновременно со вспышкой света.
- **Умеренное давление АППЛИКАТОРА** - Это необходимо и полезно для размещения соседних импульсов, и является частью уникальной меры обеспечения безопасности Silk'n SensEpiil™
- **Ощущение нагревания и покалывания** - Во время каждого светового импульса считается нормальным ощущать легкое нагревание и покалывание от световой энергии.

Помните о том, что важно всегда использовать настройки минимального уровня интенсивности энергии для начальных сеансов эпиляции. Вы можете ощущать некоторое нагревание в течение часа после сеанса Silk'n SensEpiil™. Слабовыраженный красный или розовый цвет - Во время и сразу же после сеанса Silk'n SensEpiil™ считается не редкостью видеть слабовыраженный розоватый цвет кожи. Он обычно наиболее заметен вокруг самих волосков. Однако если Вы видите полностью покрасневшую кожу, волдыри или ожоги, немедленно прекратите использование Silk'n SensEpiil™

9.2. После обработки с помощью Silk'n SensEpiil™

- После завершения сеанса обработки с помощью Silk'n SensEpiil™ выключите Silk'n SensEpiil™, нажав **ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ**. (Обязательно запомните последнюю настройку уровня интенсивности энергии, которую Вы использовали, так как она не будет восстановлена при включении Silk'n SensEpiil™.)
- Отключите сетевой шнур от электрической розетки.
- После каждого сеанса удаления волос рекомендуется очистить устройство Silk'n SensEpiil, особенно **ОБРАБАТЫВАЮЩУЮ ПОВЕРХНОСТЬ** (См.: «Чистка прибора Silk'n SensEpiil™»)
- После чистки рекомендуется хранить прибор Silk'n SensEpiil™ в его оригинальной коробке и в недоступных для воды местах.



Уход за кожей после сеанса эпиляции

Запрещается подвергать обработанные участки кожи воздействию солнечных лучей. Обязательно тщательно защищайте обработанную кожу кремом или лосьоном с солнцезащитным фильтром на протяжении всего периода эпиляции и, по крайней мере, 2 недели после последнего сеанса эпиляции Silk'n SensEpiil™.

9.1. Что следует ожидать при обработке с помощью Silk'n SensEpil™?

Для многих людей использование Silk'n SensEpil™ может быть их первым опытом обращения с подобным прибором, предназначенным для домашнего использования. Прибор Silk'n SensEpil™ прост в использовании и сеансы эпиляции проходят быстро. Во время сеанса обработки с помощью Silk'n SensEpil™ это нормально, если Вы испытываете или чувствуете следующее:

- **Шум вентилятора** - Охлаждающий вентилятор Silk'n SensEpil™ издает звук, похожий на шум фена. Это нормально.
- **Хлопок при каждом импульсе** - При активации светового импульса HPL™ считается нормальным слышать едва уловимый хлопок одновременно со вспышкой света.
- **Умеренное давление АППЛИКАТОРА** - Это необходимо и полезно для размещения соседних импульсов, и является частью уникальной меры обеспечения безопасности Silk'n SensEpil™.
- **Ощущение нагревания и покалывания** - Во время каждого светового импульса считается нормальным ощущать легкое нагревание и покалывание от световой энергии.

Помните о том, что важно всегда использовать настройки минимального уровня интенсивности энергии для начальных сеансов эпиляции. Вы можете ощущать некоторое нагревание в течение часа после сеанса Silk'n SensEpil™. Слабовыраженный красный или розовый цвет - Во время и сразу же после сеанса Silk'n SensEpil™ считается не редкостью видеть слабовыраженный розоватый цвет кожи. Он обычно наиболее заметен вокруг самих волосков. Однако если Вы видите полностью покрасневшую кожу, волдыри или ожоги, немедленно прекратите использование Silk'n SensEpil™.

9.2. После обработки с помощью Silk'n SensEpil™

- После завершения сеанса обработки с помощью Silk'n SensEpil™ выключите Silk'n SensEpil™, нажав **ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ**. (Обязательно запомните последнюю настройку уровня интенсивности энергии, которую Вы использовали, так как она не будет восстановлена при включении Silk'n SensEpil™.)
- Отключите сетевой шнур от электрической розетки.
- После каждого сеанса удаления волос рекомендуется очистить устройство Silk'n SensEpil, особенно **ОБРАБАТЫВАЮЩУЮ ПОВЕРХНОСТЬ** (См.: «Чистка прибора Silk'n SensEpil™»).
- После чистки рекомендуется хранить прибор Silk'n SensEpil™ в его оригинальной коробке и в недоступных для воды местах.



Уход за кожей после сеанса эпиляции

Запрещается подвергать обработанные участки кожи воздействию солнечных лучей. Обязательно тщательно защищайте обработанную кожу кремом или лосьоном с солнцезащитным фильтром на протяжении всего периода эпиляции и, по крайней мере, 2 недели после последнего сеанса эпиляции Silk'n SensEpil™.

Русский

III

11. Выявление и устранение неисправностей

11.1. «Мой Silk'n SensEpil™ не запускается»

- Убедитесь в том, что сетевой шнур правильно подключен к прибору Silk'n SensEpil™.
- Убедитесь в том, что сетевой шнур подключен к электрической розетке на стене.

11.2. «Световой импульс не излучается, когда я нажимаю ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ИМПУЛЬС».

Убедитесь, что прибор хорошо соприкасается с кожей, а **ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПОВЕРХНОСТЬ** ровно и прочно прижата к коже. В целях вашей безопасности **КНОПКА «ИМПУЛЬС»** производит импульс только, если **ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПОВЕРХНОСТЬ** плотно прижата к коже.

- Проверьте **ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ**. Если **ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР ЦВЕТА КОЖИ** мигает в течение 3 секунд, это означает, что Ваш оттенок кожи, установленный с помощью **ДАТЧИКА ЦВЕТА КОЖИ**, слишком темный для безопасного применения. Попробуйте использовать прибор на другом участке тела или свяжитесь со службой поддержки Silk'n SensEpil™.
 - Проверьте **СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР ЗАМЕНИТЬ КАРТРИДЖ**. Если он горит, отключите Silk'n SensEpil™ от сети и замените **СМЕННЫЙ ЛАМПОВЫЙ КАРТРИДЖ**.
 - Убедитесь в том, что горит **ИНДИКАТОР ГОТОВ К РАБОТЕ**.
 - Если в течение 10 секунд **ИНДИКАТОР ГОТОВ К РАБОТЕ** не загорается, выключите Silk'n SensEpil™ и включите его снова, нажав два раза **ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ**.
 - При повторном сбое свяжитесь с Вашим местным отделом сервисного обслуживания клиентов Silk'n SensEpil™.
 - Проверьте **ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР СИСТЕМЫ**.
 - Если этот индикатор горит, выключите Silk'n SensEpil™ и включите его снова, нажав два раза **ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ**.
 - При повторном сбое свяжитесь с Вашим местным отделом сервисного обслуживания клиентов Silk'n SensEpil™.
- При повторных сбоях свяжитесь с Вашим местным отделом сервисного обслуживания клиентов Silk'n SensEpil™.



Не пытайтесь вскрыть или самостоятельно починить Ваш прибор Silk'n SensEpil™. Только авторизованные сервисные центры Silk'n SensEpil™ имеют право производить ремонт.

При вскрытии Silk'n SensEpil™ Вы можете подвергнуться воздействию опасных электрических компонентов и излучаемой световой энергии, любое из этих обстоятельств может привести к серьезным телесным повреждениям и/или необратимой травме глаз. Попытка вскрытия Silk'n SensEpil™ также может привести к повреждению прибора и сделать недействительными гарантийные обязательства в Вашем случае. Пожалуйста, свяжитесь с отделом сервисного обслуживания Silk'n SensEpil™, если у Вас имеется сломанный или поврежденный прибор, для которого необходим ремонт.

Русский

III

12. Сервисное обслуживание клиентов

Для клиентов в США и Канаде:

Для получения более подробной информации о продуктах Silk'n™, пожалуйста, посетите наш сайт www.silkn.com

Если Ваш прибор сломан, поврежден, нуждается в ремонте, или же с целью получения любой другой помощи пользователю, пожалуйста, обращайтесь в отдел сервисного обслуживания клиентов Silk'n™:

Для клиентов в других странах: Для получения более подробной информации о продуктах Silk'n™ пожалуйста, посетите Ваш местный сайт Silk'n™ в Интернете, www.silkn.eu или www.silkn.com.

Если Ваш прибор сломан, поврежден, нуждается в ремонте, или же с целью получения любой другой помощи пользователю, пожалуйста, обращайтесь в местный отдел сервисного обслуживания клиентов Silk'n™ или же пишите по адресу: info@silkn.com.

13. Спецификации

Хар-ки, Размер пятна	2см x 3см [6см ²]	
Скорость	1 импульс каждые 3, 5 секунды: 1.7 см ² /сек	
Технология	Импульсное излучение в домашних условиях (HPL)™	
Максимальный уровень интенсивности энергии	Max 5Дж/см ²	
Длина волны	475-1200nm	
Время зарядки/Источник питания	Бесперебойная эксплуатация	
Электротехнические требования	100-240 В пер. тока, 2А	
Время, необходимое для обработки голеней	30 минут	
Эксплуатация и безопасность	Новый датчик цвета кожи гарантирует использование исключительно на соответствующих оттенках кожи.	
Размер упаковки	22см x 22см x 13см	
Температура	Рабочая	от 10 до 40°С
	Хранения	от -40 до +70°С -
Относительная влажность	Рабочая	от 30 до 75% отн.вл
	Хранения	от 10 до 90% отн. вл
Атмосферное давление	Рабочая	от 700 до 1060 гПа
	Упаковки	от 500 до 1060 гПа

114

14. Маркировка



Оборудование II класса

Степень защиты от поражения электрическим током: рабочая часть типа BF

WEEE - Утилизация отходов производства электрического и электронного оборудования

Маркировка на соответствие требованиям ЕС

В соответствии с инструкцией по эксплуатации

Данный прибор соответствует требованиям Части 15 Правил Федеральной Комиссии Связи США (FCC).

Маркировка на соответствие требованиям CSA для США и Канады.

Степень защиты от попадания воды: обычная

Данный прибор не предназначен для использования в присутствии легковоспламеняющейся анестетической смеси с воздухом, кислородом или закисью азота.

FCC доводит до Вашего сведения

Данное оборудование было протестировано и признано соответствующим требованиям, предъявляемым к цифровым устройствам класса B, требованиям Части 15 Правил FCC. Эти ограничения разработаны для обеспечения разумной защиты от вредных помех в жилых помещениях. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно установлено и используется не в соответствии с инструкциями, может создавать помехи для радиосвязи. Тем не менее, нет никакой гарантии, что помехи не будут возникать в каждом конкретном случае. Если данное оборудование создает существенные помехи для радио- или телевизионных сигналов, что может быть определено путем включения и выключения устройства, пользователь может попытаться устранить помехи с помощью одной или нескольких из следующих мер: а) Переориентировать или переместить приемную антенну. б) Увеличить расстояние между оборудованием и приемником. Проконсультироваться с дилером или опытным специалистом по радио / ТВ технике. FCC Warning: Modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user authority to operate the equipment under FCC Rules.

Предупреждение FCC

Модификации, не одобренные производителем, могут аннулировать право пользователя на эксплуатацию оборудования в соответствии с правилами FCC.



Русский

115