



**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ФОТОЭПИЛЯТОРА
PLANTA
PLH-3000 Smart Touch**



www.planta.ru.com

 #planta_beauty

Содержание

Меры безопасности _____	3
Компоненты устройства _____	5
Как работает технология IPL _____	6
Порядок работы _____	6
Локальный тест _____	6
Инструкция по применению _____	7
Способы применения _____	8
Обработка лица _____	9
Возможные побочные эффекты _____	12
Вопрос и ответ _____	13
Рекомендации по обслуживанию _____	15
Технические характеристики _____	15
Гарантийный талон на изделие _____	16

Перед использованием внимательно прочитайте все инструкции и меры безопасности.

- Устройство идеально подходит для обработки волосяного покрова ног, подмышечной области, зоны бикини, груди, живота, рук и лица в области скул (не предназначено для обработки волосяного покрова лица у мужчин).
- Не используйте устройство для удаления волос со слизистых оболочек, например в носу и ушах.
- Не обрабатывайте участки с пирсингом, а также другими металлическими предметами, такими как сережки и прочие ювелирные изделия.
- Не используйте устройство на загорелых участках в течение 4 недель с момента нахождения под солнцем (более 15 минут под прямыми солнечными лучами без защиты), поскольку это может привести к возникновению сильных ожогов или травмированию кожи.
- Избегайте продолжительного пребывания под прямыми солнечными лучами (более 15 минут) в течение 2 недель с момента проведения обработки. если в этот период времени недавно обработанная кожа подвергнется воздействию солнечных лучей, обязательно нанесите на нее солнцезащитный крем с солнцезащитным фактором, равным не менее 30.
- За 48 часов перед тем, как воспользоваться устройством впервые, необходимо провести локальный тест на небольшом участке кожи в той области, которую планируется обработать.
- Не используйте устройство на темной коже.
- Храните устройство в недоступном для детей месте.
- Устройство следует использовать только для удаления волос. Не используйте его в иных целях.
- Используйте устройство только в соответствии с инструкциями по его применению.

Меры безопасности

В каких случаях не следует использовать устройство?


- Не используйте устройство ни во время беременности, ни в период кормления грудью.
- Не используйте устройство при наличии рака кожи, а также на участках, где существует риск возникновения злокачественной опухоли.
- Не используйте устройство при наличии эпилепсии.
- Не используйте устройство во время прохождения радио- или химиотерапии, а также в течение 3 месяцев после завершения такого рода терапии.
- Не используйте устройство при наличии активного имплантата, например кардиостимулятора, инсулиновой помпы и других подобных устройств.
- Не используйте устройство на поврежденной коже, а также если в прошлом на участке, который планируется обработать, наблюдался герпес или псориаз.
- Не используйте устройство при наличии келоидных рубцов.
- Не используйте устройство, если в течение последних двух недель вы принимали тетрациклиновые антибиотики.
- Не используйте устройство, если в течение последних двух недель вы принимали лекарственные препараты с такими активными ингредиентами, как: ретиноиды, аккутан и ретин-а.
- Не используйте устройство при наличии светочувствительности или каких бы то ни было связанных с ней заболеваний.
- Не используйте устройство при нарушениях обмена веществ, например при наличии диабета.
- Не используйте устройство, если в течение последних 2–8 недель проводился пилинг кожи или другие процедуры ее омоложения.
- Не используйте устройство, если в течение последних 30 дней вы находились под ярким солнцем или посещали
- Не используйте устройство при наличии на участке, который планируется обработать, темных пятен, таких как большие веснушки, родинки и бородавки.
- Никогда не используйте для очистки кожи легковоспламеняющиеся жидкости, такие как спирт или ацетон, перед использованием устройства.
- Не используйте устройство на лице выше уровня скул (в области глаз, бровей или ресниц), поскольку это может привести к серьезному повреждению глаз.
- Не используйте устройство на слизистых оболочках, например в носу и ушах.
- Не направляйте устройство на татуировки, перманентный макияж и интимные части тела, такие как соски, гениталии и область вокруг ануса.
- При появлении сильного покраснения, пузырьков или ожогов немедленно прекратите использование устройства!
- Не смотрите непосредственно на свет, исходящий из аппликатора и картриджа с лампой.
- Используйте устройство только для удаления волос.
- Использование устройства может привести к временному изменению цвета кожи.

- Во время обработки не подавайте с помощью аппликатора несколько импульсов подряд (один за другим) на один и тот же участок кожи. В результате возможно избыточное выделение тепла, что может привести к повреждению кожи или образованию рубцов.
 - Не возвращайтесь на ранее обработанный участок до тех пор, пока после обработки не пройдет 10 секунд.
 - В результате возможно избыточное выделение тепла, что может привести к повреждению кожи или образованию рубцов.
 - Не вскрывайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно, поскольку в нем содержатся опасные электрические компоненты, прикосновение к которым может привести к травмам.
 - Не используйте с устройством дополнительные принадлежности, не предназначенные для совместного с ним использования.
 - После использования всегда отсоединяйте шнур питания от стенной электрической розетки.
- Помните** – полное отключение электропитания достигается только отсоединением шнура питания.
- Не используйте устройство там, где оно может соприкасаться с жидкостями (в том числе в условиях повышенной влажности). Это может привести к поражению электрическим током.
 - В случае падения устройства в жидкость немедленно отсоедините устройство от электрической розетки.
 - Не извлекайте устройство из жидкости сразу после отсоединения – подождите не менее 2 минут.
 - Не продолжайте использовать устройство, обратитесь в сервисный центр.
 - Не используйте устройство, если на его деталях имеются признаки повреждения. Это может привести к травме.
 - Во избежание случайных ожогов всегда держите устройство на удалении от волос на голове.
 - Во избежание несчастных случаев во время обработки всегда держите устройство на удалении от всего (одежды, щеток, проводов, шнуров, кружев и т. п.), кроме кожи.
 - Во избежание повреждения устройства не промывайте его компоненты с помощью каких бы то ни было жидкостей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

- Этот прибор не должен использоваться лицами с ограниченными физическими или умственными способностями или с ограниченной способностью восприятия, за исключением случаев, когда они получают от лица, ответственного за их безопасность, указания относительно работы с прибором в соответствии с инструкциями по его применению.
- Этот прибор могут использовать дети в возрасте от 14 лет, лица с ограниченными физическими, сенсорными, умственными способностями и лица с недостатком опыта и знаний, если они осознают возможные риски, а также находятся под наблюдением или прошли инструктаж о безопасном использовании прибора. Детям не следует играть с прибором. Не следует очищать прибор и проводить его обслуживание детям без присмотра взрослых. Испытания в целях изучения последствий использования применительно к лицам моложе 18 лет не проводились, поэтому такие последствия неизвестны.
- **ХРАНИТЕ УСТРОЙСТВО В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.**
Не используйте этот прибор около ванны, душевой кабины, бассейна и других резервуаров с водой.

Компоненты устройства

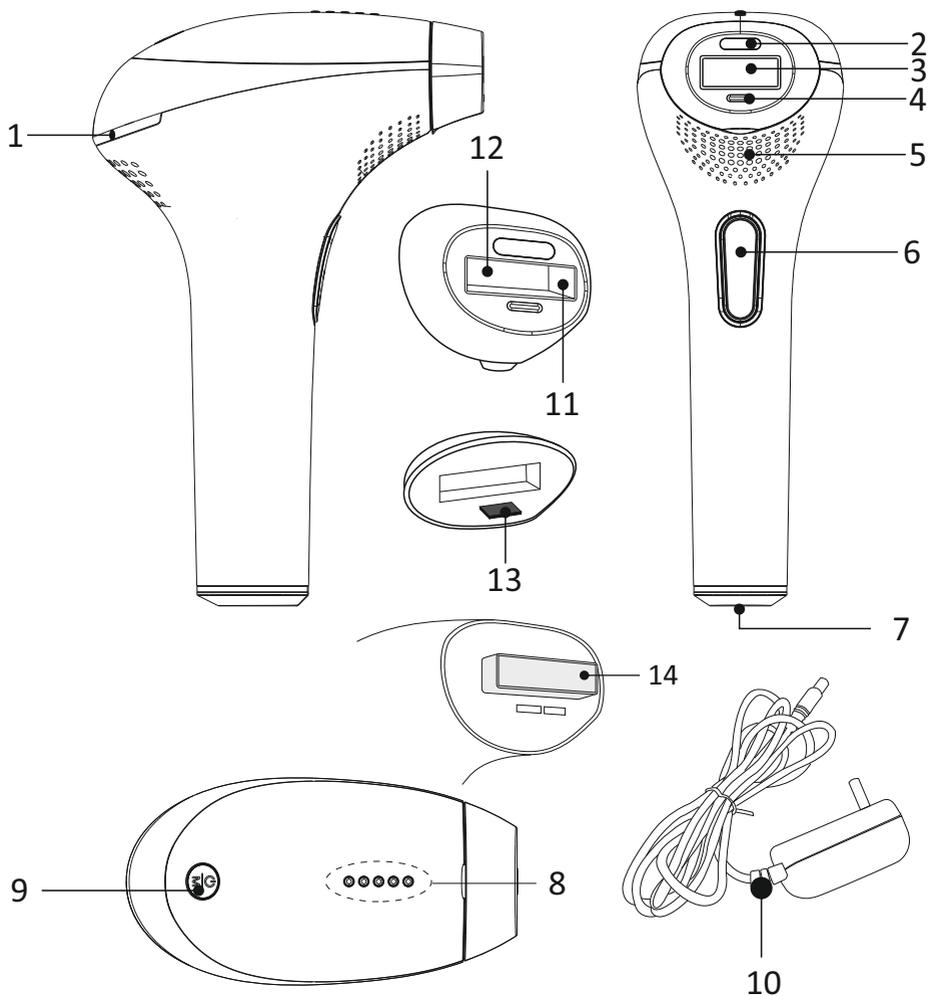

Как работает технология IPL

С помощью технологии интенсивного импульсного света (Intense Pulsed Light) кожа обрабатывается деликатными импульсами света, которые поглощаются корнем волоса. Чем светлее кожа и темнее волос, тем лучше поглощаются импульсы света. Импульсы света заставляют волосяной фолликул переходить в фазу покоя. Как следствие, волосы выпадают естественным образом, а их повторный рост предотвращается.

Цикл роста волос состоит из разных фаз. Технология IPL эффективна, только когда волосы находятся в фазе роста. В фазе роста одновременно находятся не все волосы. Поэтому рекомендуется сначала выполнять исходную фазу обработки (4–5 процедур, с интервалом в 2 недели между процедурами), а затем поддерживать результат каждые 4–8 недель).

Совет: Чтобы обеспечить продолжительный эффект, каждые 4 недели рекомендуется проводить процедуры для поддержания результата.

Порядок работы

1. Извлеките все компоненты из упаковки (прибор и адаптер питания).
2. Крышка лампы с датчиком контакта с кожей и датчиком цвета кожи, поставляется в сборе с устройством. Проследите за правильностью установки крышки.
5. Подсоедините шнур питания к прибору.
6. Только после подсоединения шнура питания к прибору вставьте вилку в электрическую розетку.
7. Когда питание будет подключено, начнет мигать зеленый индикатор состояния.
8. Пожалуйста, держите отверстия для вентиляции открытыми.
9. Перед использованием устройства сбейте имеющиеся волосы, а также очистите и высушите кожу (очистите ее от остатков пудры, кремов, косметики, антиперспирантов и дезодорантов).
10. После использования устройства и его отсоединения, пожалуйста, используйте ватную палочку или влажную ткань, чтобы вытереть выходное окошко лампы (не допускайте попадания воды или другой жидкости в изделие, иначе изделие будет повреждено), чтобы избежать прилипания волос, частиц кожи.
11. В случае повреждения корпуса, повреждения лампы, пожалуйста, прекратите использование этого прибора.
12. Не пытайтесь разбирать и ремонтировать изделие самостоятельно.

Локальный тест

Проведите локальный тест, чтобы выявить реакцию кожи на процедуру и предотвратить ожоги кожи. Используйте минимальный уровень интенсивности. Такой тест необходимо провести на каждом участке, который вы собираетесь обрабатывать, за 48 часов до его полной обработки.

- Плотно приложите аппликатор к тестируемому участку.
- На устройстве будет автоматически установлен минимальный уровень интенсивности.

Нажмите кнопку подачи импульсов, чтобы активировать первую импульсную вспышку с использованием 1-го уровня интенсивности. Вы увидите яркую вспышку и услышите тихий хлопок, при этом вы можете ощутить легкое жжение или/и тепло.


- Уберите аппликатор с кожи и переместите его на следующую точку тестируемого участка.
- Используйте кнопку питания для переключения уровня интенсивности на одну ступень.

Индикаторы уровня интенсивности, соответствующие выбранному уровню, загорятся оранжевым. Нажмите кнопку активации светового импульса, чтобы активировать вторую импульсную вспышку с использованием 2-го уровня интенсивности.

Подождите 48 часов, после чего осмотрите тестируемый участок. Если кожа на тестируемом участке выглядит нормально (ни реакций, ни покраснения не наблюдается), можно перейти к обработке всего требуемого участка с использованием самого высокого комфортного уровня интенсивности, который был определен во время проведения локального теста. При наличии сильного покраснения, пузырьков или волдырей не обрабатывайте полностью такой участок даже на минимальном уровне интенсивности.

Инструкция по применению

1. Подключите адаптер к устройству.
2. Перед включением, убедитесь, что крышка с лампой установлена правильно.
3. Подсоедините устройство к источнику питания, и индикатор состояния устройства загорится зеленым на несколько секунд.
4. Перед использованием устройства сбрейте имеющиеся волосы, а также очистите и высушите кожу (очистите ее от остатков пудры, кремов, косметики, антиперспирантов и дезодорантов).

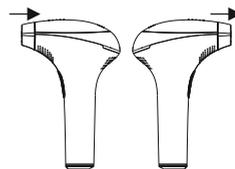

Внимание! Перед использованием устройства никогда не используйте для очистки кожи легковоспламеняющиеся жидкости, такие как спирт или ацетон.

5. Нажмите кнопку питания, чтобы включить его. После загрузки вентилятор включается, индикатор состояния загорается красным и устройство переходит в автоматический режим.
6. Приложите аппликатор к зоне обработки, индикатор состояния загорится зеленым и датчик цвета кожи автоматически определит уровень, рекомендуемый для Вашего типа кожи. В этом режиме индикатор уровня горит синим светом.

Можно отключить функцию автоматически рекомендуемого уровня. Для этого коротким нажатием кнопки питания выставите желаемый уровень. В ручном режиме индикатор уровней горит оранжевым.

Если вы хотите вернуться к автоматически рекомендуемому уровню, Вам необходимо выключить устройство и снова включить.

При контакте с кожей, индикатор состояния меняет цвет с красного на зелёный. Если индикатор не изменил свой цвет, значит цвет кожи слишком тёмный.

7. После того, как настройка уровня завершена, вы можете нажать кнопку вспышки, чтобы выполнить обработку.

Каждое нажатие кнопки приведет к одной вспышке, а длительное нажатие приведет к длительной обработке. Чем выше уровень интенсивности, тем медленнее необходимо перемещать устройство, т.к. чем интенсивнее импульсы, тем они реже.

8. После завершения сеанса, выключите аппарат длительным нажатием кнопки питания. Индикатор уровня будет выключен, индикатор состояния будет медленно мигать зеленым, и вентилятор выключится.

Аппарат автоматически отключается через 3 минуты в режиме ожидания.

9. Отсоедините устройство от источника питания.

Способы применения

Есть два способа применения устройства

1. Пульсация:

Наилучшая техника для работы с высокими уровнями энергии, так как она позволяет лучше контролировать покрытие кожи.

Обеспечив контакт аппликатора с кожей, нажмите кнопку активации светового импульса и ожидайте вспышку. На каждый обрабатываемый участок необходимо подавать только один световой импульс, а при перемещении устройства на очередной участок необходимо следить как за тем, чтобы между участками не оставалось зазоров, так и за тем, чтобы участки не накладывались друг на друга. Прежде чем еще раз нажать кнопку подачи импульсов, дождитесь, пока индикатор состояния поменяет цвет с оранжевого на зелёный.



2. Скольжение:

Наилучшая техника для работы с низкими уровнями энергии, так как она позволяет провести быстрый и более эффективный сеанс.

При скольжении, непрерывно удерживайте кнопку активации импульсов, и медленным скользящим движением, сохраняя при этом контакт с кожей, плавно перемещайте устройство вдоль обрабатываемой области. При низких уровнях энергии перезарядка устройства занимает всего 1-1,5 секунды между импульсами и обеспечивает непрерывную последовательность вспышек. Чем выше уровень интенсивности, тем медленнее необходимо перемещать устройство, поскольку чем интенсивнее импульсы, тем они реже.

Применяя тот и другой метод, вы будете видеть яркую вспышку и слышать тихий хлопок, при этом вы можете ощутить легкое жжение или/и тепло.

Обработка лица

Кожа на лице достаточно чувствительна, что требует особо бережного и более внимательного проведения обработки. Чтобы избежать возникновения побочных эффектов, строго соблюдайте все инструкции и правила безопасности. В целях обеспечения максимальной безопасности при обработке лица не используйте высокие уровни интенсивности.

Окошко аппликатора должно находиться в плотном контакте с кожей, в противном случае устройство не будет подавать световые импульсы. Начинайте обработку на уровне 1 и повышайте уровень только если обработка не вызывает дискомфорта.

Внимание!

1. Не используйте устройство на лице выше уровня скул (в области глаз, бровей или ресниц), поскольку это может привести к серьезному повреждению глаз.
2. Не используйте устройство в целях борьбы с ростом волос в носу и ушах
3. За 48 часов до обработки проведите локальный тест. Его следует выполнить на участке, на котором не растут волосы, например под ухом или на боковой стороне шеи, чтобы определить необходимый уровень интенсивности.

Внимание!

4. Не обрабатывайте протестированный участок в течение как минимум 1 недели с момента проведения теста.
5. Чтобы правильно расположить аппликатор на обрабатываемом участке, используйте зеркало.
6. Следуйте инструкциям по применению, при этом обратите особое внимание на приведенные ниже инструкции, касающиеся отдельных участков.

Примечание. Волосы на лице могут появляться в результате нарушения гормонального фона. В таком случае для перманентного снижения интенсивности их роста может потребоваться большее количество сеансов.

Обработка участка над верхней губой

Расположите аппликатор на обрабатываемом участке, как показано на рисунке. Повторите до 5 раз на каждом участке. Избегайте попадания аппликатора на ноздри и губу, поскольку они обладают повышенной чувствительностью. При необходимости замаскируйте губы листом бумаги. можно втянуть верхнюю губу внутрь рта или сжать губы, чтобы облегчить движение аппликатора.

Обработка щек

Расположите аппликатор на обрабатываемом участке, как показано на рисунке. Обработайте каждый участок до 5 раз, перемещая аппликатор от одного края щеки к другому.

Обработка шеи и подбородка

Расположите аппликатор на обрабатываемом участке, как показано на рисунке. Обработайте каждый участок до 5 раз, перемещая аппликатор от одной стороны шеи и подбородка к другой. Учтите, что кожа в нижней трети шеи отличается большей чувствительностью.

Особые указания для мужчин

Устройство не рекомендуется использовать для обработки лица, поскольку это может привести к изменению черт лица и придать ему женственный вид.

Примечание. Полная потеря волос на лице у мужчин может привести к преждевременному старению.



Уход за кожей лица после обработки

Нанесите на кожу успокаивающий лосьон, например aloe Vera. Не используйте средства для пилинга и отбеливающие крема или другие продукты такого рода в течение как минимум 24 часов, поскольку это может привести к раздражению обработанной кожи. Избегайте продолжительного пребывания под прямыми солнечными лучами (более 15 минут) в течение 2 недель с момента проведения обработки. Если в этот период времени недавно обработанная кожа подвергнется воздействию солнечных лучей, обязательно нанесите на нее солнцезащитный крем с солнцезащитным фактором, равным не менее 30. Не выщипывайте волосы на обработанном участке и не используйте для их удаления воск. Обратите внимание! Отрастание волос до их выпадения может занять до двух недель.

Пригодность различных типов кожи и волос

Долгосрочное снижение интенсивности роста волос – циклы роста

В том, насколько оптимальным будет долгосрочное снижение интенсивности роста волос, важную роль играют два фактора:

- Цикл роста волос (анаген, катаген и телоген). анаген – это фаза роста, тогда как катаген и телоген – фазы покоя. Перманентного снижения интенсивности роста волос можно достичь только во время анагена.
- Тип кожи (в соответствии со шкалой Фитцпатрика) более темная кожа содержит больше меланина, в результате чего она конкурирует с обрабатываемым волосом за световую энергию. При поглощении большого количества световой энергии кожей увеличивается риск возникновения побочных эффектов и повреждения эпидермиса.

См. таблицу типов кожи и цвета волос на стр 11.

Рекомендуемая схема обработки

При периодической обработке со временем можно ожидать накопительное снижение интенсивности роста волос. Особенно важно соблюдать курс обработки в течение первых 8–12 недель, по прошествии которых обработку можно повторять по мере необходимости. Пассивные волосяные луковицы в любой момент могут стать активными (а эффективное воздействие на луковицы возможно только в фазе их роста). Важно помнить, что результаты у каждого человека будут индивидуальными и появятся не сразу, оценивать их следует после завершения 8–12-недельной программы обработки. Устройство дает возможность бороться с ростом нежелательных волос, обеспечивая долговременные результаты и идеальную гладкость кожи.

Обработка поверхности тела

Схема обработки зависит от типа кожи и выбранного уровня. Определив соответствующий уровень по приведенной выше таблице или по результатам локального теста, следуйте изложенным ниже рекомендациям.

Очень эффективна обработка кожи типов с 1 по 4. Чтобы достичь желаемых результатов, кожу типа 5 необходимо обрабатывать больше. Это обусловлено тем, что значительная часть энергии, подаваемой устройством, будет поглощаться кожей. Кожу типа 6 (от природы черная или очень темная) обрабатывать не рекомендуется, поскольку такая кожа поглощает почти всю энергию, что вызывает ее раздражение и другие отрицательные последствия. разные части тела реагируют на обработку по-разному. Участки с высокой плотностью волосяных луковиц обычно требуют большего объема обработки, прежде чем станет заметно снижение интенсивности роста волос. так, подмышечные области необходимо обрабатывать больше, чем ноги. Можно руководствоваться следующими общими принципами:

- чем темнее волосы, тем лучше они реагируют на обработку;
- на толстых волосах результаты становятся заметны быстрее;
- чем сильнее контраст между цветом кожи и цветом волос (бледная кожа, темные волосы и т. п.), тем быстрее появится реакция и тем она будет лучше.

Цвет волос	тип кожи					
	1	2	3	4	5	6
Черный	Уровень 4/5	Уровень 4/5	3/4/5	3/4	1/2/3	Непригоден
Темно - каштановый	Уровень 4/5	Уровень 4/5	3/4/5	3/4	1/2/3	Непригоден
Каштановый	Уровень 4/5	Уровень 4/5	3/4/5	3/4	1/2/3	Непригоден
Темный блондин	Уровень 4/5	Уровень 4/5	3/4/5	3/4	1/2/3	Непригоден
Светлый блондин	Непригоден	Непригоден	Непригоден	Непригоден	Непригоден	Непригоден
Рыжий	Непригоден	Непригоден	Непригоден	Непригоден	Непригоден	Непригоден
Светлый	Непригоден	Непригоден	Непригоден	Непригоден	Непригоден	Непригоден

Схема обработки зависит от типа кожи и выбранного уровня. Определив соответствующий уровень по приведенной выше таблице или по результатам локального теста, придерживайтесь изложенных ниже рекомендаций. Выполняйте те же действия в порядке, описанном выше. Будьте аккуратны и следите за тем, чтобы не обрабатывались родинки и губы. Для защиты участков, требующих особенно осторожного обращения, по необходимости используйте белую подводку для глаз или куски бумаги.

Возможные побочные эффекты

При использовании устройства в соответствии с инструкциями по применению побочные эффекты возникают крайне редко. Чтобы снизить вероятность возникновения побочных эффектов, следите за тем, чтобы обработка производилась с соответствующим уровнем интенсивности. Вместе с тем необходимо отметить, что при выполнении любой косметической процедуры с помощью устройств для домашнего использования некоторая вероятность возникновения побочных эффектов все же существует.

Легкие побочные эффекты	<ul style="list-style-type: none">• Раздражение или покраснение – если не пройдет в течение 24 часов, обратитесь за медицинской консультацией• Чувствительность к солнечному свету – избегайте продолжительного пребывания под прямыми солнечными лучами (более 15 минут) в течение 2 недель после проведения обработки.
Редкие побочные эффекты В случае возникновения любого из этих состояний обратитесь за медицинской консультацией	<ul style="list-style-type: none">• Ожоги• Образование рубцов• Изменение пигментации• Сильное покраснение• Появление волдырей
Крайне редкие побочные эффекты – в случае возникновения любого из этих состояний обратитесь за медицинской консультацией	<ul style="list-style-type: none">• Инфекция• Возникновение кровоподтеков

Чего следует ожидать при использовании устройства

- Вспышка света: не вредит глазам при полном контакте аппликатора с кожей на выбранном для обработки участке, однако не следует смотреть прямо на вспышку.
- Шум от вентилятора: более тихий по сравнению с шумом работающего фена.
- Негромкий хлопок: имеет место в момент подачи импульса.
- Ощущение тепла: возникает после каждого импульса в результате светового воздействия.
- Ощущение легкого жжения: похоже на ощущение от шлепка резиновой лентой.

Вопрос и ответ

На каких участках тела можно использовать устройство?

Устройство предназначено для удаления волос с любой части тела ниже линии скул. Чаще всего обрабатываются ноги, подмышечные области, руки и область бикини. Мужчинам не следует использовать устройство в целях обработки лица.

Безопасно ли использовать устройство?

Устройство испытано и одобрено дерматологами и терапевтами на предмет соответствия европейским стандартам безопасности для устройств для домашнего использования. Данное электронное устройство должно использоваться в соответствии с инструкциями по его применению и с учетом мер безопасности.

Как воздействует устройство на волосы различных цветов?

Использование устройства наиболее эффективно для подавления роста темных волос, а также волос, которые содержат большое количество меланина. Каштановые и светло-каштановые волосы подвергаются воздействию, но обычно для них требуется большее количество сеансов обработки. рыжие волосы слабо подвергаются воздействию. Светлые и седые волосы практически не подвергаются воздействию. Тем не менее некоторые пользователи отметили снижение интенсивности роста волос после прохождения нескольких сеансов обработки.

Является ли использование устройства болезненным?

Некоторые пользователи могут испытывать дискомфорт (при наличии более толстых и темных волос), однако этот дискомфорт исчезает по завершении сеанса. При правильном использовании большинство пользователей ощущает легкое жжение и тепло во время подачи светового импульса. Это ощущение сравнимо с ощущением от шлепка эластичной лентой.

Сколько времени должно пройти до появления результатов использования устройства?

Результаты не появляются мгновенно. Обычно через две недели большинство волос на обработанных участках просто выпадает. различаются три стадии роста волос, при этом воздействие оказывается только на волосы, находящиеся в стадии активного роста, поэтому для достижения требуемого результата может потребоваться несколько сеансов. Результаты являются накопительными: По мере проведения программы обработки вы будете замечать постепенное снижение интенсивности повторного роста волос.

Будут ли волосы снова расти после обработки?

За один сеанс невозможно успешно обработать все волосяные луковицы. результаты являются накопительными: они будут постепенно улучшаться с увеличением количества проведенных сеансов. Успех инвалидизации волосяных луковиц зависит от того, находятся ли они в момент обработки в фазе роста, поэтому наиболее эффективные накопительные результаты дает регулярная обработка в течение определенного периода времени. Пройдите до конца основной курс сеансов обработки, а затем с необходимой частотой проводите дополнительные сеансы.

Сколько должно пройти времени после пребывания на солнце, прежде чем можно будет использовать устройство?

Рекомендуется не пользоваться устройством в течение четырех недель с момента

пребывания на солнце без защиты. Загорелая кожа содержит больше меланина, что может привести к увеличению риска возникновения побочных эффектов.

Нужно ли выщипывать волосы в рамках сеанса обработки с помощью устройства или после него?

Нет, в течение 3 недель после обработки волосы постепенно выпадут сами по себе. За одну обработку невозможно оказать необходимое воздействие, потому что волосы растут циклично. Для достижения желаемого результата необходимо провести несколько сеансов обработки.

Опасно ли для кожи продолжительное использование устройства?

Использование световых импульсов и лазера подробно документируется в течение более 17 лет. За все это время не было выявлено ни одного случая ни возникновения побочных эффектов, ни травмирования кожи в результате продолжительного использования устройства.

Можно ли с помощью устройства удалять волосы на лице, например на подбородке?

Да, устройство можно использовать для удаления волос на лице ниже уровня скул: над верхней губой, а также на щеках, подбородке и шее. Не используйте устройство на участках рядом с глазами! мужчинам не следует использовать устройство в целях обработки лица.

Можно ли пользоваться устройством мужчинам?

Да, IPL - эпиляция подходит для мужчин, однако им не следует с помощью устройства обрабатывать лицо. Для волос на теле мужчин (особенно на груди) обычно требуется большее количество сеансов снижения интенсивности роста волос.

Рекомендации по обслуживанию

Чистка:

Перед очисткой устройства выключите его и отсоедините от электрической розетки. Крышку аппликатора рекомендуется очищать каждый раз после использования. Для этого аккуратно протрите прибор сухой чистой тканью. Не мочите устройство и не погружайте ни устройство, ни его компоненты в воду.

Не использовать спиртосодержащие жидкости и ацетон, иначе это приведёт к повреждению аппарата.

Устранение неполадок:

Примечание. Если в работе устройства возникли неполадки, ознакомьтесь с приведенной ниже информацией, чтобы попытаться их устранить.

Устройством не подается импульс:

- Проверьте, правильно ли подсоединен шнур питания к аппликатору и электрической розетке.
- Убедитесь в наличии полного контакта с кожей. Световой импульс подается при нажатии кнопки активации световых импульсов только когда аппликатор находится в полном контакте с кожей.

Если в результате выполнения упомянутых инструкций не удалось устранить неисправности, был поврежден внешний корпус, продукт по-прежнему не может работать должным образом, немедленно прекратите использование продукта.

Технические характеристики

Модель	PLH-3000	Адаптер питания	12V---3A
--------	----------	-----------------	----------

Напряжение 100V-240V~

Частота 50/60Hz

Оптическая экспозиция : 5J/cm²±10%

Максимальная мощность оптической энергии: 14.5J±10%

Макс. отклонение от среднего оптического экспонирования в области обработки: +/-20 %

Продолжительность воздействия импульса<7мс

Интервал на первом уровне	0.8s
на втором уровне	1.25s
на третьем уровне	1.45s
на четвертом уровне	1.75s
на пятом уровне	2.0s

Оптический спектр 560—1200 нм

ТОВАР НЕ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ



Важная информация!

Сохраните для дальнейшего прочтения!

Внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации перед использованием, особенно инструкции по безопасности и противопоказания. Сохраните это руководство для дальнейшего использования или для передачи другому лицу в случае передачи ему устройства.



Бережь от воды!

Используйте только в абсолютно сухих помещениях, на сухом теле.



Осторожно! Оптическая радиация! Берегите глаза от вспышки!



Только для домашнего использования!

Осторожно!

Защищайте глаза от вспышки! Не смотрите на вспышку! Не используйте для бровей и близко к глазам! Несоблюдение настоящей инструкции может привести к повреждениям глаз, что может послужить причиной потери зрения.

УТИЛИЗАЦИЯ



По истечении срока службы данного устройства проведите его утилизацию в соответствии с директивой 2002/96/EC - WEEE (Утилизация электрического и электронного оборудования). Символ на изделии или на его упаковке указывает, что данный продукт нельзя утилизировать вместе с бытовым мусором, а необходимо сдать в приемный пункт переработки электрического и электронного оборудования.

Гарантийный талон

<p>Условия гарантии</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. В случае обнаружения неисправности в период Гарантийного срока данное изделие подлежит обмену торговым предприятием, продавшим данное изделие. 2. Гарантийная замена производится при наличии заполненного гарантийного талона и при условии соблюдения правил эксплуатации, описанных в инструкции по пользованию. 3. Гарантия на изделие не распространяется в случаях: <ul style="list-style-type: none"> - механических повреждений; - выхода из строя изделия из-за попадания внутрь его инородных предметов и жидкостей, насекомых и т.п.; - использования изделия в условиях и режимах, отличающихся от бытовых. 4. Гарантия не распространяется на аксессуары и комплектующие. 5. Гарантия также теряет силу, если в гарантийный период ремонт неисправного изделия производился не уполномоченными на то лицами. 6. Гарантийный срок – 1 год. 7. Срок службы – 3 года. <p>Дата изготовления указана на упаковке.</p> <p>Изготовитель: «СЯМЫНЬ КОМФОРТ САЭНС ЭНД ТЕКНОЛОДЖИ ГРУП КО., ЛТД»,</p> <p>Адрес: 168#, Цианпу роуд, Симинг Зона, Сямынь, Китай</p> <p>Импортер / Уполномоченная организация: ООО «А-маркт», 117342, город Москва, улица Бутлерова, дом 17б, этаж 6 офис 605</p> <p>Служба сервисной поддержки потребителей:</p> <p>https://www.planta.ru.com</p> <p>+7 (495) 641 61 39</p> <p>Товар сертифицирован по ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/201</p>	<p>Гарантийный талон</p> <p>Изделие: _____</p> <p>Модель: _____</p> <p>Серийный номер: _____</p> <p>Дата продажи: _____</p> <p>Торгующая организация: _____</p> <hr/> <p>Изделие получил, претензий к комплектации и внешнему виду не имею, с условиями гарантии согласен.</p> <p>Ф.И.О. и подпись покупателя: _____</p> <hr/> <p>Вскрыл упаковку, проверил и продал.</p> <p>Ф.И.О. продавца: _____</p> <hr/> <p style="text-align: right;">М.П.</p>
--	---