




**ТУРМАЛИНОВО-НЕФРИТОВЫЙ**

**ТЕПЛОВОЙ МАТ**

**PLANTA**

**PL-MAT3 PHOTON& MAGNET**

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

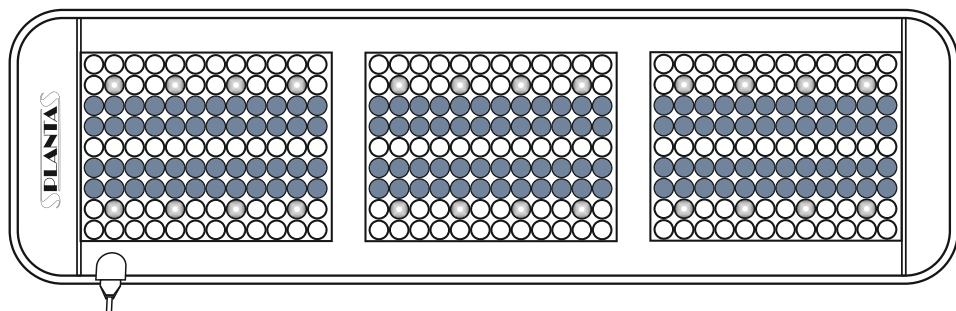

 #planta\_beauty

[www.planta.ru.com](http://www.planta.ru.com)

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Название продукции: ТУРМАЛИНОВО-НЕФРИТОВЫЙ ТЕПЛОВОЙ МАТ

Модель: PL-MAT3

Материалы: нефрит, турмалин, термостойкий материал/искусственная кожа

Напряжение: 220В/50Гц

Мощность: 140 Вт

Регулировка температуры: от 30 до 70°C

Количество камней: 144 шт. – натуральный нефрит, 144 шт. – турмалин

36 шт. - инфракрасных излучателей

Размер: 50 x 150 см

Вес: 8 кг


## ОПИСАНИЕ

ТУРМАЛИНОВО-НЕФРИТОВЫЙ ТЕПЛОВОЙ МАТ PL-MAT3 PHOTON&MAGNET предназначен для прогревания тела. 144 нефритовых и 144 турмалиновых кристаллов коврика, соприкасаясь с кожей тела, имитируют нажатие пальцев, как при точечном массаже, одновременно прогревая ткани организма. Это значительно улучшает кровообращение, т.к. к прогреваемым точкам активно поступает обогащенная кислородом кровь. Температура нагревательного элемента варьируется от 30°C до 70°C, излучая при этом инфракрасное тепло и отдавая его телу человека. Инфракрасный прогрев благоприятно воздействует на весь организм. Нихромовый кабель, который нагревает коврик, равномерно уложен по поверхности, поэтому все 288 керамических пластингреваются до одинаковой температуры. Фольга в нижней части коврика помогает греть только тело, а не пол или диван. Каждый камень упакован в сетку, камни не выпадут и не потеряются. При нагревании эти кристаллы создают инфракрасное тепло, которое проникает в тело человека на 10-15 см, что улучшает кровоток и микроциркуляцию, расширяя кровеносные сосуды и расслабляя мышцы в области нагрева. Инфракрасные волны усиливают обмен веществ и облегчают болевые ощущения. Прогревание способствует нормализации кровообращения в зоне воздействия, полезно для повышения выносливости организма, для улучшения сна, для снятия напряжения в мышцах и уменьшения застойных явлений, оказывает общеукрепляющее воздействие на организм, избавляет от стресса. В результате воздействия инфракрасного излучения происходит расслабление гладких мышц внутренних органов, расширение кровеносных сосудов, улучшается кровообращение и лимфоток, повышается содержание кислорода в крови, регулируется работа нервной системы, усиливаются иммунные функции клеток. Преимуществом теплового мата PL-MAT3 является наличие функции фотонотерапии. При помощи 36 ламп-излучателей красного цвета – фотонов – мат обеспечивает физиотерапевтическое воздействие на весь организм рассеянными лучами видимого красного света, позволяя восстанавливать защитные механизмы, повышая иммунитет и регенеративные способности, а также восстанавливая обмен веществ и механизмы самоочистки. Особенностью этой модели мата является еще одна дополнительная функция - PEMF, или применение импульсного электромагнитного поля, которая представляет собой процесс использования электрических полей для стимулирования реакции организма на клеточном уровне. Обеспечивая полезные улучшающие здоровье электродвижущие силы, PEMF воздействует на многие химические и электрические процессы в тканях, которые приводят к улучшению здоровья и функционирования всего организма.

## ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ


- При наличии электронного стимулятора сердца или иных внутренних медицинских электроаппаратов;
- При переломах, вывихах, разрывах мышц, повреждениях сухожилий и прочих внешних повреждениях;
- При острых заболеваниях;

- При наличии гипертермии;
- Беременным женщинам и женщинам в менструальный цикл (в случае, если врач не рекомендует использование);
- Если тело человека влажное;
- При чувствительности к тепловому прогреванию.

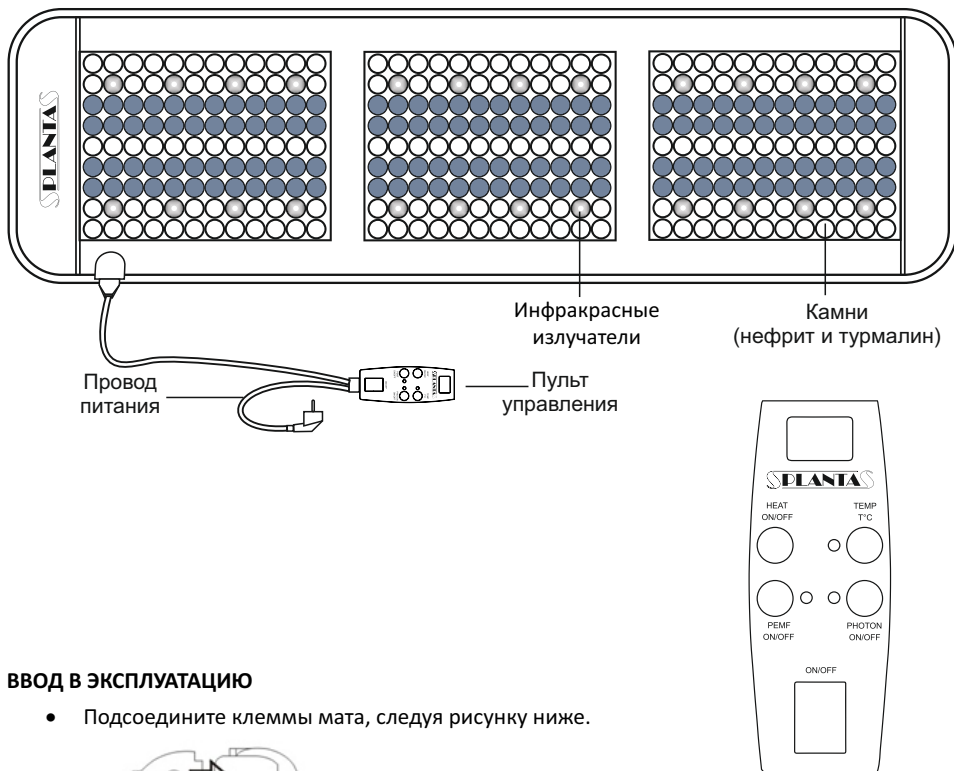

## ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

- Подсоедините клеммы мата, следуя рисунку ниже.

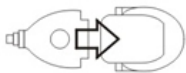

- Подключите провод питания к сети переменного тока 220 В.
- Включите переключатель ON/OFF.
- Для включения нагрева нажмите кнопку HEAT. Устройство включится, а на дисплее появится значение температуры в Цельсиях. По умолчанию установлено 50°.
- Установите нужную температуру нагревательного элемента, нажимая на кнопку TEMP (от 20°C до 70°C, один шаг 5°C) Выбранная температура отображается на дисплее в течение 3 секунд, затем исходная температура мата. По мере его нагревания температура будет повышаться, пока не достигнет заданной, что изобразится на дисплее.
- Для включения функции электромагнитов нажмите кнопку PEMF ON/OFF. Для отключения этой функции повторно нажмите на кнопку.
- Для включения инфракрасного обогрева нажмите кнопку PHOTON ON/OFF. Для отключения этой функции повторно нажмите на кнопку.

**Функции PEMF и PHOTON могут работать совместно и независимо друг от друга.**

**Внимание!** Из-за того, что в мате используется функция PEMF, он не может быть согнут в любом направлении, а может использоваться только на плоских поверхностях. Его можно сложить в 3 секции для удобного хранения или переноски.

## ТЕМПЕРАТУРНЫЕ РЕЖИМЫ

- Прогрев до 45°C: Улучшает качество крови, восстанавливает нервную и гормональную системы. Не имеет противопоказаний для использования.
- Прогрев от 45°C до 55°C: Активное нагревание. Улучшает кровоток, расслабляет мышцы.
- Интенсивный прогрев от 55°C до 70°C: Эффект прижигания. Уникальный режим нагревания омолаживает сосуды, кожу и суставы, активизирует местный иммунитет.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство и сохраните для дальнейшего использования.

Сохранность и эффективное использование турмалиново-нефритового теплового мата возможны только в случае его применения исключительно по назначению.

Перед первым использованием мата осмотрите его и убедитесь в отсутствии повреждений. До начала использования мата проконсультируйтесь с Вашим врачом и убедитесь, что состояние Вашего здоровья позволяет его использовать.

Во время использования мата следите за своим самочувствием.

Не позволяйте детям или людям с ограниченными физическими или умственными способностями пользоваться матом без присмотра со стороны.

Используйте необходимое напряжение для подключения прибора, в противном случае, это может привести к пожару или поломке. Не используйте мат в помещениях с повышенной влажностью во избежание поражения электрическим током.

Не используйте коврик вблизи раскаленных предметов.

Ни в коем случае не используйте мат при видимых повреждениях шнура или вилки!

Следите за тем, чтобы шнур питания не был перекручен, запутан, не перегибался и не был натянут во избежание повреждения или возгорания.

Обязательно отключайте устройство от сети после использования.

Запрещено касаться мата влажными руками.

При возникновении какого-либо отклонения в работе устройства (например, при возникновении запаха дыма, подозрительного шума и т.д.) немедленно прекратите его использование. Запрещено самостоятельно модифицировать, ремонтировать, разбирать устройство! При наличии повреждений обратитесь в сертифицированный сервисный центр.

При возникновении дискомфорта или плохого самочувствия во время применения турмалиново-нефритового теплового мата немедленно прекратите его использование и проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом.

Запрещено погружать мат в воду или другие жидкости во время его очистки.

Не используйте прибор вблизи нагревательных приборов или под прямыми солнечными лучами, это может привести к пожару.

Не используйте прибор на улице.

Не используйте прибор после принятия алкоголя или при плохом самочувствии.

Не используйте спиртосодержащие моющие средства, бензин, пестициды для очистки устройства.

Производитель за собой право на модификацию дизайна и дополнения к

описанию наших продуктов. Изменения могут производиться без предварительного уведомления.

## **ХРАНИЕНИЕ**

- Поместите мат в упаковку.
- Храните мат в безопасном сухом и прохладном месте.
- Избегайте соприкосновения мата с острыми или режущими предметами, которые могут его повредить.
- Не сгибайте, не тяните провод питания и не ставьте на него тяжести.

## **УХОД**

- Прежде чем начать чистить изделие отключите его от сети и дайте остыть.
- Очищайте изделие мягкой сухой тканью.
- Во время чистки не погружайте коврик в воду или другие жидкости.
- Для чистки изделия не используйте абразивные чистящие средства, щетки, бензин, керосин, средства для полировки стекла или мебели, растворители для краски.

## **КОМПЛЕКТАЦИЯ**

- Турмалиново-нефритовый тепловой мат
- Пульт управления
- Инструкция
- Сумка для переноски и хранения

## **Утилизация электрооборудования**

По истечении срока службы данного устройства проведите его утилизацию в соответствии с Директивой 2002/96/EC - WEEE (Утилизация электрического и электронного оборудования).



Гарантия 1 год со дня продажи. В случае производственного брака, Вам следует обратиться в торгующую организацию продавшую изделие.

### Условия гарантии

1. В случае обнаружения неисправности в период Гарантийного срока данное изделие подлежит обмену торговым предприятием, продавшим данное изделие.
2. Гарантийная замена производится при наличии заполненного гарантийного талона и при условии соблюдения правил эксплуатации, описанных в инструкции по пользованию.
3. Гарантия на изделие не распространяется в случаях:
  - механических повреждений;
  - выхода из строя изделия из-за попадания внутрь его инородных предметов и жидкостей, насекомых и т.п.;
  - использования изделия в условиях и режимах, отличающихся от бытовых.
4. Гарантия не распространяется на аксессуары и комплектующие.
5. Гарантия также теряет силу, если в гарантийный период ремонт неисправного изделия производился не уполномоченными на то лицами.
6. Гарантийный срок – 1 год.
7. Срок службы – 3 года.

### Изготовитель:

Венжоу Поп Релакс Ко., Лтд., по адресу №57, Картон Индастриал Зоун, Вуянг, Аоджанг Таун, Пингянг каунти, Венжоу, Китай Страна-производитель: Китай

Импортер / Уполномоченная организация:  
ООО «А-маркт» 117342, город Москва, улица Бутлерова, дом 176, этаж 6 офис 605

Служба поддержки потребителей:

+7 (495) 641 61 39 [www.planta.ru.com](http://www.planta.ru.com)

Дата производства: см. на упаковке



### Гарантийный талон

Изделие: \_\_\_\_\_

Модель: \_\_\_\_\_

Серийный номер: \_\_\_\_\_

Дата продажи: \_\_\_\_\_

Торговая организация: \_\_\_\_\_

Изделие получил, претензий к комплектации и внешнему виду не имею, с условиями гарантии согласен.

Ф.И.О. и подпись покупателя:

Вскрыл упаковку, проверил и продал.

Ф.И.О. продавца:

М.П.

