

Бесконтактный ИК термометр



Before using this product please read this user manual carefully and keep for reference


Благодарим Вас за приобретение нашей продукции! Вы стали обладателем прибора для бесконтактного измерения температуры тела, использующего инфракрасный измеритель температуры. Термометр может быть использован в семье, в офисах и на предприятиях, в магазинах, автостанциях, вокзалах, аэропортах и пр. Прибор не предназначен для использования в больницах и других медучреждениях. Пожалуйста, ознакомьтесь с руководством пользователя перед началом использования.
Назначение: Бесконтактный ИК термометр для измерения температуры тела человека, а также других предметов.

- 1 Особенности использования термометра.
- 1.1 При измерении температуры тела очень важно направлять его на сухую часть кожи, не покрытую волосами. Измерение температуры на улице будет более корректным, если скорость ветра относительно небольшая.
- 1.2 Измерение температуры тела будет некорректным, если пользователь до этого занимался спортом, принимал душ или умывал лицо. В таком случае, перед измерением необходимо некоторое время (15-20 минут) отдохнуть, находясь в сухом помещении при комнатной температуре без ветра и кондиционера.
- 1.3 Если термометр и пользователь находились в разных температурных областях длительное время (например, дома и на улице), необходимо выждать 20 минут перед измерением, находясь в одном помещении при комнатной температуре.
- 1.4 Если термометр длительное время находился в области температур ниже нуля, необходимо перед работой выдержать прибор при комнатной температуре в течение 2 часов.
- 1.5 Избегайте контактов термометра с водой, а также не подвергайте действию прямых солнечных лучей.

- 2 Спецификации:
- Рабочие параметры окружающей среды:
- температура: 10°C-40°C (50°F-104°F)
 - относительная влажность воздуха: <85%
 - атмосферное давление: 76-106 кПа
- Температура хранения: 0°C-50°C (32°F-122°F)
- Диапазон измерения температуры тела: 35°C-42°C (95°F-107.6°F)
- Диапазон измерения температуры поверхности предметов: 0°C-100°C (32°F-212°F)
- Точность измерения: 0.1°C (0.1°F)
- Ошибка измерения температуры тела:
- не более 0,2°C (0,4°F) при температуре 33°C-37°C (91.4°F-98.6°F)
 - не более 0,4°C (0.8°F) при температуре ниже 33°C (91.4°F) либо выше 37°C (98.6°F)
- Дистанция измерения: 1-3 см
- Автоматическое выключение: 10 сек
- Память последних 99 измерений
- ЖК экран с подсветкой
- Отображение температуры по шкале Цельсия либо Фаренгейта
- Питание: батарея 6F22 (типа «Крона») 9В

3 Функциональные кнопки (рис. 1)

MEM	Старт/остановка записи значений температуры, удаление данных, настройки звука
°C/°F	Переключение между шкалой Цельсия и Фаренгейта
MODE	Переключение между режимами измерения температуры, настройки сигнала высокой температуры
▲	Стрелка «вверх»
▼	Стрелка «вниз»

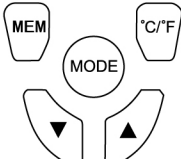


(рис. 1)

4 Внешний вид (рис. 2)




- 5 Функции устройства
- 5.1 Кнопка MODE используется для переключения между режимами работы:
- измерение температуры тела
 - измерение температуры поверхности предметов
 - измерение температуры воздуха в помещении
 - просмотр предыдущих значений из памяти устройства, настройка звука

- 5.2 Измерение температуры тела
- Для разового измерения температуры тела наведите температурный сенсор на лоб пациента на расстоянии около 3 см и нажмите кнопку запуска измерения (рис. 3).

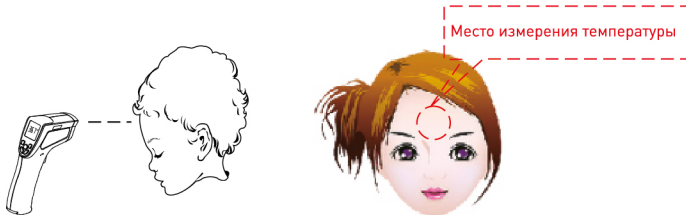

(рис. 3)

5.3 Показания дисплея (рис 4.)

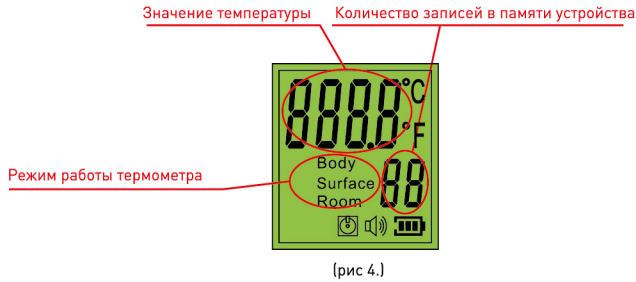

(рис 4.)

- 5.4. Иконка на дисплее  показывает уровень заряда батареи питания.

При показаниях  необходимо заменить батарею.

- 5.5 Функция записи показаний включена, когда на дисплее горит иконка . Для включения / выключения функции нажмите кнопку MEM. Всего термометр запоминает 99 последних значений измерения температуры. Для просмотра записей нажмите кнопку MODE несколько раз, пока прибор не войдет в режим просмотра записей температуры.

При этом иконка  должна мигать. Стрелками «вверх» и «вниз» перелистывайте записанные данные значений температуры.

- 5.6 Для удаления данных из памяти сначала отключите функцию записи, нажав кнопку MEM. Далее, нажмите и удерживайте кнопку MEM и одновременно коротко нажмите кнопку измерения температуры. Продолжайте удерживать кнопку MEM в течение следующих 10 секунд - устройство издаст звук, память термометра очищена.

- 5.7 Вы можете отключить звуки термометра. Для этого во время режима просмотра памяти термометра (когда иконка  мигает) - нажмите кнопку MEM. При этом значок динамика исчезнет с дисплея.

- 6 Настройки термометра
- Нажмите кнопку MODE и удерживайте 6 секунд: термометр издаст двойной звук и войдет в режим настроек. Картинка на экране будет выглядеть как на рисунке 5



(рис 5.)

- Возможна настройка следующих параметров:
- F0 установка сигнала высокой температуры тела: установите температуру кнопками «вверх / вниз» и нажмите MODE для перехода к настройке F1.
 - F1 - установка сигнала высокой температуры поверхности предметов: установите температуру кнопками «вверх / вниз» и нажмите MODE для выхода из режима настроек и возврата в режим измерения температуры.

- Правила и условия безопасного и эффективного использования товара
- 1 Использовать товар только по прямому назначению.
- 2 Не разбирать. Данное изделие не содержит частей, подлежащих самостоятельному ремонту. По вопросам обслуживания и замены неисправного изделия обращайтесь к фирме-продавцу. При приеме товара убедитесь в его целостности и отсутствии внутри свободно перемещающихся предметов.
- 3 Не предназначен для детей до 3-х лет. Может содержать мелкие детали.
- 4 Не допускать попадания влаги на изделие и внутрь его. Не опускать изделие в жидкости.
- 5 Не подвергать изделие вибрациям и механическим нагрузкам, способным привести к механическим повреждениям товара. В случае наличия механических повреждений никаких гарантий на товар не дается.
- 6 Не использовать при видимых повреждениях изделия. Не пользоваться заведомо неисправным устройством.
- 7 Не брать в рот.
- 8 Не использовать изделие в промышленных, медицинских или производственных целях.
- 9 В случае, если транспортировка товара осуществлялась при отрицательных температурах, перед началом эксплуатации нужно дать товару согреться в теплом помещении (+16-25 °C) в течение 2 часов.
- 10 Вынимайте элемент питания из устройства каждый раз, когда не планируется использовать его в течение длительного периода времени.
- 11 Специальные условия хранения, транспортировки и реализации не предусмотрены.

- Гарантийные обязательства**
- Фирма-поставщик устанавливает гарантийный срок изделия равным 6 месяцев со дня реализации изделия при условии соблюдения потребителем правил хранения, эксплуатации и требований безопасности. Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения в изделие.
- Изготовитель: ОДТ Электроникс [Гонконг] Ко., Лимитед. Адрес: Гонконг, Коулун, Цим Ша Цуй, Четем-роуд-саут, 45-51, Шевалье Хаус, Комната 803 Завод-изготовитель: Гуанчжоу Тида Электроникс Технолоджи Ко, ЛТД. Адрес: 301, Но. 3 билдинг, 201, Но. 3 билдинг, Но. 20, Чангша роад, Далонг стрит, Панью Дистрикт, Гуанчжоу, Китай.
- Импортёр / организация, уполномоченная на принятие и удовлетворение требований потребителей в отношении товара ненадлежащего качества: ООО «Эй энд Ди Ди компания». Адрес: РФ, 109029, г. Москва, Михайловский проезд, д. 3, стр. 66, этаж 2, пом. 2, ком. 12. Срок службы 5 лет. Срок годности не ограничен. Дата производства: см на упаковке.