




**ТУРМАЛИНОВО-НЕФРИТОВЫЙ
ТЕПЛОЙ КОВРИК С ФОТОНАМИ**

PLANTA

PL-MAT4

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

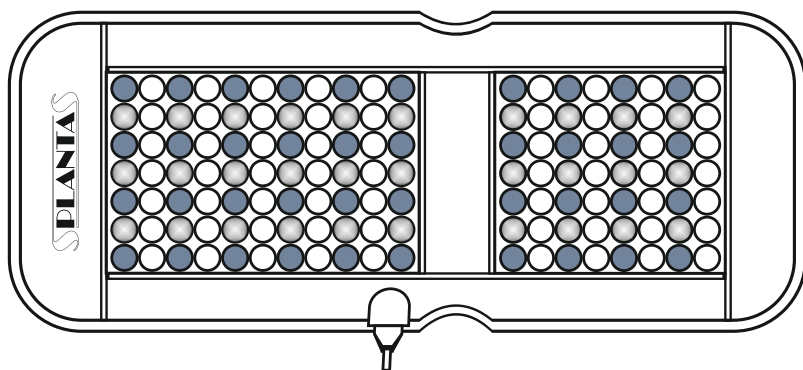

 #planta_beauty

www.planta.ru.com

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Название продукции: ТУРМАЛИНОВО-НЕФРИТОВЫЙ ТЕПЛОВЫЙ КОВРИК С ФОТОНАМИ

Модель: PL-MAT4

Материалы: нефрит, турмалин, термостойкий материал/искусственная кожа

Напряжение: 220В/50Гц

Мощность: 100 Вт

Регулировка температуры: от 20 до 70°C


Количество камней: 103 шт. (63 шт. – натуральный нефрит, 40 шт. – турмалин)

Количество инфракрасных излучателей: 30 шт.

Размер: 117 x 48 x 3 см

Вес: 3 кг

Автоотключение через 8 часов

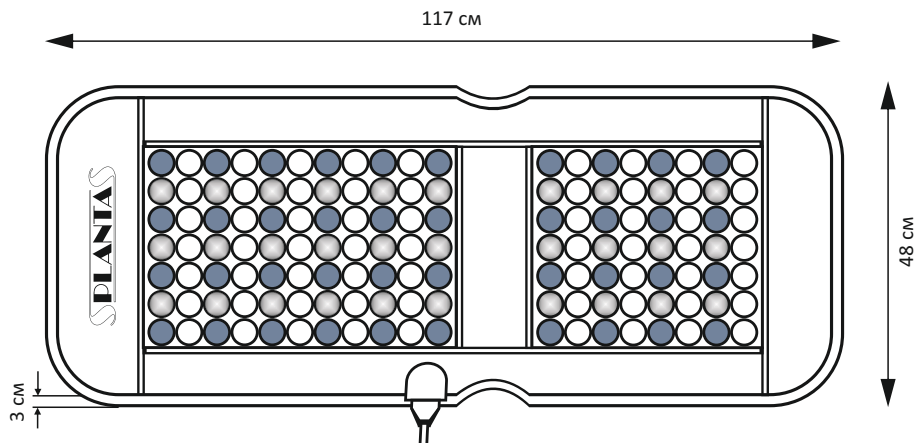

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ


ТУРМАЛИНОВО-НЕФРИТОВЫЙ ТЕПЛОВОЙ КОВРИК С ФОТОНАМИ PL-MAT4 предназначен для прогревания тела. Регулярное использование коврика способно защитить от простуд и других недугов за счет поддержания иммунитета, а также избавить от стресса, успокоить нервную систему и улучшить сон. 63 нефритовых и 40 турмалиновых кристаллов коврика, соприкасаясь с кожей тела, имитируют нажатие пальцев, как при точечном массаже, одновременно прогревая ткани организма. Это значительно улучшает кровообращение, т.к. к прогреваемым точкам активно поступает обогащенная кислородом кровь. Температура нагревательного элемента варьируется от 20°C до 70°C, излучая при этом длинноволновое инфракрасное тепло и отдавая его телу человека. В целях безопасности коврик оснащен двумя тепловыми предохранителями, а также функцией автоотключения через 8 часов. Инфракрасный прогрев благоприятно воздействует на весь организм. Нихромовый кабель, который нагревает коврик, равномерно уложен по поверхности, поэтому все 103 керамических пластины прогреваются до одинаковой температуры. Фольга в нижней части коврика помогает греть только тело, а не пол или диван. Действие основано на инфракрасном тепловом воздействии с использованием кристаллов, включая нефрит и турмалин. При нагревании эти кристаллы создают инфракрасное тепло, которое проникает в тело человека на 10-15 см, что улучшает кровоток и микроциркуляцию, расширяя кровеносные сосуды и расслабляя мышцы в области нагрева. Инфракрасные волны усиливают обмен веществ и облегчают болевые ощущения. Прогревание способствует нормализации кровообращения в зоне воздействия, полезно для повышения выносливости организма, для улучшения сна, для снятия напряжения в мышцах и уменьшения застойных явлений, оказывает общеукрепляющее воздействие на организм, избавляет от стресса.

В результате воздействия инфракрасного излучения происходит расслабление гладких мышц внутренних органов, расширение кровеносных сосудов, улучшается кровообращение и лимфоток, повышается содержание кислорода в крови, регулируется работа нервной системы, усиливаются иммунные функции клеток.

Преимуществом теплового коврика PL-MAT4 является наличие функции фотонотерапии. В основе метода фотонотерапии лежит принцип воздействия излучаемых светодиодами фотонов света на человеческий организм. Воздействие происходит на клеточном уровне. Направленные фотоны поглощаются фоторецепторами клеток, в результате чего запускаются процессы изменения молекулярной структуры клеток. Клетки омолаживаются в буквальном смысле этого слова. Видимый эффект проявляется в восстановлении упругости и эластичности кожи и разглаживании морщин. Но, в действительности, воздействие фотонов проникает на более глубокий уровень, внутрь тканей, что способствует их быстрой регенерации. Именно поэтому фотонотерапия широко применяется при лечении кожных, иммунных, онкологических заболеваний, заболеваний опорно-двигательного аппарата, для лечения воспалительных процессов, спортивных травм, а также при проведении различных косметологических и оздоровительных процедур. Важно отметить, что этот вид терапии является полностью безопасным и исключает возможность проявления вредных побочных эффектов. При помощи 30 ламп-излучателей красного цвета – фотонов – коврик обеспечивает физиотерапевтическое воздействие на весь организм рассеянными лучами видимого красного света, позволяя восстанавливать защитные механизмы, повышая иммунитет и регенеративные способности, а также восстанавливая обмен веществ и механизмы самоочищения.

ПРОТИВПОКАЗАНИЯ

- При наличии электронного стимулятора сердца или иных внутренних медицинских электроаппаратов;
- При переломах, вывихах, разрывах мышц, повреждениях сухожилий и прочих внешних повреждениях;
- При острых заболеваниях;
- При наличии гипертермии;
- Беременным женщинам и женщинам в менструальный цикл (в случае, если врач не рекомендует использование);
- Если тело человека влажное;
- При чувствительности к тепловому прогреванию

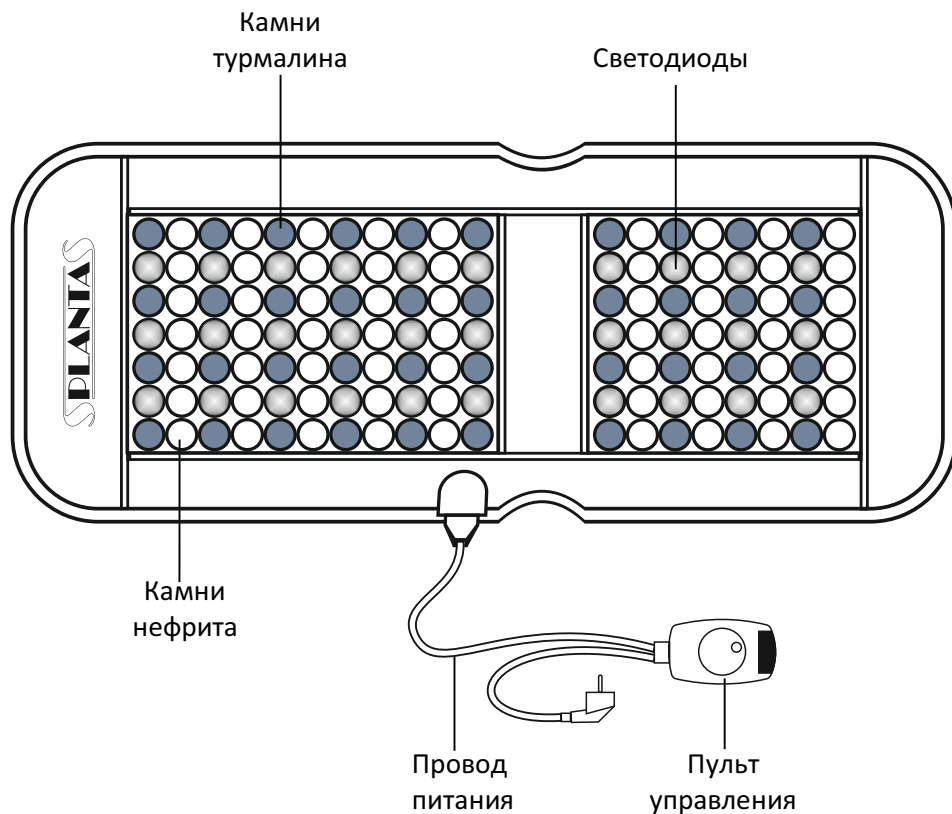




1. Кнопка включения/выключения
2. Индикатор включения в сеть
3. Регулятор температуры
4. HIGH –Максимальная температура, LOW – Минимальная температура
5. Индикатор нагрева при достижении установленной температуры загорится красным

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

- Подсоедините клеммы коврика, следуя рисунку ниже.

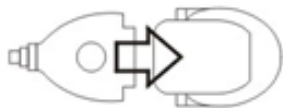

- Подключите провод питания к сети переменного тока 220 В.
- Поверните регулятор 3 по часовой стрелке до щелчка. На дисплее загорится минимальная температура в Цельсиях в течение 3 секунд, затем - исходная температура коврика.
- Нажмите кнопку 1 для включения светодиодов. На дисплее отобразится индикатор включения фотонов - зеленая лампочка, а светодиодные элементы на коврике загорятся красным.
- Поверните регулятор 3 по часовой стрелке и установите нужную температуру нагревательного элемента (выбранная температура отображается на дисплее в течение 3 секунд, затем - исходная температура коврика). По мере его нагревания температура будет повышаться, пока не достигнет заданной, что изобразится на дисплее. При достижении установленной температуры индикатор загорится нагрева (красная лампочка).
- Нагрев до конечной температуры будет достигнут в течение 15-20 минут.
- Для выключения коврика после его использования нажмите кнопку, поверните регулятор 3 против часовой стрелки до щелчка и отключите провод питания от сети.

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ РЕЖИМЫ

- Прогрев до 45°C: Улучшает качество крови, восстанавливает нервную и гормональную системы. Не имеет противопоказаний для использования. Оптимальная длительность использования от 30 минут до 8 часов.
- Прогрев от 45°C до 55°C: Активное нагревание. Улучшает кровоток, расслабляет мышцы.
- Интенсивный прогрев от 55°C до 70°C: Эффект прижигания. Уникальный режим нагревания омолаживает сосуды, кожу и суставы, активизирует местный иммунитет.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство и сохраните для дальнейшего использования.

Сохранность и эффективное использование турмалиново-нефритового двустороннего теплого коврика возможны только в случае его применения исключительно по назначению.

Перед первым использованием коврика осмотрите его и убедитесь в отсутствии повреждений. До начала использования коврика проконсультируйтесь с Вашим врачом и убедитесь, что состояние Вашего здоровья позволяет его использовать.

Во время использования коврика следите за своим самочувствием. Не позволяйте детям или людям с ограниченными физическими или умственными способностями пользоваться ковриком без присмотра со стороны.

Используйте необходимое напряжение для подключения коврика, в противном случае, это может привести к пожару или поломке. Не используйте коврик в помещениях с повышенной влажностью во избежание поражения электрическим током.

Ни в коем случае не используйте коврик при видимых повреждениях шнура или вилки! Следите за тем, чтобы шнур питания не был перекручен, запутан, не перегибался и не был натянут во избежание повреждения или возгорания.

Обязательно отключайте коврик от сети после использования. Запрещено касаться коврика влажными руками.

При возникновении какого-либо отклонения в работе коврика (например, при возникновении запаха дыма, подозрительного шума и т.д.) немедленно прекратите его использование. Запрещено самостоятельно модифицировать, ремонтировать, разбирать коврик! При наличии повреждений обратитесь в сертифицированный сервисный центр.

При возникновении дискомфорта или плохого самочувствия во время использования турмалиново-нефритового двустороннего теплого коврика немедленно прекратите его использование.

Запрещено погружать коврик в воду или другие жидкости во время его очистки.

Не используйте прибор вблизи нагревательных приборов или под прямыми солнечными лучами, это может привести к пожару.

Не используйте коврик на улице. Не используйте прибор после принятия алкоголя или при плохом самочувствии. Не используйте спиртосодержащие моющие средства, бензин, пестициды для очистки устройства.

Производитель за собой право на модификацию дизайна и дополнения к описанию наших продуктов. Изменения могут производиться без предварительного уведомления.

ХРАНЕНИЕ

- Поместите коврик в упаковку.
- Храните коврик в безопасном сухом и прохладном месте.
- Избегайте соприкосновения коврика с острыми или режущими предметами, которые могут его повредить.
- Не сгибайте, не тяните провод питания и не ставьте на него тяжести.

УХОД

- Прежде чем начать чистить изделие отключите его от сети и дайте остыть.
- Очищайте изделие мягкой сухой тканью.
- Во время чистки не погружайте коврик в воду или другие жидкости.
- Для чистки изделия не используйте абразивные чистящие средства, щетки, бензин, керосин, средства для полировки стекла или мебели, растворители для краски.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Турмалиново-нефритовый тепловой коврик с фотонами
- Пульт управления
- Инструкция
- Сумка для переноски и хранения

УТИЛИЗАЦИЯ КОВРИКА

Утилизируйте коврик согласно требованиям положения об утилизации электрического и электронного оборудования. По всем вопросам по утилизации обращайтесь в соответствующую коммунальную службу.



Гарантия 1 год со дня продажи. В случае производственного брака, Вам следует обратиться в торгующую организацию продавшую изделие.

Условия гарантии

1. В случае обнаружения неисправности в период Гарантийного срока данное изделие подлежит обмену торговым предприятием, продавшим данное изделие.
2. Гарантийная замена производится при наличии заполненного гарантийного талона и при условии соблюдения правил эксплуатации, описанных в инструкции по пользованию.
3. Гарантия на изделие не распространяется в случаях:
 - механических повреждений;
 - выхода из строя изделия из-за попадания внутрь его инородных предметов и жидкостей, насекомых и т.п.;
 - использования изделия в условиях и режимах, отличающихся от бытовых.
4. Гарантия не распространяется на аксессуары и комплектующие.
5. Гарантия также теряет силу, если в гарантийный период ремонт неисправного изделия производился не уполномоченными на то лицами.
6. Гарантийный срок – 1 год.
7. Срок службы – 3 года.

Изготовитель:

Венжоу Поп Релакс Ко., Лтд., по адресу №57, Картон Индастриал Зоун, Вуянг, Аоджанг Таун, Пинганг каунти, Венжоу, Китай Страна-производитель: Китай

Импортер / Уполномоченная организация:
ООО «А-маркт» 117342, город Москва, улица Бутлерова, дом 17б, этаж 6 офис 605

Служба поддержки потребителей:

+7 (499) 703 04 95 www.planta.ru.com

Дата производства: см. на упаковке

Товар сертифицирован по
ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016



Гарантийный талон

Изделие: _____

Модель: _____

Серийный номер: _____

Дата продажи: _____

Торговая организация: _____

Изделие получил, претензий к комплектации и внешнему виду не имею, с условиями гарантии согласен.

Ф.И.О. и подпись покупателя:

Вскрыл упаковку, проверил и продал.

Ф.И.О. продавца:

М.П.