

Электрическая зубная щетка Trisa Sonicpower Battery, 2 шт. 666700

Меры предосторожности ✖ Пожалуйста, обязательно соблюдайте

Опасно:

- Дети или люди, которые не могут пользоваться самостоятельно, должны находиться под наблюдением взрослых. Это может привести к несчастному случаю или травме.
- Пожалуйста, храните продукт в недоступном для детей месте. Существует риск несчастного случая при случайном проглатывании принадлежностей и деталей.
- Do not open, repair or alter the product without authorization. Не открывайте, не ремонтируйте и не изменяйте изделие.
- Не используйте продукт на половых органах или в местах с кожными заболеваниями. Это может привести к травме.

Предосторожность:


- Проконсультируйтесь со своим стоматологом, прежде чем использовать этот продукт, если у вас была операция на полости рта или десны в предыдущие 2 месяца.
- Пожалуйста, прекратите использование продукта и обратитесь к стоматологу, если после использования этого продукта возникает кровотечение или если через 1 неделю использования продолжается кровотечение.
- Пожалуйста, проконсультируйтесь с вашим стоматологом, если у вас тяжелое заболевание пародонтоз или гомофаз.
- Этот прибор предназначен только для чистки зубов. Не используйте его для каких-либо других целей.
- Во время чистки зубов, пожалуйста, используйте только силу вибрации самой зубной щетки. Не прижимайте щетину к зубам или деснам.
- Пожалуйста, извлеките батарейку, если не используете в течение длительного периода времени.
- Не оставляйте под воздействием высоких температур или под прямыми солнечными лучами.
- Не заменяйте батарейки влажными руками. Это приведет к разрушению батарейки и неисправности зубной щетки.
- Это точный прибор. Не ударяйте и не роняйте продукт.
- Не используйте растворы или органические соединения (например, растворители, эфирное масло и т. д.) при очистке-это приведет к изменению цвета или ухудшению качества.
- Если зарядка батарейки низкая, частота вибрации продукта будет уменьшаться или останавливаться- это не является неисправностью, пожалуйста, замените батарейку.
- Не используйте горячую воду, выше 40 градусов, при обслуживании.
- Пожалуйста, сохраняйте изделие и крышку изделия сухими и чистыми перед хранением. Даже если продукт в антибактериальной зубной пасте или влажный, при хранении, это может стать причиной размножения бактерий.

Установка и замена сменной головки щетки:

1. Поверните головку щетки как показано ① и потяните вверх как показано ②.
2. Совместите новую головку щетки как показано ① и поверните ее как показано ②.
3. Паз на шейке должен совпадать с внутренними насечками на головке зубной щетки, для фиксации.


Установка и замена батареек:

1. Поверните крышку батарейного отсека в направлении ① и отсоедините ② как показано справа.
2. Вставьте одну новую батарейку AA стороной (-)вверх.
3. Установите крышку батарейного отсека в направлении ③ и надежно поверните ее в направлении ④, как показано справа.

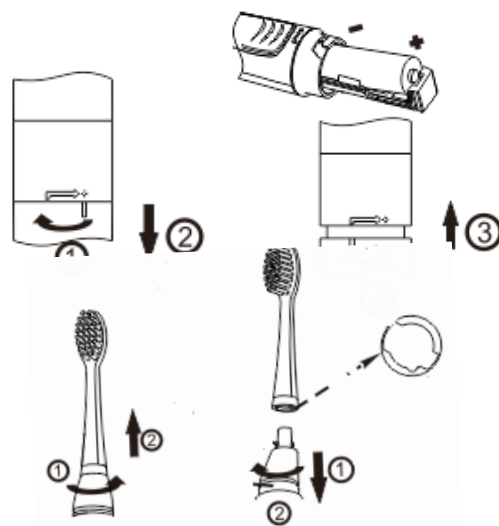

Использование:

1. Смочите щетину и нанесите необходимое количество зубной пасты.
2. Расположите щетинки зубной щетки к зубам под небольшим углом к линии десны.
3. Нажмите кнопку включения/выключения питания, чтобы включить зубную щетку и начать чистить зубы. Нажмите кнопку включения/выключения снова, зубная щетка будет выключена.
4. Чтобы обеспечить лучшую эффективность звуковой зубной щетки, используйте правильное давление и дайте щетинкам полностью касаться ваших зубов.
5. Аккуратно перемещайте головку щетки по зубам медленными движениями вперед-назад, чтобы щетинки достигли всех частей зубов.
6. Разделите рот на четыре квадрата, почистите по 10 секунд на каждой передней, задней и жевательной поверхностях для каждой секции в течение 30 секунд, затем перейдите к следующему квадранту.
7. Повторите процедуру, описанную выше, чтобы очистить все 4 секции во рту. После окончания всех 4 разделов. Если вы хотите продолжить использовать, пожалуйста, нажмите кнопку питания еще раз.
8. Если вы хотите остановить продукт во время использования, пожалуйста, выключите, прежде чем удалить его изо рта.
9. Зубная щётка пригодна также и для носителей ортодонтических скоб или зубных протезов.

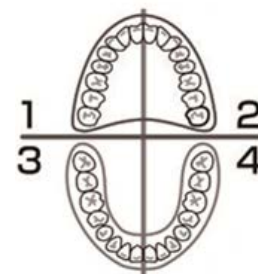

Особенности:

1. Более 28.000 ударов в минуту
2. Жесткость щетины MEDIUM (средняя)
3. Применение - для взрослых
4. Технология - ЗВУКОВАЯ
5. Режимов работы - 1
6. Питание - батарейка AAA
7. Производство Швейцария

TRISONIC AG

Kantonsstrasse 31

CH-6234 Triengen

Switzerland

www.trisa.ch

trisonic@trisa.ch