

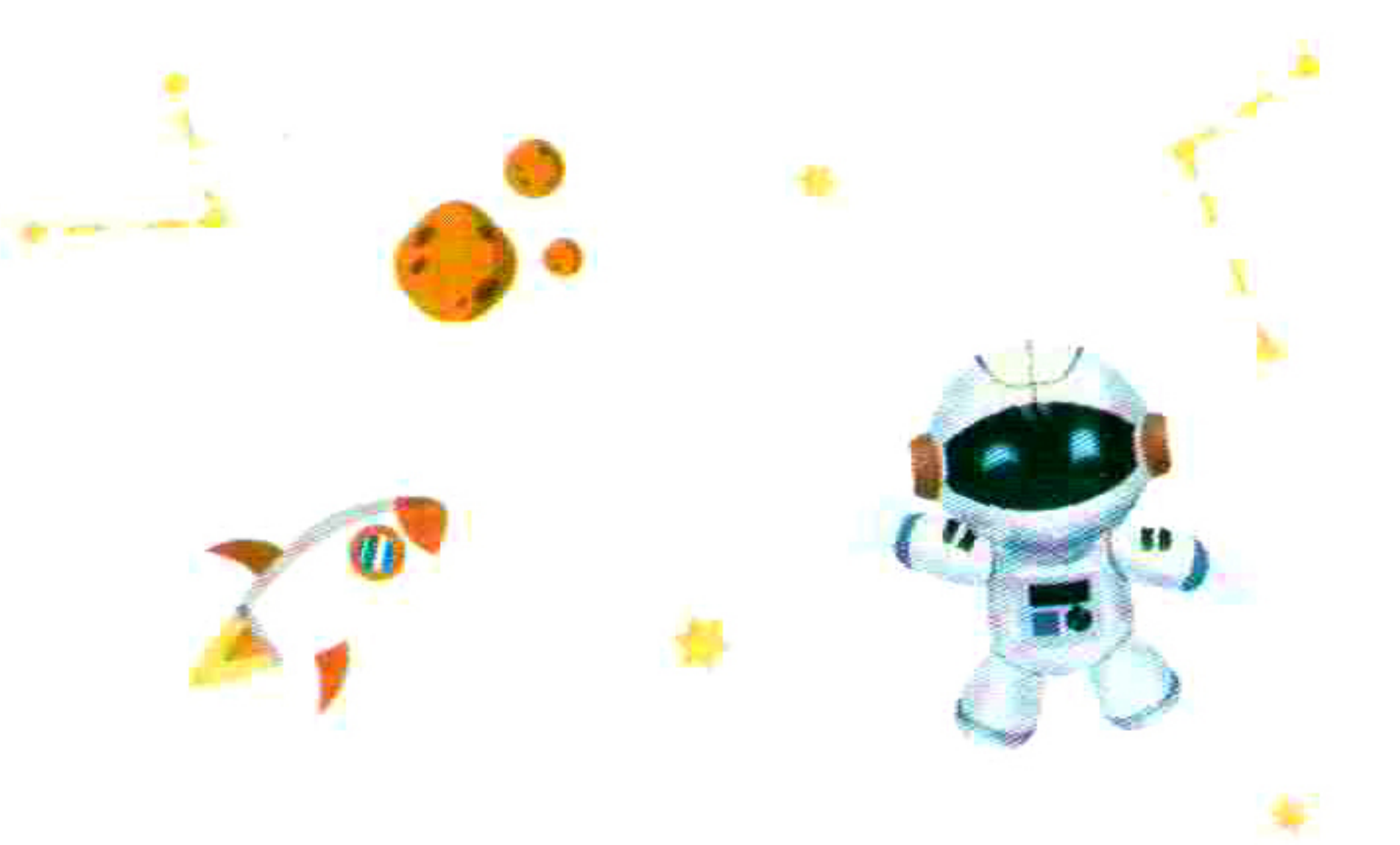


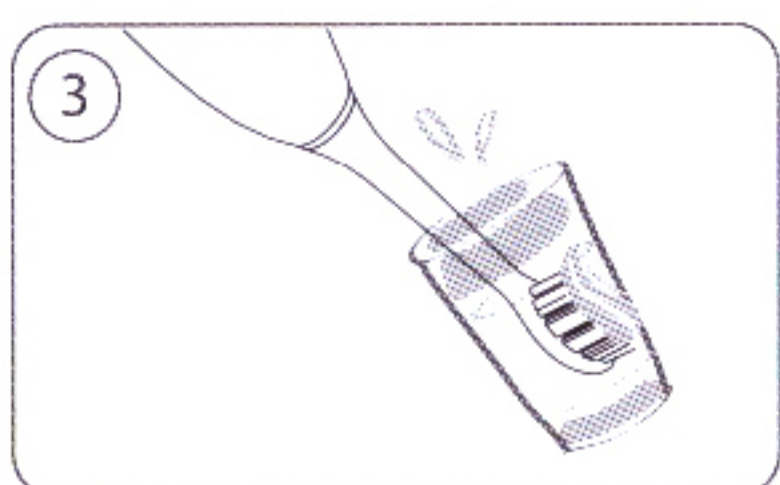


## Поздравляем!


Уважаемый клиент, Вы приобрели своему ребенку высокотехнологичное устройство, которое позволит детским зубам и деснам быть красивыми и здоровыми. Ваш ребенок непременно оценит и останется доволен!

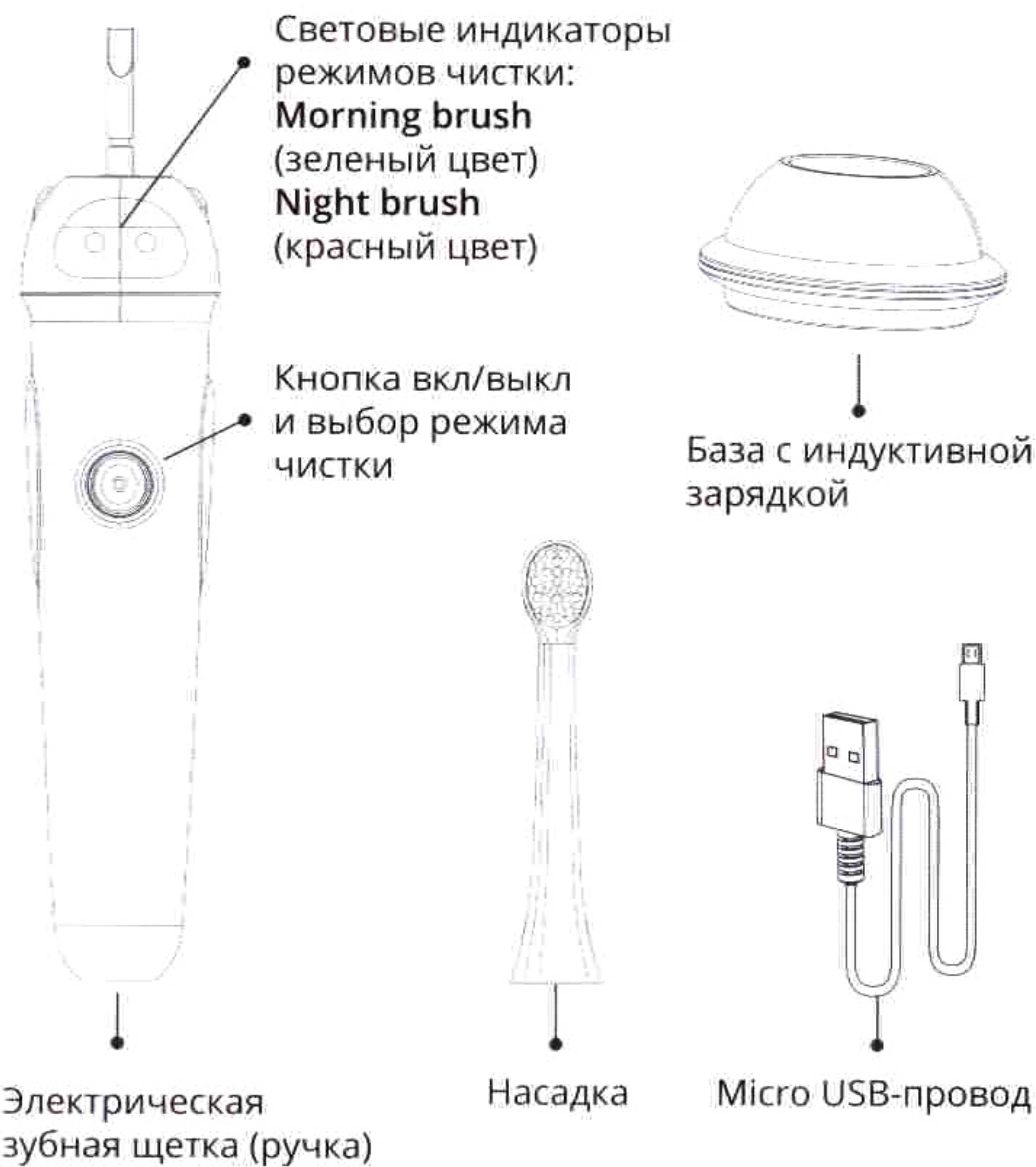

Нанесите чистящую головку зубной щетки и нанесенную на нее зубную пасту, прежде чем Вы приступите к чистке зубов – это поможет зубной пасте лучше воздействовать на поверхность зубов во время чистки.

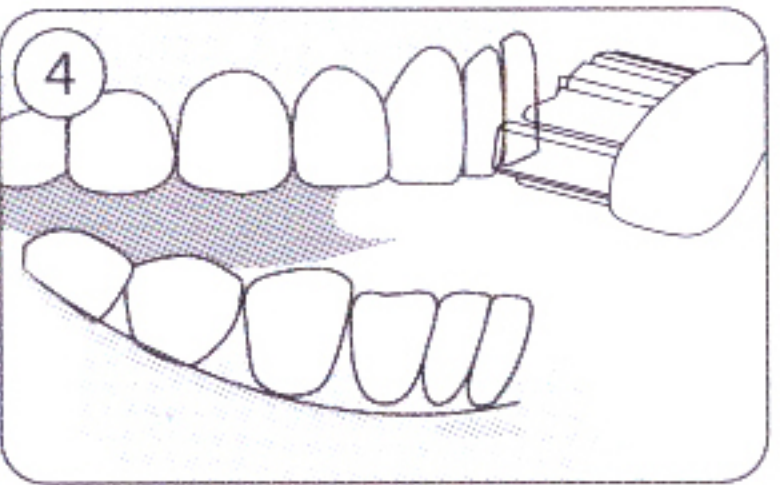

Поднесите насадку щетки к поверхности зубов, расположив параллельно линии десен. Производите чистку мягко. Не надавливайте слишком сильно, иначе можете травмировать поверхность зубов и десен. Перемещайте чистящую головку медленно, совершая вращательно-возвратные движения.

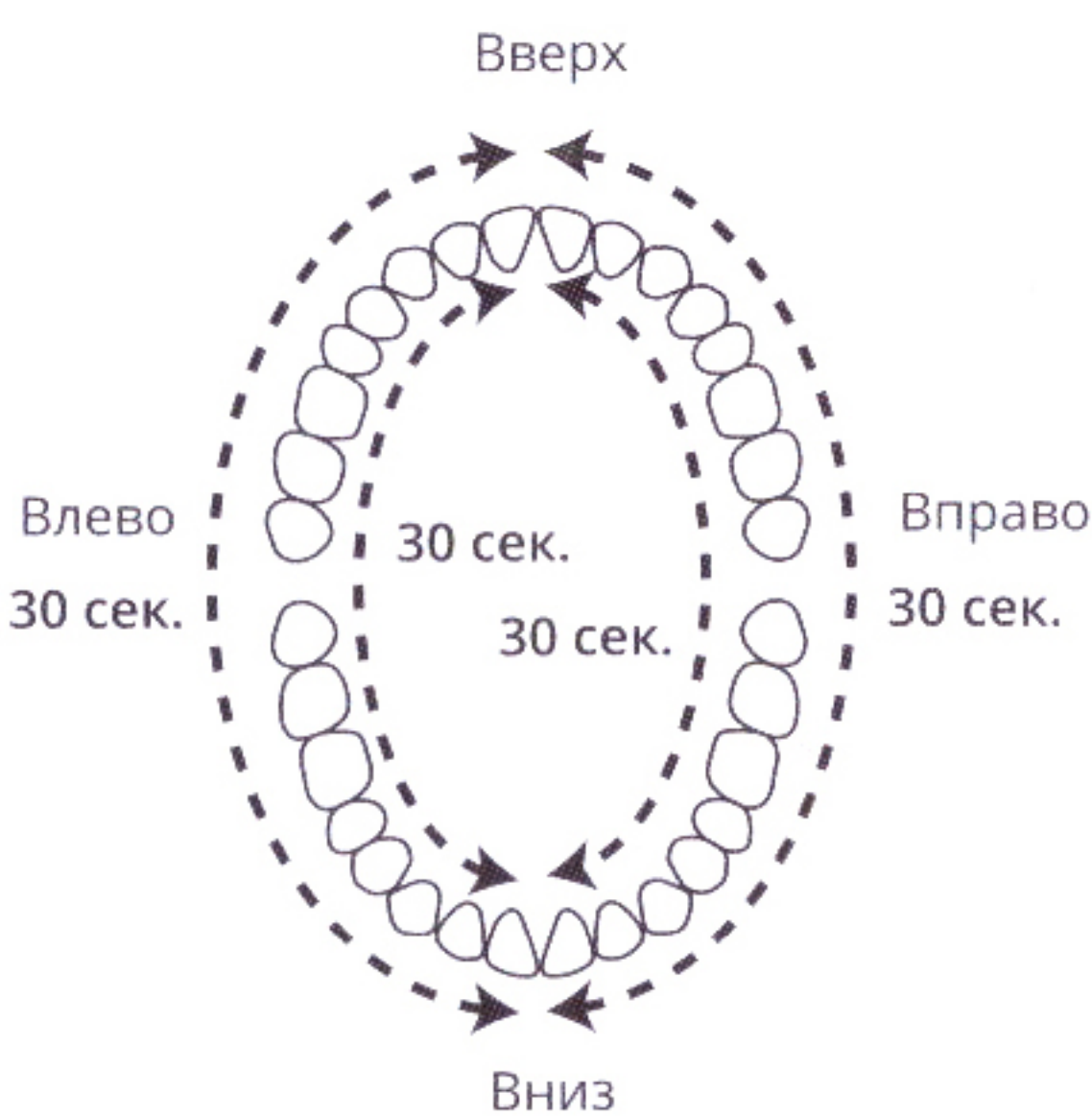


Для обеспечения равномерного очищения разделите полость рта на четыре равных условных зоны и очищайте их поочередно. Щётка уведомит Вас о смене зоны чистки коротким прерыванием колебаний щетины.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


Перед первым применением щетки Revyline RL 020 KIDS внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и сохраните ее.

Для предотвращения электротравм, ожогов, пожаров:

1. Не погружайте прибор в воду или другую жидкость.
2. Не используйте щетку во время принятия душа.
3. Не трогайте влажными руками зарядное устройство, подключенное к электросети.
4. Не храните прибор в местах, откуда он может упасть в емкость с водой или раковину.
5. Не используйте прибор при неисправности зарядного устройства или повреждении силового кабеля.
6. Используйте только фирменные насадки и аксессуары.
7. Не вставляйте посторонние предметы в гнездо для сменной насадки.
8. Заряжайте прибор вдали от горячих поверхностей.
9. Не включайте щетку в помещении, где ранее использовался кислород или аэрозоли.
10. Перед использованием щетки удалите из полости рта все съемные конструкции.
11. Не используйте прибор при наличии ранок в полости рта или на языке.
12. Использование щетки детьми возможно только под присмотром взрослых.
13. Не следует хранить щетку на зарядной базе, по окончании зарядки снимите щетку с зарядной платформы.

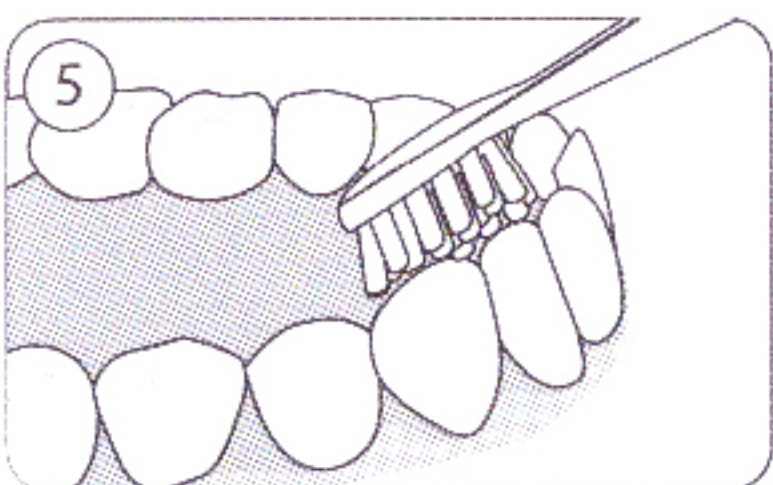



Во время чистки не следует надавливать на чистящую головку слишком энергично.

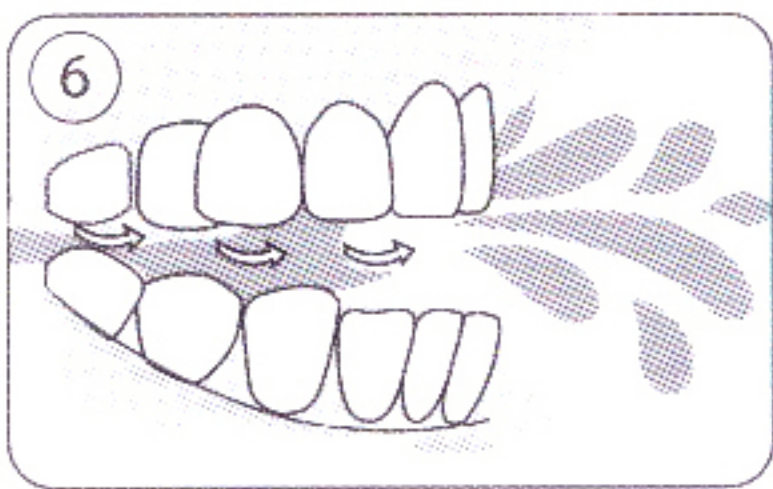

После завершения чистки тщательно прополощите полость рта чистой водой.

### УХОД ЗА ЗУБНОЙ ЩЕТКОЙ

Регулярно очищайте зубную щетку Revyline RL 020 KIDS. Ополаскивайте ручку и насадку-щетку. При необходимости протрите все поверхности мягкой тканью с мылом.

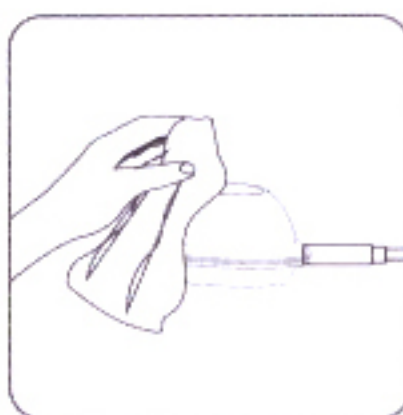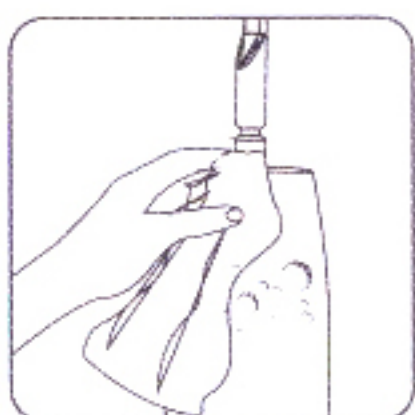

### НАСАДКИ В КОМПЛЕКТЕ

В базовой комплектации прибора три стандартные сменные насадки soft-medium. После 3-х месяцев регулярного использования насадки рекомендуется менять из соображений гигиены.



**Внимание!** Совместное использование одной насадки различными пользователями строго не рекомендуется, согласно правилам личной гигиены.

### ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА


Для зарядки аккумулятора необходимо подключить зарядную базу к розетке электропитания и вертикально установить щетку на базу для бесконтактной зарядки. Во время подзарядки аккумулятора на дисплее корпуса. Прекращение мигания индикатора свидетельствует об окончании зарядки. В результате полной зарядки аккумулятора на дисплее загорается зеленый цвет индикатора. В случае, если щетка долго не использовалась, световой индикатор зарядки загорается не сразу, а по прошествии 6-10 минут.



### ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

Световые индикаторы режимов чистки:  
Morning brush (зеленый цвет)  
Night brush (красный цвет)

Кнопка вкл/выкл и выбор режима чистки

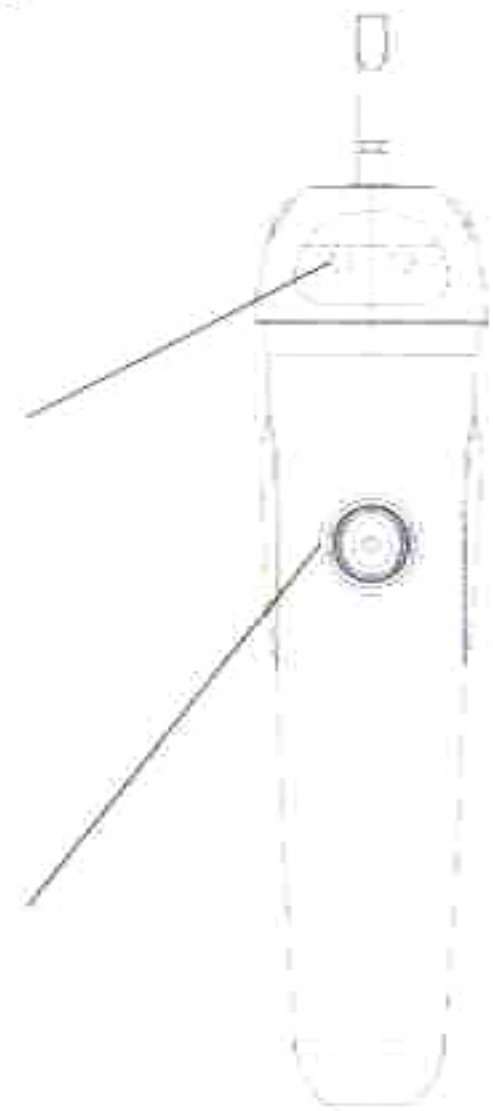

Для включения прибора один раз нажмите кнопку питания. При первом нажатии на кнопку питания происходит включение щетки в режиме Morning brush, при втором нажатии щетка переключается в режим Night brush. Выключение прибора происходит спустя две минуты или при третьем нажатии.

### ВЫБОР РЕЖИМА ЧИСТКИ

**Morning mode (утренний режим)**  
**18000 колебаний в минуту.**  
Мягкий и комфортный режим. Обеспечит безупречное очищение и эффективный массаж десен после пробуждения.

### ГАРАНТИЯ

Гарантия на прибор 2 года.

Гарантированное техническое обслуживание прибора осуществляется в течение действующего гарантийного срока бесплатно. Далее обслуживание щетки осуществляется за счет покупателя.

### ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

- На расходные материалы и комплектующие;
- На товары, которые вышли из строя и/или получили дефекты вследствие применения их не по назначению; неосторожного и/или небрежного использования (включая перегрузку), приведшего к повреждениям; модификации, вскрытия и/или ремонта неуполномоченной организацией (частным лицом); нарушением правил эксплуатации, и/или хранения, и/или транспортировки, указанных в руководстве по эксплуатации;
- На товары, эксплуатировавшиеся с неустраивающими недостатками;
- На неисправности, которые вызваны не зависящими от производителя причинами, такими как действия третьих лиц, явления природы и стихийные бедствия, домашние и дикие животные, насекомые, попадание внутрь товаров посторонних предметов и жидкостей;
- На внешние и внутренние загрязнения, царапины, трещины, потертости и прочие механические повреждения, возникшие в процессе эксплуатации и в результате естественного износа.


**Night mode (вечерний режим)**  
**22000 колебаний в минуту.**  
Более интенсивный режим. Обеспечит зубам надлежащее очищение, в частности, удалит перед сном остатки пищи и бактериального налета.

### УСТАНОВКА И ЗАМЕНА НАСАДКИ

Установите насадку, надев ее на металлический стержень таким образом, чтобы рабочая поверхность насадки совпадала с лицевой стороной корпуса щетки.

**Внимание!** Между насадкой и корпусом щетки должен присутствовать небольшой зазор.

### ПРОЦЕСС ЧИСТКИ

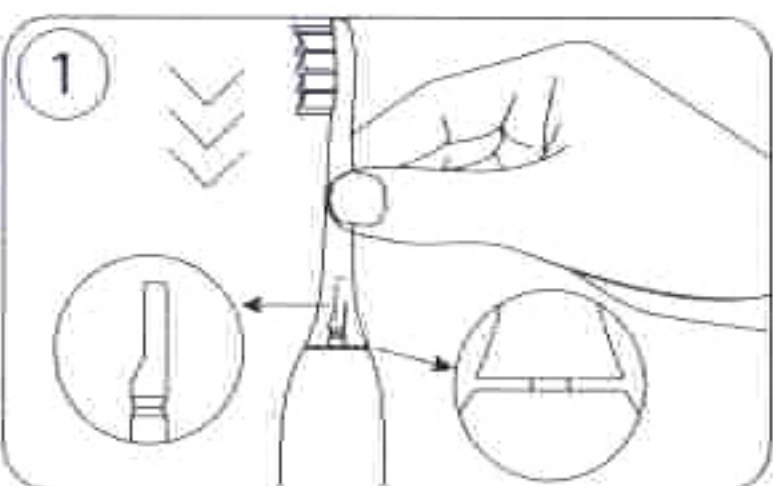

Аккуратно наденьте насадку на посадочное место. Оставьте небольшой зазор между насадкой и основным корпусом, так как зазор необходим для возможности осуществления вибрации. Включите щетку и убедитесь, что насадка вставлена правильно.



Нанесите немного зубной пасты на чистящую головку щетки. Настоятельно не рекомендуем включать щетку в момент нанесения, дабы предотвратить разбрызгивание зубной пасты.

### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Основной блок щетки;
- Сменные насадки soft-medium — 3 шт.;
- База с индуктивной зарядкой;
- MicroUSB-провод;
- Наклейки;
- Инструкция по эксплуатации.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Модель: RL 020 KIDS.
- Предназначена для эффективной чистки зубов.
- Частота колебаний: 18 000 – 22 000 в мин.
- Материал корпуса: ABS + PC.
- Питание: аккумулятор 800 mAh.
- Время полной зарядки: 8 часов.
- Гарантия: 2 года.
- Хранить при комнатной температуре.