


OLZORI

JUST BEAUTY

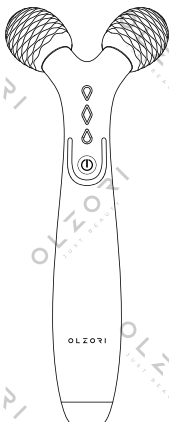

E-Wave

FACIAL MASSAGER

3D-ROLLER, EMS & HEATING
FACE LIFTING TECHNOLOGIES

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за доверие к торговой марке OLZORI™ и выбор аппарата массажного роликового для лица модели E-Wave, далее роллер-массажер. Мы гарантируем высокое качество и надежную работу своей продукции при условии соблюдения правил, описанных в настоящем руководстве по эксплуатации. Пожалуйста, прочитайте руководство по эксплуатации перед применением устройства и сохраните его для последующего использования.

Роллер-массажер OLZORI™ E-Wave позволит сделать процедуры самостоятельного ухода за лицом более эффективными и комфортными.

СОДЕРЖАНИЕ

Технические характеристики	2
Описание	2
Устройство прибора	3
Световая индикация режимов	4
Способ применения	5
Зарядка прибора	9
Уход и хранение	9
Предупреждения	10
Противопоказания	11
Гарантийные обязательства	12

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	E-Wave
Размер	160x60x35 мм
Вес изделия	120 г
Аккумулятор	800 мАч
Потребление	3,7 В
Рабочее напряжение	5 В
Мощность	2 Вт
Время зарядки	~3.5 ч
Комплектация	прибор, подставка, USB-кабель, чехол, салфетка, инструкция, гарантийный талон

ОПИСАНИЕ

Роллер-массажер OLZORI™ E-Wave предназначен для ежедневных процедур в домашних условиях с целью укрепляющего и расслабляющего массажа лица, шеи и области декольте с эффектом лифтинга и омолаживания кожи.

Позволяет осуществлять эффективный массажный уход за кожей благодаря специально разработанной Y-образной форме устройства и запатентованной геометрии металлических массажных роликов. Результат от применения массажера значительно усиливается благодаря интегрированным в прибор технологиям электромиостимуляции (EMS) и нагрева массажных роликов.

С помощью прибора можно проводить 3 вида массажных процедур:

- классический 3D роликовый массаж;
- роликовый 3D массаж с нагревом до температуры $45\pm 5^{\circ}\text{C}$;
- массаж с нагревом и EMS-импульсами (два рабочих режима).

Электромиостимуляция лица — процедура искусственной стимуляции сокращения мышц импульсами электрического тока определенной силы, частоты и формы с целью активизировать обменные процессы на обрабатываемых участках кожного покрова. Сила тока, частота и форма EMS импульсов в роллер-массажере OLZORI™ E-Wave подобраны с учётом строения мышечных тканей и нервных окончаний кожи лица. Воздействие EMS импульсами приводит к попеременному сокращению и расслаблению мышц лица. Происходит аппаратная тренировка мышц. EMS импульсы проникают в глубокие ткани и выполняют стимулирующую функцию.


Благодаря этому снижается напряжение мышц, восстанавливается нейромышечная связь и естественная работа мышц лица и шеи.

Массаж лица с EMS токами даёт положительный косметический эффект: повышает эластичность и упругость кожи, сокращает морщины, улучшает цвет лица, устраняет отеки, восстанавливает овал лица, создает более четкий контур лица и шеи. Регулярные процедуры усиливают кровообращение и отток лимфы, ускоряют вывод токсинов и омоложение клеток, сокращают жировые отложения.

Роликовый массаж с нагревом до температуры $45\pm 5^{\circ}\text{C}$ усиливает проникновение в кожу и эффективность действия косметических средств (сыворотка, крем, масло, гель и т.д.).

Роликовый массаж также поддерживает и усиливает действие других омолаживающих процедур для лица. Два вращающихся металлических массажных ролика имеют геометрическую 3D форму, разработанную с учётом анатомии лица и особенностей строения кожи лица, шеи и зоны декольте. В сочетании с функциями нагрева рабочей поверхности и электромиостимуляции (EMS) это обеспечивает наиболее эффективный массаж и косметологический уход.


УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

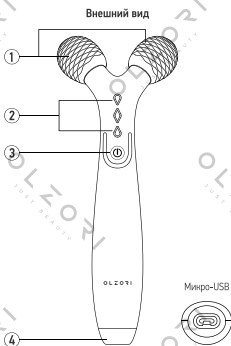


1. Массажные ролики.
2. LED-индикатор режимов работы.
3. "⏻" кнопка «Вкл./Выкл.» и выбор рабочего режима.
4. Разъем микро-USB

СВЕТОВАЯ ИНДИКАЦИЯ РЕЖИМОВ

1. Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 2-х секунд, чтобы включить прибор. Загорится первый индикатор – режим «Массаж с нагревом»

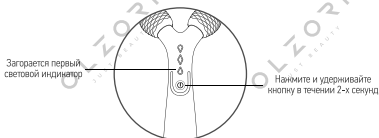

2. Нажимайте повторно кнопку , чтобы переключать устройство в требуемый режим работы. Индикатор будет переключаться с текущего уровня снизу-вверх. Одновременно загорается один, два или три световых индикатора, которые соответствуют следующим режимам работы массажера: «Массаж с нагревом», «Массаж с нагревом + EMS 1», «Массаж с нагревом + EMS 2»

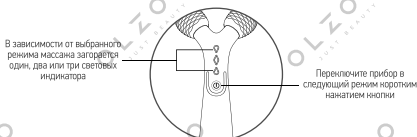

Режим «Массаж с нагревом» включается при первом нажатии на кнопку прибора (загорается один световой индикатор).

Режим «Массаж с нагревом + EMS 1» включается при втором нажатии на кнопку массажера (работают два световых индикатора одновременно).

Режим «Массаж с нагревом + EMS 2» включается при третьем нажатии на кнопку прибора (загораются три световых индикатора одновременно).

3. Для выключения прибора нажмите и удерживайте кнопку  в течение 2-х секунд в любом из режимов работы массажера (световая индикация выключается).

ВНИМАНИЕ: устройство не может работать во время зарядки.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Специально разработанная Y-образная форма массажера OLZORI™ E-Wave с двумя 3D роликами позволяет проводить различные процедуры от простого расслабляющего массажа до фейслифтинга и контурного моделирования лица. Компактный размер и встроенный аккумулятор делают доступным массаж лица дома, в деловых поездках и в путешествиях.

ВНИМАНИЕ! Во избежание чрезмерного использования при процедурах и разряда аккумулятора устройство автоматически выключается через 5 минут непрерывной работы.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Перед первым использованием зарядите устройство в течение четырех часов.
2. Протирайте металлические массажные ролики 70% спиртовой салфеткой перед каждым применением массажера.
3. Не забывайте после каждой процедуры протирать металлические массажные ролики и корпус устройства мягкой безворсовой хлопковой тканью (сухой или слегка влажной).

ВНИМАНИЕ! Устройство не является водонепроницаемым.

4. Перед процедурой необходимо снять все украшения.
5. Нажмите и удерживайте кнопку  в течение двух секунд, чтобы включить устройство.
6. Нажмите повторно кнопку , чтобы переключить устройство в требуемый режим работы.
7. Режимы «Роликовый массаж» и «Массаж с нагревом» можно использовать по мере необходимости ежедневно утром и/или вечером.
9. Рекомендуется использовать роллер-массажер в режимах электромиостимуляции (EMS) не чаще трех-четырёх раз в неделю.
11. Используйте токопроводящий гель или другое косметическое средство во время процедуры массажа в режимах электромиостимуляции (EMS).
12. По завершению процедуры массажа рекомендуется нанесение омолаживающей или питательной маски.

РЕЖИМ «РОЛИКОВЫЙ МАССАЖ»

Массажер OLZORI™ E-Wave позволяет проводить качественный разминающий и расслабляющий роликовый массаж лица, шеи и области декольте. Два вращающихся металлических ролика с специально разработанной рельефной 3D формой, расположенных под углом 78°, легко скользят по обрабатываемому участку лица, захватывая между собой слои кожи. При этом происходит глубокое массажное воздействие на кожу и мышцы, аналогичное профессиональному массажу руками.

Роликовый массаж прибором OLZORI™ E-Wave укрепляет мышцы и повышает их тонус, создавая прочный «каркас» для кожи. Движение лимфы занимает центральное место в массаже лица. За счет проработки лимфатических путей происходит восстановление водного баланса клеток и тонуса кожи. Отток лимфы и прилив крови также обеспечивают своевременное выведение токсинов из организма. Массаж роликами эффективно сокращает морщины и предупреждает их появление, борется с проблемой «второго подбородка», снимает отечность, создаёт четкие контуры лица, позволяет справиться с проблемой дряблости кожи. Активная глубокая проработка роликами повышает тонус мышц и кожи и активизирует кровообращение.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ

1. Удалите макияж и очистите лицо.
2. Обычный роликовый массаж не требует обязательного использования косметических средств. Косметическое средство (масло, сыворотка, эссенция, крем и т.д.) может быть нанесено по желанию или при необходимости.
3. Процедура в режиме «Роликовый массаж» не требует включения прибора.
4. Процедура проводится по массажным линиям лица и шеи (рис.1) Следите за нажимом роликов на кожный покров. Давление на кожу роликами не должно быть сильным и создавать дискомфорт.
5. Рекомендованное время массажа 10-15 минут.
6. Завершите процедуру нанесением ваших любимых косметических уходовых средств.



Рис. 1

РЕЖИМ «МАССАЖ С НАГРЕВОМ»

Тепловое воздействие на кожу положительно влияет на collagen и эластин, вызывая трехмерное ремоделирование дермы. Роликовый массаж с нагревом активизирует синтез новых молодых волокон, увеличивает скорость обмена веществ в клетках, способствуя их естественному восстановлению. Под действием тепла коллагеновые волокна ремоделируются, т.е. сжимаются и вновь становятся упругими, что ведет к укреплению и уплотнению кожного покрова, а также разглаживанию морщин.

Стимуляция фибробластов и синтез молодого коллагена приводят к обновлению структурного каркаса дермы.

Тепловое воздействие роллер-массажером OLZORI™ E-Wave обеспечивает глубокий внутренний прогрев тканей, ещё больше активизирует метаболизм, усиливает кровоснабжение, лимфоток, вывод токсинов и продуктов распада жировой ткани. Массаж с нагревом роликов до температуры $45\pm 5^{\circ}\text{C}$ обеспечивает быстрое и более глубокое проникновение в кожу питающих ингредиентов уходовой косметики (сыворотка, крем, масло, гель и т.д.).

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ

1. Удалите макияж и очистите лицо.
2. Нанесите на обрабатываемый участок лица или шеи косметическое средство (сыворотка, крем, масло, гелевая маска и т.д.).
3. Нажмите и удерживайте кнопку  в течение двух секунд, чтобы включить устройство в режиме «Массаж с нагревом» (загорается один световой индикатор).
4. Процедура проводится по массажным линиям лица и шеи (рис.1). Следите за нажимом роликов на кожный покров. Давление на кожу роликами не должно быть сильным и создавать дискомфорт.
5. Рекомендованное время массажной процедуры 10-15 минут.
6. Нанесите на кожу омолаживающее или питательное косметическое средство сразу после завершения процедуры массажа.
7. Протрите массажные ролики и корпус устройства мягкой безворсовой хлопковой тканью, чтобы очистить их от остатков косметического средства.

РЕЖИМЫ МАССАЖА С EMS

Роликовый массаж прибором OLZORI™ E-Wave в режимах электромиостимуляции (EMS) вызывает имитацию естественного сокращения мышц действием импульсных токов на нервные окончания. Лицевые мышцы с возрастом ослабевают и нуждаются в тренировке. EMS импульсы укрепляют их и тонизируют, одновременно устраняя дряблость кожи и разглаживая морщины. При этом контуры лица становятся более четкими, а форма лица восстанавливается.

Интенсивная тренировка мышц увеличивает потребление энергии, которая извлекается при распаде жировой ткани, поэтому EMS для лица видимо сокращает ненужные объемы на щеках и в области «второго» подбородка. Помимо усиления мышечного тонуса и подтяжки кожи, EMS активизирует кровообращение, что ускоряет насыщение тканей кислородом, способствует выводу токсинов, выравнивает и освежает цвет лица.

Прибор OLZORI™ E-Wave имеет два режима EMS, которые отличаются интенсивностью воздействия на кожу. Режим «Массаж с нагревом + EMS 1» имеет меньшую интенсивность и силу электрических импульсов (горят два световые индикатора одновременно).

Режим «Массаж с нагревом + EMS 2» имеет большую интенсивность и силу электрических импульсов (горят все три световые индикатора одновременно).

Сила и форма электрических импульсов в обоих режимах специально подобрана для эффективного и безопасного воздействия на кожу лица, которая отличается большей чувствительностью по сравнению с другими участками тела.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ

1. Удалите макияж и очистите лицо.
2. Нанесите на зону воздействия токопроводящий гель или другое косметическое средство на водной основе, подходящий вашему типу кожи.
3. Нажмите и удерживайте кнопку  в течение двух секунд, чтобы включить устройство. Выберите режим интенсивности EMS, подходящий вашему типу кожи. НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ использовать режим сильной интенсивности «Массаж с нагревом + EMS 2» для слишком чувствительной кожи.
4. Процедура проводится по массажным линиям лица и шеи (рис.1). Следите за нажимом роликов на кожный покров. Давление на кожу роликами не должно быть сильным и создавать дискомфорт.
5. Во время использования прибора убедитесь, что оба металлических массажных ролика прилегают к коже, обеспечивая постоянный контакт с ней.
6. В процессе процедуры перемещайте устройство, задерживая массажные ролики на одном месте, но не более трёх секунд.
7. Избегайте воздействия прибора на зону вокруг глаз, носа и в области щитовидной железы.
8. Рекомендованное время массажной процедуры – не более 10 минут.
9. Протрите массажные ролики и корпус устройства мягкой безворсовой хлопковой тканью, чтобы очистить их от остатков косметического средства.

Если вы не ощущаете действие электрических импульсов во время процедуры в режиме EMS, то:

- убедитесь, что оба металлических ролика хорошо соприкасаются с обрабатываемым участком, особенно при движении роликов по коже;
- убедитесь, что гель не впитался в кожу, при необходимости нанесите дополнительное количество токопроводящего геля на кожу и продолжите процедуру;
- увеличьте уровень интенсивности EMS, переключив прибор в режим «Массаж с нагревом + EMS 2».

Если мощность EMS импульсов слишком высокая, переключите прибор в режим «Массаж с нагревом + EMS 1». Продолжайте процедуру массажа в этом режиме до полного привыкания к воздействию электромиостимуляции, после чего можете перейти в режим с высокой интенсивностью EMS.

ЗАРЯДКА ПРИБОРА

ВАЖНО! Для зарядки роллер-массажер E-Wave используйте **ТОЛЬКО** ОРИГИНАЛЬНЫЙ USB-кабель, поставляемый в комплекте с устройством.

- Вставьте кабель для зарядки в разъем питания прибора.
- При подсоединении прибора к зарядному устройству световые индикаторы режимов начнут мигать поочередно, один за другим. Это означает, что прибор заряжается. Когда аккумулятор полностью заряжен, все световые индикаторы погаснут.

ВНИМАНИЕ!

- Перед зарядкой убедитесь, что разъем и кабель для зарядки сухие и чистые. **НЕ ДОПУСКАЕТСЯ** зарядка прибора в местах, где зарядный кабель может попасть в воду.
- Не используйте прибор в процессе зарядки и не заряжайте его больше, чем 24 часа.
- Зарядите заново батарею, если устройство не использовалось длительно.
- Устройство не может работать во время зарядки.

УХОД И ХРАНЕНИЕ

Уход за устройством.

Всегда очищайте роллер-массажер E-Wave от остатков косметических средств после процедуры.

Массажные ролики должны быть очищены после использования прибора, чтобы избежать накопления жира и других остатков.

Вытрите прибор слегка влажной хлопковой тканью или ватным диском. Дайте устройству высохнуть.

Прибор **НЕ ЯВЛЯЕТСЯ** водонепроницаемым. Запрещено мыть устройство под струей воды. Необходимо исключить контактирование прибора с водой.

ВАЖНО! Никогда не используйте для очищения металлических массажных роликов и пластикового корпуса прибора средства, содержащие ацетон и другие агрессивные химические средства, так как они могут стать причиной возникновения раздражений кожи, а также сокращают срок службы устройства или могут повредить его.

Хранение.

Храните роллер-массажер E-Wave в недоступном для детей месте.

Храните устройство в сухом, вентилируемом месте, вдали от нагревательных приборов, а также исключите его нагрев под воздействием солнечных лучей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Используйте устройство исключительно по назначению, как описано в данной инструкции.

Проконсультируйтесь с дерматологом перед использованием прибора при наличии какого-либо заболевания кожи или медицинских проблем.

Прокатывайте массажер по лицу осторожно, без избыточного давления на кожный покров. Вы должны чувствовать работу массажных роликов и не испытывать дискомфорт.

Не используйте прибор для воздействия на одну и ту же область длительное время.

Будьте особенно внимательны при использовании прибора в области под глазами и не допускайте контакт прибора с открытыми глазами.

Не используйте прибор в области щитовидной железы, сердца.

Запрещено пользоваться устройством в зоне с контурной гелевой пластикой, над силиконовыми имплантами.

Не рекомендуется совместное использование прибора с другими людьми по гигиеническим соображениям.

Не используйте прибор в сауне, бане и т.п. Перегрев металлических роликов может вызвать ожоги кожи.

Не позволяйте детям использовать это устройство.

Не разбирайте и не ремонтируйте изделие самостоятельно. Для ремонта, пожалуйста, свяжитесь с продавцом, у которого был приобретен прибор, или с официальным сервисным центром.

Избегайте прямого воздействия солнечных лучей на прибор, а также воздействия чрезвычайно высоких температур или кипятка.

Не используйте прибор или зарядный кабель, если они имеют какие-либо признаки повреждения. Используйте только оригинальный кабель для зарядки, поставляемый в комплекте с устройством или зарядный кабель той же спецификации.

Во избежание поражения электрическим током данный прибор следует подключать только к источнику питания с заземлением.

ПРОТИВПОКАЗАНИЯ

Устройство не следует применять в следующих случаях:

- инфекционные и кожные заболевания;
- аллергические реакции кожи;
- нарушение целостности кожных покровов;
- солнечные ожоги, покраснения и шелушения кожи от чрезмерного загара;
- сразу же после выполнения пилинга;
- после процедур микродермабразии;
- приём медицинских препаратов, повышающих чувствительность кожи;
- недавно перенесённая пластическая операция;
- индивидуальная непереносимость электромиостимуляции и нагрева кожи;
- повышенная чувствительность кожи, аллергические дерматиты;
- ранний реабилитационный период после хирургии;
- заболевания кровеносной системы и сосудов;
- онкологические заболевания;
- гипертония;
- ишемическая болезнь сердца, нарушения сердечного ритма;
- заболевания эндокринной системы;
- невралгия, болезненность в лицевых мышцах;
- наличие психических расстройств;
- ношение электрокардиостимулятора;
- наличие металлических или силиконовых имплантов в зоне обработки, а также золотых нитей (не распространяется на зубные коронки, штифты и брекеты);
- беременность.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный период составляет 1 (один) год со дня продажи торгующей организацией при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения. Гарантийное обслуживание производится при наличии документа, подтверждающего покупку устройства.

Претензии не принимаются: если устройство повреждено в результате использования его не по назначению, либо небрежного обращения покупателя с изделием, если был осуществлен самостоятельный ремонт устройства, если отсутствует документ о покупке устройства с датой покупки, если зарядка устройства осуществлялась зарядным устройством иного напряжения или от иной электросети.

В случае возникновения дефектов по вине изготовителя в течение гарантийного срока уполномоченный представитель изготовителя обязуется безвозмездно произвести ремонт и/или замену устройства.



RoHS



EAC

OLZORI

JUST BEAUTY

WWW.OLZORI.RU