



Ирригатор для полости рта

HI-313



Руководство по эксплуатации

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---------------------------------|----|
| Меры безопасности..... | 3 |
| Схема устройства..... | 5 |
| Подготовка к работе..... | 5 |
| Установка насадки..... | 6 |
| Использование..... | 6 |
| Зарядка..... | 8 |
| Чистка и уход..... | 8 |
| Хранение..... | 8 |
| Устранение неисправностей..... | 9 |
| Технические характеристики..... | 10 |
| Комплектация..... | 10 |

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки Hi. Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с данным руководством. Оно содержит важную информацию по безопасной эксплуатации ирригатора, а также по уходу за ним.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте руководство по эксплуатации.


- Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики, указанные на издании, параметрам электросети.
- Пожалуйста, сохраняйте настоящую инструкцию, гарантийный талон, чек, упаковочную коробку и, по возможности другие элементы упаковки прибора.
- Производитель не несет ответственности за выход из строя устройства или за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования прибора.
- Не используйте прибор в случае обнаружения каких-либо повреждений.
- Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Не пользуйтесь прибором вне помещений.
- Всегда отключайте устройство от электросети перед очисткой или если вы его не используете.
- При использовании устройства в ванной комнате следует отключать его от сети после использования, так как близость воды представляет опасность, даже когда прибор выключен.
- Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор и шнур питания в воду или другие жидкости. Если это произошло, НЕ БЕРИТЕСЬ за изделие, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в Сервисный центр для проверки.
- Для дополнительной защиты целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА, в цепь питания ванной комнаты; при установке следует обратиться за консультацией к специалисту.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями, или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Не помещайте посторонние предметы внутрь прибора.
- Не накрывайте включенное в розетку устройство.
- Регулярно проводите чистку устройства.
- Избегайте соприкосновения сетевого кабеля устройства с горячими поверхностями и острыми предметами.
- В случае повреждения кабеля использование устройства запрещено.
- Никогда не оставляйте включенный в сеть прибор без присмотра даже на короткий срок.
- Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
- При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.

- Не используйте принадлежности, не входящие в комплект данного прибора.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор или заменять какие-либо детали. При обнаружении неполадок обращайтесь в ближайший Сервисный центр.
- Если изделие некоторое время находилось при температуре ниже 0°C, перед включением его следует выдержать в комнатных условиях не менее 2 часов.
- Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, кардинально не влияющие на его безопасность, работоспособность и функциональность.

ВАЖНО!

- В случае если недавно была перенесена периодонтальная или стоматологическая операция, а также при прохождении курса лечения ротовой полости, не рекомендуется использование ирригатора без предварительной консультации с врачом.
- Если во время использования вы заметили кровоточивость десен, необходимо прекратить использование продукта до консультации с врачом.
- Использовать ирригатор необходимо только по назначению и в соответствии с рекомендациями, изложенными в данной инструкции.
- Не переносите и не тяните прибор за шнур питания.
- Строго соблюдайте все рекомендации по сборке прибора. Во избежание поражения электрическим током, не разбирайте устройство самостоятельно.
- Не включайте прибор в случае если резервуар для воды пуст.
- Обязательно выливайте всю оставшуюся воду после использования прибора.
- Температура воды должна быть не выше 45°C.
- Не допускайте падение ирригатора и не подвергайте его ударам.
- Используйте только предлагаемые производителем комплектующие.

СХЕМА УСТРОЙСТВА

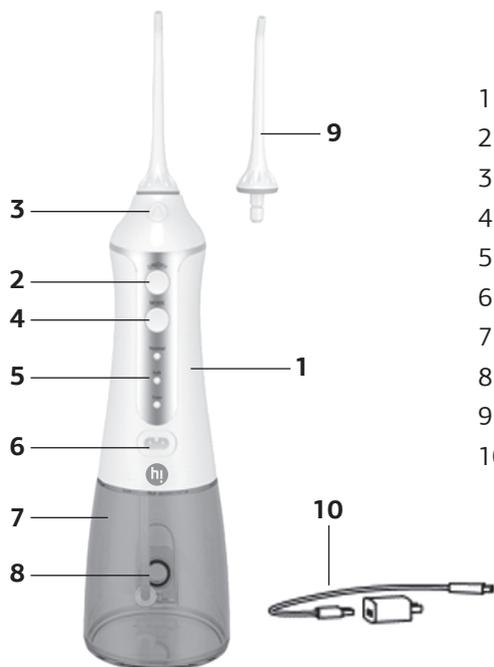

- 1 Корпус прибора
- 2 Кнопка вкл./выкл.
- 3 Кнопка смены насадок
- 4 Кнопка выбора режима
- 5 Индикаторы режима работы
- 6 Гнездо для зарядки
- 7 Резервуар для воды
- 8 Отверстие для залива воды
- 9 Сменная насадка
- 10 Провод USB для зарядки / блок питания

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ



Перед первым использованием, необходимо заполнить резервуар для воды. Для залива воды, аккуратно откройте крышку резервуара, которая находится на задней стороне резервуара, залейте воду, закройте крышку.

Объем залитой воды не должен превышать 300 мл.

Рекомендуется использовать воду не выше 45 °С.

Перед первым использованием промойте резервуар, под струей воды, слейте оставшуюся воду.

УСТАВНОВКА НАСАДКИ

В комплект входят 2 сменные насадки со специальными кольцами, которые различаются по цвету. Данные различия предусмотрены для удобства при использовании одного прибора каждым членом семьи.

Уплотнительные цветные кольца должны быть всегда на насадке. В случае если вы их сняли, перед началом использования необходимо надеть их обратно.

Вставьте насадку в отверстие для насадок в верхней части корпуса до щелчка.



Чтобы извлечь насадку, нажмите на кнопку снятия насадки на корпусе прибора.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

У данной модели ирригатора 3 режима работы:

«Стандартный»/«Normal» - режим для постоянного использования, очищает пространство между зубами.

«Мягкий»/«Soft» - предусмотрен для начинающих пользователей ирригатора, с бережным очищением зубов и полости рта. После того как десны привыкнут к использованию ирригатора, рекомендуется переходить на режим «Стандартный» и «Пульс»

«Пульс»/«Pulse» - предназначен для чистки зубов и десен пульсирующей струей воды. Данный режим предназначен для профилактики пародонтита.

Перед включением ирригатора наклоните его струйным наконечником насадки к себе под углом 45°.

Установите необходимый вам режим работы.

Переключение между режимами работы возможно при выключенном устройстве.

Нажмите кнопку вкл./выкл.

Во время использования рекомендуется находиться перед раковиной, а во избежание разбрызгивания рекомендуется включать прибор только когда он находится во рту.



Направляйте струю воды так, как это показано на рисунке. Плавными движениями пройдите по всей полости рта от жевательных зубов к передним.

После завершения использования, выключите ирригатор, нажав на кнопку вкл./выкл.

Аккуратно откройте крышку резервуара и слейте остатки воды. Если во время использования вместо воды в резервуар был залит специальный раствор для полоскания, обязательно промойте резервуар. Для этого достаточно наполнить резервуар водой, взболтать и слить остатки воды. При необходимости повторите несколько раз.


Во время хранения рекомендуется крышку резервуара для воды держать в открытом состоянии, это необходимо, чтобы не образовался неприятный запах застоявшейся воды.

В случае если вы планируете долго не использовать прибор, необходимо снять насадку, отсоединить резервуар, повернув его против часовой стрелки в сторону изображения «открытого замочка».

Слейте остатки воды



Отсоедините резервуар для воды от корпуса и снимите насадку.

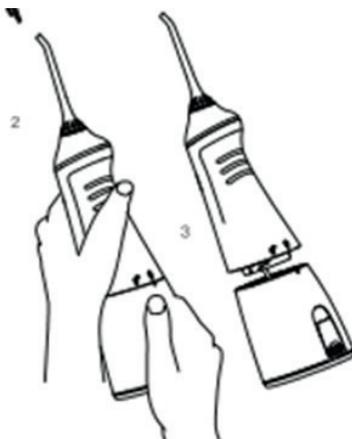

Советы по применению:

Рекомендуется использовать ирригатор 1 раз в день или через день, особенно в самом начале использования.

Слишком частое использование ирригатора может привести к истончению зубной эмали.

Во избежание появления налета на внутренней поверхности резервуара, рекомендуется тщательно промывать его после каждого использования, особенно после использования специальных средств для полоскания.

ВНИМАНИЕ!

Не используйте абразивные чистящие средства.

ЗАРЯДКА

Перед первым использованием зарядите устройство в течение 4-х часов. Такая зарядка необходима каждый раз если ирригатор не использовался длительное время.

Для увеличения срока службы аккумулятора не оставляйте его в разряженном состоянии на длительное время.

Если оставить прибор разряженным длительное время, то из-за саморазрядки он может разрядиться ниже минимального порога, и тем самым электрическая схема заблокирует аккумулятор.

В данном приборе используется литий-ионный аккумулятор (Li-ion), не подлежащий замене.

Нельзя пользоваться прибором во время его зарядки.

Для зарядки устройства вытащите силиконовую заглушку на корпусе прибора, вставьте в гнездо на корпусе разъем USB-кабеля, другой конец подключите к блоку питания, сам блок питания подключите к сети 220-240 В.

Также возможна зарядка прибора только от USB (пример: ноутбук, компьютер)

ЧИСТКА И УХОД

Протрите корпус прибора влажной, а затем сухой тряпкой.

Рекомендуется промывать насадки под струей воды с мылом.

ХРАНЕНИЕ

Чтобы не повредить шнур, не наматывайте его на корпус.

Храните прибор в сухом, прохладном месте, недоступном для детей.



Данный символ на изделии, упаковке и/или сопроводительной документации означает, что использованные электрические и электронные изделия и батарейки не должны выбрасываться вместе с обычными бытовыми отходами. Их следует сдавать в специализированные пункты приема.

Для получения дополнительной информации о существующих системах сбора отходов обратитесь к местным органам власти. Правильная утилизация поможет сберечь ценные ресурсы и предотвратить возможное негативное влияние на здоровье людей и состояние окружающей среды, которое может возникнуть в результате неправильного обращения с отходами.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Запрещены самостоятельный ремонт прибора и внесение изменений в его конструкцию!

| НЕИСПРАВНОСТЬ | ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ | УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ |
|--|---|--|
| Ирригатор не включается | Ирригатор полностью разряжен | Произведите зарядку согласно пункту «Зарядка» настоящей инструкции |
| Вода не поступает | Накопился налет в резервуаре или на внутренних поверхностях прибора | Очистите прибор в установленном порядке настоящей инструкции |
| Не снимается насадка | Не нажата кнопка на корпусе прибора для снятия насадки | Нажмите на кнопку на корпусе прибора для снятия насадки |
| Из резервуара льется вода | Крышка отверстия для залива воды пропускает воду | Крышка резервуара закрыта не до конца |
| При включении в электросеть прибор не заряжается | Поврежден шнур электропитания | Устраняется только специалистами ремонтных мастерских |
| | Неисправна розетка | Проверьте напряжение в розетке, включив в нее другой прибор |

ВНИМАНИЕ!

Дата производства указана на изделии и/или на упаковке.

Важно!

Во избежание образования известкового налета на стенках резервуара и на внутренних частях необходимо использовать кипяченную воду, или регулярно проводить чистку прибора.

Механические повреждения корпуса, аксессуаров и комплектующих частей не являются гарантийным случаем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность: 5 Вт

Класс защиты от поражения электрическим током:

Ирригатор: III

Блок питания: II

Аккумулятор: Li-ion 3,7 В 1400mAh

Блок питания:

Ввод: 110-240 В, ~50/60 Гц, 0,3 А

Вывод: 5 В, 1 А

Частота пульсации струи:

1400-1800 имп/мин

Давление воды: 2-7 бар

Емкость резервуара : 300 мл

Время зарядки: 4 ч

Работа от аккумулятора: 3 ч

Длина USB провода: 0,7 м

Вес нетто: 0,4 кг

Цвет: белый/зеленый

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Ирригатор – 1 шт.
- Сменные насадки – 2 шт.
- Резервуар для воды – 1 шт.
- USB шнур – 1 шт.
- Блок питания – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

Гарантийный талон



Наименование устройства

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Фирма-продавец

Адрес фирмы-продавца

Телефон фирмы-продавца

С условиями сервисного обслуживания ознакомлен и согласен.
Подтверждаю получение исправного изделия.
Претензий к внешнему виду не имею.

Печать

Подпись покупателя

Отрывной талон 1

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец:

Информация о покупателе:

Отрывной талон 2

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец:

Информация о покупателе:

Отрывной талон 3

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец:

Информация о покупателе:

Условия сервисного обслуживания

- 1 — Срок гарантии составляет 12 месяцев с даты продажи, указанной в гарантийном талоне.
- 2 — Гарантия включает в себя бесплатную диагностику, ремонт или замену неисправного устройства.
- 3 — Гарантия действует при условии использования прибора в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации.
- 4 — Гарантия не включает в себя установку, чистку, техническое обслуживание изделия, порядок которых изложен в инструкции по эксплуатации.
- 5 — Случаи, на которые гарантия не распространяется:
 - механические, тепловые и иные повреждения
 - несоблюдение условий транспортировки и эксплуатации
 - стихийные бедствия и иные причины, находящиеся вне контроля продавца и/или изготовителя
 - попадание внутрь прибора жидкости и/или иных посторонних предметов
 - ремонт, произведённый неуполномоченными лицами или организациями
 - нарушение правил пользования прибором, предусмотренных данным руководством по эксплуатации, а также на естественный износ изделия и расходные материалы (фильтры, аккумуляторные источники питания и т. д.).

Гарантийный талон действует только при наличии печати продающей организации.
Все поля гарантийного талона обязательны для заполнения.

Отрывной талон 3

Дата поступления

Дата выполнения

Характер ремонта

Сервисный центр:

Прибор принят, претензий не имею

Подпись

Отрывной талон 2

Дата поступления

Дата выполнения

Характер ремонта

Сервисный центр:

Прибор принят, претензий не имею

Подпись

Отрывной талон 1

Дата поступления

Дата выполнения

Характер ремонта

Сервисный центр:

Прибор принят, претензий не имею

Подпись



Изготовитель:
FlyCat Electrical Co., Ltd.
Bldg, 28, Rm.101-104 and Bld 30th, Rm. 101,301&401
Longwangmiao Industrial Park, Baishixia East
Community, Fuyong Town, Bao'an District, Shenzhen,
Guangdong, China

Флайкэт Электрикл Ко.,Лтд.
Блдг 28, Рм.101-104 энд блд 30, Рм. 101,301&401
Лонгвангмiao Индастриал Парк, Баишиксia Ист
Комюнити, Фуонг Таун, Баоан Дистрикт, Шэнжень,
Гуангдонг, Китай

Импортер и организация, уполномоченная на принятие
претензий от потребителей: ООО «Мерлион»
Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4

Расчетный срок службы изделия: 2 года
Гарантийный срок: 1 год

Изготовитель оставляет за собой право изменения
комплектации, технических характеристик и внешнего
вида товара.

Дата производства указана на упаковке и шильде
устройства.

Сделано в Китае

EAC

