



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение нашей электрической зубной щетки. Перед использованием внимательно прочтите это руководство и правильно используйте зубную щетку, чтобы в полной мере использовать все её возможности, что принесет Вам комфорт и здоровье.

Пожалуйста, сохраняйте руководство по эксплуатации. Если у Вас возникнут какие-либо проблемы во время использования, пожалуйста, обратитесь в службу поддержки клиентов.

Эта зубная щетка предназначена для гигиены полости рта детей от 2 до 12 лет.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- 1. Не мойте и не пользуйтесь зубной щеткой, когда она стоит на зарядке.
- 2. Не погружайте ручку зубной щетки в воду или другие жидкости на длительное время.
- 3. Перед зарядкой убедитесь, что USB-кабель полностью высох.
- 4. Регулярно проверяйте головку щетки на наличие трещин, деформаций. Заменяйте головку щетки каждые 3 месяца.
- 5. Зубная щетка подходит для детей старше двух лет. Дети должны использовать продукт под наблюдением взрослых.
- 6. Не позволяйте детям играть с этим изделием в качестве игрушки.
- 7. Если на зубной щетке (насадке, ручке) появились повреждения, трещины или деформации, прекратите ее использование.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение нашей электрической зубной щетки. Перед использованием внимательно прочтите это руководство и правильно используйте зубную щетку, чтобы в полной мере использовать все её возможности, что принесет Вам комфорт и здоровье.

Пожалуйста, сохраняйте руководство по эксплуатации. Если у Вас возникнут какие-либо проблемы во время использования, пожалуйста, обратитесь в службу поддержки клиентов.

Эта зубная щетка предназначена для гигиены полости рта детей от 2 до 12 лет.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- 1. Не мойте и не пользуйтесь зубной щеткой, когда она стоит на зарядке.
- 2. Не погружайте ручку зубной щетки в воду или другие жидкости на длительное время.
- 3. Перед зарядкой убедитесь, что USB-кабель полностью высох.
- 4. Регулярно проверяйте головку щетки на наличие трещин, деформаций. Заменяйте головку щетки каждые 3 месяца.
- 5. Зубная щетка подходит для детей старше двух лет. Дети должны использовать продукт под наблюдением взрослых.
- 6. Не позволяйте детям играть с этим изделием в качестве игрушки.
- 7. Если на зубной щетке (насадке, ручке) появились повреждения, трещины или деформации, прекратите ее использование.

очистите головку щетки чистой водой и вымойте ручку водой с мылом, чтобы предотвратить растрескивание ручки после каждого использования. Каждые две недели промывайте соединительный вал теплой водой, чтобы он оставался чистым и хорошо работал. Не обязательно обратиться в службу послепродажного обслуживания.

10. Вне зависимости от степени участия взрослых в процессе чистки зубов ребенка, данная процедура должна всегда проводиться под контролем взрослых.

ВНИМАНИЕ

Проконсультируйтесь с детским стоматологом перед использованием зубной щетки, если за последние 2 месяца у ребенка были операции на полости рта. Проконсультируйтесь с врачом, если у ребенка кровоточат десны после использования щетки или кровотечение продолжается после 1 недели использования. Если у Вас есть какие-либо сомнения по поводу медицинского обслуживания, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем использовать электрическую зубную щетку. Электрическая зубная щетка соответствует стандартам безопасности для электромагнитного оборудования. Если в организме ребенка установлен кардиостимулятор или любое другое имплантированное устройство, проконсультируйтесь с врачом перед использованием. Этот продукт предназначен только для чистки зубов, десен и языка. Не давайте пользоваться ребенку им для других целей и не пользуйтесь сами щеткой для других целей. Если ребенок почувствует какой-либо дискомфорт или боль, необходимо прекратить использование и обратиться за помощью к врачу. Зубная паста часто содержит перекись водорода, пищевую соду или другой бикарбонат, используемый в отбеливающих зубных пастах,

очистите головку щетки чистой водой и вымойте ручку водой с мылом, чтобы предотвратить растрескивание ручки после каждого использования. Каждые две недели промывайте соединительный вал теплой водой, чтобы он оставался чистым и хорошо работал. Не обязательно обратиться в службу послепродажного обслуживания.

10. Вне зависимости от степени участия взрослых в процессе чистки зубов ребенка, данная процедура должна всегда проводиться под контролем взрослых.

Проконсультируйтесь с детским стоматологом перед использованием зубной щетки, если за последние 2 месяца у ребенка были операции на полости рта. Проконсультируйтесь с врачом, если у ребенка кровоточат десны после использования щетки или кровотечение продолжается после 1 недели использования. Если у Вас есть какие-либо сомнения по поводу медицинского обслуживания, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем использовать электрическую зубную щетку. Электрическая зубная щетка соответствует стандартам безопасности для электромагнитного оборудования. Если в организме ребенка установлен кардиостимулятор или любое другое имплантированное устройство, проконсультируйтесь с врачом перед использованием. Этот продукт предназначен только для чистки зубов, десен и языка. Не давайте пользоваться ребенку им для других целей и не пользуйтесь сами щеткой для других целей. Если ребенок почувствует какой-либо дискомфорт или боль, необходимо прекратить использование и обратиться за помощью к врачу. Зубная паста часто содержит перекись водорода, пищевую соду или другой бикарбонат, используемый в отбеливающих зубных пастах,

очистите головку щетки чистой водой и вымойте ручку водой с мылом, чтобы предотвратить растрескивание ручки после каждого использования. Каждые две недели промывайте соединительный вал теплой водой, чтобы он оставался чистым и хорошо работал. Не обязательно обратиться в службу послепродажного обслуживания.

издают запах гари. Во время использования или зарядки устройством или USB-кабель издаёт ненормальный звук.

! Строго следите за тем, чтобы рабочее напряжение соответствовало его рабочему диапазону напряжений, в противном случае это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

! Регулярно очищайте вилку сетевого шнура, чтобы предотвратить скопление пыли; в противном случае это может привести к повреждению изоляции и возгоранию. Выньте вилку из розетки, а затем протрите сухой тканью.

! Данное изделие не должно использоваться лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не имеющими достаточного опыта и знаний (включая детей).

! Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с прибором, что может привести к опасностям и привести к несчастному случаю или травме.

! Не используйте зарядный кабель, отличный от оригинального зарядного кабеля. Кроме того, не используйте поврежденный зарядный кабель для зарядки других устройств; в противном случае это может привести к ожогам или возгоранию из-за короткого замыкания.


! Если прибор не будет использоваться в течение длительного периода времени, выньте вилку из розетки. Несоблюдение этого требования может привести к утечке электроэнергии из-за ухудшения характеристик изоляции, что может привести к поражению электрическим током или возгоранию.

! Лица, страдающие тяжелыми заболеваниями зубов, имевшие заболевания зубов в анамнезе или подозревающие заболевания полости рта,

должны проконсультироваться с врачом перед использованием; в противном случае это может привести к повреждению зубов или десен.

! Не используйте эту зубную щетку с зубной пастой, содержащей большое количество абразивных агентов. Людям с низкой чувствительностью полости рта не следует пользоваться этой зубной щеткой. Не прижимайте щетку сильно к зубам или деснам и не касайтесь их другими частями щетки, кроме щетины. Не чистите одну область в течение продолжительного времени. В противном случае это может привести к повреждению зубов и десен.

! Зубная щётка является предметом личной гигиены и должна использоваться индивидуально. Не делитесь своей насадкой для щётки с членами своей семьи или другими людьми.

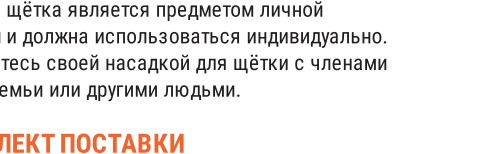

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


- Сменные насадки
- Ручка щетки
- Зарядный кабель

указывая, что осталось менее 10% заряда, в этом случае вам необходимо зарядить устройство перед использованием.

• При подключении к зарядке устройства красная лампочка батарейки сначала периодически мигает, потом, при достижении полной зарядки, изображение батарейки светится полностью - это означает, что зарядка завершена.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Аккуратно надавите насадкой щетки на стержень до упора и зафиксируйте его в соответствии с картинкой.

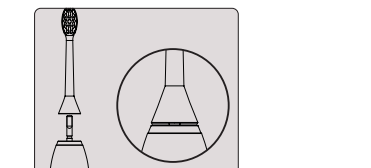


2. Нанесите небольшое количество зубной пасты на головку щетки и смочите щетину.




3. Включите щетку, нажимая на кнопку переключателя и выберите нужный Вам режим.


4. Осторожно и медленно перемещайте головку щетки щетиной под углом 45° к линии десен.

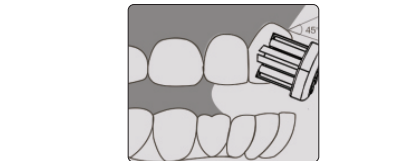

5. Аккуратно взявшись за ручку, двигайте зубную щетку по кругу. Не нажимайте слишком сильно и не трите.

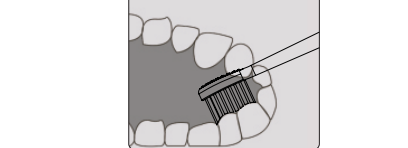

6. После завершения цикла чистки зубов прополощите рот, а также головку щетки.

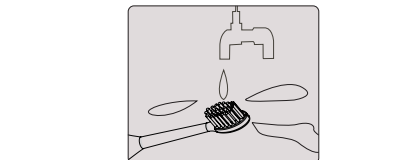

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Электрическая зубная щетка обеспечивает следующие режимы чистки:

- Режим «Ежедневный» 18000 колебаний в минуту. Хорошо подходит для ежедневной чистки зубов детей старше 5 лет.
- Режим «Пульсирующий» 15000-18000 колебаний в минуту. Рекомендуется для интенсивной чистки зубов от налёта и пятен, меняющиеся сильные и слабые вибрации каждые 0,5 секунды.

- Режим «Бережный» 5500-5800 колебаний в минуту. Рекомендуется для деликатной чистки зубов и десен, детям с 2 лет.
- Режим "Отбеливающий" 13000-17000 колебаний в минуту. Интенсивный вариативный режим, меняющиеся сильные и слабые вибрации каждые 0,5 секунды. Рекомендуется для тщательной чистки зубов детям старше 5 лет.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСАДКИ ЩЕТКИ

Согласно исследованиям, насадки щеток являются расходными материалами, и длительное использование одной и той же щетки приведет к увеличению количества микроорганизмов и бактерий между щетинками, которые вредны для полости рта.

Правильный метод чистки зубов имеет жизненно важное значение. Если слишком сильно нажимать на щетку во время чистки, щетина может повернуться вниз. Если слабо нажимать на щетку во время чистки, зубные щетки остаются совершенно новыми после использования в течение трех месяцев.

Все это связано с неправильным использованием зубных щеток, правильная прижимная сила чистки должна составлять около 100 грамм.

Уход за головками щеток: нажатие на поверхность зубных щеток приводит к тому, что нижняя часть зубной щетки подвергается воздействию зубов и склонна к раздвоению. Щетина будет восстановлена при промывании горячей водой.

Нити для зубных щеток, которые мы используем, имеют мягкую щетину, устойчивую к раздвоению и выпадению щетины.

ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТРОЙСТВА

Насадка щетки

Ополаскивайте головку щетки и щетину после каждого использования, дайте им высохнуть естественным путем. По мнению стоматологов, необходимо заменять насадки щетки каждые

- Режим «Бережный» 5500-5800 колебаний в минуту. Рекомендуется для деликатной чистки зубов и десен, детям с 2 лет.
- Режим "Отбеливающий" 13000-17000 колебаний в минуту. Интенсивный вариативный режим, меняющиеся сильные и слабые вибрации каждые 0,5 секунды. Рекомендуется для тщательной чистки зубов детям старше 5 лет.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСАДКИ ЩЕТКИ

Согласно исследованиям, насадки щеток являются расходными материалами, и длительное использование одной и той же щетки приведет к увеличению количества микроорганизмов и бактерий между щетинками, которые вредны для полости рта.

Правильный метод чистки зубов имеет жизненно важное значение. Если слишком сильно нажимать на щетку во время чистки, щетина может повернуться вниз. Если слабо нажимать на щетку во время чистки, зубные щетки остаются совершенно новыми после использования в течение трех месяцев.

Все это связано с неправильным использованием зубных щеток, правильная прижимная сила чистки должна составлять около 100 грамм.

Уход за головками щеток: нажатие на поверхность зубных щеток приводит к тому, что нижняя часть зубной щетки подвергается воздействию зубов и склонна к раздвоению. Щетина будет восстановлена при промывании горячей водой.

Нити для зубных щеток, которые мы используем, имеют мягкую щетину, устойчивую к раздвоению и выпадению щетины.

ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТРОЙСТВА

Насадка щетки

Ополаскивайте головку щетки и щетину после каждого использования, дайте им высохнуть естественным путем. По мнению стоматологов, необходимо заменять насадки щетки каждые

- Режим «Бережный» 5500-5800 колебаний в минуту. Рекомендуется для деликатной чистки зубов и десен, детям с 2 лет.
- Режим "Отбеливающий" 13000-17000 колебаний в минуту. Интенсивный вариативный режим, меняющиеся сильные и слабые вибрации каждые 0,5 секунды. Рекомендуется для тщательной чистки зубов детям старше 5 лет.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСАДКИ ЩЕТКИ

Согласно исследованиям, насадки щеток являются расходными материалами, и длительное использование одной и той же щетки приведет к увеличению количества микроорганизмов и бактерий между щетинками, которые вредны для полости рта.

Правильный метод чистки зубов имеет жизненно важное значение. Если слишком сильно нажимать на щетку во время чистки, щетина может повернуться вниз. Если слабо нажимать на щетку во время чистки, зубные щетки остаются совершенно новыми после использования в течение трех месяцев.

Все это связано с неправильным использованием зубных щеток, правильная прижимная сила чистки должна составлять около 100 грамм.

Уход за головками щеток: нажатие на поверхность зубных щеток приводит к тому, что нижняя часть зубной щетки подвергается воздействию зубов и склонна к раздвоению. Щетина будет восстановлена при промывании горячей водой.

Нити для зубных щеток, которые мы используем, имеют мягкую щетину, устойчивую к раздвоению и выпадению щетины.

ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТРОЙСТВА

Насадка щетки

Ополаскивайте головку щетки и щетину после каждого использования, дайте им высохнуть естественным путем. По мнению стоматологов, необходимо заменять насадки щетки каждые

по тексту-Изготовитель), выражает вам огромную признательность за ваш выбор. Мы сделали всё возможное, чтобы данное изделие удовлетворяло вашим запросам, а качество соответствовало лучшим мировым образцам.

Изготовитель устанавливает гарантийный срок: 12 месяцев. Гарантийный срок отсчитывается от даты продажи изделия, если кратким руководством пользователя не установлено иное ограничение. Изготовитель устанавливает срок службы устройства: 2 года. Срок службы отсчитывается от даты изготовления изделия, если кратким руководством пользователя не установлено иное ограничение.

Под Гарантийными обязательствами понимается дополнительное обязательство Изготовителя по устранению недостатков (дефектов) изделия, возникших по вине Изготовителя, без взимания платы с покупателя (потребителя).

3. Замена изделия в период гарантийного срока не ведёт к установлению нового гарантийного срока.

4. Изготовитель не несёт гарантийных обязательств в следующих случаях:

- а. Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению;
- б. В случае нарушения правил и условий эксплуатации изделия, изложенных в кратком руководстве и другой документации, передаваемой потребителю;
- в. Если изделие имеет следы попыток ремонта;
- г. Если дефект вызван изменением конструкции и схем изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем.
- д. Если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастными случаями, умыслами или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц;
- е. Если обнаружены повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.
- ж. На расходные материалы, например аккумуляторы или защитные покрытия, склонные к износу, кроме тех случаев, когда причинами неисправности являются дефекты материалов или качества изготовления;
- з. косметические повреждения, включая потемнение пластика, вмятины и сломанные пластиковые детали портов;
- и. повреждения, вызванные использованием с другими изделиями.

5. Mobile Trade LLC (ООО "Мобайл Трейд") снимает с себя

законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством стран импортеров.

Условия гарантийных обязательств:

- 1. Гарантийные обязательства Изготовителя распространяются только на модели изделий, предназначенные Mobile Trade LLC (ООО "Мобайл Трейд") для поставок и реализации на территории Российской Федерации и стран Таможенного союза ЕАЭС, приобретенные в Российской Федерации и странах Таможенного союза ЕАЭС, и прошедшие сертификацию на соответствие стандартам страны.
- 2. Под Гарантийными обязательствами понимается дополнительное обязательство Изготовителя по устранению недостатков (дефектов) изделия, возникших по вине Изготовителя, без взимания платы с покупателя (потребителя).
- 3. Замена изделия в период гарантийного срока не ведёт к установлению нового гарантийного срока.
- 4. Изготовитель не несёт гарантийных обязательств в следующих случаях:

5. Mobile Trade LLC (ООО "Мобайл Трейд") снимает с себя

ответственности за возможные вред, прямо или косвенно нанесённый продукцией GEOZON людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц, утраты данных и информации.

Изготовитель: SAN HE MING CO., LIMITED. (CAN HE MING CO., Лимитед)
Адрес: 11/F. AXA Centre, 151 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong, PRC. (11/Ф. AXA Центр, 151 Глоучестер, Ванчай, Гонконг, КНР)

Импортер: ООО «Трейд-Импорт»
Адрес: 108831, Россия, город Москва, город Щербинка, Остафьевское шоссе, дом 2, офис 405

Уполномоченная изготовителем организация: ООО «МОБАЙЛ ТРЕЙД» Адрес: 125367, г. Москва, Полесский пр-д, д.16, оф.201, пом.1.

Контакты техподдержки: 88002228048, support@geozon.ru.

geozon.ru

Произведено в КНР.

Гарантийный талон

МОДЕЛЬ: _____

ДАТА И МЕСТО ПРИОБРЕТЕНИЯ: _____

ВНИМАНИЕ! ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН БЕЗ ПЕЧАТИ ПРОДАВЦА.

ШТАМП МАГАЗИНА/ПРОДАВЦА: _____

© 2022 Geozon™. Все права защищены. Все торговые марки являются торговой собственностью их владельцев. Любые характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Изготовитель: SAN HE MING CO., LIMITED. (CAN HE MING CO., Лимитед)
Адрес: 108831, Россия, город Москва, город Щербинка, Остафьевское шоссе, дом 2, офис 405

Импортер: ООО «Трейд-Импорт»
Адрес: 108831, Россия, город Москва, город Щербинка, Остафьевское шоссе, дом 2, офис 405

Уполномоченная изготовителем организация: ООО «МОБАЙЛ ТРЕЙД» Адрес: 125367, г. Москва, Полесский пр-д, д.16, оф.201, пом.1.

Контакты техподдержки: 88002228048, support@geozon.ru.

geozon.ru

Произведено в КНР.

Гарантийный талон

МОДЕЛЬ: _____

ДАТА И МЕСТО ПРИОБРЕТЕНИЯ: _____

ВНИМАНИЕ! ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН БЕЗ ПЕЧАТИ ПРОДАВЦА.

ШТАМП МАГАЗИНА/ПРОДАВЦА: _____