




User Manual

usmile Sonic Electric Toothbrush Y1S

Model Y1S

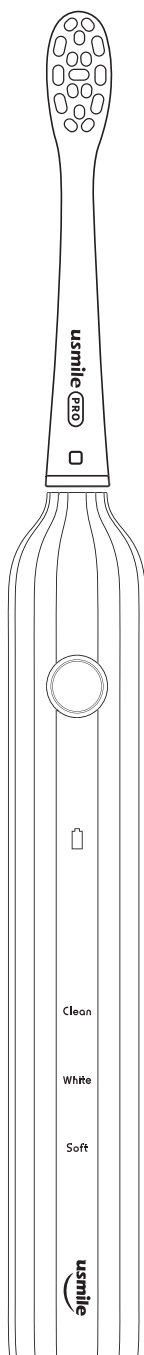

CE

FC

IPX7

**UK
CA**



EAC

EC

REP

THEMIS AR Unterstützung UG
Beedstrasse 54, In Dusseldorf, (40468),
Deutschland
E-mail: legal@themisar.com
Tel: +49-21173714852


UK

REP

THEMIS AR support ltd
85 Great Portland St, London,
United Kingdom, W1W 7LT
E-mail: legal@themisar.com
Tel: +44-02037332302

Описание зубной щетки

1. После установки насадки между ней и ручкой остается зазор в 0,5–1 мм для обеспечения нормальной вибрации.
2. Включение. Короткое нажатие кнопки Вкл/Режим включит зубную щетку.
3. Смена режима. В течение не более 4 секунд после включения снова нажмите кнопку для смены режима.
4. Пауза. Если щетка отработала 4 секунды, нажмите кнопку в любом режиме, чтобы поставить ее на паузу. Автоматическое отключение произойдет после 20 секунд паузы.
5. Выключение. В течение 4 секунд с начала работы щетки нажмите кнопку трижды (переключение через все режимы), затем нажмите кнопку еще раз.

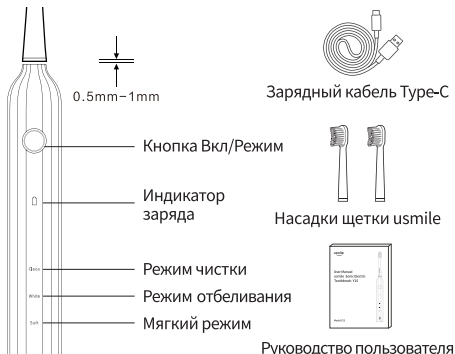

Меры безопасности

Во избежание риска повреждений, ударов током, травм, пожара и порчи имущества, пожалуйста, соблюдайте следующие меры безопасности:

1. Прибором могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, только если они находятся под наблюдением или проинструктированы относительно безопасного использования прибора и понимают связанные с этим опасности. Прибор не является игрушкой. Чистка и техническое обслуживание не должны производиться детьми без присмотра.
2. Данное изделие работает только от безопасного сверхнизкого напряжения, указанного на маркировке изделия.
3. Не подвергайте прибор или батарею воздействию чрезмерных температур. Помните о риске короткого замыкания контактов прибора при работе от батарей или самих батарей от металлических предметов.
4. Устройство содержит батареи, заменять которые должны только лица с опытом такой замены.
5. В инструкциях для приборов класса III указано, что они должны работать только от безопасного сверхнизкого напряжения.
6. Не разбирайте устройство, кроме как для утилизации. Отсоедините его от источника питания перед извлечением батареи. Разрядите батарею перед разборкой. Для разборки пластикового корпуса используйте соответствующие инструменты, чтобы избежать повреждения батареи или короткого замыкания. После извлечения перережьте провода батареи и вставьте батарею в соответствующий приемник для безопасной переработки.
7. Изделие содержит встроенную аккумуляторную батарею. Не кладите ее в огонь, на солнечный свет, не подвергайте воздействию высоких температур и не заряжайте во влажном помещении. Это может привести к утечке батареи, перегреву и/или взрыву. По завершении зарядки отсоедините кабель для зарядки и отключите питание.
8. Не модифицируйте, не ремонтируйте и не разбирайте изделие самостоятельно. Не используйте устройство во время купания, в душе или в сауне. Во время зарядки следите за тем, чтобы зарядный кабель и разъем зарядки устройства оставались сухими и чистыми. Не пытайтесь удалять пятна или загрязнения, так как процесс зарядки может стать небезопасным.
9. В случае тяжелого периодонтита, прохождения стоматологического лечения или в случае дискомфорта в полости рта перед использованием изделия проконсультируйтесь со своим стоматологом. Лица, проходящие ортодонтическое лечение, лечение зубов или имеющие зубные импланты, должны обратиться к стоматологу.
10. В начале использования изделия десны могут немного кровоточить, пока не привыкнут к процессу чистки. Это пройдет в течение одной-двух недель. Если кровотечение сохраняется более двух недель, это может указывать на заболевание десен. В этом случае прекратите пользоваться изделием и проконсультируйтесь со своим стоматологом.
11. Перед использованием изделия проверьте его на наличие повреждений. Если прибор имеет повреждения, трещины, жавчину, немедленно прекратите его использование. Если вилка или шнур питания повреждены, замените их перед использованием прибора.
12. Прибор предназначен для чистки полости рта. Не используйте его для каких-либо других целей. Если при использовании прибором вы чувствуете дискомфорт или боль, прекратите использование и немедленно обратитесь к своему стоматологу.
13. Изделие соответствует требованиям стандартам безопасности электромагнитных устройств. По любым вопросам, связанным с кардиостимуляторами или другими имплантируемыми устройствами, перед использованием прибора проконсультируйтесь со своим врачом или производителем устройства.
14. Храните изделие в недоступном для детей месте. Изделие содержит мелкие детали, например, крышку головки щетки, которые не следует проглатывать. При использовании нового изделия или при замене головки щетки снимите крышку с головки.
15. В любых условиях работы используйте источник питания мощностью не более 15 Вт.

Электромагнитные поля (ЭМП)

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ


Это устройство соответствует всем стандартам, связанным с электромагнитными полями. Его использование безопасно при соблюдении инструкций, приведенных в данном руководстве. Если у вас кардиостимулятор или какое-либо иное имплантированное

устройство, проконсультируйтесь со своим врачом или производителем такого устройства.

Чистка зубов



Чистите зубы должным образом. Рекомендуется держать щетину щетки под углом в 45° к поверхности зуба. Таким образом достигается наиболее эффективная очистка.

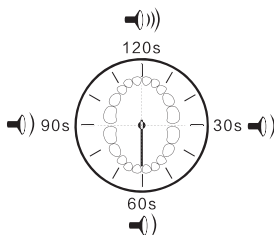

Советуем мысленно разбить ротовую полость на четыре зоны и чистить каждую из них в течение 30 секунд.

Режимы работы


Режим чистки: зубная щетка чистит зубы со средним усилием в течение 4 минут, при этом щетка вибрирует каждые 30 секунд, напоминая сменить зоны ротовой полости. После двух минут чистки щетка произведет три вибрации подряд — это сигнал окончания чистки; если не поставить щетку на паузу, то чистка продолжится еще в течение двух минут, после чего щетка выключится автоматически.

Режим отбеливания: зубная щетка чистит зубы с большим усилием в течение 4 минут, при этом щетка вибрирует каждые 30 секунд, напоминая сменить зоны ротовой полости. После двух минут чистки щетка произведет три вибрации подряд — это сигнал окончания чистки; если не поставить щетку на паузу, то чистка продолжится еще в течение двух минут, после чего щетка выключится автоматически.

Мягкий режим: зубная щетка чистит зубы с меньшим усилием в течение 4 минут, при этом щетка вибрирует каждые 30 секунд, напоминая сменить зоны ротовой полости. После двух минут чистки щетка произведет три вибрации подряд — это сигнал окончания чистки; если не поставить щетку на паузу, то чистка продолжится еще в течение двух минут, после чего щетка выключится автоматически.


Зарядка

1. Зубная щетка заряжается при выпуске с завода и готова к работе.
2. Если световой индикатор мигает красным, зарядите щетку. На полную зарядку аккумулятора уходит 4-5 часов.
3. Заряжайте щетку адаптером питания USB, который соответствует применимым стандартам. Заряжайте щетку в сухом месте.
4. Старайтесь заряжать щетку до того, как закончится заряд аккумулятора.

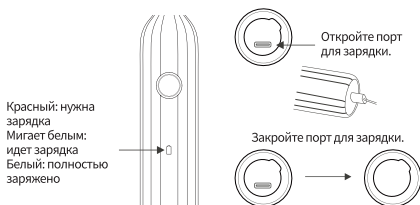

Хранение и чистка щетки

Заключив чистку зубов, нажмите кнопку Вкл/Режим, чтобы выключить щетку. Сполосните головку и ручку щетки чистой водой. Протерев щетку полотенцем, поставьте ее вертикально на сухую поверхность или в стакан так, чтобы она не упала впоследствии.

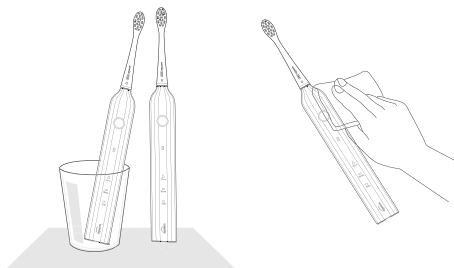

Защита окружающей среды

Все продукты с такой маркировкой считаются отработанным электрическим и электронным оборудованием (waste electrical and electronic equipment, WEEE согласно директиве 2012/19/EU), которое нельзя смешивать с несортированными коммунально-бытовыми отходами.

Для защиты здоровья людей и окружающей среды такое отработанное оборудование следует сдавать в специальное место сбора для переработки электрического и электронного оборудования, назначенное государством или местными властями. Правильная утилизация и переработка устройства предотвратит потенциальные негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

Пожалуйста, обратитесь к местным властям или соответствующим организациям, чтобы получить сведения о расположении такой точки сбора, а также условиях и правилах приема отработанного оборудования.

Внимание! Вытаскивайте аккумулятор только когда собираетесь сдать устройство. Перед тем как извлечь аккумулятор, убедись, что он полностью разряжен.

Сведения о продукте

Наименование: Электрическая зубная щетка

Торговая марка: usmile

Модель: Y1S

Потребляемая мощность: 5V $\overline{\text{---}}$ 1A

Номинальная входная мощность: 5W

Уровень влагостойкости: IPX7

Спецификации батареи: литиевая батарея 3.7V 2500mAh

Изготовитель: Guangzhou Stars Pulse Co., Ltd.

Сделано в Китае

Контактное лицо службы поддержки клиентов: service@usmile.com

Сделано в Китае

Сбои и способы их устранения

Сбои	Возможные причины	Решения
Щетка не включается при нажатии кнопки Вкл/Режим	Устройство находится в режиме защиты во время зарядки.	Прекратите зарядку.
	Низкий заряд батареи.	Подключите кабель зарядки, чтобы зарядить устройство.
Не удается вставить насадку в ось привода	В разъем посторонние объекты.	Используйте инструмент, чтобы извлечь посторонние объекты из разъема.
	Ось привода блокирует посторонний объект.	Очистите ось привода
Насадка слабо вибрирует	Насадка щетки не является продуктом usmile.	Замените ее на совместимую насадку usmile.
	Насадка не закреплена на месте. Между насадкой и держателем насадки есть посторонний объект.	Вытащите насадку, чтобы извлечь посторонние объекты.
Во время зарядки не горит индикатор батареи.	Электропитание не поступает.	Подключите кабель питания правильным образом.
После зарядки устройство работает непродолжительное время.	Низкая температура окружающей среды.	Заряжайте и используйте устройство в помещении с температурой от 15° и до 35°.
	Очень короткое время зарядки.	Зарядите устройство.
Устройство не включается.	Низкий заряд батареи.	Зарядите устройство.

Изготовитель, адрес изготовителя

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:Guangzhou Stars Pulse Co., Ltd.

Место нахождения:Room 2001,2002,2003,2004,2005,

No. 239 Tianhe North Road, Tianhe District, Guangzhou City, Guangdong Province, China

Соответствует

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»



Информация об импортере указана на внешней части упаковки.

Правила и условия хранения

Срок службы 3 года

Условия хранения:

Температура: от -20°C до +60°C

Относительная влажность: от 10% до 90%, без конденсации.

Правила и условия транспортировки

Транспортировка устройства допускается только в заводской упаковке, любым видом транспорта, без каких-либо ограничений по расстоянию.

Правила и условия реализации

• Без ограничений

Правила и условия утилизации

• По окончании срока службы оборудования, пожалуйста, свяжитесь с авторизованным сервисным центром [ustmile](#), чтобы получить информацию о его утилизации.

Дата производства изделия

Код даты производства напечатан на дне продукта и состоит из 5 символов.

•Первый символ — буква, обозначающая год (начиная с 2016 г. в возрастающем алфавитном порядке).

Например: А обозначает 2016 г., В обозначает 2017 г., С обозначает 2018 г. и так далее.

• Второй и третий символы — цифры, обозначающие месяц. Второй символ указывает десятки, третий — единицы. Из получившегося двузначного числа вычитите 12, например: 15–12=3 обозначает март.

• Четвертый и пятый символы — цифры, обозначающие день месяца. Правила расчета те же, что и при расчете месяца, например: 26–12=14, то есть 14-е число.