



print info

Print area: 280*110 mm
Fold size: 70*110 mm
Paper: 128 g / uncoated paper

front cover

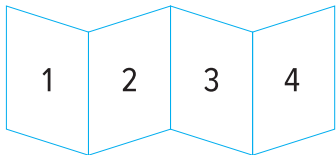

back cover

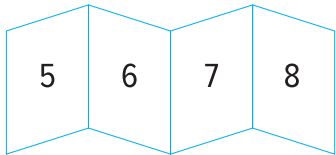

Ирригатор
для полости рта

Hi WF-002

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку изделия Hi.
Перед эксплуатацией устройства прочтите
это руководство и сохраните его для
использования в дальнейшем.

Внимание! Прежде чем использовать данное устройство, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника. Правильное использование устройства значительно продлит срок его службы.


Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации устройства. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Не погружайте устройство в воду и другие жидкости
2. Не используйте устройство в случае обнаружения каких-либо повреждений.
3. Устройство не предназначено для промышленного применения.
4. Не пользуйтесь устройством вне помещений.
5. Не оставляйте включенный устройство без присмотра.
6. Никогда не оставляйте включенный в сеть устройство без присмотра даже на короткий срок.
7. Не позволяйте детям контактировать с устройством даже если оно выключен от сети.
8. Всегда отключайте устройство от электросети перед очисткой или если вы его не используете.
9. Перед подключением устройства убедитесь, что кнопка выключателя находится в положении «ВЫКЛ».
10. Не используйте принадлежности, не входящие в комплект данного устройства.
11. Не оставляйте включенное устройство без внимания.
12. Используйте только насадки, поставляемые в комплекте с фен-щёткой.
13. При использовании устройства в ванной комнате следует отключать его от сети после использования, так как близость воды представляет опасность, даже когда устройство выключено.
14. Если устройство некоторое время находилось при температуре ниже 0°C, перед включением его следует выдержать в комнатных условиях не менее 2 часов.
15. Устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями, или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании устройства лицом, ответственным за их безопасность.
16. Не помещайте посторонние предметы внутрь устройства
17. Регулярно проводите чистку устройства.
18. Избегайте соприкосновения сетевого кабеля устройства с горячими поверхностями и острыми предметами.
19. В случае если недавно была перенесена периодонтальная или стоматологическая операция, а также при прохождении курса лечения ротовой полости, не рекомендуется использование устройства без предварительной консультации с врачом.
20. Если во время использования вы заметили кровоточивость десен необходимо прекратить использование устройства до консультации с врачом.
21. Используйте устройство необходимо только по назначению и в соответствии с рекомендациями, изложенными в данной инструкции.
22. Строго соблюдайте все рекомендации по сборке устройства. Во избежание поражения электрическим током, не разбирайте устройство самостоятельно.
23. Не включайте устройство в случае если резервуар для воды пуст.
24. Обязательно выливайте всю оставшуюся воду после использования устройства.
25. Температура воды должна быть не выше 45°C.
26. Не допускайте падение ирригатора и не подвергайте его ударам.
27. Не направляйте воду под язык, в ухо, нос, глаз.
28. Давление воды может вызвать серьезные повреждения в этих областях, а также не рекомендуется использовать устройство при наличии ран, стоматитов на языке.
29. Не используйте устройство, если вы носите какие-либо предметы или украшения на губах или зубах. Удалите их до использования устройства.
30. Не переносите и не тяните устройство за шнур питания.

ОПИСАНИЕ

1. Кнопка «Вкл./Выкл.»
2. Кнопка выбора режима работы
3. Индикатор режима Normal
4. Индикатор режима Soft
5. Индикатор режима Pulse
6. Разъем зарядки
7. Отверстие подачи воздуха
8. Резервуар для воды
9. Отверстие для воды
10. Насадка

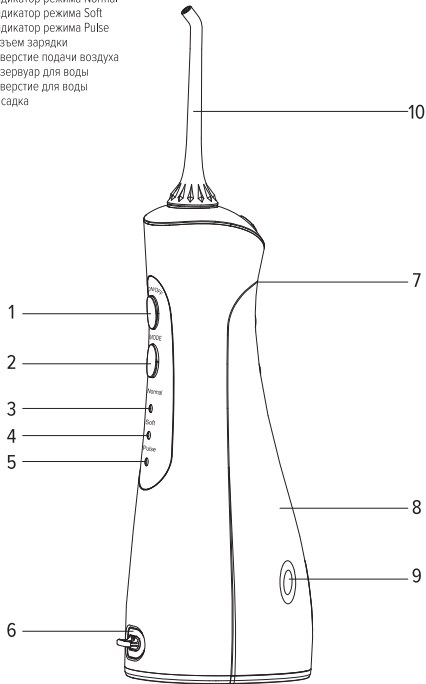

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность: 5 Вт
Батарея: 1400 mAh / 3.7 В Li-Ion
Питание: 5В / 1А
Время полной зарядки: 4 часа
Уровень давления воды: от 210 до 700 кПа
Частота пульсации: 1200 – 1800 имп/мин
Емкость резервуара: 150 мл

Влагозащита корпуса: IPX7
Комплектация:
Устройство – 1 шт.
Насадка – 2 шт.
USB-кабель – 1 шт.
Руководство для пользователя – 1 шт.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе постоянного совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА


Убедитесь, что во время зарядки устройство выключено. Не заряжайте устройство на улице, где на него могут воздействовать прямые солнечные лучи или в очень горячем помещении.

1. Вставьте один конец USB кабеля в разъем в нижней части устройства, а другой конец к адаптеру питания или USB разъему компьютера (в комплект не входит).
2. Вставьте вилку в розетку.
3. Убедитесь, что индикатор зарядки включился.
4. По окончании полной зарядки устройства, выньте вилку шнура питания из розетки и отсоедините зарядный шнур от устройства.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Перед первым использованием, необходимо заполнить резервуар для воды. Для заливки воды, аккуратно откройте крышку резервуара, которая находится на задней стороне резервуара, залейте воду, закройте крышку. Рекомендуется использовать воду температурой не выше 45 °C.

Внимание! Перед первым использованием промойте резервуар под струей воды, слейте резервуар воды на холостом ходу.

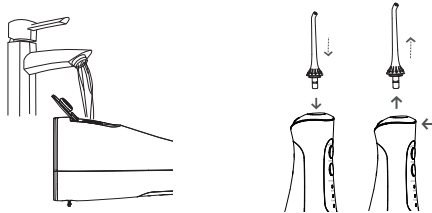

Внимание! Не допускается добавление химических компонентов, соды, зубной пасты и прочих жидкостей кроме воды или специальных растворов для полоскания

Внимание! Перед первым использованием промойте резервуар под струей воды, слейте оставшуюся воду.

Возьмите насадку, убедитесь в её исправности и установите в соответствии с рисунком. Опустите насадку в гнездо до характерного щелчка. Снятие насадки производится движением вверх только после разблокировки кнопкой фиксатора!

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Устройство может работать в трех режимах различного уровня давления жидкости:

1. Normal (нормальный)
2. Soft (мягкий)
3. Pulse (массаж)

Выбор режима осуществляется при помощи кнопки (2), что подтверждается включением соответствующего индикатора на ручке устройства.


Внимание! В начале применения устройства рекомендуется использовать режим SOFT.

Это поможет адаптироваться к устройству и избежать риска кровоточивости десен.

Поместите насадку в полость рта и включите устройство, нажав кнопку (1).

Далее выберите необходимый режим давления воды и начните процедуру ирригации.


Внимание! Если вода не пошла сразу, причиной может быть воздушная пробка. Для её удаления при работающем устройстве втяните в себя воздух из насадки. Начинайте ирригацию двигаясь от жевательных зубов к передним.

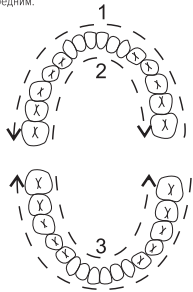

После процедуры ирригации выключите устройство, нажав кнопку (1) повторно, слейте остатки жидкости.

Советы по применению

Направление струи воды должно быть под углом 90° к поверхности зуба. Чтобы вода не разбрызгивалась, неплотно сомкните губы. Во время ирригации вода естественным образом должна вытекать из полости рта в раковину. Двигайте кончик насадки вдоль линии десны, задерживая его между зубами.

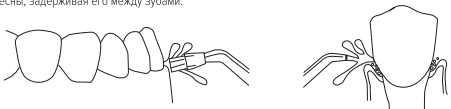

Продолжайте процесс до тех пор, пока не очистите зубы изнутри и снаружи, а также все межзубные промежутки.

ЧИСТКА УСТРОЙСТВА

Перед чистой выключайте устройство. Чистите внешнюю часть корпуса щеткой или слегка влажной куском ткани. Не используйте для чистки абразивы и другие предметы, которые могут нанести механические повреждения. Рекомендуется мыть насадки под струей воды с мылом. Не допускается мыть прибор в воде или лить на него воду.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство не требует какого-либо монтажа или дополнительной фиксации. Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом помещении, без воздействия прямых солнечных лучей. Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д. Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ. По окончании срока службы изделия не выбрасывайте его вместе с остальными бытовыми отходами. Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Утилизация изделий позволяет предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. За более подробной информацией по сбору и утилизации отслужившего электрического и электронного оборудования, осуществляемым бесплатно и по вашему месту жительства, обратитесь в соответствующее управление вашего муниципального органа власти.



Назначение товара: стационарный ирригатор для полости рта.
Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
Используется уходом за полостью рта в соответствии с инструкцией.
Ограничения при использовании: при использовании устройства необходимо соблюдать нормы, установленные законодательством страны (в которой используется изделие).
Товарный знак / торговая марка: Hi.
Адрес пр-ва: " Шенжен БФТ Электрик Апплианс Мануфактуринг Со. ЛТД." 301, Билдинг 10, Чангхинг Сиенц Парк, Гуандонг, Шенжен, КНР (Китайская Народная Республика), Китай
Импортер: ООО «Энко Рус», адрес: 143441, Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, улица 69 км МКАД, стр. 7, офис 506.
Претензии от покупателей принимает ИМПОРТЕР.
Произведено: Китай
Дата производства товара определяется по серийному номеру товара: четвертый и пятый символы серийного номера обозначают месяц производства, шестой и седьмой символы – год производства соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку.
Правообладателем ТЗ Hi является ПАО «М.Видео». Товар произведен по заказу ООО «МВМ». Соответствует требованиям: ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.



УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ.
2. Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности, входящие в комплектацию товара, если их замена не связана с разборкой изделия: элементы питания, кабели, переходники, адаптеры, чехлы, ремни, документация.
3. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а так же в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушения правил и условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Руководстве Пользователя и другой документации; если изделие имеет следы попыток неавторизованного ремонта; если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем; если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.
4. Производитель не несет ответственность за возможный вред изделия, прямо или косвенно нанесенный людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) и/или третьих лиц. Также, не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ – РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СРОК ГАРАНТИИ – 12 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ
СРОК СЛУЖБЫ – 24 МЕСЯЦА
При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара, четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц производства, шестая и седьмая цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку.
Информацию о работе технической службы и гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: support@otmbis.ru. Полный список адресов технических центров производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.otmbis.ru

Изделие
.....
Модель
.....
Серийный номер
.....
Дата продажи
.....



Настоящим подтверждаю проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а). С нижеизложенными условиями гарантии согласен(а)

ФИО Покупателя, подпись

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

№	дата	код ремонта	сервис	мастер	клиент