




User Manual for usmile Soft Care Ultrasonic Oral Irrigator

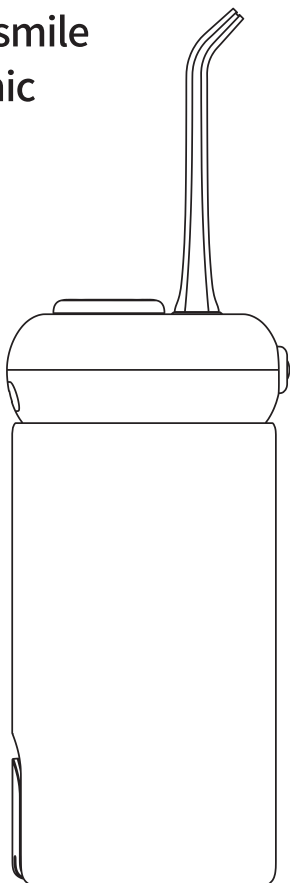

Model CY1

Сведения о продукте

Наименование: Ирригаторы полости рта

Торговая марка: usmile

Модель: CY1

Потребляемая мощность: 5V--- 1A

Номинальная входная мощность : 5W

Уровень влагостойкости: IPX7

Спецификации батареи: литиевая батарея 3.7V 2500mAh

Изготовитель: Guangzhou Stars Pulse Co., Ltd.


Контактное лицо службы поддержки клиентов: service@usmile.com

Сделано в Китае

Быстрое руководство




1. Откройте крышку и вставьте насадку.

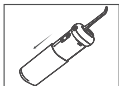


2. Вытяните резервуар до указательной линии.




3. Закройте крышку.

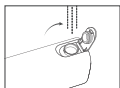

4. Снимите заглушку с резервуара и добавьте умеренный объем чистящей жидкости.

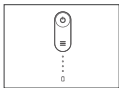

5. Выберите подходящий режим чистки.

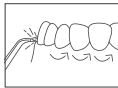

6. Поместите насадку в рот, разместив его перпендикулярно к очищаемой зоне, и нажмите кнопку, чтобы начать чистку.

Напоминание. Если у вас чувствительные десны или вы используете устройство впервые, рекомендуется включить мягкий режим для постепенного привыкания к устройству. Не направляйте воду напрямую на десны. Допускается небольшое кровотечение во время или после первого использования устройства — это абсолютно нормально.

Меры предосторожности

1. Прибором могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, только если они находятся под наблюдением или проинструктированы относительно безопасного использования прибора и понимают связанные с этим опасности. Прибор не является игрушкой. Чистка и техническое обслуживание не должны производиться детьми без присмотра.
2. Данное изделие работает только от безопасного сверхнизкого напряжения, указанного на маркировке изделия.
3. Не подвергайте прибор или батарею воздействию чрезмерных температур. Помните о риске короткого замыкания контактов прибора при работе от батарей или самих батарей от металлических предметов.
4. Устройство содержит батареи, заменять которые должны только лица с опытом такой замены.
5. В инструкциях для приборов класса III указано, что они должны работать только от безопасного сверхнизкого напряжения.
6. Не разбирайте устройство, кроме как для утилизации. Отсоедините его от источника питания перед извлечением батареи. Разрядите батарею перед разборкой. Для разборки пластикового корпуса используйте соответствующие инструменты, чтобы избежать повреждения батареи или короткого замыкания.

После извлечения перережьте провода батареи и вставьте батарею в соответствующий приемник для безопасной переработки.

7. Изделие содержит встроенную аккумуляторную батарею. Не кладите ее в огонь, на солнечный свет, не подвергайте воздействию высоких температур и не заряжайте во влажном помещении. Это может привести к утечке батареи, перегреву и/или взрыву. По завершении зарядки отсоедините кабель для зарядки и отключите питание.

8. Не модифицируйте, не ремонтируйте и не разбирайте изделие самостоятельно. Не используйте устройство во время купания, в душе или в сауне. Во время зарядки следите за тем, чтобы зарядный кабель и разъем зарядки устройства оставались сухими и чистыми. Не пытайтесь удалить пятна или загрязнения, так как процесс зарядки может стать небезопасным.

9. В случае тяжелого периодонтита, прохождения стоматологического лечения или в случае дискомфорта в полости рта перед использованием изделия проконсультируйтесь со своим стоматологом. Лица, проходящие ортодонтическое лечение, лечение зубов или имеющие зубные импланты, должны обратиться к стоматологу.

10. В начале использования изделия десны могут немного кровоточить, пока не привыкнут к процессу чистки. Это пройдет в течение одной-двух недель. Если кровотечение сохраняется более двух недель, это может указывать на заболевание десен. В этом случае прекратите пользоваться изделием и проконсультируйтесь со своим стоматологом.

11. Перед использованием изделия проверьте его на наличие повреждений. Если прибор имеет повреждения, трещины, ржавчину, немедленно прекратите его использование. Если вилка или шнур питания повреждены, замените их перед использованием прибора.

12. Прибор предназначен для чистки полости рта. Не используйте его для каких-либо других целей. Если при пользовании прибором вы чувствуете дискомфорт или боль, прекратите использование и немедленно обратитесь к своему стоматологу.

13. Изделие соответствует требованиям стандартам безопасности электромагнитных устройств. По любым вопросам, связанным с кардиостимуляторами или другими имплантируемыми устройствами, перед использованием прибора проконсультируйтесь со своим врачом или производителем устройства.

14. Храните изделие в недоступном для детей месте. Изделие содержит мелкие детали, например, крышку головки щетки, которые не следует проглатывать. При использовании нового изделия или при замене головки щетки снимите крышку с головки.

15. В любых условиях работы используйте источник питания мощностью не более 15 Вт.

16. Не наполняйте емкость водой, температура которой превышает 40°C, чтобы избежать ожогов кожи или рта.

Схемы компонентов



Чистящая насадка



Чувствительная насадка



Ортодонтическая насадка



Зарядный кабель



Руководство пользователя



Сверьте по списку выше комплектность деталей продукта.

Использование водного флосстика usmile

Статус батареи и зарядка

Водный флосстик usmile заряжается до отправки с завода. Его можно использовать сразу же.


Красный/белый индикаторы

Красный: низкий заряд. Зарядите устройство.
Белый:
Используется/заряжается/полностью заряжено.



Откройте крышку порта зарядки сбоку устройства. Используйте кабель зарядки со стандартным портом зарядки type-C. Используйте зарядное устройство USB или банк питания, стандартный для вашей страны или региона, выдающие 5 В — 1А. Не используйте зарядное устройство плохого качества или с выходной мощностью больше 15 Вт, чтобы не повредить продукт и избежать сбоев.


На полную зарядку устройства уходит примерно 4-5 часов. Фактическое время зарядки зависит от оставшегося заряда батареи и условий зарядки.

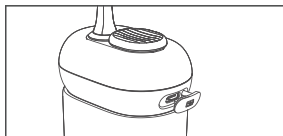


Индикатор питания мигает белым во время зарядки устройства. После полной зарядки индикатор горит белым. Если уровень заряда ниже 20% индикатор питания горит красным. Флосстик все еще может нормально работать в течение семи дней. Зарядите его по возможности. Если батарея разряжена, индикатор питания начнет мигать, затем будет гореть белым несколько минут, обозначая зарядку после подключения устройства к кабелю зарядки. Чтобы избежать уменьшения емкости батареи или ее переразряда,

старайтесь не допускать полного расхода заряда батареи.

На время зарядки расположите флосстик горизонтально и на плоскости. Закройте порт зарядки после зарядки, прежде чем использовать флосстик.

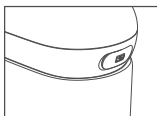

Порт зарядки закрыт.


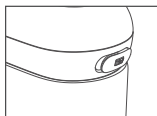


Порт зарядки не закрыт.

Вставка и извлечение специальной насадки usmile

1. Возьмите в руку специальную насадку и плотно вставьте ее в разъем насадки до щелчка.

2. Нажмите и удерживайте кнопку снятия насадки, при этом мягко снимая насадку.

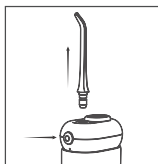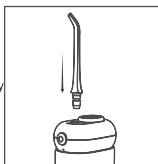




Предупреждение! Не нажимайте кнопку снятия насадки, когда устройство работает.

Добавление воды

1. Снимите крышку с резервуара и вытяните резервуар до указательной линии.

2. Добавьте умеренный объем чистой воды.

3. Закройте резервуар.

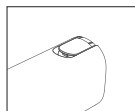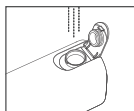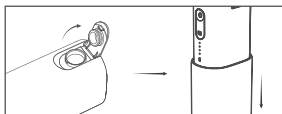

Рекомендуется использовать чистую воду из под крана или очищенную воду. Если холодная вода вызывает дискомфорт, используйте тепловатую воду, не горячее 40°C. Либо же заполните резервуар специальной чистящей жидкостью usmile или разведенным ополаскивателем для рта.

Выберите режим и начните очистку

В устройстве есть режим массажа, а также мягкий, обычный и усиленный режимы. Режимы выходят на заданный уровень воздействия в течение трех секунд.

Режим массажа. Небольшие пульсации подходят для массажа десен и пародонтальной чистки.

Мягкий режим. Комфортная и мягкая чистка поверхности зубов и диастемы. Этот режим подходит для первоначального использования устройства и для людей с чувствительными деснами.

Обычный режим. Чистка поверхности зубов и диастемы умеренным напором. Режим наиболее подходящий для большинства людей.

Усиленный режим. В этом режиме очищается диастема и устойчивые пятна на зубах; подходит для глубокой и целенаправленной чистки.

Включение и выключение

Включайте и выключайте флосстик кнопкой ВКЛ/ВЫКЛ.

Выбор режима

Нажмите кнопку режима для выбора подходящего режима.


Запоминание режима

При включении устройства задается режим, который использовался в предыдущий раз.



Эксплуатация устройства

1. Выберите предпочитаемый режим.
2. Заведите насадку в рот, разместив ее перпендикулярно к поверхности зубов, диастеме или деснам.
3. Нажмите кнопку переключения и наклонитесь к раковине. Слегка прикройте рот, чтобы предотвратить распыление воды.

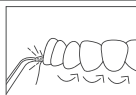

Держите устройство вертикально так, чтобы заборник воды оставался ниже уровня воды. Подача воды не остановится.

Устройство выключится через две минуты. Если хотите продолжить чистку, просто нажмите кнопку переключения.

Чистка и обслуживание устройства

Чистка после использования

Рекомендуется чистить и сушить устройство после использования, чтобы предотвратить размножение бактерий на нем.

1. Выключите устройство. Откройте крышку резервуара и опорожните его.
2. Сполосните резервуар чистой водой.
3. Снова нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ, чтобы включить продукт и избавиться от оставшейся воды.
4. Поднимите резервуар до верха и оставьте устройство в подходящем месте.

Обслуживание после использования

Насадка

Сполосните насадку и высушите мягкой тканью. Рекомендуется менять насадку каждые шесть месяцев. Если насадка деформирована или на ней есть пятна от воды, сказывающиеся на эффективности чистки, замените насадку.

Резервуар

Сполосните резервуар. Оставьте крышку резервуара открытой, чтобы дать ему высохнуть естественным образом в хорошо проветриваемом месте. Рекомендуется чистить резервуар каждую неделю.

Корпус

Протрите корпус мягкой и сухой тканью или салфеткой. Не погружайте устройство в воду для чистки корпуса.

Поглощающая трубка

Очистите трубку водой и протрите мягкой тканью. Не сгибайте ее.

Фильтр


Очистите фильтр водой или мягкой щеткой, затем высушите мягкой тканью. Не снимайте его для очистки.

Защита окружающей среды


В водный флосстик usmile встроен перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор. Не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Классифицируйте его согласно законам и постановлениям вашей страны или региона.

Примечание. До извлечения аккумулятора убедитесь, что он разряжен.


Извлечение аккумулятора

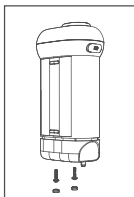

1. Плоской отверткой выкрутите стопорный винт в нижней части устройства.

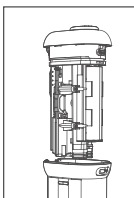

2. Вытяните механизм флосстика.

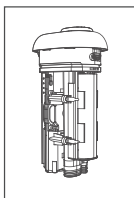

3. Ножницами перережьте по одному два провода, подключенные к аккумулятору, затем извлеките аккумулятор.

Примечание. Не перерезайте два провода одновременно.

Аккумулятор следует должным образом переработать или отправить в утиль. Пожалуйста, обратитесь в центр переработки, назначенный местными госорганами, и узнайте, примут ли они другие детали и компоненты водного флосстика. Не соединяйте положительный и отрицательный контакты аккумулятора, иначе произойдет короткое замыкание. Не пытайтесь запустить устройство после извлечения аккумулятора.

Сбой и способы их устранения

Сбой	Возможная причина	Решения
При первом использовании из насадки не поступает вода.	Оборудование не работало достаточно долго.	Переключите его в обычный режим, чтобы устройство отработало достаточно долго для экстракции воды.
Не удается включить устройство кнопкой переключения.	Устройство находится в режиме защиты во время зарядки.	Прекратите зарядку.
	Низкий заряд батареи.	Подключите кабель зарядки, чтобы зарядить устройство.
Не получается вставить насадку в разъем.	В разъем посторонние объекты.	Аккуратно удалите посторонние объекты, которые видны в раземе.
	Насадка несовместима с этой моделью usmile.	Замените ее на совместимую.
Устройство прекращает работу, индикатор мигает красным.	Защита от блокировки ротора.	Включите устройство снова.
	Низкий заряд батареи.	Подключите кабель зарядки, чтобы зарядить устройство.
Низкое давление воды.	Низкий заряд батареи.	Подключите кабель зарядки, чтобы зарядить устройство.
	Насадка заблокирована.	Замените ее на совместимую.
Поток воды прерывается.	Выпала поглощающая трубка	Вытащите поглощающую трубку, проверьте ее на наличие повреждений и вставьте ее заново.
	Заборник воды находится выше уровня воды.	Добавьте воду в резервуар.

Изготовитель, адрес изготовителя

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:Guangzhou Stars Pulse Co., Ltd.

Место нахождения:Room 2001,2002,2003,2004,2005,No. 239 Tianhe North Road, Tianhe District, Guangzhou City, Guangdong Province, China

Соответствует

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

Информация об импортере указана на внешней части упаковки.



Правила и условия хранения

Срок службы 3 года

Условия хранения:

Температура: от -20°C до +60°C

Относительная влажность: от 10% до 90%, без конденсации

Правила и условия транспортировки

Транспортировка устройства допускается только в заводской упаковке, любым видом транспорта, без каких-либо ограничений по расстоянию.

Правила и условия реализации

- Без ограничений

Правила и условия утилизации

- По окончании срока службы оборудования, пожалуйста, свяжитесь с авторизованным сервисным центром usmile, чтобы получить информацию о его утилизации.

Дата производства изделия

Код даты производства напечатан на дне продукта и состоит из 5 символов.

- Первый символ — буква, обозначающая год (начиная с 2016 г. в возрастающем алфавитном порядке). Например: А обозначает 2016 г., В обозначает 2017 г., С обозначает 2018 г. и так далее.

- Второй и третий символы — цифры, обозначающие месяц. Второй символ указывает десятки, третий — единицы. Из получившегося двузначного числа вычитите 12, например: 15–12=3 обозначает март.

- Четвертый и пятый символы — цифры, обозначающие день месяца. Правила расчета те же, что и при расчете месяца, например: 26–12=14, то есть 14-е число.