



ELEEEELS

P2

Карманный
Массажный
Пистолет


Инструкция по эксплуатации
БЕСПРОВОДНОЙ
Литий-ионный аккумулятор
7,4 В

ЛЕГКИЙ
360 г

Массажный пистолет ELEEEELS помогает ускорить восстановление, разогреть мышцы, избавиться от болезненных ощущений, улучшить кровообращение и снять напряжение и скованность.

RU

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

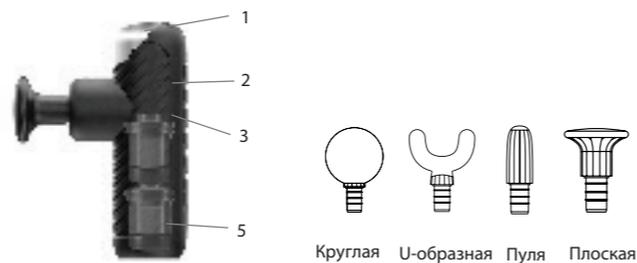

- 1) Прочный и легкий (всего 360 г) корпус из алюминиевого сплава
 - 2) Развивающий высокие обороты бесщеточный двигатель (38 мм): скорость до 50 ударов в секунду
 - 3) Прорезиненное нескользящее покрытие
 - 4) 4 скорости + 4 насадки для максимального терапевтического эффекта и расслабления
 - 5) Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор 7,4 В (до 6 ч работы)
 - 6) Технология Mini Piston
- Уровни интенсивности:
Скорость 1 (30 ударов в секунду) / Скорость 2 (37 ударов в секунду)
Скорость 3 (43 ударов в секунду) / Скорость 4 (50 ударов в секунду)


Вес: 360 г
Зарядка от USB Type-C

Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием прибора.

ЗАРЯДКА

- 1) Подключите кабель USB к разъему на приборе.
- 2) Скорость зарядки зависит от используемого сетевого адаптера (в комплект не входит). Рекомендуется использовать сетевой адаптер, подходящий для Type C (5V/3A), QC 3.0 или PD (9V/2A) для полной зарядки батареи за 3 часа.

RU

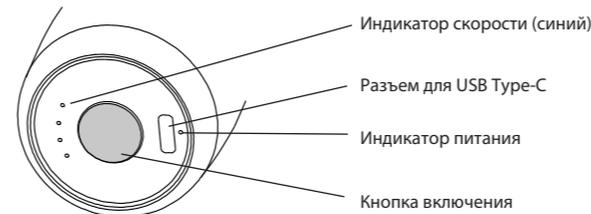

- 3) Во время зарядки индикатор заряда будет мигать зеленым. Когда прибор полностью зарядится, индикатор загорится ровным светом.
- 4) Свет индикатора меняется в зависимости от уровня заряда батареи:
 - Красный (мигает 1 раз) : 0-10 %
 - Зеленый (мигает 1 раз) : 11- 30 %
 - Зеленый (мигает 2 раза) : 31-70 %
 - Зеленый (мигает 3 раза) : 71-99 %
 - Зеленый (ровный свет): 100 %

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- 1) Нажмите и удерживайте кнопку включения в течение 1,5 секунд. Загорится индикатор питания.
- 2) Нажимая на кнопку включения, установите скорость. Загорится синий индикатор выбранной скорости.
- 3) Скользящими движениями двигайтесь вдоль выбранной зоны.
- 4) Через 10 минут прибор автоматически отключится. Удерживайте кнопку включения в течение 1,5 секунд, чтобы продолжить массаж.
- 5) Чтобы выключить прибор вручную, нажмите и удерживайте кнопку включения в течение 1,5 секунд.

УХОД, УТИЛИЗАЦИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Протирайте прибор слегка влажной тканью, затем тщательно высушите.
- Не очищайте прибор с применением химических чистящих средств и спирта.
- Для зарядки используйте кабель USB-C.
- Прибор предназначен для массажа, для использования в быту. Утилизируйте в соответствии с законодательством страны реализации. Транспортировка допускается в сухой среде в оригинальной упаковке.
- Храните прибор в сухом чистом месте.
- При обнаружении неисправности обратитесь в авторизованный сервисный центр.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Не погружайте прибор в воду. Не храните рядом с емкостями с водой и источниками тепла. Не блокируйте вентиляционные отверстия.
- Не вскрывайте изделие.
- Не допускайте более 1 часа непрерывной работы прибора. Подождите не менее 10 минут перед повторным включением.
- Прибор не предназначен для детей. Не используйте при наличии травм. Перед использованием проконсультируйтесь со специалистом.
- Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.

RU

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ПОЖАРА И ТРАВМ СОБЛЮДАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:

- Массажруйте мышцы через сухую чистую одежду скользящими движениями с небольшим давлением. Одну зону рекомендуется массажировать до 60 секунд.
- Используйте прибор только на мягких тканях. Не пытайтесь массажировать голову или кожу над костью. Сразу же прекратите использование прибора, если почувствуете боль.
- Не роняйте прибор и не вносите какие-либо изменения в его конструкцию.
- Никогда не оставляйте включенный прибор без внимания.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Перед использованием обязательно проконсультируйтесь с врачом при наличии у вас беременности, невропатии, поврежденной сетчатки, электрокардиостимулятора, недавно перенесенных хирургических вмешательств, замены суставов или операцией с применением металлических пластин или штифтов, эпилепсии или мигрени, грыжи межпозвоночного диска, спондилолистеза, спондилолиза позвоночника, спондилеза, а также иных проблем со здоровьем.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Организация по гарантийному обслуживанию и принятию претензий:

ООО «МВМ», Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 3.

Информация об условиях гарантии:

<https://www.eldorado.ru/srv> или по телефону Эльдорадо – 8 (800) 250-25-25

<https://www.mvideo.ru/srv> или по телефону М.Видео – 8 (800) 600-77-75

Гарантия продавца – 12 месяцев с момента продажи (передачи) товара Покупателю.

Изготовитель: YELL Group Limited

Адрес: Unit 5, 15/F., Global Gateway Tower, 63 Wing Hong Street, Cheung Sha Wan, Kowloon, Гонконг

Сделано в Китае

Импортер: «МВМ», Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 3.

Телефон: +7 (495) 644-28-48; E-mail: cert-log@mvideo.ru

Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 3 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящей инструкции по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам. Специальные условия реализации не установлены.

Дата изготовления указана (закодирована) на приборе, где 1 и 2-я цифра с начала — месяц изготовления; следующие 4-е цифры — год изготовления.

Товар сертифицирован, соответствует требованиям: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»; ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

EAC