



ELEEEELS

R4

Массажер
для поясницы

Инструкция по эксплуатации



Динамическая
растяжка



Вибромассаж



Горячий
компресс



Терапия с
использованием
красного/синего
света



Низкочастотный
EMS-массаж



2 ч работы
без подзарядки

ЗАРЯДКА

- Подключите кабель USB к разъему на приборе.
- Скорость зарядки зависит от используемого сетевого адаптера (в комплект не входит). Рекомендуется использовать сетевой адаптер, подходящий для Type C (5 В/ 2 А) для полной зарядки батареи за 3 часа.
- Во время зарядки индикатор питания будет мигать. Когда батарея будет полностью заряжена, индикатор перестанет мигать.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Включите устройство, нажав кнопку питания.
- Нажимая кнопку автоматического режима, выберите один из двух автоматических режимов: M1 (натяжение + вибрация + красный/синий свет), M2 (натяжение + покачивание + красный/синий свет).
- Нажимая кнопку нагрева, отрегулируйте степень нагрева (низкая/средняя/высокая).
- Удерживая кнопки +/-, отрегулируйте степень натяжения. Отпустите кнопки +/-, как только будет достигнут комфортный уровень натяжения.
- Нажмите кнопку включения вибрации, чтобы включить или выключить функцию вибромассажа.
- Нажмите кнопку красного/синего света, чтобы включить или выключить функцию.
- Нажмите кнопку поворота, чтобы включить или выключить функцию покачивания влево и вправо.
- Нажмите кнопку EMS, чтобы включить функцию EMS на низких частотах. Нажимая кнопку EMS, настройте интенсивность EMS (уровень 1–10). Для выключения функции нажмите и удерживайте кнопку в течение 2 секунд.
- Для выключения прибора нажмите кнопку питания.
- Прибор автоматически выключится через 10 минут работы. Нажмите кнопку питания для продолжения массажа.
- Когда уровень заряда батареи опустится ниже 10 %, индикатор питания начнет мигать. Перезарядите батарею. Прибор можно также использовать в процессе зарядки.

УХОД, УТИЛИЗАЦИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Протирайте прибор слегка влажной тканью, затем тщательно высушите.
- Не очищайте прибор с применением химических чистящих средств и спирта. Для зарядки используйте кабель USB-C.
- Прибор предназначен для массажа, для использования в быту. Утилизируйте в соответствии с законодательством страны реализации. Транспортировка допускается в сухой среде в оригинальной упаковке.
- Храните прибор в сухом чистом месте.
- При наличии неисправности обратитесь в авторизованный сервисный центр.

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ПОЖАРА И ТРАВМ СОБЛЮДАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:

- Не роняйте прибор и не вносите какие-либо изменения в его конструкцию.
- Никогда не оставляйте включенный прибор без внимания.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Не погружайте прибор в воду. Не храните рядом с емкостями с водой и источниками тепла. Не блокируйте вентиляционные отверстия.
- Не вскрывайте изделие.
- Не допускайте более 1 часа непрерывной работы прибора. Подождите не менее 10 минут перед повторным включением.
- Прибор не предназначен для детей. Не используйте при наличии травм.
- Перед использованием проконсультируйтесь со специалистом.
- Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Не используйте прибор без предварительного разрешения вашего врача, если у вас наблюдается какое-либо из нижеперечисленных состояний: беременность, невралгия, повреждение сетчатки глаза, использование кардиостимулятора, недавно перенесенная операция, эпилепсия или мигрень, грыжа межпозвоночного диска, спондиллолистез, спондилолиз или спондилез, недавно перенесенная замена суставов, установленные хирургические штифты или пластины, или если у вас имеются какие-либо опасения относительно своего здоровья.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Организация по гарантийному обслуживанию и принятию претензий:

ООО «МВМ», Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 3.

Информация об условиях гарантии:

<https://www.eldorado.ru/spv> или по телефону Эльдorado – 8 (800) 250-25-25

<https://www.mvideo.ru/spv> или по телефону М.Видео – 8 (800) 600-77-75

Гарантия продавца – 12 месяцев с момента продажи (передачи) товара Покупателю.

Изготовитель: YELL Group Limited

Адрес: Unit 5, 15/F., Global Gateway Tower, 63 Wing Hong Street, Cheung Sha Wan, Kowloon, Гонконг

Сделано в Китае

Импортер: «МВМ», Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 3.

Телефон: +7 (495) 644-28-48; E-mail: cert-log@mvideo.ru


Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 3 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящей инструкции по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам. Специальные условия реализации не установлены.

Дата изготовления указана (закодирована) на приборе, где 1 и 2-я цифра с начала — месяц изготовления; следующие 4-е цифры — год изготовления.

Товар сертифицирован, соответствует требованиям: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»; ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Краткий обзор R4

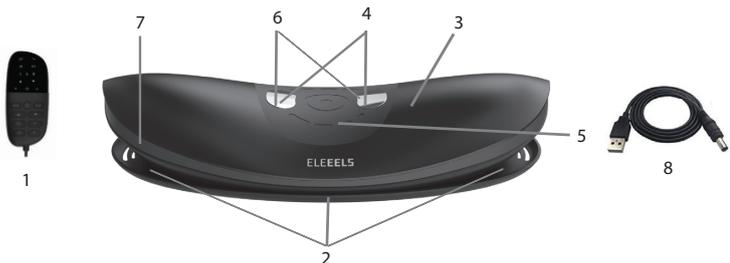

- 1) Удобный пульт управления
- 2) Динамическая растяжка
- 3) Многочастотный вибромассаж
- 4) Горячий компресс
- 5) Терапия с использованием красного/синего света
- 6) Низкочастотный EMS-массаж
- 7) Порт зарядки
- 8) Кабель USB-C

Технические характеристики


- Номинальное напряжение: 7,4 В
- Вход: DC 5 В/2 А
- Емкость аккумулятора: 1500 мА·ч
- Номинальная мощность: 10 Вт
- Вес: 1700 г
- Высота натяжения от 0 до 50 мм
- Время работы без подзарядки: 1-1,5 ч




Подготовка к эксплуатации




1. Поставьте прибор на ровную плоскую поверхность. Если поверхность мягкая, поставьте прибор на подставку (идет в комплекте).
2. Не наступайте на подставку и не используйте ее не по назначению.

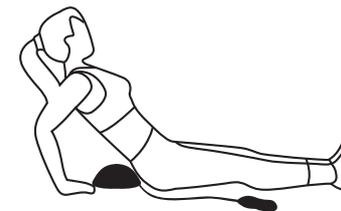


По окончании массажа нажмите кнопку «←», чтобы вернуться к исходному положению. Оставайтесь в горизонтальном положении на приборе еще в течение 3 минут, затем медленно встаньте.

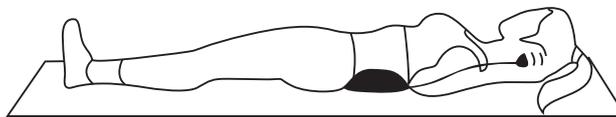


Медленно лягте на прибор так, чтобы поясничный отдел оказался между отметками L1 и L5. Включите прибор с помощью пульта управления.

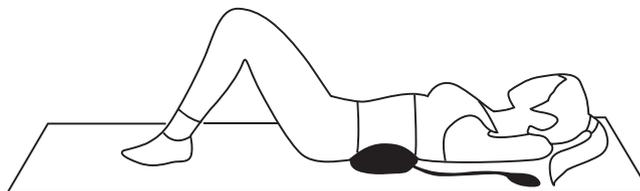

Удерживая кнопки +/-, отрегулируйте степень натяжения.

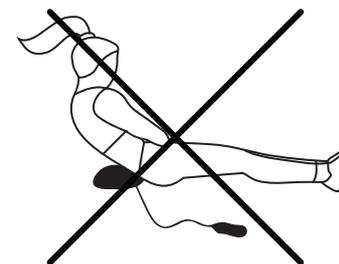

Не вставайте, пока степень натяжения не вернется к исходным значениям.

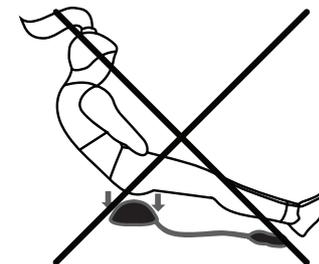

Запрещено садиться на прибор во время его работы.