

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ПОЖАРА И ТРАВМ СОБЛЮДАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:

- Не роняйте прибор и не вносите какие-либо изменения в его конструкцию.
- Никогда не оставляйте включенный прибор без внимания.

#### ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Перед использованием обязательно проконсультируйтесь с врачом при наличии у вас беременности, невропатии, повреждений сетчатки, электрокардиостимулятора, недавно перенесенных хирургических вмешательств, замены суставов или операцией с применением металлических пластин или штифтов, эпилепсии или мигрени, грыжи межпозвоночного диска, спондилолистеза, спондилолиза позвоночника, спондилеза, а также иных проблем со здоровьем.

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

**Организация по гарантийному обслуживанию и принятию претензий:**

**ООО «МВМ»**, Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 3.

Информация об условиях гарантии:

<https://www.eldorado.ru/spv> или по телефону Эльдорадо – 8 (800) 250-25-25

<https://www.mvideo.ru/spv> или по телефону М.Видео – 8 (800) 600-77-75

Гарантия продавца – 12 месяцев с момента продажи (передачи) товара Покупателю.

**Изготовитель: YELL Group Limited**

Адрес: Unit 5, 15/F., Global Gateway Tower, 63 Wing Hong Street, Cheung Sha Wan, Kowloon, Гонконг

Сделано в Китае

**Импортер: «МВМ»**, Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 3.

Телефон: +7 (495) 644-28-48; E-mail: [cert-log@mvideo.ru](mailto:cert-log@mvideo.ru)

Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 3 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящей инструкции по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам. Специальные условия реализации не установлены.

Дата изготовления указана (закодирована) на приборе, где 1 и 2-я цифра с начала — месяц изготовления; следующие 4-е цифры — год изготовления. Товар сертифицирован, соответствует требованиям: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»; ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

EAC

# R5

## Массажер для шеи

### Инструкция по эксплуатации



ELEEELS



Постукивание  
и похлопывание



Горячий  
компресс




Беспроводной



До 2 ч работы  
без подзарядки



## Обзор прибора

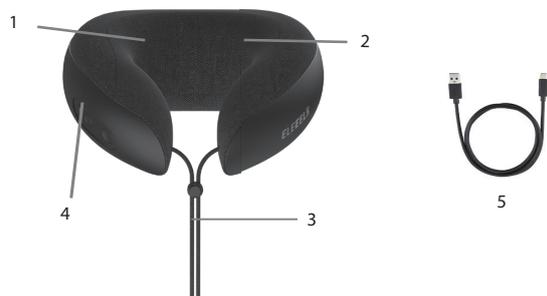

- 1) Эффект постукивания и похлопывания
- 2) Горячий компресс
- 3) Регулируемые застёжки
- 4) Разъем для кабеля USB-C
- 5) Кабель USB-C

### Технические характеристики

- Номинальное напряжение: 7,4 В
- Вход: DC 5 В/ 2 А
- Емкость батареи: 2000 мА·ч
- Мощность: 10 Вт
- Вес: 1,202 кг
- Работа без подзарядки: до 1-1,5 ч.



Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием прибора

## ЗАРЯДКА

- 1) Подключите кабель USB к разъему на приборе.
- 2) Скорость зарядки зависит от используемого сетевого адаптера (в комплект не входит). Рекомендуется использовать сетевой адаптер (5 В/2 А) для полной зарядки батареи за 3 часа.
- 3) Во время зарядки индикатор зарядки будет гореть красным. Когда прибор будет полностью заряжен, индикатор включения загорится зеленым.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Наденьте массажер на шею и отрегулируйте застёжки так, чтобы вам было комфортно. Также вы можете сесть на диван или кресло и, откинувшись на спинку, подложить массажер под шею. Расслабьтесь.
- Нажмите и в течение 2 секунд удерживайте кнопку включения. Прибор начнет работать в режиме по умолчанию: Бережном режиме.
- Нажимая на кнопку включения, выберите режим: Динамичный, Комбинированный или Бережный.
- Для включения/выключения функции горячего компресса, нажмите кнопку нагрева.
- Через 10 минут работы прибор автоматически отключится. Нажмите и удерживайте кнопку включения в течение 2 секунд, чтобы продолжить массаж.
- Для выключения прибора нажмите и удерживайте кнопку включения в течение 2 секунд.
- Когда уровень заряда батареи опустится ниже 10 %, индикатор зарядки мигнет 5 раз, прибор выключится. Зарядите аккумулятор.

## УХОД, УТИЛИЗАЦИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Протирайте прибор слегка влажной тканью, затем тщательно высушите.
- Не очищайте прибор с применением химических чистящих средств и спирта.
- Для зарядки используйте кабель USB-C. Храните прибор в сухом чистом месте.
- Прибор предназначен для массажа, для использования в быту. Утилизируйте в соответствии с законодательством страны реализации. Транспортировка допускается в сухой среде в оригинальной упаковке.
- При обнаружении неисправности обратитесь в авторизованный сервисный центр.

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Не погружайте прибор в воду. Не храните рядом с емкостями с водой и источниками тепла. Не блокируйте вентиляционные отверстия.
- Не вскрывайте изделие.
- Не допускайте более 1 часа непрерывной работы прибора. Подождите не менее 10 минут перед повторным включением.
- Прибор не предназначен для детей. Не используйте при наличии травм. Перед использованием проконсультируйтесь со специалистом.