

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ПОЖАРА И ТРАВМ СОБЛЮДАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:

- Не роняйте прибор и не вносите какие-либо изменения в его конструкцию.
- Никогда не оставляйте включенный прибор без внимания.
- Прибор не предназначен для детей. Не используйте при наличии травм. Перед использованием проконсультируйтесь со специалистом.

#### ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Перед использованием обязательно проконсультируйтесь с врачом при наличии у вас повреждений сетчатки, недавно перенесенных хирургических вмешательств, эпилепсии, глаукомы, катаракты, признаков инсульта, травм глаз, воспаления глаз, отслоения сетчатки, конъюнктивита, повышенной чувствительности кожи, а также иных проблем со здоровьем.

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

**Организация по гарантийному обслуживанию и принятию претензий: ООО**

«МВМ», Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 3.

Информация об условиях гарантии:

<https://www.eldorado.ru/spv> или по телефону Эльдorado – 8 (800) 250-25-25

<https://www.mvideo.ru/spv> или по телефону М.Видео – 8 (800) 600-77-75

Гарантия продавца – 12 месяцев с момента продажи (передачи) товара Покупателю.

**Изготовитель: YELL Group Limited**

Адрес: Unit 5, 15/F., Global Gateway Tower, 63 Wing Hong Street, Cheung Sha Wan, Kowloon, Гонконг

Сделано в Китае

**Импортер: «МВМ»**, Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 3.

Телефон: +7 (495) 644-28-48; E-mail: cert-log@mvideo.ru

Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 3 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящей инструкции по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам.

Специальные условия реализации не установлены.

Дата изготовления указана (закодирована) на приборе, где 1 и 2-я цифра с начала — месяц изготовления; следующие 4-е цифры — год изготовления.

Товар сертифицирован, соответствует требованиям: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 020/2011

«Электромагнитная совместимость технических средств»; ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

EAC

# R6

## Массажер для глаз


Инструкция по эксплуатации



ELEEEELS



Мягкий безопасный для кожи подклад Nano Silkin™

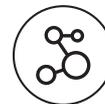

Графеновый нагрев



Акупунктурное воздействие



Вибрационный массаж




Складывается на 180°



## Обзор прибора



- |                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1) Графеновый нагрев         | Технические характеристики      |
| 2) Акупунктурное воздействие | - Напряжение: 3,7 В             |
| 3) Вибрационный массаж       | - Вход: DC 5 В/1 А              |
| 4) Регулируемый ремешок      | - Емкость батареи: 1200 мА·ч    |
| 5) Разъем для USB-C          | - Мощность: 5 Вт                |
| 6) Кабель USB-C              | - Вес: 318 г                    |
|                              | - Работа без подзарядки: до 2 ч |

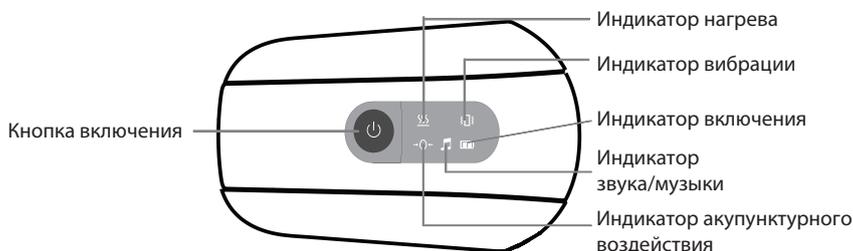

Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием прибора.

## ЗАРЯДКА

- 1) Подключите кабель USB к разъему на приборе.
- 2) Скорость зарядки зависит от используемого сетевого адаптера (в комплект не входит). Рекомендуется использовать сетевой адаптер 5 В/2 А для полной зарядки батареи за 3 часа.
- 3) Во время зарядки индикатор включения будет мигать. Когда прибор будет полностью заряжен, индикатор включения перестанет мигать.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Закройте глаза.
- Наденьте массажер и отрегулируйте ремешок для максимального комфорта. Нажмите и в течение 2 секунд удерживайте кнопку включения. Режим по умолчанию: Режим для снятия стресса со звуками природы.
- Нажимая кнопку включения, выберите нужный режим:
  - **Режим для снятия стресса: Акупунктурное воздействие + Нагрев + Вибрационный массаж + Звуки природы**
  - **Режим омоложения: Акупунктурное воздействие + Нагрев + Звуки природы**
  - **Успокаивающий режим: Акупунктурное воздействие + Нагрев**
  - **Режим сна: Акупунктурное воздействие + Звуки природы**
- Для выключения звуков природы 3 раза нажмите кнопку включения. Повторите для повторного включения звучания.
- Через 10 минут работы прибор автоматически отключится. Нажмите и удерживайте кнопку включения в течение 2 секунд, чтобы продолжить массаж.
- Для выключения прибора нажмите и удерживайте кнопку включения в течение 2 секунд.
- Когда уровень заряда батареи опустится ниже 10 %, индикатор зарядки замигает. Зарядите батарею.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ МУЗЫКИ СО СМАРТФОНА

- Для подключения прибора к смартфону откройте настройки Bluetooth на смартфоне и выберите ELEEELS R6 Eye Massager. При успешном сопряжении индикатор звука/музыки загорится синим. Теперь вы можете слушать через массажер музыку со своего смартфона.
- Слушайте музыку со смартфона во всех режимах, где доступна эта опция.
- Для выключения музыки 3 раза нажмите кнопку включения. Повторите для повторного включения звучания.

## УХОД, УТИЛИЗАЦИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Протирайте прибор слегка влажной тканью, затем тщательно высушите. Не используйте химические чистящие средства и спирт.
- Для зарядки используйте кабель USB-C. Храните прибор в сухом чистом месте.
- Прибор предназначен для массажа, для использования в быту. Утилизируйте в соответствии с законодательством страны реализации. Транспортировка допускается в сухой среде в оригинальной упаковке.
- При наличии неисправности обратитесь в авторизованный сервисный центр.

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Не погружайте прибор в воду. Не храните рядом с емкостями с водой и источниками тепла.
- Не вскрывайте изделие.
- Не допускайте более 1 часа непрерывной работы прибора. Подождите не менее 10 минут перед повторным включением.
- Не используйте прибор во время вождения.
- Перед использованием прибора снимите контактные линзы.
- Перед использованием тщательно очистите кожу лица.