

S2

Набор палочек для
массажа горячими
камнями

S2 Набор палочек для
массажа горячими камнями

S2A Палочка с плоским камнем
S2B Палочка с камнем для
точечного воздействия



Руководство по эксплуатации




ELEEEEL5

Профессиональный массаж — это легко!

Краткий обзор ELEEELS S2

Палочка с плоским камнем

Палочка с камнем для
точечного воздействия

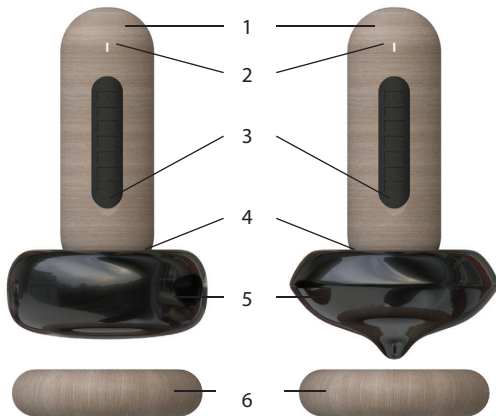

7



8



S2

S2A/S2B

- 1) Массажные палочки
 - 2) Переключатель температуры
 - 3) Порт для зарядки Type-C (под заглушкой)
 - 4) Индикатор температуры/питания
 - 5) Массажный камень нефрит, отполированный вручную
 - 6) Подставка
- 7) Массажное масло для ароматерапии (входит только в серию S2)
- 8) USB Type-C

Вес: 1,5 кг

Вход: USB Type-C, 5 В/2 А

ЗАРЯДКА

- 1) Вставьте кабель USB в разъем на изделии.
- 2) Скорость зарядки зависит от используемого сетевого адаптера (в комплект не входит). Рекомендуется использовать сетевой адаптер 5 В/2 А для полной зарядки батареи за 4 часа.
- 3) Во время зарядки индикатор питания будет мигать зеленым. Когда изделие полностью зарядится, индикатор перестанет мигать.
- 4) Индикатор питания показывает уровень заряда батареи:
 - a) Мигающий красный свет: 0-10 %
 - b) Мигающий зеленый свет: 10-99 %
 - c) Ровный зеленый свет: 100 %

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- 1) Поверните переключатель по часовой стрелке, чтобы включить изделие. Поворачивая регулятор, отрегулируйте температуру.
- 2) Чтобы определить температуру нагрева, ориентируйтесь на цвет индикатора:
 - Уровень 1 (желтый свет, 45 °C)
 - Уровень 2 (оранжевый свет, 50 °C)
 - Уровень 3 (красный свет, 55 °C)
 - Уровень 4 (белый свет, 60 °C)
- 3) При первом включении начните с самой низкой температуры (Уровень 1).
- 4) Палочка/палочки будут готовы к использованию через 1 минуту после начала нагрева.
- 5) Поместите палочки на выбранную часть тела: руки, плечи, шею, спину, живот, ягодицы, ноги или ступни – и осторожно начните массаж.
- 6) При необходимости нанесите небольшое количество массажного масла непосредственно на кожу или палочку.
- 7) Для выключения изделия установите температуру на Уровне 1 и поверните переключатель против часовой стрелки.
- 8) Когда уровень заряда батареи опустится ниже 10 %, индикатор питания начнет мигать красным. Изделие отключится через 3 минуты. Перезарядите батарею.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Палочка с плоским
камнем



Палочка с камнем для
точечного воздействия



Вы можете посмотреть руководство по техникам массажа от ELEEELS S2/S2A/S2B по ссылке: <https://www.youtube.com/c/ELEEELS>

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Изделие предназначено для массажа тела с горячими камнями в технике. Изделие не предназначено для использования детьми. Изделие предназначено для использования в быту.
- Аккуратно поместите палочку (палочки) на подставку.
- Перед началом массажа всегда проверяйте температуру камней.
- Немедленно прекратите массаж, если почувствуете дискомфорт.
- Не используйте изделие внутри финской бани с очень высокой влажностью.
- Всегда выключайте изделие после использования и перед очисткой.
- Не прикасайтесь к порту зарядки или переключателю питания влажными руками.
- Не размещайте изделие в непосредственной близости от источников тепла, воды или рядом с другими жидкостями.
- Не кладите на подставки посторонние предметы и оберегайте их от влажности.
- Если изделие перестанет работать, немедленно выключите его. Перед повторным использованием обратитесь в сервисный центр.
- Не разбирайте изделие.
- Не роняйте изделие.
- Запрещается вносить изменения в конструкцию изделия.
- Изделие имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании изделием.

УХОД, УТИЛИЗАЦИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Протирайте изделие мягкой тканью. Удаляйте остатки массажного масла небольшим количеством моющего средства. Не используйте для очистки агрессивные химические вещества и спирт.
- Наши горячие камни являются натуральным продуктом и отполированы вручную, поэтому могут иметь небольшие различия в цвете, прожилках, текстуре, контурах или оттенке: это не является неисправностью.
- Утилизируйте в соответствии с законодательством страны реализации. Транспортировка допускается в сухой среде в оригинальной упаковке. Храните в сухом прохладном месте.
- При наличии неисправностей обратитесь в авторизованный сервисный центр.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Перед использованием обязательно проконсультируйтесь с врачом при наличии у вас беременности и кардиостимулятора или если у вас диагностировано одно из следующих заболеваний: кардиологические нарушения, злокачественные опухоли, сколиоз или аномалии развития, гипертония, остеопороз, тромбоз, тяжелая аневризма, дерматит или другие кожные инфекции (в том числе воспаления подкожной клетчатки), раны и тяжелые нарушения кровообращения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Организация по гарантийному обслуживанию и принятию претензий: ООО «МВМ», Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 3.

Информация об условиях гарантии:

<https://www.eldorado.ru/spv> или по телефону Эльдorado – 8 (800) 250-25-25

<https://www.mvideo.ru/spv> или по телефону М.Видео – 8 (800) 600-77-75

Гарантия продавца – 12 месяцев с момента продажи (передачи) товара Покупателю.

Изготовитель: YELL Group Limited

Адрес: Unit 5, 15/F., Global Gateway Tower, 63 Wing Hong Street, Cheung Sha Wan, Kowloon, Гонконг
Сделано в Китае

Импортер: «МВМ», Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 3.

Телефон: +7 (495) 644-28-48; E-mail: cert-log@mvideo.ru

Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 3 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящей инструкции по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам. Специальные условия реализации не установлены.

Дата изготовления указана (закодирована) на приборе, где 1 и 2-я цифра с начала — месяц изготовления; следующие 4-е цифры — год изготовления.

Товар сертифицирован, соответствует требованиям: TP TC 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; TP TC 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»; TP EAЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.



