

RU

ИНСТРУКЦИЯ

MEDISTELLAR[®]
HEALTHY LIVING INNOVATIONS

МАССАЖЕР ДЛЯ ШЕИ И СПИНЫ
SHIATSU PRO
С РЕГУЛИРОВКОЙ СКОРОСТИ И ТЕМПЕРАТУРЫ НАГРЕВА



MS 33


Содержание

| | |
|--|---|
| Зоны массажа | 2 |
| Меры предосторожности | 3 |
| Элементы и комплект массажера | 4 |
| Технические характеристики | 5 |
| Пульт управления | 5 |
| Устранение неисправностей | 6 |
| Описание массажера для шеи и спины SHIATSU PRO MS33 | 7 |
| Рекомендованные товары | 8 |
| Гарантийный талон | 9 |

Зоны массажа



ШЕЯ

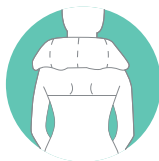


ПЛЕЧИ



СПИНА



ПОЯСНИЦА

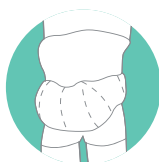

ЖИВОТ



БЕДРА



КОЛЕНИ



СТУПНИ



ИКРНОЖНЫЕ
МЫШЦЫ

Отрегулируйте силу массажа давлением на ручки прибора

Меры предосторожности

Необходимо соблюдать следующие правила безопасности при использовании прибора во избежание пожара, удара током и/или травм:
ВНИМАНИЕ

Необходимо прочесть всю инструкцию и сохранить ее для использования данного руководства в дальнейшем.

Запрещается использовать массажер после нанесения масел и лосьонов на кожу.

После использования необходимо выключить массажер и отсоединить от электросети.

Запрещается засыпать с включенным массажером.

Запрещается переносить массажер за шнур питания.

Запрещается проводить влажную чистку массажера, пока он подсоединен к сети.

Рекомендуется протирать массажер слегка влажной салфеткой, после чего необходимо сразу протереть сухой салфеткой.

Запрещается подсоединять массажер к электросети, пока он не высохнет полностью.

Запрещается включать массажер под одеялом или подушкой: чрезмерный нагрев может привести к пожару, поражению электрическим током или травмам.

Запрещается использовать массажер рядом с местами повышенной влажности. Массажер необходимо использовать только при полностью сухой коже.

Ни при каких обстоятельствах не допускается попадание влаги на массажер.

Рекомендуется использовать данный массажер только для личного использования.

Профессиональное и коммерческое применение лишает права на гарантийное обслуживание.

Поставщик не несет ответственности за получение травм потребителем при использовании массажера не по назначению.

Хранить в недоступном для детей месте.

Не оставлять массажер подключенным к электросети без присмотра.

Не оставлять провода там, где за них можно зацепиться и получить травму.

Не оставлять провод питания возле нагретых поверхностей.

Запрещается использовать массажер после того, как он упал или был поврежден.

Рекомендуется проверять провод питания и розетку на наличие повреждений.

При обнаружении повреждений на проводе питания и розетке необходимо обратиться в сервисный центр производителя или к квалифицированному специалисту.

При ремонте или техобслуживании рекомендуется использовать только оригинальные запчасти.

При неисправной работе массажера необходимо отключить его от электросети.

Запрещается пытаться произвести осмотр или вскрывать массажер самостоятельно.

Рекомендуется хранить упаковку от массажера в недоступном для детей месте.

Элементы и комплект массажера



Технические характеристики

| | |
|---------------------|------------------------|
| МОЩНОСТЬ | 24 W |
| ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | AC 110-240 V/ 50-60 HZ |
| ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | 12 V –2,5 A |

Дизайн или характеристики товара могут изменяться производителем без уведомления.

Пульт управления

| | |
|---|--|
|  | ВКЛ/ВЫКЛ: быстрое и удобное включение и выключение. Благодаря автоматическому таймеру массажер выключается через 15 минут. |
|  | КНОПКА ИЗМЕНЕНИЯ СКОРОСТИ МАССАЖА: имеет три скорости. |
|  | КНОПКА ИЗМЕНЕНИЯ ВРАЩЕНИЯ МАССАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, РЕВЕРСИВНЫЙ МАССАЖ. |
|  | КНОПКА РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ ПРОГРЕВА. |

Устранение неисправностей

| НЕИСПРАВНОСТЬ | РЕШЕНИЕ |
|--|--|
| МАССАЖЕР НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ | Убедитесь, что вилка подключена к электросети. Прибор должен быть включен. Убедитесь, что кнопка нажата. |
| ВНЕЗАПНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ РАБОТЫ МАССАЖЕРА ВО ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ | Массажер автоматически завершает работу спустя 15 минут. Убедитесь, что вилка подключена к электросети. Осмотрите, если ничего из вышеперечисленного не помогло, отключите электропитание и подождите час, чтобы массажер остыл. Массажер имеет функцию автоматической защиты от перегрева. Если проблема осталась, прекратите использование массажера и свяжитесь с магазином производителя для консультации. |
| МАССАЖЕР ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ НА НЕСКОЛЬКО СЕКУНД | В автоматической программе массажера заложена смена направления вращения для равномерного расслабления мышц. |

Массажер для шеи и спины Shiatsu Pro MS33

- ▶ **ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ НАПРЯЖЕНИЯ ПРИ ПОМОЩИ УНИВЕРСАЛЬНОГО МАССАЖЕРА ДЛЯ ШЕИ И СПИНЫ.**

Предназначенный для массажа шеи, нижней и верхней части спины прибор имеет 6 уникальных, массажных роликов, благодаря которым Ваши мышцы получают положительный заряд и тонус на целый день.

Для дополнительного комфорта можно включить функцию подогрева.

Очень мягкое покрытие обеспечивает нежное прикосновение, а удобные кнопки гарантируют легкое пользование.
- ▶ **ИННОВАЦИОННЫЙ И АНАТОМИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН.**

Благодаря анатомическому дизайну Вы сможете промассировать любые, даже самые труднодоступные участки.

Удобные ручки помогут ослабить или усилить силу, с которой прибор будет массировать Вашу шею и спину.

Массажер легко чистить каждый день, благодаря съёмной защитной сетке.
- ▶ **МАССАЖ ГДЕ УГОДНО БЛАГОДАРЯ ПОРТАТИВНОМУ ДИЗАЙНУ.**

Благодаря функции подключения в автомобиле Вы можете наслаждаться массажем даже во время поездки.

Массажер «Шиatsu ПРО» сэкономит Ваше время и деньги, потому что больше не потребуется искать массажный салон или бежать к массажисту при боли в мышцах.
- ▶ **МАССАЖНЫЕ РОЛИКИ.**

Благодаря роликам ORTOMAX вы едва ли ощутите разницу между массажем руками и Shiatsu Pro.

Задавайте направление (по часовой/против часовой) массажеру.

Три режима скорости: медленный, средний и быстрый.
- ▶ **МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МАССАЖЕР С ПОДОГРЕВОМ.**

При помощи данного прибора Вы сможете промассировать такие места Вашего тела, как шея, спина, поясница и даже ноги.

Выберите участок и помогите Вашим мышцам восстановиться после изнурительного дня.

Функция мягкого подогрева снижает болевые ощущения и усиливает эффект от массажа.
- ▶ **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:**

Запрещается использовать при наличии кардиостимулятора или других электронных имплантов;

Не рекомендуется использовать детям до 6 лет;

С осторожностью использовать при беременности;

Запрещено использование во время вождения;

Запрещается использовать при наличии синяков в месте массажа, содранной коже, раздражении кожи, воспалении вен, травмах или других открытых ранах.

Не рекомендуется использовать самостоятельно при когнитивных расстройствах.

Рекомендованные товары



МАССАЖНАЯ
ПОДУШКА
**MEDISTELLAR
X RELAX 3 IN 1**
MS12



МАССАЖЕР
ДЛЯ НОГ
FOOT EXPERT
MS44



МАССАЖЕР
ДЛЯ РУК
SMART HAND
MS54



МАССАЖЕР
ДЛЯ ГЛАЗ
EYE EXPERT
MS46



**ЗЕРКАЛО ДЛЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МАКИЯЖА**
С ПОДСВЕТКОЙ
ДНЕВНОГО СВЕТА
ДВА ЦВЕТА: SMOKE PINK / MILK WHITE
MS45

Гарантийный талон

Во избежание недоразумений убедительно просим Вас внимательно изучить инструкцию, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных:

Названия товара, артикула, дата продаж, подписи покупателя и названия организации продавца.

Название и артикул изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне. При нарушении этих условий, а также в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне изменены, стерты или переписаны, гарантийный талон признается недействительным.

При обнаружении данных недостатков как можно скорее обратитесь к продавцу. Не допускайте механических повреждений, попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, насекомых.

Возврат товара возможен только в упаковке предприятия –изготовителя, при условии наличия всех комплектующих, наличия товарного чека и отсутствия дефектов внешнего вида товара.

Внимание! Товар надлежащего качества возврату и обмену не подлежит. Подробно изучите инструкцию по эксплуатации прибора, гарантийные обязательства продавца.

Строго соблюдайте установленные в них правила. Гарантия не распространяется на неисправности прибора, которые возникли после передачи его Потребителю и возникшие по следующим причинам:

1. Использование с нарушением требований, указанных в инструкции по эксплуатации прибора.
2. Нарушение правил хранения, транспортировки товара.
3. Действием третьих лиц.
4. Действием непреодолимой силы (пожар, наводнение, удар молнии и т.п.).
5. Использование в коммерческих целях.

Настоящая гарантия предоставляется в дополнение к правам Потребителя, установленным действующим законодательством РФ.

Условия гарантии не предусматривают периодическое техническое обслуживание, установку и настройку изделия у владельца.

Сервисный центр: главный сервисный центр TM MEDISTELLAR в РФ находится по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе 21 км, с26, оф 11/8.

Контакты: +74993808128 WhatsApp, medistellar@gmail.ru

Наличие сервисного центра в вашем городе уточняйте.

Будем рады вам помочь.

Гарантийный срок товара составляет: 3 года

| | |
|--|---|
| Наименование изделия: | <i>Массажер для шеи и спины Shiatsu Pro</i> |
| Артикул | <i>MS33</i> |
| Цена | |
| Дата продажи | <i>“ ___ ” _____ 202__ г.</i> |
| Торговая организация | |
| Подпись продавца | |
| <i>Внешний вид и комплектность оборудования, товар во время работы продемонстрирован в мое присутствие, претензий не имею.</i> | |
| <i>С гарантиейными обязательствами ознакомлен и согласен.</i> | |
| | Подпись покупателя |

SHIATSU PRO

МАССАЖЕР ДЛЯ ШЕИ И СПИНЫ

ИНСТРУКЦИЯ

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ К НАМ



WWW.MEDISTELLAR.RU



VK.COM/MEDISTELLAR



[@ORTO_BEAUTY_SHOP](https://WWW.INSTAGRAM.COM/ORTO_BEAUTY_SHOP)

МЫ БУДЕМ БЛАГОДАРНЫ

ЕСЛИ ВЫ ОСТАВИТЕ ОТЗЫВ В ИНТЕРНЕТЕ С ХЭШТЕГОМ #MEDISTELLAR

ERC CE

MS 33