




ULTIMA A1-W

Руководство пользователя



Наименование деталей

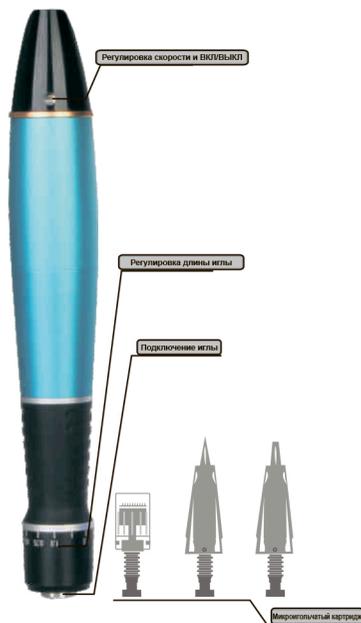

Правила использования

–Режим работы через адаптер
 (1) Подключите адаптер постоянного тока (DC) к разьему.
 (2) Вставьте адаптер постоянного тока (DC) в розетку переменного тока (AC).

–Режим работы через батарею


1) Включите Dr.pen напрямую с полностью заряженной батареей.
 2) Зарядка батареи: вставьте адаптер в розетку и подключите его к зарядному устройству. Индикатор батареи загорится красным. При полной зарядке индикатор загорится зеленым.



3) Батарея заряжается полностью примерно за 4 часа.
 4) Батарею можно заряжать во время работы прибора.

Правила использования

2. Подготовка к работе
 (1) Достаньте микроигляльный картридж из стерилизованной упаковки.
 (2) Вставьте в круглый слот 1 слот 2, надавите на микроигляльный картридж горизонтально до конца.

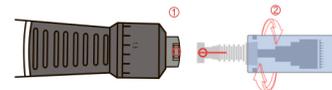

(3) Зафиксируйте картридж, повернув его против часовой стрелки.
 (4) Регулировка длины иглы должна производиться после включения прибора.
 (5) Если вы хотите извлечь микроигляльный картридж, поверните его по часовой стрелке и вытолкните горизонтально, подгоняя круглые слоты (1 и 2) друг к другу.

(3) Регулировка длины иглы
 Вы можете отрегулировать длину иглы, поворачивая регулировочное кольцо по часовой или против часовой стрелки. Если повернуть его по часовой стрелке, длина будет больше. Если повернуть его против часовой стрелки, длина будет меньше.



Правила использования

3. Регулировка скорости и длины иглы
 (1) Регулировка скорости и ВКЛ/ВЫКЛ



Переключатель питания
 Нажимайте в течение 2 секунд, чтобы открыть прибор

(2) 5 уровней контроля скорости

Нажимайте на переключатель в течение 2 секунд, чтобы открыть прибор. Он начинает с минимальной скорости до максимальной при первом включении питания. Скорость циклически меняется от низкой до высокой. Когда вам нужно остановить прибор, пожалуйста, нажимайте на переключатель в течение 2 секунд.

Чем выше частота мигания светового индикатора, тем выше скорость

Справочная таблица

ЗОНА	ТОНКАЯ КОЖА	УТОЛЩЕННАЯ КОЖА
Лоб	0,25–0,5 мм	0,5–0,75 мм
Межбровье	0,25–0,5 мм	0,5–1,0 мм
Нос	0,25 мм	0,5 мм
Область вокруг глаз	0,25 мм	0,25–0,5 мм
Скулы	0,5 мм	0,5–1,0 мм
Щеки и подбородок	0,5–1,0 мм	1,0–2,0 мм
Верхняя губа	0,25 мм	0,25–0,75 мм
Губы на лице	1,0–1,25 мм	1,5–2,0 мм
Растяжки	1,5–2,0 мм	1,5–2,0 мм
Хирургические шрамы и шрамы от ожогов	2,0–3,0 мм	

Предостережение

Переменного тока	Серийный номер
Постоянного тока	Представитель в ЕС
Оборудование класса II	CE маркировка
Внимание, обратитесь к сопроводительной документации	Производитель
Дата изготовления	Незаземлённая рабочая часть

Спецификация

1. Изделие
 Прибор для микроигляльной терапии с помощью вибрации.

2. Принцип действия
 Прибор для прокалывания кожи и введения лекарств или косметических средств с помощью микроиглы, выполняющей возвратно-поступательные движения.

3. Классификация
 –Класс защиты от поражения электрическим током: оборудование класса II
 –Степень защиты от поражения электрическим током: незаземлённая рабочая часть
 Степень защиты от попадания воды: стандартное оборудование (IPX0)
 –Режим работы: непрерывная работа

4. Спецификация
 1) Наименование: Автоматический электрический штамп для мезотерапии Ultima A1
 2) Модель:
 3) Батарея: 5В, 1000 мА
 4) Вес: Основной корпус 76 г
 5) Размер: 150*23 (мм)

Гарантия

	Пользователю обязательно ознакомиться с настоящим руководством перед использованием прибора и следовать инструкциям.
	Противопоказания: 1. Острые заболевания или заболевания крови, сопровождающиеся температурой выше 38°C 2. Аллергии и гематобиты 3. Меланомы на лице 4. Высокая температура 5. Постоянные язвы и язвы 6. Прямые лекарственные препараты 7. Возраст до 12 лет
	Не подключайте прибор к питанию, отключив от 220В переменного тока. Это может привести к повреждению шнур или неисправности прибора.
	Не используйте его в местах с высокой температурой, пыльных помещениях или при высокой влажности (дождь с увеличением воздуха). Это может привести к неисправности.
	Не ремонтируйте, не разбирайте и не меняйте контроллер и корпус. Это может привести к неисправности.
	Не прикасайтесь к устройству и не оплодотворяйте кожу ладонями или пальцами. Это может привести к порезам или ожогам.
	Не используйте оголенные или поврежденные шнур. Это может привести к пожару (обязательно замените его на новый).
	Не используйте поврежденный шнур, который имеет трещины или зазоры. Они могут ударить кожу.
	Если вы не используете прибор в течение длительного времени, отключите его от батареи.
	Обязательно осмотрите прибор на предмет неисправностей. Если обнаружены какие-либо проблемы, устраните их.
	Никто, кроме оператора, не может прикасаться к прибору. Это может привести к несчастным случаям или неисправности.

Упаковочный лист

Прибор	1 шт.
Картриджи	2 шт. по 12 игл
Руководство	1 шт.
Адаптер	1 шт.

Обслуживание

1. Гарантия на детали Dr.pen составляет 6 месяцев с даты их изготовления.
 2. Мы обеспечиваем бесплатный ремонт наших изделий в течение 600 часов (гарантия) со дня их приобретения. Если какое-либо наше изделие имеет повреждения или брак, мы обеспечиваем ремонт или замену.
 3. Если неисправности произошли по следующим причинам, вы должны оплатить ремонт даже в течение гарантийного срока.
 –Неисправности из-за небрежного обращения пользователя с прибором, его самостоятельного ремонта или переделки
 –Неисправности из-за ремонта человеком, не являющимся техническим специалистом авторизованного производителя дилерского магазина или центра обслуживания клиентов
 –Неисправности или повреждения, вызванные ударами во время транспортировки
 –Неисправности, вызванные использованием аксессуаров или опций, неавторизованных производителем

1. Общее техническое обслуживание
 –Держите прибор выключенным. Протрите его поверхность сухой тканью.
 –Держите его вдали от прямых солнечных лучей или высокой температуры и влажности.
 –Не доверяйте проверке, ремонт или переделку прибора непрофессионалу.
 2. Регулярный осмотр
 –Обязательно осмотрите прибор и адаптер перед использованием.
 –Если вы не использовали прибор в течение длительного времени, убедитесь, что он работает должным образом и безопасен.

ULTIMA A1-W

Руководство пользователя

Официальный дистрибьютор **ООО ВБГ Косметик**
www.vbg-cosmetic.ru

8 (800) 200-34-90; +7 (499) 490-52-75 Пн-Пт: с 9:00 до 18:00
 Адрес: 108811, г. Москва, Киевское шоссе, 22-й км, ДВЛД 4, стр. 2 оф: 509Г, (Бизнес-парк Румянцево, корпус Г).
 Приём претензий и обращений: info@vbg-cosmetic.ru