



9 мм 12 мм 36 мм 42 мм Нано

MTSA*

Различные картриджи, подходящие для прибора

1 мм 3 мм 5 мм 7 мм

PMS*




(1): Вставьте батарею в зарядное устройство (рисунк 3)
(2): Подключите адаптер постоянного тока к разъему, а затем подключите источник питания (рисунк 4)

 Цвет индикатора

- Индикатор батареи загорится красным.
- При полной зарядке индикатор загорится зеленым.

Зарядное устройство

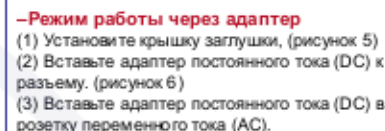

1. Достаньте микроиглольный картридж из стерилизованной упаковки.
2. Вставьте в круглый слот 1 слот 2, надавите на микроиглольный картридж горизонтально до конца.
3. Зафиксируйте картридж, повернув его против часовой стрелки.
4. Регулировка длины иглы должна производиться после включения прибора.
5. Если вы хотите извлечь микроиглольный картридж, поверните его по часовой стрелке и выполните горизонтально, подгоняя круглые слоты (1 и 2) друг к другу.

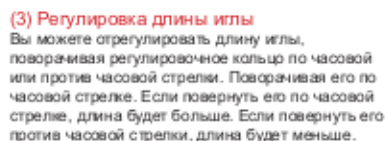


Diagram illustrating the rotation of the drill bit during drilling. Red curved arrows indicate the direction of rotation.

Против часовой стрелки
Длина иглы будет меньше


По часовой стрелке
Длина икры будет больше



Переключатель питания
Нажимайте в течение 2 секунд чтобы открыть прибор

Нажимайте на переключатель в течение 2 секунд, чтобы открыть прибор. Он начинает с минимальной скорости до максимальной при первом включении питания. Скорость циклически меняется от низкой до высокой. Когда вам нужно остановить прибор, пожалуйста, нажимайте на переключатель в течение 2 секунд.

Чем выше частота мигания светового индикатора, тем выше скорость

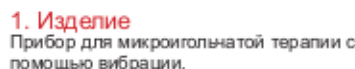

2. Принцип действия

3. Спецификация

1) Наименование изделия:	Автоматический электрический штамп для мезотерапии
2) Модель:	Ultima A6
3) Батарея:	5В, 1000 мА
4) Вес:	Основной корпус 62г
5) Размер:	126*23 (мм)

Упаковочный лист

Прибор	1 шт.
Батарея	2 шт.
Адаптер	1 шт.
Зарядное устройство	1 шт.
Карtridge	2 шт. по 12 игл
Руководство	1 шт.



- Держите прибор выключенным. Протирайте его поверхность сухой тканью.
- Держите его подальше от прямых солнечных лучей или высокой температуры и влажности.
- Не оставляйте измерение, ремонт или переналадку устройства непрофессионалу.
- Регулярный осмотр
- Обязательно осмотрите прибор и адаптер перед использованием.
- Если вы не использовали прибор в течение длительного времени, убедитесь, что он работает должным образом и безопасен.

[illegible]