


COSBEAUTY®

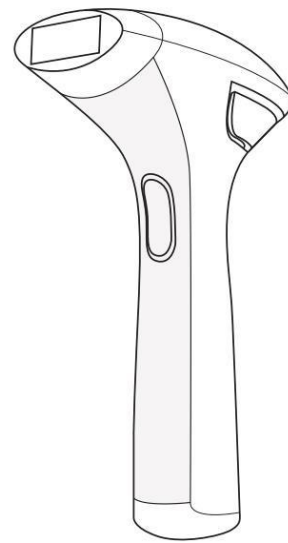

PerfectSmooth  
Домашний фотоэпилятор

Руководство пользователя

COSBEAUTY JAPAN Co.,Ltd.  
Address in Japan:  
D,Ycube,1-17-2,Minamiaoyama,Minato tu,Tokyo,107-062,Japan  
Headquarter in China: CosBeauty Technology Co.,Limited  
Address: 21 Floor, YiHua Financial Technology Building, NO.2388,  
Houhai Dadao, Nanshan, Shenzhen  
Tel: (86)755 8627 1293 | Fax: (86)755 8629 0505  
Customer service: 400 9600 630  
Website: www.cos-beauty.com



Touch A New Beautiful Life

# Содержание

Комплектация_ .....	2
Описание фотоэпилятора_ .....	3
Меры предосторожности_ .....	4
Инструкция по применению .....	7
Замена лампы_ .....	10
Техническое обслуживание .....	11
Часто задаваемые вопросы_ .....	11
Технические характеристики_ .....	12
Отказ от ответственности .....	13
Гарантия .....	13


## Комплектация

Фотоэпилятор CosBeauty PerfectSmooth x1


Лампа на 200 000 вспышек × 1

Блок питания × 1

Защитные очки × 1

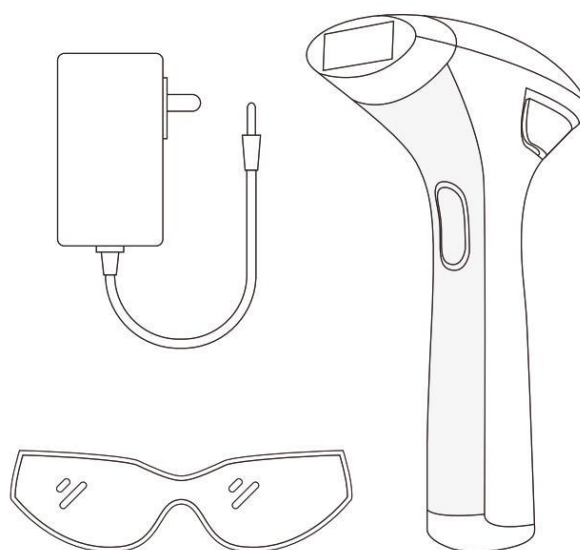

## Описание фотоэпилятора

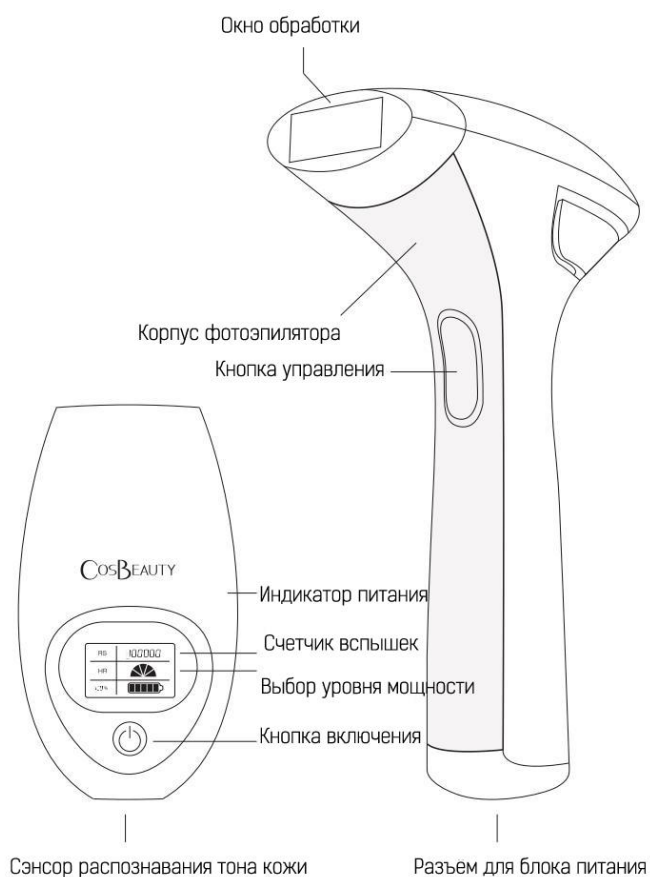

## Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочитайте эти меры предосторожности и следуйте инструкциям по эксплуатации. Использование прочитанного должно гарантировать правильность и безопасность работы продукта, чтобы пользователи фотоэпилятора или другие люди не пострадали, пожалуйста, используйте устройство только по назначению и в соответствии с рекомендациями.



Внимание!

- Не рекомендуется использовать людям, имеющим физические, психические или дерматологические заболевания. Однако, допускается использование под контролем профессионала или дерматолога, который сможет проконтролировать процесс.
- Пожалуйста, держите его вне досягаемости детей.
- Пожалуйста, не используйте дополнительные аксессуары, не рекомендованные компанией Cosbeauty.
- Пожалуйста, не используйте прибор вблизи высокотемпературных объектов.
- Пожалуйста, не используйте прибор вблизи огня.
- Пожалуйста, не обматывайте шнур вокруг разъема электропитания.
- Пожалуйста, не повреждайте шнур питания: не сгибайте, не скручивайте, не растягивайте, не нагревайте, не связывайте и не пережимайте его, чтобы не вызывать пожар, поражение электрическим током и избежать других опасностей. Пожалуйста, прекратите использовать устройство если:
  1. Кабель питания скручен и его невозможно восстановить.
  2. Кабель питания или разъем питания сломан, вышел из строя или треснул.
- Пожалуйста, не помещайте устройство в воду. Не храните его в ванной комнате.



Внимание!

- Пожалуйста, не приближайте устройство к огню, нагретым поверхностям и легковоспламеняющимся объектам
- Не направляйте на глаза, это может вызвать проблемы со зрением. Пожалуйста, надевайте защитные очки

**Людам, которые находятся в описанных ниже ситуациях или имеют данные заболевания, не разрешено использовать данное устройство:**

Туберкулез, лихорадка, гипертония, инфекция, дерматоз, рак, аллергия, гематоз, висцеральное заболевание, атопический дерматит, чувствительная кожа, переутомление или слабость, похмелье, прием снотворных, период беременности, лактация, эпилепсия, ангиотензины из-за долгосрочного использования стероидного гормона и гепатоз, лучевая терапия или химиотерапия в течение 3 месяцев

**Не разрешается использовать устройство на перечисленных ниже зонах:**

Порезанная кожа, участки, где есть вмешательство пластического хирурга, на ротовой и лицевых слизистых оболочках лица, на участках кожи с сыпью, ожогами, флогозом, акне, инфекцией, зудом, родинками, веснушками, вирусными опухолями, полыми венами, а также на кадыке, ареоле соска, пупке, влажной, анусе и прилегающих областях и на татуированной коже



Внимание!

- Не разбирайте, не ремонтируйте, не переделывайте устройство
- Не роняйте и не бросайте прибор
- Не пользуйтесь с кем-то одним прибором на двоих
- Не используйте его в плохо освещенных помещениях
- Не пользуйтесь прибором в ванной комнате
- Если вы почувствовали боль или дискомфорт во время процедуры, то немедленно прекратите использование прибора и посоветуйтесь со специалистом


## Инструкция по применению

### Подготовка


Побрийте бритвенным станком ту область на которой будете использовать прибор  
Проверьте окно обработки и сенсор определения тона кожи, они должны быть максимально чистыми, а кожа на месте обработки не должна иметь ран и царапин.

### Шаги


- 1 Подключите блок питания, как показано на рисунке, вставьте вилку в розетку, индикатор питания будет мигать красным цветом
- 2 Нажмите кнопку включения, чтобы включить экран дисплея, на котором будет показан счетчик вспышек и текущий уровень мощности

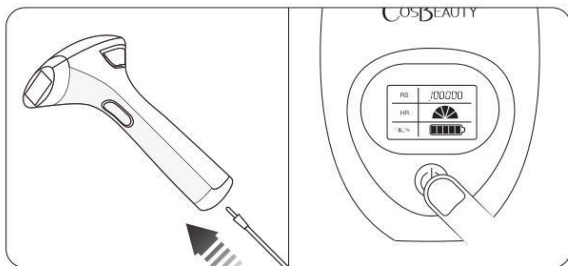

- 3 Поднесите вплотную окно обработки с датчиком тона кожи к обрабатываемому участку кожи. Если термочувствительный элемент начнет вибрировать и индикатор питания загорится красным светом, значит Ваш тон кожи подходит для использования устройства
- 4 После тестирования тона кожи устройство будет установлено на 1 уровень мощности. Нажмите кнопку включения, чтобы переключить уровень мощности, выберите уровень, который вам наиболее удобно использовать, после тестирования на коже

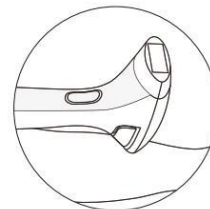

- 5 Наденьте защитные очки.
- 6 Поместите окно обработки параллельно к Вашей коже, индикатор питания отобразит сплошную зеленую подсветку, затем нажмите кнопку управления для начала процедуры. Каждый раз перемещайте фотоэпилятор на расстояние примерно равное половине диаметра окна

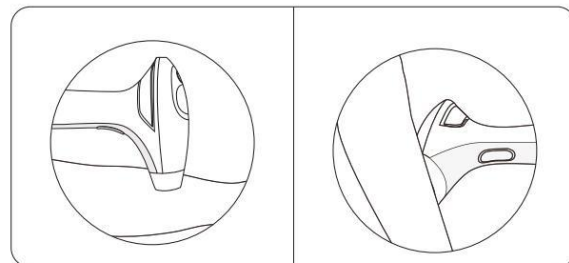

- 7 Когда вы закончите обрабатывать одну область (например, одну руку), повторите процедуру на той же области, это усилит эффективность
- 8 После использования нажмите и удерживайте кнопку включения в течение 3 секунд, чтобы выключить устройство

## Уход за кожей

- После обработки нанесите увлажняющий крем на обработанную область кожи, чтобы увлажнить ее. Если на обработанной области появилось раздражение, используйте охлаждающую жидкость или холодное полотенце, чтобы успокоить кожу.
- Пожалуйста, не применяйте парфюм, маску или скраб.
- В течение 24 часов после процедуры избегайте ультрафиолетовых лучей, во время ухода за кожей не забудьте применить солнцезащитный крем.
- Если раздражение на коже не проходит в течение 24 часов, то необходимо проконсультироваться со специалистом.

## Последующие процедуры

- Полный курс состоит из 8-10 процедур.
- Первые четыре процедуры мы советуем проводить каждые две недели.
- С 5 по 7 процедуру, пожалуйста, проводите один раз в месяц.
- С 8 по 10, пожалуйста, проводите каждые три месяца.
- Пожалуйста, обращайте внимание на рост волос, чтобы решить, как часто проводить процедуры. Все зависит от ситуации конкретного человека, обычно мы советуем проводить новую процедуру, когда волосы выросли на 30%, это помогает достичь наилучшего результата.

## Замена лампы

### Срок службы лампы

Время работы лампы исчисляется 200 000 вспышками, когда счетчик вспышек покажет «0», замените лампу.


### Отсоедините лампу

Держите лампу, и потяните, как показано ниже, чтобы отсоединить ее от устройства.

### Вставьте новую лампу

Поместите чип лампы прямо в слот для чипа на устройстве, нажмите и поверните. Вы должны услышать щелчок, это означает, что все надежно закреплено.

Внимание: убедитесь, что питание отключено при замене картриджа.

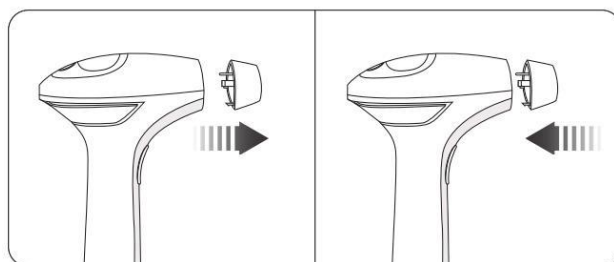

### Дополнительные лампы

У нас есть три разных типа ламп\* для удаления волос, для омоложения кожи, избавления от акне. Если у вас есть какие-либо вопросы или Вы хотите их приобрести, пожалуйста, свяжитесь с представителями CosBeauty.

\*-опционально

## Техническое обслуживание

### Очистка


- После использования протрите лампу салфеткой или сухой тканью, чтобы избавиться от остатков косметики или волос.
- Протрите влажной чистой тканью, чтобы удалить пятна.

### Хранение


- Во избежание поломки или потери аксессуаров, пожалуйста, храните продукт в коробке каждый раз после использования.
- Держите его в сухом прохладном месте, вдали от света. Не храните во влажном помещении или в противном случае это может повлиять на работу устройства.

## Вопросы и ответы

Когда я прикладываю устройство к коже, ничего не происходит.

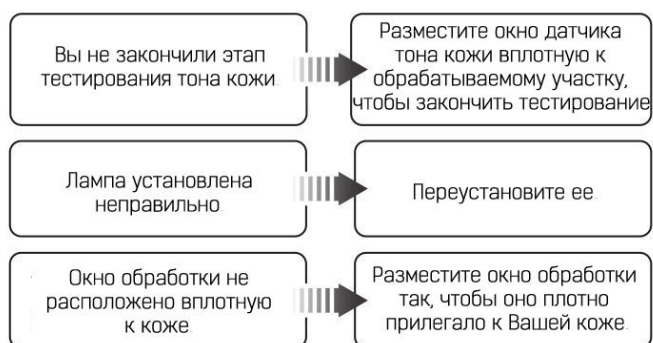

Мне горячо и больно во время процедуры.

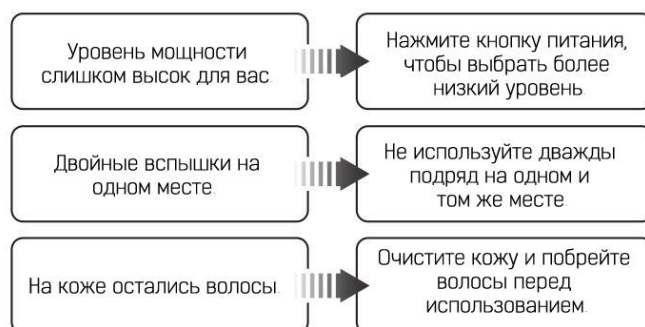

## Технические характеристики

Размер	80,5 мм * 144,6 мм * 218,6 мм
Вес нетто	355 г
Мощность	36 Вт ( 12В / 3А )
Входное напряжение	100В-240В
Номин. диапазон частот	50 Гц / 60 Гц
Срок службы лампы	200 000 вспышек
Уровень	5 уровней мощности
Тип эпиляции	(Интенсивный импульсный свет)
Доступный цвет	Роз /зол /синий/черн /фуксия
Спектр при удалении волос	> 510 нм
Спектр при омолож. кожи	> 550 нм
Спектр при избавл. от акне	> 700 нм
Температура хранения	0-45 °С
Рабочая температура	5-35С
Рабочая влажность	25% -75%

## Отказ от ответственности

CosBeauty оставляет за собой право конечного объяснения информации о фотопилиляторе CosBeauty PerfectSmooth IPL, третьим лицам запрещено распространять информацию, связанную с устройством, без разрешения CosBeauty, в противном случае нам придется обратиться в суд. В любом случае CosBeauty Technology Co, Ltd не несет ответственности за последствия, вызванные ненадлежащим использованием устройства потребителями.

## CosBEAUTY® Гарантийный талон

Имя: \_\_\_\_\_ (г-жа, г-н)

Адрес: \_\_\_\_\_

Тел: \_\_\_\_\_

Серийный номер: \_\_\_\_\_

Номер модели: \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

## Гарантия

**1 Гарантийный срок:** 12 месяцев, начиная с даты покупки

**2 В течение Гарантийного периода CosBeauty гарантирует отсутствие брака в Продукте, в также его высокое качество, при надлежащем использовании Продукта.**

**3 В течение гарантийного срока, если произойдет какое-либо из следующих действий, будут взиматься определенные расходы на обслуживание:**

- Повреждение продукта из-за пожара, наводнения, аномального напряжения или других стихийных бедствий. Неисправность и повреждения, вызванные неправильным использованием, неразрешенным ремонтом и изменением модификаций
- Невозможность предоставить гарантийный талон и чек о покупке
- Неисправность продукта, вызванная падением и ненадлежащей транспортировкой после покупки,
- Информация пользователя на гарантийном талоне записана нечетко или неправильно
- Повреждение продукта, вызванное разборкой и ремонтом устройства пользователем без проверки в авторизованном центре у наших специалистов
- В гарантийном талоне отсутствует номер модели продукта, серийный номер, дата покупки или информация о продавце или, если надпись была изменена

**4 В каких случаях в течение гарантийного срока, если происходит какое-либо из следующих действий, гарантийное обслуживание не предоставляется:**

- Покупка для бизнеса вместо индивидуального потребления, в этом случае на товар не распространяются условия гарантии
- Случаи потери цвета или повреждения в результате неправильного использования не являются гарантийными
- Если модель продукта и серийный номер отсутствуют, заполненный гарантийный талон не соответствует официальной модели продукта № и серийный номер, в данном случае гарантийные условия не распространяются

### 5 Обратите внимание

- Действие настоящей гарантийной карточки ограничено на территории народной республики Китай (не действует в Гонконге, Макао, Тайвань) и России (необходимо обратиться к Дистрибьютору)
- Настоящий гарантийный талон не может быть выдан вновь, пожалуйста, храните его и предъявляйте при гарантийном случае
- Если у вас есть какие-либо вопросы относительно послепродажного обслуживания, пожалуйста, свяжитесь с нами или продавцом