

d'èvi Skin PRO

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Знакомство с прибором

Многофункциональный прибор для удаления волос D'Evi Skin PRO — это фотоэпилятор, который поможет эффективно и безопасно удалить нежелательные волосы на теле, разгладить кожу и уменьшить следы, которые остаются после акне. Этот прибор работает по интеллектуальной технологии интенсивного импульсного света (IPL) и объединяет в себе также разные оптические технологии в области красоты и здоровья. D'Evi Skin PRO является одним из самых безопасных и профессиональных приборов в области фотоэпиляции.

Внимательно прочитайте данное руководство

Основная цель при разработке D'Evi Skin PRO - обеспечение комфорта и безопасности потребителя. Вся продукция производится в соответствии с самыми высокими стандартами качества. Пожалуйста, прочитайте данное руководство, чтобы перед использованием соблюсти все меры предосторожности.

Универсальность

Фотоэпилятор D'Evi Skin PRO — прибор для удаления нежелательных волос, который подходит как для мужчин, так и для женщин.

Подходит ли прибор для Вас?

Цвет кожи

Фотоэпилятор D'Evi Skin PRO подходит для кожи светлого, среднего и темного оттенка, до 5 оттенка включительно. Фотоэпилятор нельзя использовать на темном цвете кожи. В случае если у вас коричневый оттенок кожи, начните процедуру с самого низкого уровня интенсивности и отрегулируйте его в зависимости от болевых ощущений.

Цвет волос

D'Evi Skin PRO подходит для удаления волос натурального черного или каштанового цвета. Прибор не эффективен для белых, седых, светлых или рыжих волос.

Меры предосторожности

I. Противопоказания

Данный прибор не предназначен для использования следующим лицам:

- Дети, люди пожилого возраста, а также те, у кого имеются воспаления на коже;
- Люди с фоточувствительной кожей или принимающие лекарства, вызывающие фоточувствительность;
- Люди с кардиостимуляторами и другими имплантируемыми электронными медицинскими устройствами;
- Люди, поддерживающие жизнь с помощью устройств жизнеобеспечения, таких как ЭКМО (Экстракорпоральная мембранная оксигенация).

II. Предостережения

1. Не разрешается использовать беременным и кормящим женщинам.
2. Не используйте D'Evi Skin Pro, если вы не достигли возраста 18 лет.
3. Не направляйте D'Evi Skin Pro на участки тела с темными пятнами, например, родимыми пятнами, татуировками, папилломами или бородавками. Это может травмировать вашу кожу или ухудшить текущее состояние.
4. Не используйте D'Evi Skin Pro, если ваша кожа подвергалась естественному или искусственному загару или обгорела на солнце. Ваша кожа может быть очень чувствительной после пребывания на солнце и особенно восприимчива к ожогам, образованию пузырей, обесцвечиванию или образованию рубцов, если вы используете D'Evi Skin Pro. Подождите 1 неделю, пока солнечный ожог или загар не сойдет, прежде чем использовать фотоэпилятор.
5. Не используйте D'Evi Skin Pro напрямую в области ушей, шеи, сосков, половых органов или вокруг ануса. Цвет кожи в этих областях может быть темнее, а волосы - гуще. Прибор может вызвать дискомфорт/боль или травмировать кожу.
6. Не удерживайте окно аппликатора (откуда исходят вспышки) неподвижно над одним и тем же участком кожи и не подвергайте один и тот же участок воздействию нескольких световых импульсов одновременно. Это может привести к выделению избыточного тепла, что может повредить кожу (необходимо полностью обработать одну часть тела, затем вернуться в исходное положение и повторить обработку).
 - Если после использования фотоэпилятора возникли аллергические реакции, такие как покраснение, отек, и они не проходят более 24 часов, пожалуйста, прекратите использование прибора и обратитесь к врачу.


III. Предупреждения

1. Из-за наличия высоковольтных деталей и соединений внутри изделия, пожалуйста, не разбирайте его.
2. Пожалуйста, не закрывайте вентиляционные отверстия на приборе во время его использования.
3. Фотоэпилятор храните вдали от воды или влаги.
4. Никогда не пользуйтесь фотоэпилятором, если вилка или шнур питания повреждены.
5. Никогда не используйте фотоэпилятор в легковоспламеняющейся и взрывоопасной среде.


IV. Безопасное использование

1. Вспышки, исходящие из окна аппликатора, запрещается направлять в глаза и другие уязвимые части тела. При использовании аппарата необходимо надевать защитные очки.
2. Перед использованием фотоэпилятора, пожалуйста, снимите с себя все металлические предметы (ювелирные изделия – кольца, браслеты и тп.), чтобы избежать поломки прибора.
3. Пожалуйста, используйте прибор вдали от детей и храните его в недоступном для них месте.


Области применения

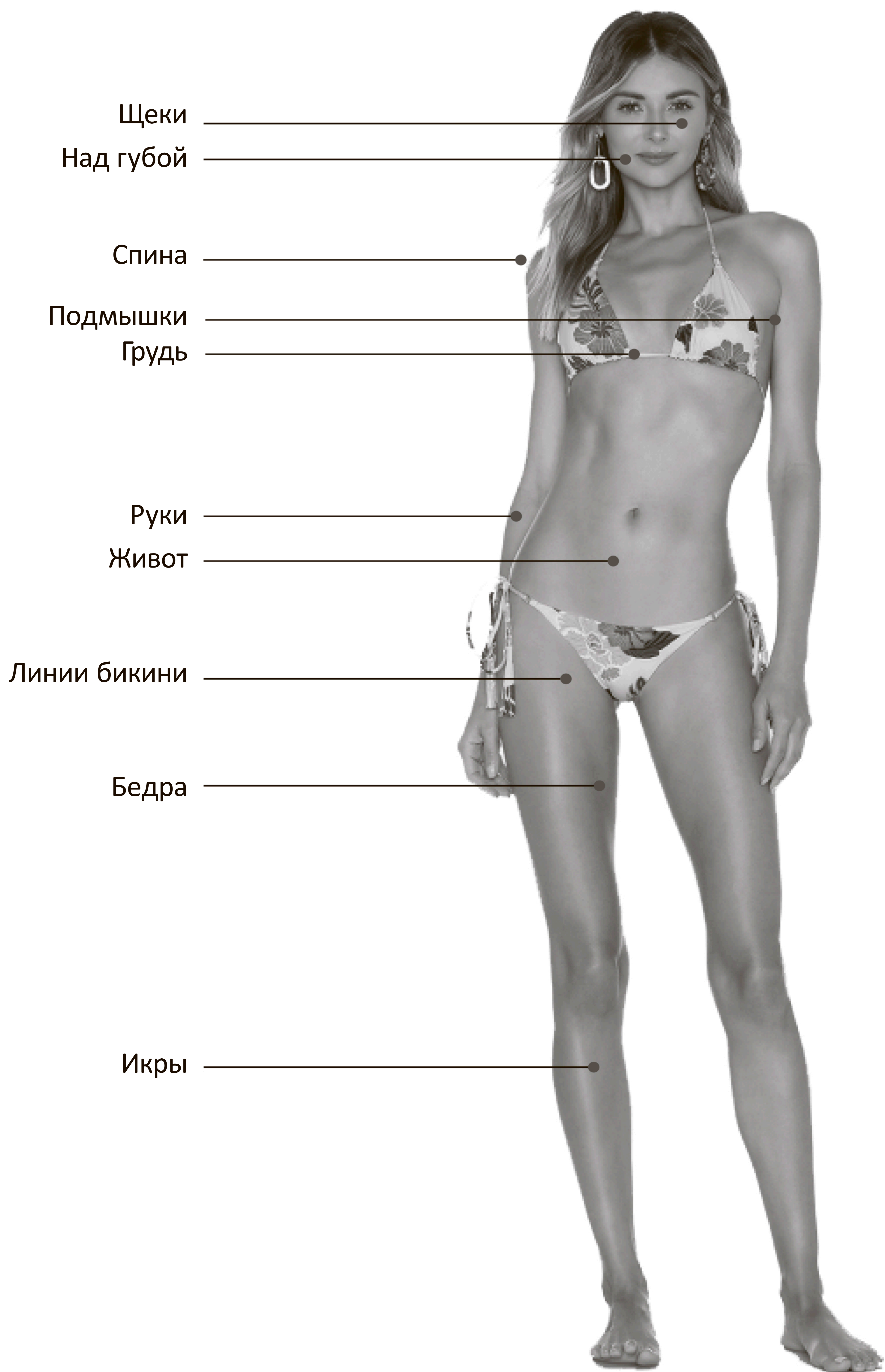

Описание фотоэпилятора

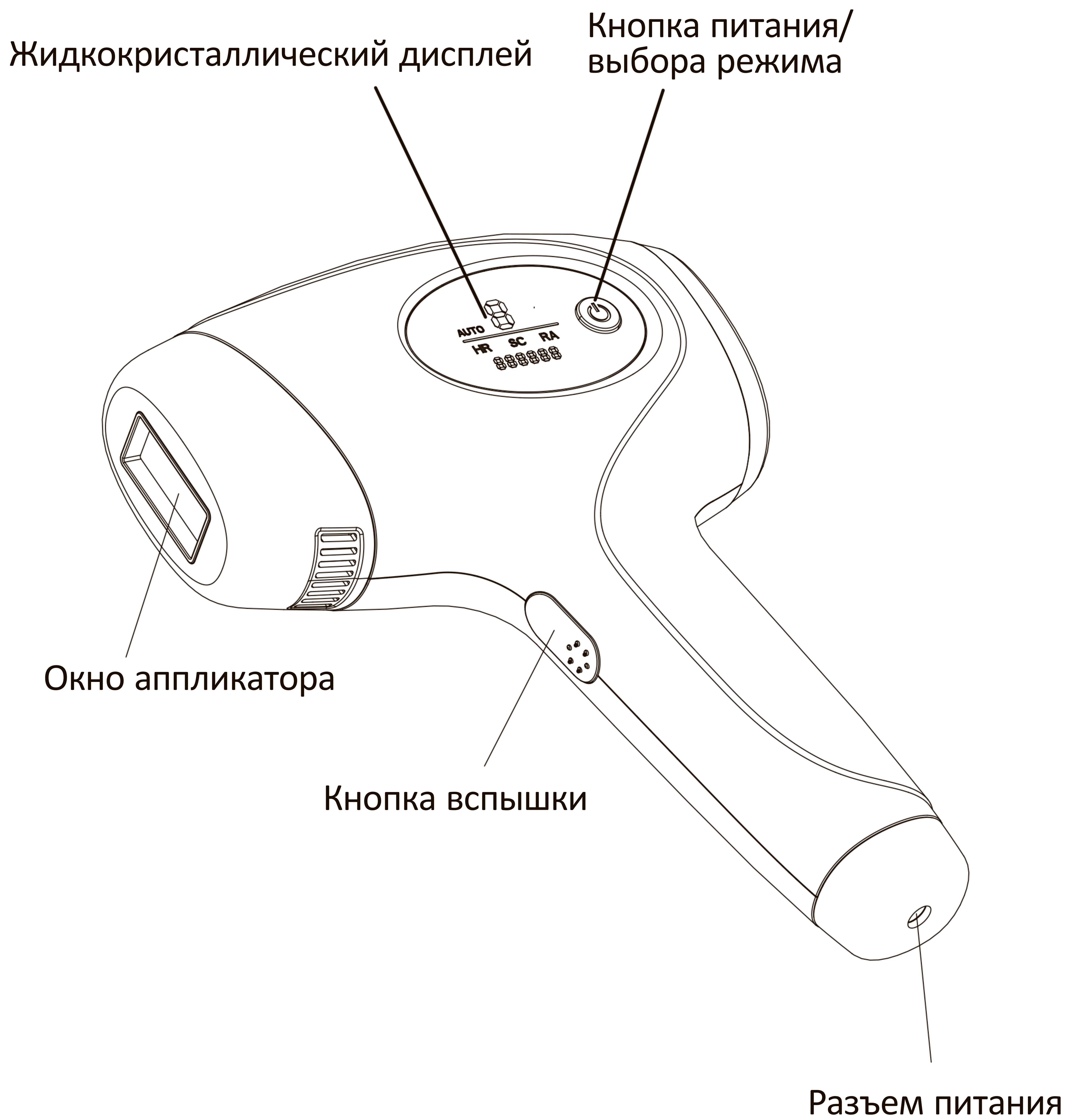

Экран фотоэпилятора

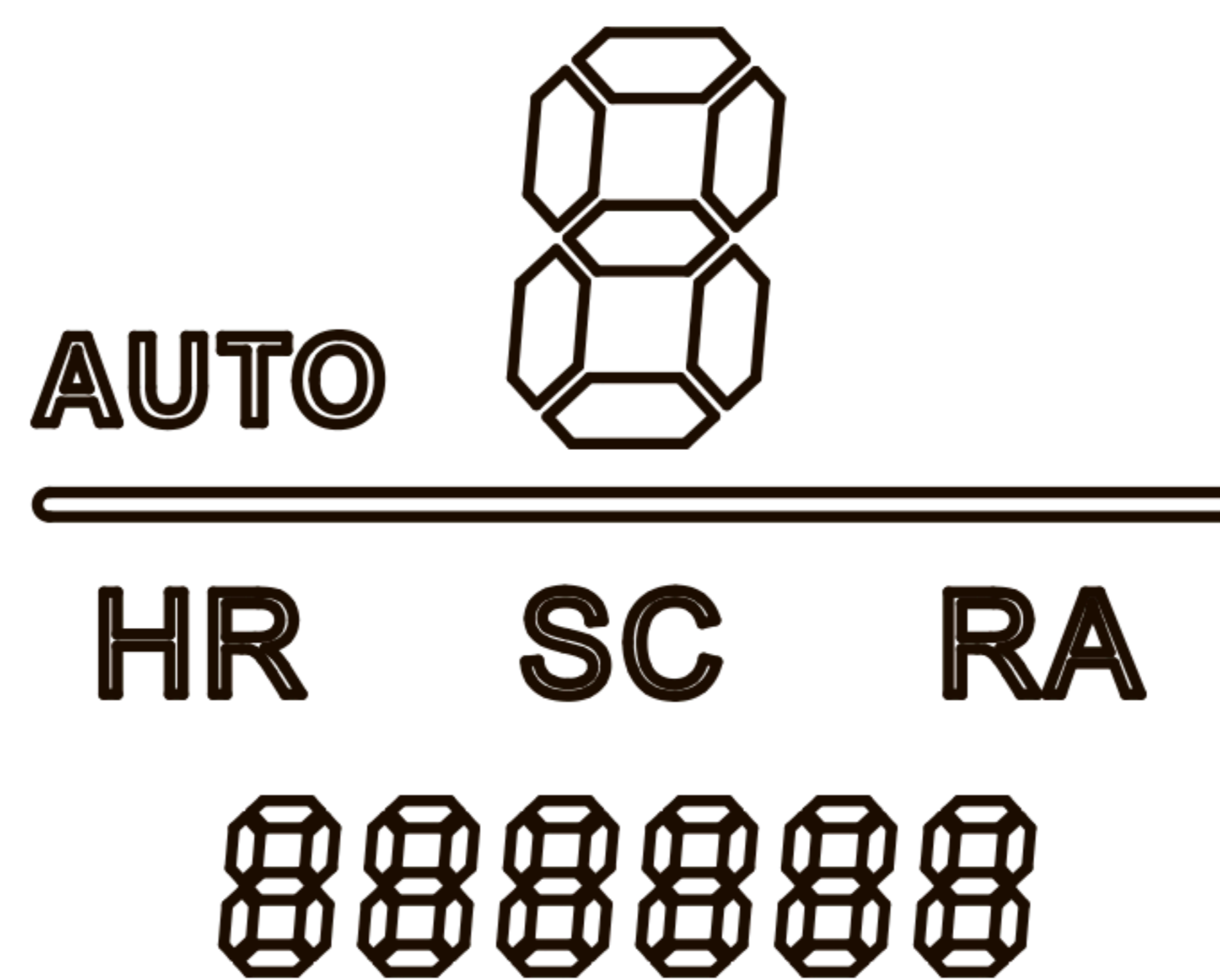

ЖК-дисплей	Функции процедур	Параметры
HR	Удаление волос	
SC	Омоложение кожи	/
RA	Избавление от постакне	
AUTO	Автоматический режим	/
Цифры 1-9	Интенсивность вспышек	Уровни 1-9
Шестизначное число	Оставшееся кол-во вспышек	/


Тест на чувствительность кожи

Перед первым использованием прибора на каждой новой области тела, мы рекомендуем вам сделать пробу реакции на D'Evil Skin Pro для каждой из этих областей.

1. Включите питание и само устройство.
 2. Выберите 1-ый или 2-ой уровень интенсивности.
 3. Следуйте инструкциям по проведению процедур и мерам предосторожности для выбранной области кожи.
 4. Подождите 24 часа и проверьте, не появились ли какие-либо кожные реакции. Если кожа выглядит нормальной, можно приступить к полноценной процедуре.
 5. Если в обработанном месте наблюдаются какие либо изменения на коже, пожалуйста прекратите использование устройства.
- Пользуйтесь прибором вдали от детей и храните его в недоступном для них месте.

Использование D'Evi Skin PRO

1. Подготовьте кожу к процедуре. Перед фотоэпиляцией необходимо сбрить волосы в зоне обработке, далее промыть кожу и насухо вытереть. Использовать косметические средства не нужно. Для надлежащего эффекта от процедуры убедитесь, что над поверхностью кожи не осталось волосков.
2. Подключите адаптер питания к фотоэпилятору и наденьте специальные защитные очки, прилагаемые к прибору. Дисплей фотоэпилятора загорится и появится надпись "OFF".

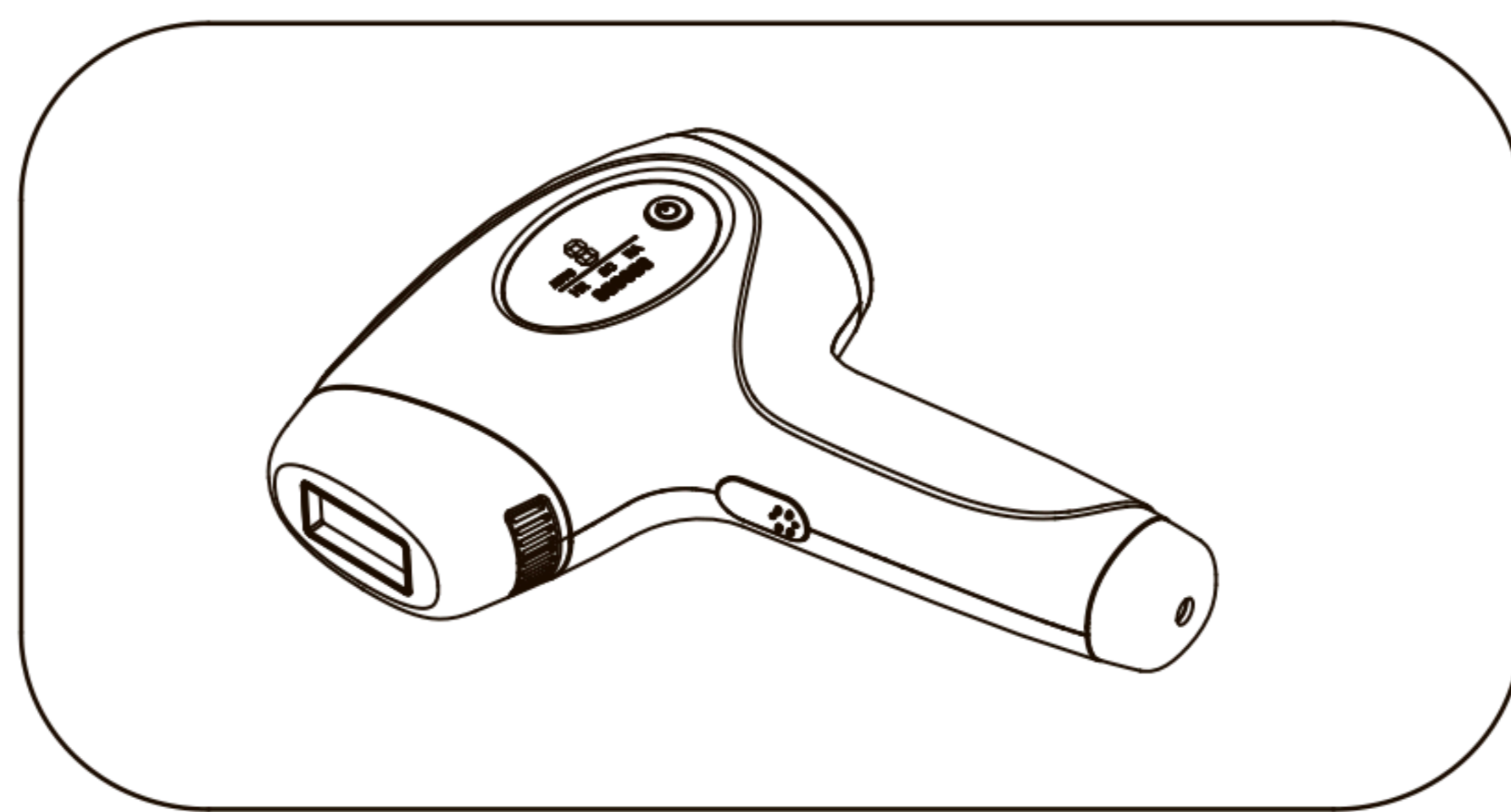

3. Нажмите на кнопку питания и удерживайте в течение 2 секунд, фотоэпилятор включится. Проверьте текущее рабочее состояние прибора, обратившись к предыдущему разделу "Экран фотоэпилятора".
4. Нажмите кнопку питания, чтобы выбрать режим удаления волос, на экране появится надпись "HR".
5. Фотоэпилятор оснащен уровнями интенсивности от 1 до 9. Не удерживая нажмите на кнопку питания для регулировки уровня интенсивности вспышки. Всегда начинайте обработку на 1-ом уровне, а затем, если у вас не возникает дискомфорта, переходите на более высокие уровни мощности для более эффективного удаления волос.
6. Режимы работы вспышек

Точечный режим работы (для удаления волос на небольшой площади)

По умолчанию установлен точечный режим работы, т.е. вспышка срабатывает один раз при одном нажатии кнопки вспышки.

Скользкий режим работы (для удаления волос на большой площади)

После включения фотоэпилятора нажмите и удерживайте кнопку вспышки, фотоэпилятор перейдет в скользкий режим работы. Вам нужно прижать окно аппликатора перпендикулярно к коже, и фотоэпилятор будет автоматически испускать вспышки.

7. Прижмите окно аппликатора перпендикулярно к участку кожи, на котором хотите удалить волосы.

(1) Когда фотоэпилятор находится в точечном режиме, дождитесь его отображения на дисплее, прижмите прибор к коже и нажмите кнопку вспышки. Вспышка сработает и область под окном аппликатора будет обработана. Переместите устройство на новую область и прижмите к коже, дождитесь отображения вспышки на дисплее и нажмите кнопку вспышки. По ходу последовательных циклов обработки для каждой области требуется 2-3 подобных воздействия (**Важно!** Не подвергайте один и тот же участок воздействию нескольких световых импульсов одновременно. Это может привести к выделению избыточного тепла, что может повредить кожу. Необходимо полностью обработать одну часть тела, затем вернуться в исходное положение и повторить обработку).

(2) Когда фотоэпилятор находится в скользящем режиме, прижмите прибор к коже и длительно нажмите кнопку вспышки - область под окном аппликатора будет обработана. Переместите устройство на новую область и прижмите к коже, фотоэпилятор автоматически излучит вспышку света. По ходу последовательных циклов обработки для каждой области требуется 2-3 подобных воздействия (**Важно!** Не подвергайте один и тот же участок воздействию нескольких световых импульсов одновременно. Это может привести к выделению избыточного тепла, что может повредить кожу. Необходимо полностью обработать одну часть тела, затем вернуться в исходное положение и повторить обработку).

Совет: в скользящем режиме окно аппликатора может непрерывно испускать вспышки 8 секунд, пока прибор находится в движении.

8. После завершения процедур нажмите кнопку питания и удерживайте ее в течение 2 секунд, чтобы выключить фотоэпилятор. Если в течение 5 минут устройство будет бездействовать, то фотоэпилятор автоматически отключится.

9. Отключите прибор от источника питания, отключите адаптер от розетки.

10. В течение десяти минут дайте поверхности лампы остыть. Затем протрите лампу влажной салфеткой без спирта или мягким бумажным полотенцем.

11. После очистки положите фотоэпилятор и адаптер обратно в коробку, а ее в проветриваемое сухое место, недоступное для детей.

12. За участками кожи, на которых проводятся процедуры, следует ухаживать.

Через 20 минут после окончания процедур вы можете нанести на обработанные области тела увлажняющее средство. При возникновении дискомфортных ощущений можете сделать холодный компресс минут на 30 или на один час, пока не прекратится жжение кожи.

Внимание

1. Нанесите гель алоэ вера или аналогичный увлажняющий крем на обработанные области после процедур фотоэпиляции.
2. Убедитесь, что участок кожи перед процедурой фотоэпиляции достаточно очищен. Перед фотоэпиляцией рекомендуется промыть кожу холодной водой, а после процедуры - не принимать душ в течение 2 часов. Так же в течение 48 часов не рекомендуется принимать солнечные ванны, ванны с теплой водой, паровые ванны и т.д.
3. Избегайте воздействия сильных солнечных лучей на зону фотоэпиляции в течение 2 часов после удаления волос. Перед выходом на улицу наносите солнцезащитный крем.
4. Не стоит посещать бассейн в течение 48 часов после эпиляции.
5. Каждую область рекомендуется облучать по 2-3 раза.
(Важно! Окно аппликатора всегда должно плотно прилегать к коже. Не подвергайте один и тот же участок воздействию нескольких световых импульсов одновременно. Это может привести к выделению избыточного тепла, что может повредить кожу. Необходимо полностью пройти одну часть тела, затем вернуться в исходное положение и пройти повторно по этой же части заново).
6. Аппарат не должен работать непрерывно более 25 минут. Если площадь удаления волос большая, ее можно разделить на несколько частей (после 10 минут работы советуем выключить фотоэпилятор и отключить его от питания, дать устройству отдохнуть 10 минут и потом вновь можно продолжить работу).

Курс процедур

Волосы имеют определенный цикл роста, и кратковременное использование фотоэпилятора не поможет вам добиться результатов, требуется полный курс процедур - 2-6 месяцев. Только длительное использование прибора будет иметь нужный эффект.

Первый месяц (1 процедура в 3-5 дней)

Волосы становятся тоньше и мягче, значительное количество волос больше не растет.

Второй месяц (1 процедура в неделю)

Рост волос заметно замедляется, наблюдается значительное сокращение волос.

Третий месяц (1 процедура в 15 дней)

Поры сужаются, волос значительно меньше, кожа становится гладкой.

Четвертый месяц (1 процедура в 30 дней)

96% волос перестают расти.

После того, как вы закончите основной курс обработки, продолжайте использование прибора, но в другом режиме. Вам просто нужно поддерживать ваши результаты - проводить сеанс один раз каждые 4-8 недель.

Переключение функций

1. Режимы работы фотоэпилятора, а также рабочие состояния отображаются на дисплее.
2. Для перехода в разные рабочие состояния, отображаемые на дисплее как "HR" "SC" "RA", требуется одновременно нажать кнопку питания и кнопку вспышки.
3. Для перехода в скользящий режим работы требуется зажать кнопку вспышки на 2 секунды, на дисплее замигает индикатор "AUTO".

Технические характеристики

Технология	IPL (фотоэпиляция)	Электрические параметры	100-240, 50-60 Гц
Площадь окна	4,5 см ²	Мощность	36 Вт
Ресурс лампы	900 000 вспышек	Мощность излучения	1,6 – 5 Дж/см ²
Количество уровней интенсивности	9 уровней	Условия эксплуатации	Температура -20 - 60°C
Размер корпуса	140*203*56 мм	Панель управления	Кнопки
Вес	0,3 кг	Гарантия	1 год

Побочные реакции и лечение

Все косметические процедуры имеют определенный риск, и данный прибор при неправильном использовании также может вызывать дискомфорт. Вы можете столкнуться со следующими проблемами:

Чувство жжения	У каждого свой порог чувствительности. Если вам не комфортно, вы чувствуете жжение, уменьшите уровень интенсивности.
Небольшое покраснение или легкое жжение	Это нормально и может исчезнуть само по себе. Также вы можете воспользоваться гелем алоэ вера, чтобы охладить кожу.
Запах жженных волос	Перед использованием фотоэпилятора обязательно сбрейте волосы в зоне обработки.

Устранение неисправностей

Проблема	Вероятная причина	Решение
Не горит дисплей	Кнопка питания не нажата	Нажмите и удерживайте кнопку питания не менее 2 секунд
Не включается	Шнур питания не подключен	Подключите шнур питания
Отсутствуют вспышки	<ol style="list-style-type: none">1. Окно аппликатора не плотно прилегает к коже и не перпендикулярно ей2. Индикатор на дисплее не мигает, накопление энергии не завершено3. Количество вспышек лампы было израсходовано	<ol style="list-style-type: none">1. Плотно и перпендикулярно приложите окно аппликатора к коже2. Нажмите кнопку вспышки после соответствующего индикатора на дисплее
Автоматически выключился	Система автоматически отключается после 5 минут бездействия	Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд для включения

Часто задаваемые вопросы

В: Нужно ли мне бриться перед каждой процедурой?

О: Сбривать волосы необходимо, так как они тоже содержат меланин, из-за которого может снижаться концентрация энергии непосредственно в волосяном фолликуле. Чтобы вся энергия попала именно в луковицу, волосы необходимо сбрить под корень.

В: Почему мои волосы не исчезают сразу после процедуры?

О: Любая эпиляция эффективна, только когда волос находится в активной стадии роста. Только около 30% волосяных фолликулов на любом участке кожи находится в фазе роста. На оставшиеся 70% волос, находящихся в фазе покоя, фотоэпилятор не действует. Поэтому важно понимать, что для достижения полного удаления волос с помощью фотоэпилятора потребуется время, соответствующее полному циклу развития волоса. Если Вы хотите избавиться от нежелательных волос на долгое время, необходимо провести серию процедур (минимум 6, с перерывом 4 недели). При появлении новых волос первоначальную процедуру необходимо повторить для обработки наиболее активных волосяных фолликулов, на которые не подействовала процедура эпиляции ранее. Повторные сеансы эпиляции,

проводимые через определенный промежуток времени, направлены на удаление новых волос, перешедших из стадии покоя в фазу роста.

В: Почему я не смог достигнуть такого же эффекта, как другие? Или почему нет вообще никакого эффекта?

О: Люди имеют разное телосложение, кроме того присутствует разница в толщине волос и обрабатываемых областях. От этого зависит курс процедур. Указанный в инструкции курс процедур имеет средние значения, у каждого конкретного человека рекомендуемый курс процедур может немного отличаться.

В: Какой уровень интенсивности выбрать?

О: Единого стандарта подходящего уровня интенсивности не существует, все зависит от того, какой у вас цвет кожи (чем темнее цвет кожи, тем более низкий уровень следует использовать). И начинать выбор подходящего уровня следует с самого низкого. Чем выше уровень, тем более очевиден эффект и тем короче время достижения нужного результата. Напротив, если вы используете низкий уровень, время достижения нужного результата соответственно увеличивается. Перед каждой процедурой рекомендуется проводить локальные тесты на обрабатываемых участках кожи в течение 1-3 вспышек, а затем, убедившись в отсутствии неприятных ощущений на второй день, можете приступать к обработке больших участков кожи.

В: Болезненны ли процедуры?

О: Во время фотоэпиляции световые волны, сталкиваясь с меланином волос, выделяют тепло. В основном процедуры безболезненны, но из-за различной чувствительности кожи и переносимости боли у разных людей, фактические ощущения могут отличаться – от легкого тепла на коже до чувства покалывания. Рекомендуется постепенно повышать уровень с самого низкого, это зависит от индивидуального случая.

В: Как бриться? Какие виды волос следует сбривать?

О: В целом, перед использованием фотоэпилятора следует сбрить волосы на тех областях, которые вы планируете обрабатывать. Для облегчения бритья можно использовать крем для бритья или мягкий гель для душа. Кроме того, вы можете воспользоваться горячим полотенцем, приложив его к зоне бритья на несколько минут.

В: Почему после процедур появляется запах жженных волос?

О: Это потому, что волосы сбриты не полностью. Во время процедур световые волны, сталкиваясь с меланином, выделяют тепло, что вызывает запах жженных волос.

В: Я хочу быстро удалить волосы. Могу ли я использовать D'Evi Skin PRO каждый день?

О: Не рекомендуется использовать фотоэпилятор каждый день. Существует период роста волос, вы можете под него подстроиться: проводить 1 процедуру в 3-5 дней в течение первого месяца и далее постепенно уменьшать количество процедур согласно замедлению роста волос в вашем конкретном случае.