


Произведено по заказу «BRADEX» ISRAEL.
Trans East Metal Ltd, POB 9101, Haifa 31091, Israel. Tel: +972-4-8521824, fax: +972-3-7256059. www.bradex.co.il.
Импортёр на территории РФ: ООО «Технологии здоровья».
Российская Федерация, 117405, Москва, ул. Варшавское шоссе, д.145, корп. 8. Тел.: 8 (495) 647-09-59, 8 (495) 648-26-66, www.bradex.ru.
Импортёр на территории Республики Беларусь: ООО «БРАДЕХ», 220019, г. Минск, ул. Монтажников, д. 9 комн. 34/4. УНП 192409754.
Сайт: www.bradex.by, E-mail: info@bradex.by
Страна происхождения: Китай. Изготовитель: Джецзян Нью Вижн Импорт энд Экспорт Кампани Лимитед.
Адрес: Синьцзянь Роуд, 5, Индустриальная зона Бэйтанг, город Нинбо, КНР, 315708. тел:+86-574-6560937,
факс:+86-574-6560938. e-mail: zhejiangnewvision.china@gmail.com.
Международная торговая марка «BRADEX».
Рег. №1419183.
Израиль - Рег. №204012.
Россия - Рег. №444287, №683532

Срок эксплуатации: 1 год.
Дату производства смотрите на упаковке.



ИРРИГАТОР УЛЬТРА 300

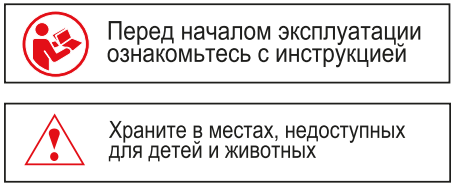

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
KZ 1371



Ирригатор «УЛЬТРА 300» - портативный ирригатор для ежедневной гигиены полости рта в домашних условиях, на работе, в путешествии. Устройство имеет пять уровней ирригации, чтобы выбрать комфортную интенсивность воздействия. В комплект входят пять съёмных насадок: две стандартных, ортодонтическая, пародонтологическая и насадка-ложка для чистки языка. Для удобства использования насадки вращаются на 360 градусов. Регулярное использование ирригатора является эффективной профилактикой зубного камня, кариеса, а также увеличивает срок службы имплантатов, виниров, пломб. Удаляет бактерии, налет и остатки пищи даже из самых труднодоступных мест между зубами и деснами. Рекомендовано для профилактики заболеваний зубов и десен во время беременности, лактации. Ирригатор прост в использовании, удобно лежит в руке, благодаря эргономичному дизайну корпуса. Устройство быстро заряжается через USB-кабель за 3-5 часов. Мощный аккумулятор обеспечивает бесперебойную работу в течение 12 суток.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Заболевания зубов, десен и ротовой полости в фазе обострения, острые сердечно-сосудистые заболевания, недавно перенесенные операции в полости рта, повышенная чувствительность зубов, кровоточивость десен, открытая рана на языке или в полости рта.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь с врачом.

Товар не является медицинским изделием.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Ежедневная гигиена полости рта в домашних условиях, в путешествии
- Очищение и уход за ортодонтическими конструкциями и брекет-системами
- Чистка языка, неба и внутренних поверхностей щек
- Оздоровливающий массаж десен
- Профилактика зубного камня, кариеса, воспаления десен
- Профилактика заболеваний зубов и десен во время беременности, лактации, при сахарном диабете

ВИДЫ СЪЕМНЫХ НАСАДОК

1. Насадка-ложка для чистки языка: способствует устранению налета на языке, уменьшает количество бактерий на слизистых полости рта, позволяет добиться свежего дыхания. Регулярное использование этой насадки снижает риск воспаления и патологических процессов, в том числе кариеса. Подходит для чистки неба и внутренних поверхностей щек.

2. Ортодонтическая насадка: применяется для чистки брекетов и других ортодонтических конструкций. Помогает удалить частички еды и мягкий налет.

3. Пародонтологическая насадка: используется для глубокого очищения десневых карманов. Эффективно массирует десны и снижает их кровоточивость. Наконечник из мягкого силикона не травмирует десну. Рекомендуется использовать при наличии ортопедических конструкций.

4. Стандартная насадка: хорошо очищает эмаль между зубами, позволяет выполнить деликатный массаж десен и освежить дыхание.



Насадки являются предметом индивидуального использования, подлежат регулярной чистке.

РЕЖИМЫ ИРРИГАЦИИ:

- | | | | | |
|--|---|---|---|--|
| 1. Мягкий режим, 40 psi
Подходит для начинающих | 2. Деликатный режим, 50 psi
Для чувствительных зубов | 3. Нормальный режим, 70 psi
Для ежедневной гигиены полости рта | 4. Интенсивный режим, 90 psi
Для эффективного очищения зубов | 5. Пульсирующий режим, 110 psi
Для глубокого очищения зубов |
|--|---|---|---|--|

СПОСОБЫ ОЧИСТКИ

После ирригации вылейте воду из резервуара и снова запустите устройство на 2-3 секунды, чтобы удалить остатки воды из аппарата. Для очистки устройства используйте сухую мягкую ткань, чтобы вытереть корпус, насадки. Резервуар можно промыть мыльной водой и затем протереть сухой мягкой тканью. Не погружайте корпус ирригатора в воду.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Допускается в производственной упаковке.



УТИЛИЗАЦИЯ


Данное изделие следует утилизировать отдельно от бытовых отходов.

Характеристики:

Ирригатор «УЛЬТРА 300»
Артикул KZ 1371, мультикоleur
Материал: ABS-пластик, ПК.
Цвет: мультикоleur.
Работает от аккумулятора - 2000 мАч.
Объем резервуара для воды - 300 мл.
Время зарядки: 3-5 часов.
Пять режимов давления воды.
Защита от перегрева.
Комплектация: ирригатор - 1 шт., сменные насадки - 5 шт., USB-провод – 1 шт., инструкция.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Перед ирригацией полости рта добавьте теплую воду в резервуар. Чтобы налить воду из-под крана, держите ирригатор горизонтально, предварительно открыв крышку резервуара. Также можно наливать воду в аппарат с помощью стакана.
- Установите нужную насадку. Для этого зафиксируйте ее в отверстии в верхней части корпуса до характерного щелчка.
- Включите ирригатор, нажав и удерживая в течение нескольких секунд кнопку ON/OFF.
- Затем выберите комфортный режим работы устройства. Для этого повторно нажимайте на кнопку MODE. Выбор режима работы сопровождается световой индикацией.
- Приступайте к чистке полости рта. Слегка приоткройте рот, направьте насадку на зубы, десны, чтобы поток воды попадал на необходимые зоны.
- После процедуры выключите ирригатор, нажав и удерживая в течение нескольких секунд кнопку ON/OFF.
- Извлеките насадку, нажав на кнопку извлечения насадки на корпусе аппарата.
- ВАЖНО: не нажимайте на кнопку извлечения насадки во время работы устройства.
- Чтобы снять резервуар для воды, просто потяните за него, как показано на рисунке.

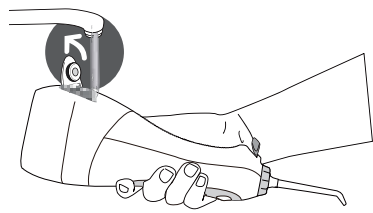

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Если устройство не используется в течение длительного времени, необходимо вылить воду из резервуара и хранить ирригатор в сухом прохладном помещении, в недоступных для детей местах. Не используйте устройство в помещениях с повышенной температурой и влажностью.

