

iluminage

YOUTH ACTIVATOR PRO

ЭТО НАЧАЛО ЧЕГО-ТО ПРЕКРАСНОГО

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Спасибо, что выбрали устройство для RF-лифтинга iluminage Youth Activator Pro! Принцип действия аппарата основан на проникновении радиочастотных импульсов в глубокие слои кожи. Волны оказывают разогревающее действие на дерму и подкожно-жировую ткань. Тепловой эффект положительно влияет на коллаген и эластин, вызывая трехмерное ремоделирование дермы. Методика активизирует синтез новых молодых волокон, увеличивает скорость обмена веществ в клетках, способствуя естественному восстановлению, кожный покров укрепляется и уплотняется, а морщины разглаживаются.

Перед использованием прибора, пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию, чтобы правильно использовать устройство.

подробнее на www.iluminage.ru

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1: МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- 02 Введение
- 03 Предупреждения
- 03 Противопоказания

РАЗДЕЛ 2: ЗНАКОМСТВО С ПРИБОРОМ ILUMINAGE YOUTH ACTIVATOR PRO

- 06 Что входит в комплектацию
- 06 Технические характеристики
- 07 Описание устройства
- 08 Функции прибора
- 08 План процедур

РАЗДЕЛ 3: ВОЗМОЖНОСТИ ПРИБОРА ILUMINAGE YOUTH ACTIVATOR PRO


- 12 Режимы работы
- 12 Особенности режимов работы
- 13 Уровни интенсивности

РАЗДЕЛ 4: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА ILUMINAGE YOUTH ACTIVATOR PRO

- 16 Порядок работы с устройством
- 18 Порядок проведения процедур

РАЗДЕЛ 5: ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 24 Эксплуатация и техническое обслуживание
- 25 Послепродажное обслуживание
- 25 Гарантия

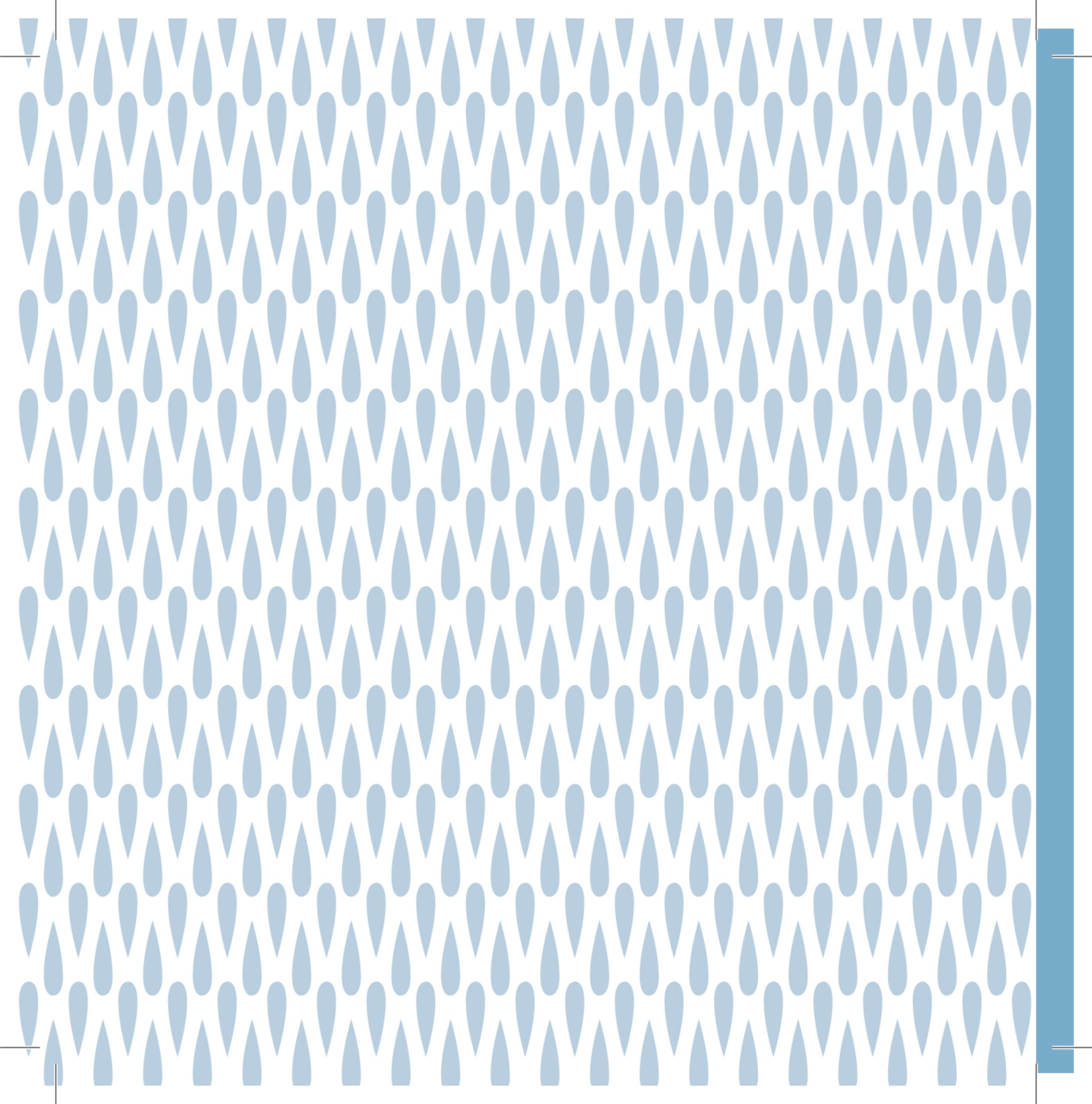

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Благодаря прибору iluminage Youth Activator Pro с технологией, которую используют косметологи по всему миру, Вы добьетесь впечатляющих результатов. При правильном и регулярном применении Вы уменьшите и разгладите морщины на лице с комфортом и удобством, не выходя из дома!

подробнее на www.iluminage.ru

1

1



ВВЕДЕНИЕ

Предупреждение: Наша компания не несет ответственности за последствия, вызванные несоблюдением нижеуказанных условий или неправильным использованием устройства.

Наша компания оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию прибора в любое время без предварительного уведомления.

* Пожалуйста, следуйте правильному порядку проведения процедур при использовании устройства.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ


- Храните и используйте прибор вдали от детей.
- Особую осторожность следует проявлять при использовании устройства, если у вас установлены активные импланты, такие как кардиостимуляторы, устройства для лечения недержания, слуховые аппараты или другие медицинские электронные устройства. Использование iluminage Youth Activator Pro может помешать работе этих устройств.
- Не оригинальные аксессуары, которые вы используете вместе с устройством, не облагаются гарантией.
- Пожалуйста, не разбирайте и не пытайтесь починить прибор самостоятельно. Если вы обнаружили какие-либо проблемы с устройством, пожалуйста, свяжитесь с сервисным центром.
- При использовании прибора, пожалуйста, не бросайте его и не стучите, чтобы не повредить внешнюю оболочку и внутренние компоненты.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Запрещено использовать устройство:

- Несовершеннолетними.
- В период менструации или беременности.
- Если вы страдаете сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией, болезнями сердца, диабетом, раком кожи, ишемической болезнью сердца, болезнями щитовидной железы или если у вас есть злокачественные опухоли.
- Если у вас присутствуют кожные заболевания, кожные ожоги, нарушения свертываемости кожи, кровотечения или кожная аллергия.
- На тех участках тела, на которых проводились хирургические операции или присутствуют шрамы.
- На участках с дерматологическими заболеваниями и экземой, на роговице глаза.
- Если у вас установлены активные импланты, такие как кардиостимуляторы, слуховые аппараты, аппараты искусственного кровообращения и т.п.

Если вы проходили косметические процедуры, связанные с инъекцией ботокса или гиалуроновой кислоты, то вам требуется подождать три месяца, прежде чем использовать устройство.

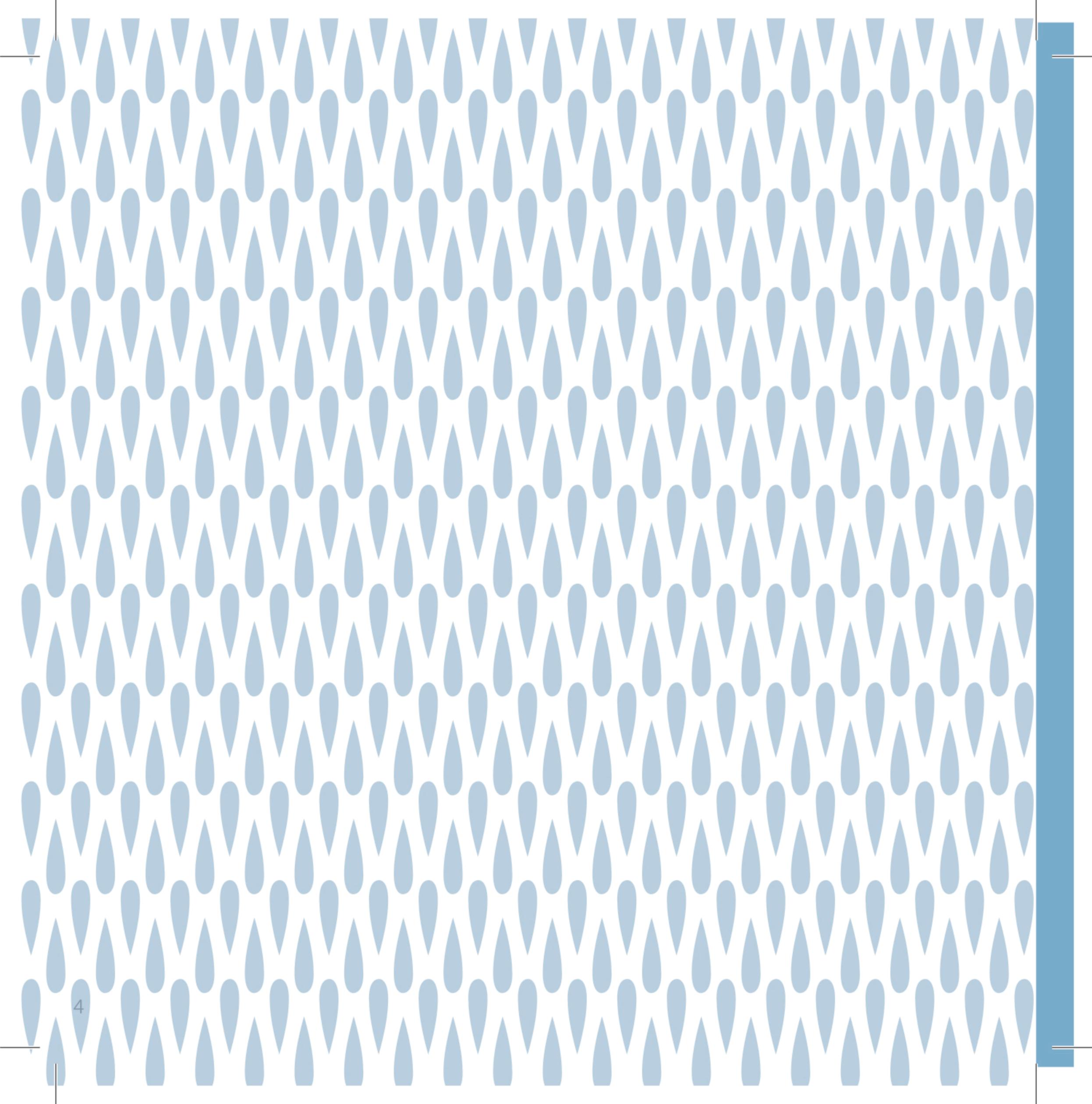

ЗНАКОМСТВО С ПРИБОРОМ ILUMINAGE YOUTH ACTIVATOR PRO

подробнее на www.iluminage.ru

2

5

 <p data-bbox="737 713 917 766">Прибор</p>	 <p data-bbox="1547 713 1741 766">Насадки</p>
 <p data-bbox="650 1345 1049 1398">Адаптер питания</p>	 <p data-bbox="1330 1345 1953 1398">Руководство пользователя</p>

ЧТО ВХОДИТ В КОМПЛЕКТАЦИЮ?

Комплектация: прибор x1, насадка x2, адаптер питания x1, руководство пользователя x1.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Назначение:	прибор для RF-лифтинга
Модель:	Youth Activator Pro
Тип воздействия:	радиочастотные волны
Номинальная мощность:	36 Вт
Частота воздействия:	50/60 Гц
Входное напряжение:	100/240 В

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

Вид спереди:



Экран дисплея:

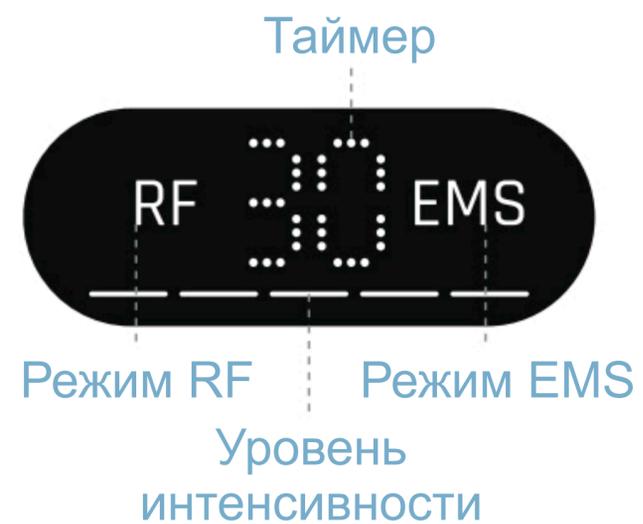

Вид сзади:



Насадки:



ФУНКЦИИ ПРИБОРА

Области использования: лицо и тело.

Места использования: дом, салон красоты, фитнес-клуб и другие места, также удобно проводить процедуры во время путешествий.

Решаемые проблемы: дряблая, тусклая, грубая кожа, морщины, отсутствие эластичности кожи, возрастные изменения.


ПЛАН ПРОЦЕДУР

Рекомендуемый курс процедур: 1 процедура в 3-4 дня;

Для грубой, сухой и стареющей кожи можно проводить процедуры каждые 2-3 дня;

Если вы уже добились некоторых результатов в использовании iluminage Youth Activator Pro и ваша кожа выглядит достаточно хорошо, можете проводить процедуры каждые 1-2 недели.



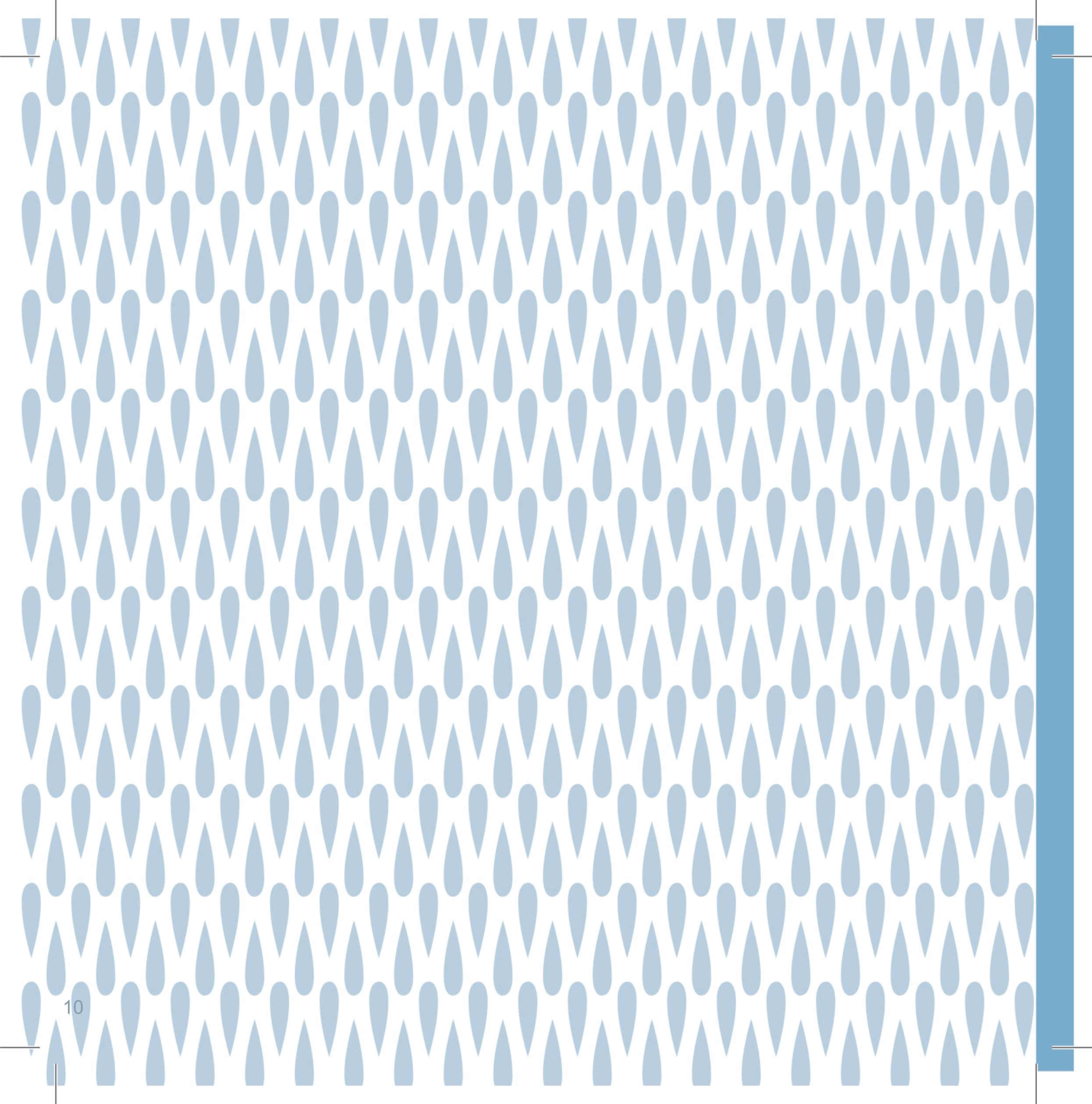

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИБОРА ILUMINAGE YOUTH ACTIVATOR PRO

подробнее на www.iluminage.ru

3

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

РЕЖИМ RF

В режиме RF индикатор на приборе загорится красным светом. На экране дисплея загорится значок RF. Таймер устанавливается на 30 минут, а уровень интенсивности – 1.

РЕЖИМ EMS

В режиме EMS индикатор на приборе загорится синим светом. На экране дисплея загорится значок EMS. Таймер устанавливается на 30 минут, а уровень интенсивности – 1.

РЕЖИМ RF+EMS

В режиме RF+EMS индикатор на приборе загорится зеленым светом. На экране дисплея загорится значок RF+EMS. Таймер устанавливается на 30 минут, а уровень интенсивности – 1.

Примечание: по истечении 30 минут индикатор на приборе загорится белым светом и устройство перейдет в режим ожидания. Для перезапуска устройства удерживайте кнопку питания.

ОСОБЕННОСТИ РЕЖИМОВ РАБОТЫ

РЕЖИМ RF

RF-волны воздействуют на глубокие слои кожи, вызывая местный разогревающий эффект, в результате которого активизируются процессы синтеза молодого коллагена, что ведет к укреплению структурного каркаса кожи, её уплотнению и подтяжке.

РЕЖИМ EMS

Методика миостимуляции мимических мышц тренирует, укрепляет и тонизирует мышцы, подтягивает кожу и способствует разглаживанию морщин, лицо приобретает четкие контуры. ЭМС стимулирует кровообращение, улучшает цвет лица и способствует выведению токсинов.

РЕЖИМ RF+EMS


Сочетание технологий укрепляет и тонизирует мышцы, уменьшает объемы ненужного жира, устраняет дряблость и разглаживает морщины, усиливает четкость контуров.

Для всех режимов:

Таймер:	⋮ 30 минут	Рекомендуемая	⋮ Специальная
Частота процедур:	⋮ 2-3 раза в неделю	косметика:	⋮ аппаратная косметика
Уровни интенсивности:	⋮ 5 уровней		⋮ для RF лифтинга и EMS


УРОВНИ ИНТЕНСИВНОСТИ

- Прибор обладает пятью уровнями интенсивности, пожалуйста, выберите наиболее удобный для вас.
- Уровень интенсивности по умолчанию после включения устройства – 1.
- Регулировка уровней интенсивности (как показано на рисунке).

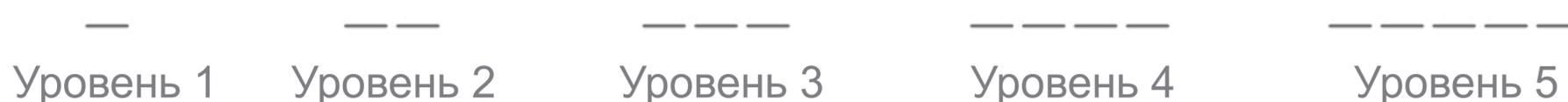

- Пожалуйста, в первый раз используйте 1-ый уровень интенсивности, и только когда привыкните к нему, можете перейти на следующий.

Примечание: Насадка должна равномерно соприкасаться с кожей и передвигать ее следует медленно. Только в таком случае нагрев кожи будет наиболее эффективным. Между насадкой и кожей перемещаются электрические заряды, а чем электрический ток больше, тем выше температура нагрева. Она может достигать 55 °С.

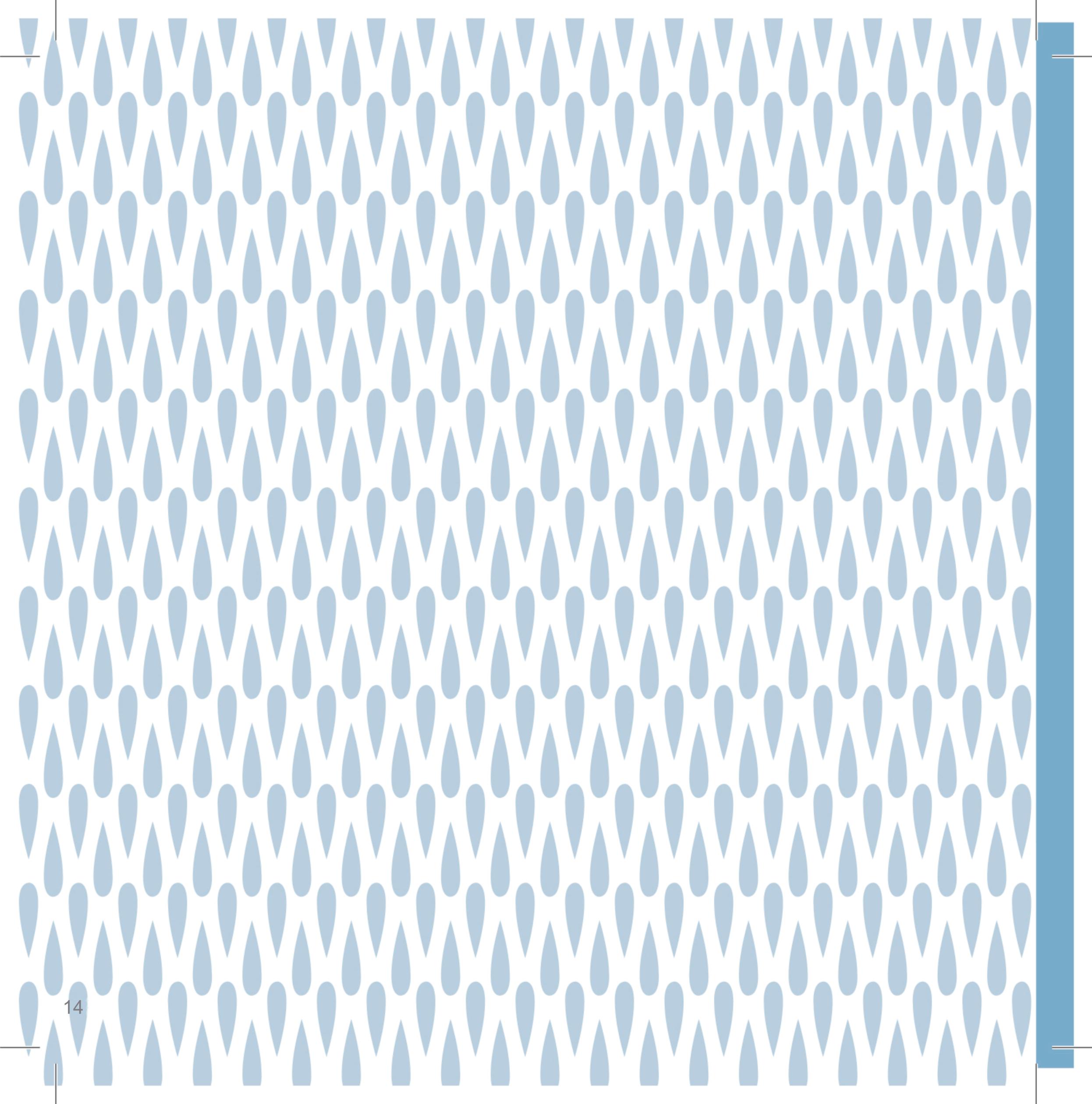

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА ILUMINAGE YOUTH ACTIVATOR PRO

подробнее на www.iluminage.ru

4

ПОРЯДОК РАБОТЫ С УСТРОЙСТВОМ



1. Перед проведением процедуры, пожалуйста, удалите макияж с лица и очистите его, а также удалите возможную грязь с насадки и продезинфицируйте ее.



2. Подключите шнур питания к прибору, об этом будет сигнализировать белый индикатор.



3. Подключите насадку к питанию. Не забывайте, что разъем питания насадки – Type C.



4. Длительное нажатие кнопки питания позволит включить прибор. Когда вы слышите звуковой сигнал, это означает, что работает режим RF, дисплей будет гореть. Продолжительность режима RF по умолчанию составляет 30 минут.



5. Нажмите кнопку выбора уровня интенсивности для переключения мощности; Выберите необходимый уровень интенсивности (рекомендуется повышать уровень постепенно, начиная с низкого).

Примечание: если вы чувствуете чрезмерное тепло на коже во время процедуры, пожалуйста, уменьшите уровень интенсивности.



6. Коротко нажимайте кнопку питания, чтобы выбрать нужный режим работы;

Красный свет: режим RF.
Синий: режим EMS.
Зеленый: режим RF+EMS.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР

ПРОЦЕДУРЫ НА ЛИЦЕ

Для комфортного проведения процедур и достижения эффективных результатов рекомендуем использовать специальную аппаратную косметику для RF лифтинга и EMS. Благодаря ей также будет проще использовать насадки.



1. От верхней части ключицы к нижней челюсти круговыми движениями (не задев рта)



2. От нижней челюсти до области ушей круговыми движениями



3. От области рта до области ушей круговыми движениями



4. От носогубных складок до области ушей круговыми движениями (не задев виски)

СОВЕТЫ:

1. Перемещайте насадку со скоростью 2 см/сек.
2. Если вы чувствуете чрезмерную теплоту на коже, пожалуйста, быстрее перемещайте насадку.
3. Насадки должны плотно прилегать к коже и перемещаться во время использования. Не следует массировать веки или область вокруг глаз.



5. От носовых крыльев до области скул круговыми движениями (не задев виски)



6. От области под глазом, обогнув глаз, до лба (не задев глаза и веко)




7. От центра щеки, обогнув глаз, до границы роста волос на лбу



8. От границы бровей до границы роста волос

ПРОЦЕДУРЫ НА ТЕЛЕ


Работать с частями тела нужно последовательно. Например, руку следует разделить на две части - а и б. Начните с внешней части левой руки, проведите насадкой вверх, совершая круговые движения, а затем также вниз. Вы можете повторить эти действия 3-4 раза. Таким же образом обработайте и внутреннюю часть руки.

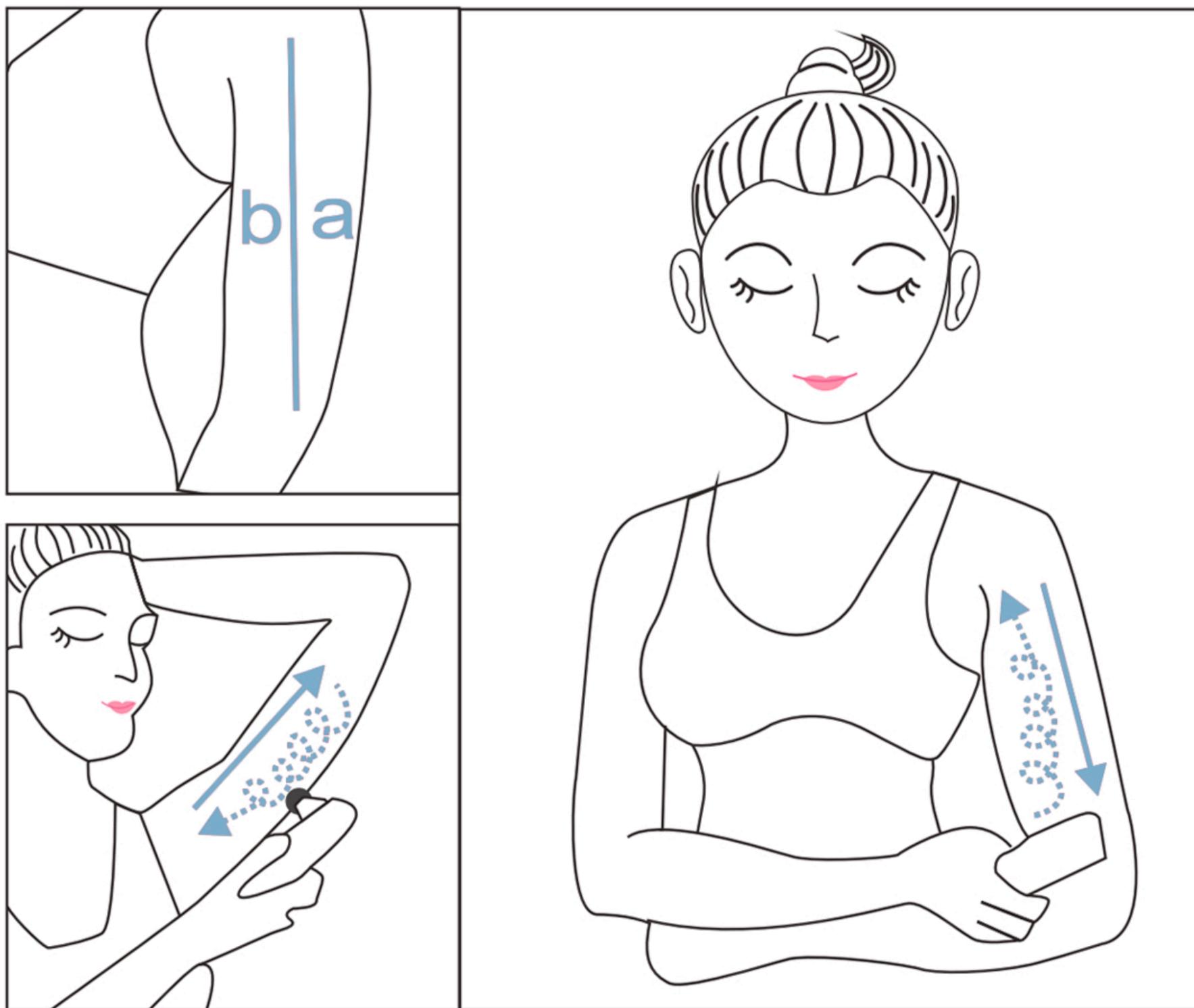

Примечание: все остальные части тела могут быть обработаны также, с совершением круговых движений.

Примечание: чтобы избежать ожога, не следует на длительное время останавливаться на одном участке.



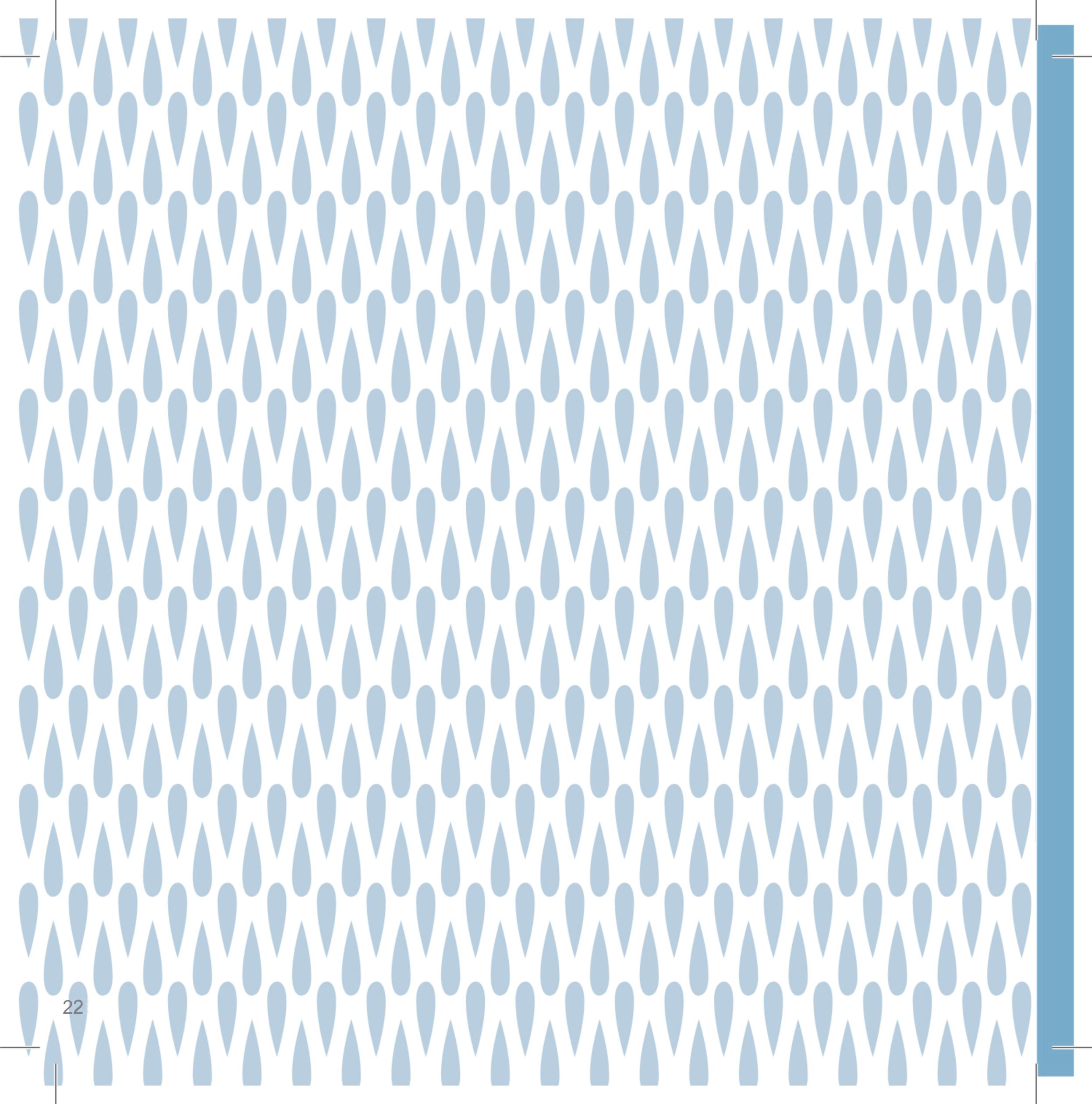

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

подробнее на www.iluminage.ru

5

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

К насадкам запрещено подключать любые сторонние провода Type-C и устройства.

При замене насадки, пожалуйста, отключайте прибор и не включайте его вновь, пока новая насадка не будет надежно подключена.

Пожалуйста, всегда поддерживайте чистоту насадок. После каждой процедуры используйте мягкую ткань, чтобы очистить прибор от загрязнений. Очистка водой запрещена.

Процедуры следует начинать на низком уровне интенсивности и только в случае, если вы чувствуете себя комфортно, можете переходить на более высокий уровень.

Перед использованием прибора следует нанести на кожу специальное косметическое средство для RF-лифтинга(гель, крем и т.п.), иначе на сухой коже устройство может оставлять ожоги.

Во время процедуры гель/крем легко впитывается кожей и обеспечивает гладкую работу насадок.

Запрещено проводить процедуры на горле, глазах, ушах, веках, висках и подобных областях тела.

Пожалуйста, используйте лицевую насадку для обработки лица, а для обработки тела – насадку для тела.

После окончания процедур с прибором, пожалуйста храните его в местах, где отсутствует воздействие солнечного света, а также любого сильного или ультрафиолетового света.

Не кладите прибор или его аксессуары в жидкости и не оставляйте во влажной среде.

Храните прибор в проветриваемом месте, недоступном для детей.

Если прибор или его составные части оказались погружены в воду, пожалуйста, обратитесь в сервисный центр, чтобы мы могли проверить, может ли прибор быть использован вновь. Если на прибор попала вода, когда он был подключен к питанию, сначала аккуратно отключите его от питания.

Не разбирайте и не ремонтируйте прибор самостоятельно.

Если прибор не работает должным образом, пожалуйста, обратитесь в сервисный центр. Наши специалисты проверят его.

ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Уважаемые покупатели, для обеспечения удобного послепродажного обслуживания в случае обнаружения каких-либо проблем с использованием или качеством прибора, пожалуйста, сразу же свяжитесь с нашим сервисным центром:

- Почта: info@iluminage.ru
- Сайт компании: iluminage.ru

ГАРАНТИЯ

1. СРОК ГАРАНТИИ

На это устройство распространяется гарантия в течение 1 года от первоначальной даты покупки.

2. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантия распространяется на дефекты, возникшие в результате брака или в процессе эксплуатации при корректном использовании прибора во время гарантийного периода. Если неисправность вызвана неправильным использованием прибора, такие случаи не покрываются гарантией.

3. СПЕЦИФИКАЦИИ ГАРАНТИИ

Претензии по гарантии должны быть подтверждены документом покупки устройства (например, чек или гарантийное письмо), а дата обращения обязана находиться в пределах гарантийного срока.

Если прибор оказался поврежден во время транспортировки при возврате, гарантийное обслуживание или замена не будут предоставляться бесплатно.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:

1. Повреждение прибора из-за пожара, наводнения, землетрясения, аномального напряжения или других стихийных бедствий, небрежного использования покупателем, действий третьих лиц, или из-за использования в непредназначенных условиях.
2. Повреждение вызвано случайными и непредсказуемыми событиями.
3. Ущерб причинен в результате неправильного использования прибора - не в соответствии с инструкцией в руководстве.
4. Ущерб причинен в результате использования неоригинальных аксессуаров, несоблюдением правил эксплуатации и технического обслуживания или из-за самостоятельной разборки и попытки ремонта прибора.
5. Неисправность возникла при использовании прибора не согласно его предназначению и возможностям, включая возможные перегрузки.
6. Неправильное хранение устройства (воздействие грызунов, жидкости и т.п.).





iluminage

КРАСОТА ИНТЕЛЛЕКТА