



d'evi

EMS LED Light Therapy Device

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


ВВЕДЕНИЕ

Благодарим вас за то, что вы выбрали наш прибор для EMS и LED-терапии EMS LED Light Therapy Device в качестве устройства для достижения сияющей и безупречной кожи. Прежде чем включить прибор и насладиться всеми преимуществами нашей революционной технологии ухода за кожей у себя дома, потратьте несколько минут на то, чтобы прочитать это руководство пользователя.

Внимание: не допускается модифицировать это устройство.

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

Работа EMS LED Light Therapy Device основана на двух из самых востребованных технологий в индустрии красоты. EMS (электрическая стимуляция мышц) используется для бережной активации клеток кожи, стимуляции коллагена для омоложения, повышения эластичности кожи, смягчения морщин, а также для придания коже гладкости и здорового вида. Световая LED-терапия обеспечит безболезненный уход за кожей и сделает ее гладкой за счет увеличения выработки коллагена и удаления прыщей. Световая терапия работает путем доставки световой энергии в глубокие слои кожи. Светодиодные процедуры помогут уменьшить тонкие линии и морщины, устранить повреждения от солнца и растяжки, а также уменьшить покраснение после IPL или лазерных процедур.

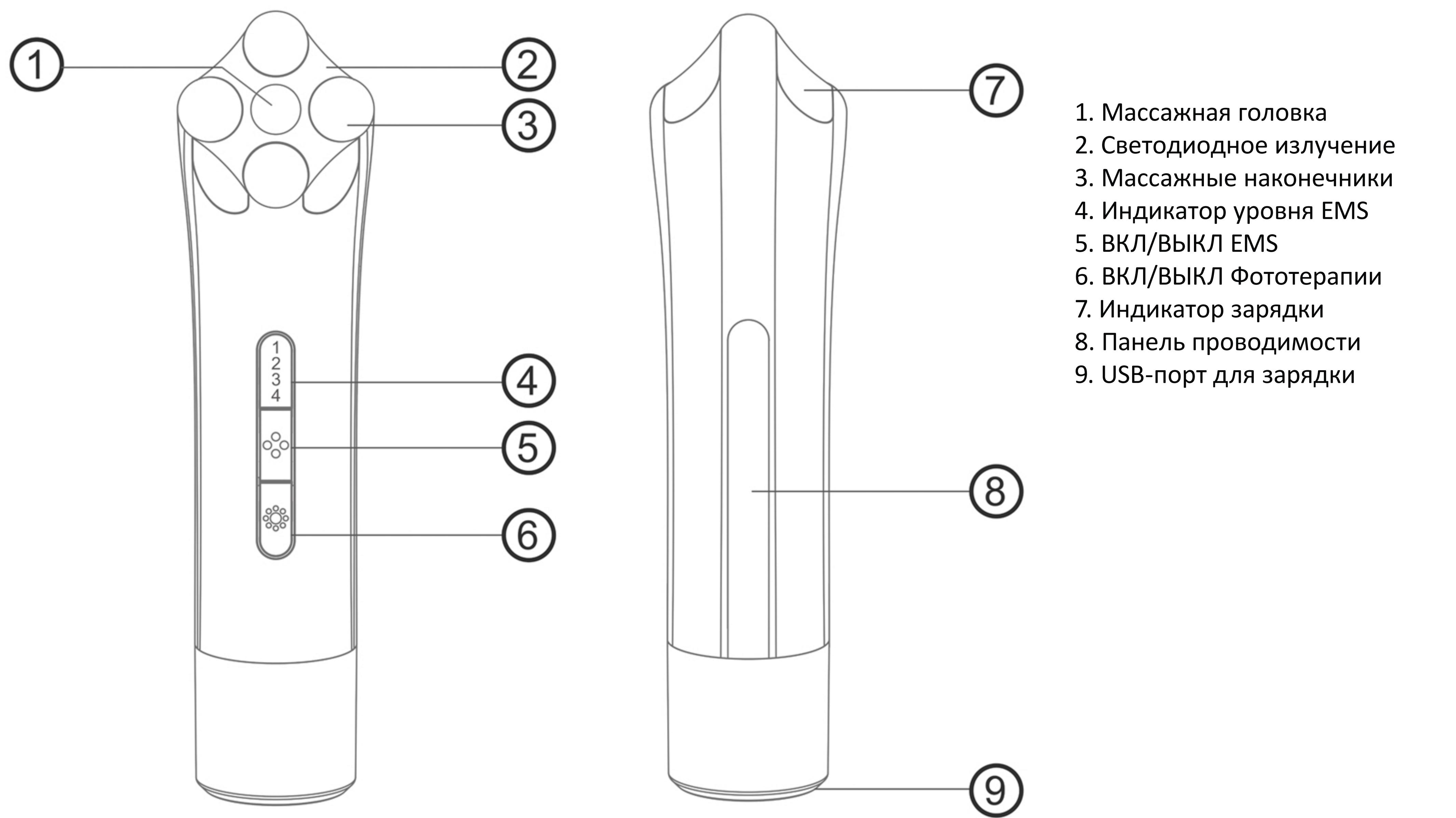

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

EMS LED Light Therapy Device имеет три режима работы: режим EMS, режим Фототерапии и режим EMS + Фототерапия.

Режим EMS

Просто нажмите кнопку 5 один раз, чтобы активировать режим EMS, а также используйте ту же кнопку для выбора нужного уровня интенсивности. Для отключения режима EMS нажмите и удерживайте кнопку 5.

Примечание: Перед использованием режима EMS на кожу необходимо наносить проводящий гель или сыворотку(не на масляной основе). Рекомендуется использовать первый уровень интенсивности при первом использовании, а для дальнейших процедур повышать уровень по мере необходимости.

Режим Фототерапии(LED)

Просто нажмите кнопку 6 один раз, чтобы активировать режим Фототерапии, а также используйте ту же кнопку для выбора нужного воздействующего излучения. Для отключения режима Фототерапии нажмите и удерживайте кнопку 6.

Пожалуйста, обратитесь к списку ниже, чтобы выбрать подходящее для вас световое воздействие.

Синий свет - снимает боль, а также известен своими противовоспалительными, антисептическими и успокаивающими свойствами. Оказывает бактерицидное действие, эффективен в отношении бактерии акне.

Желтый свет - оказывает восстанавливающее действие, успокаивает кожу и стимулирует местный иммунитет, способствует уменьшению пигментных пятен. Возвращает комфорт чувствительной коже, снижает покраснения, нормализует сосудистый тонус и кровенаполнение капилляров, уменьшает выраженность купероза.

Красный свет - стимулирует синтез коллагена и эластина, ускоряет обмен веществ и активизирует клеточную деятельность, корректирует инволюционные изменения кожи, способствует сокращению морщин, уменьшению глубины заломов и кожных складок, повышает плотность кожи, тонизирует, уменьшает расширенные поры.


Комбинированный свет - все функции в одном свете.

Примечание: Избегайте прямого зрительного контакта с источником света при использовании режима фототерапии.

Для достижения максимального результата используйте режим EMS + Фототерапия и выберите правильную интенсивность и световое воздействие в соответствии с вашими потребностями.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР


1. Очистите лицо от макияжа, масла и грязи.
2. Равномерно нанесите проводящий гель или сыворотку на лицо и держите лицо влажным при использовании режима EMS. Если вы используете только режим Фототерапии, гель или сыворотка не требуются.
3. Включите прибор, выберите режим. Начиная со лба, осторожно прижмите массажную головку к обрабатываемому участку. Перемещайте прибор круговыми движениями, как показано на схеме ниже:

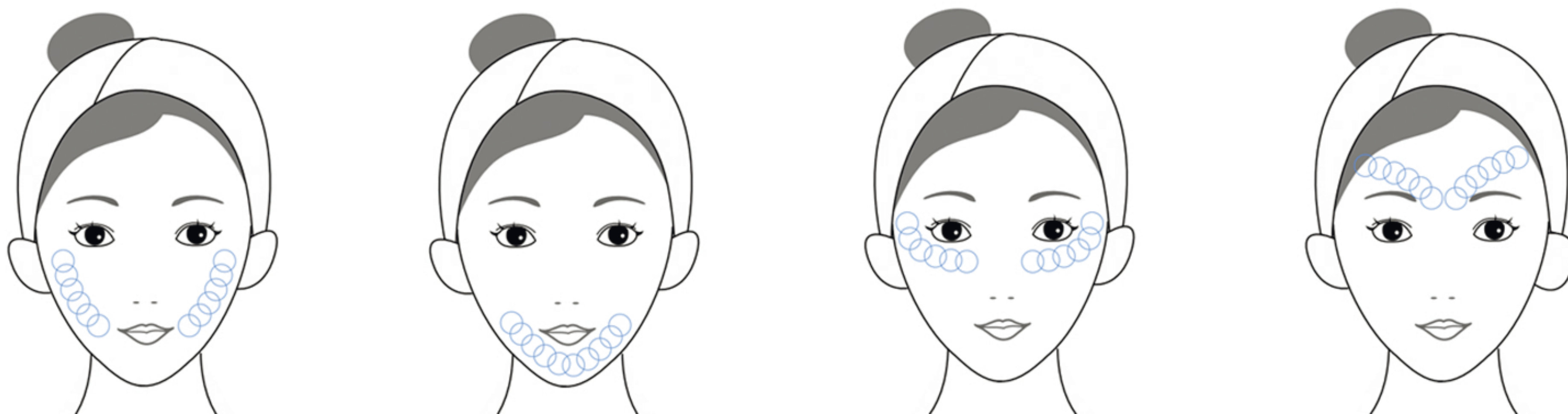

4. Выключите прибор и очистите массажную головку после использования (не забывайте очищать после каждого использования).

Примечание: рекомендуется использовать устройство 2–3 раза в неделю по 10 минут на каждую процедуру.

Совет: убедитесь, что массажная головка полностью контактирует с обрабатываемым участком. См. схему справа:

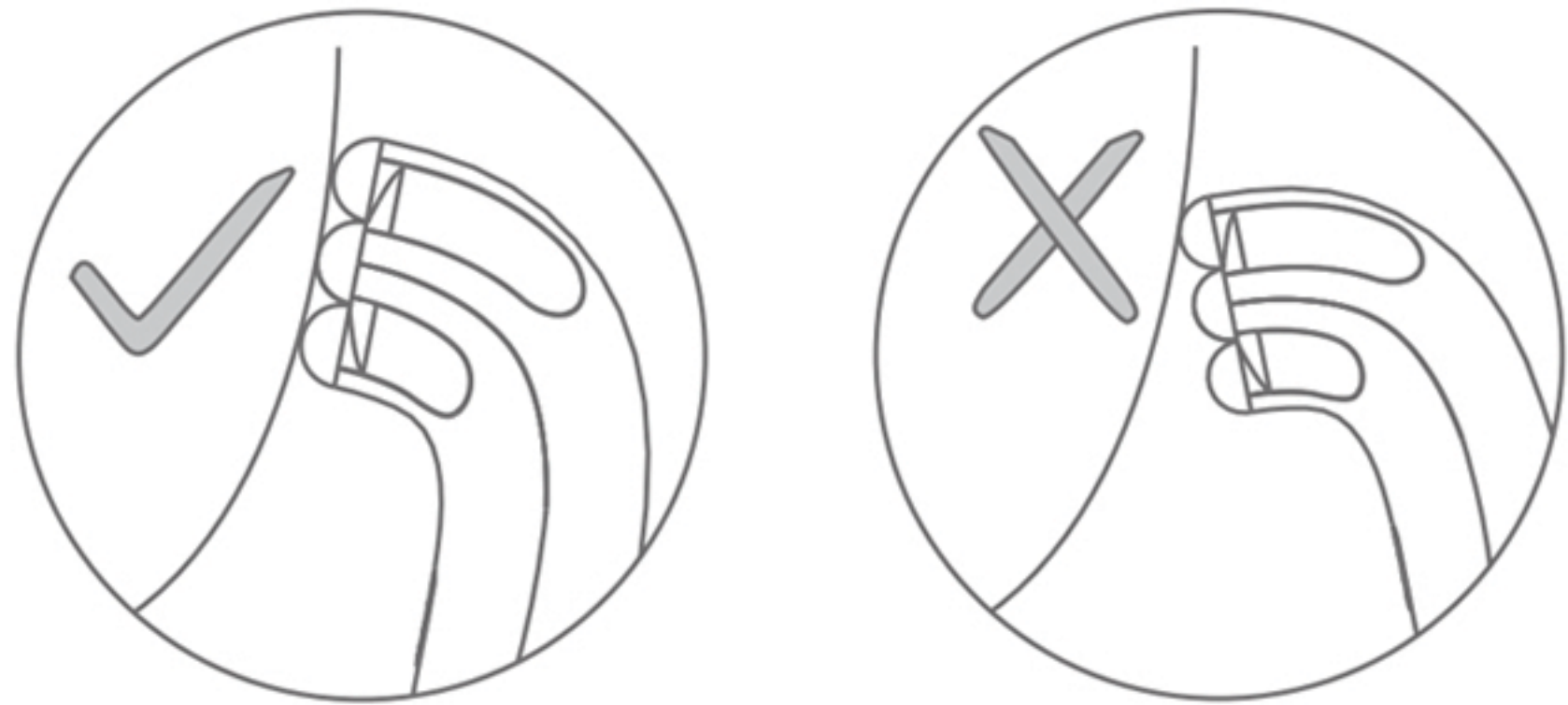

ЗАРЯДКА

Зарядка устройства EMS LED Light Therapy Device занимает до 3 часов, а полного заряда хватит на более чем 2 месяца использования.

1. Пожалуйста, зарядите EMS LED Light Therapy Device перед первым использованием.
2. Во время зарядки горит красный свет. Когда устройство будет полностью заряжено, световой индикатор станет зеленым.
3. Устройство издаст три звуковых сигнала, а затем автоматически отключится, когда разрядится.

Внимание: Перед зарядкой убедитесь, что на зарядный кабель не попала вода. Не заряжайте устройство возле воды или под солнцем.

ГАРАНТИЯ

Мы даем гарантию на это устройство в течение **ОДНОГО (1) ГОДА** от первоначальной даты покупки. Гарантия распространяется на дефекты, возникшие из-за неправильного изготовления или в результате нормального использования устройства, а также на рабочие части, влияющие на работу устройства. Гарантия НЕ распространяется на ухудшение внешнего состояния EMS LED Light Therapy Device, вызванного естественным износом, а также на дефекты, возникшие в результате несчастного случая, неправильного использования или небрежности. Любая попытка открыть или разобрать устройство (или его аксессуары) приведет к аннулированию гарантии.

Если вы обнаружите дефект и уведомите нас в течение гарантийного срока, мы по своему усмотрению заменим устройство. Претензии по гарантии должны быть подтверждены также датой покупки, которая обязана находиться в пределах гарантийного срока.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

1. Не используйте EMS LED Light Therapy Device возле воды или в небезопасных условиях.
2. Не используйте EMS LED Light Therapy Device, если у вас присутствуют солнечные ожоги, отеки или вы недавно совершали операцию на коже.
3. Не используйте EMS LED Light Therapy Device, если он поврежден.
4. Не разбирайте EMS LED Light Therapy Device.
5. Избегайте прямого контакта с открытыми глазами.
6. Храните прибор в недоступном для детей месте.
7. Немедленно прекратите использование устройства, если почувствуете боль или дискомфорт.
8. Не используйте EMS LED Light Therapy Device на инфицированных участках кожи(на которых присутствует кожная сыпь или открытые раны).
9. Не используйте EMS LED Light Therapy Device во время беременности.
10. EMS LED Light Therapy Device нельзя использовать детям младше 12 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номер модели:	BV18-405.
Номинальное рабочее напряжение:	5 В.
Номинальная рабочая мощность:	<5 Вт.
Номинальный рабочий ток:	<1А.
Источник питания:	USB-зарядка.
Вес продукта:	115 г.
Комплектация:	устройство, USB-кабель, руководство пользователя.

ВОПРОС-ОТВЕТ

В: Когда стоит использовать режим EMS + Фототерапия?

О: Вы можете использовать комбинированный режим, если хотите подтянуть кожу и улучшить ее тон. Комбинированный режим разработан, чтобы оказывать на вашу кожу множество положительных эффектов одновременно. Мы рекомендуем всегда использовать объединённый режим для достижения максимального результата.

В: Как часто мне следует использовать EMS LED Light Therapy Device?

О: Мы советуем использовать EMS LED Light Therapy Device 2–3 раза в неделю не более 10 минут за процедуру.

В: Светодиодное излучение может вызвать повреждение кожи?

О: Нет, в этом продукте используются безопасные красный, желтый и синий свет определенной длины волны, чтобы оказывать различное воздействие на различные проблемы с кожей.

В: Могу ли я использовать маску или сыворотку для глаз с этим устройством?

О: Да. EMS LED Light Therapy Device способствует лучшему усвоению питательных веществ маски и крема для глаз.

В: Почему устройство само выключилось во время использования?

О: EMS LED Light Therapy Device автоматически отключается после 10 минут использования. Или же у него разрядилась батарея.

В: Можно ли использовать инструмент без косметических средств?

О: EMS LED Light Therapy Device необходимо использовать с проводящим гелем или сывороткой в режиме EMS. Однако вы можете использовать это устройство без косметических средств, но только пока оно находится в режиме Фототерапии.