

Solray

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МАССАЖНАЯ НАКИДКА SMN-100



ВНИМАНИЕ! СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!

Массаж при помощи массажной накидки Solray оказывает расслабляющее и стимулирующее действие, уменьшает напряжение и повышает тонус в мышцах, устраняет психическое напряжение, помогает расслабиться в стрессовых ситуациях или же восстановиться и взбодриться, когда это необходимо.

Вибрация хорошо расслабляет мышцы. Подогрев эффективно стимулирует кровообращение.

Массажная накидка имеет в комплекте автоадаптер для использования в автомобиле. Не рекомендуется использовать устройство во время движения автомобиля, активируйте накидку во время парковки и отдыха.

Данное устройство не является полноценной заменой медицинской терапии или физиотерапии. Если Вы не уверены, что этот массажер Вам подходит, проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом.

Устройство предназначено для личного использования. Массажер не предназначен для использования в коммерческих целях любого рода, а также для использования в лечебных учреждениях.

Чтобы использовать все преимущества Вашего массажера, внимательно изучите руководство по эксплуатации и следуйте правилам ухода и техники безопасности. Это продлит срок службы массажной накидки. Сохраните это руководство по эксплуатации для использования в будущем или при передаче устройства другому лицу.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед использованием убедитесь в том, что все детали устройства находятся в исправном состоянии.
- В случае обнаружения дефекта или неисправности выключите устройство.
- Ремонт устройства могут проводить только специалисты авторизованных сервисов. Никогда не открывайте устройство самостоятельно. Отдельные компоненты этого устройства нельзя разбирать, ремонтировать или переустанавливать.
- Используйте устройство только в абсолютно сухих помещениях, убедившись, что Ваше тело также сухое. Запрещено использовать устройство в ванной комнате, душе, над наполненной водой раковиной, в бассейне, сауне и вне помещения.
- Никогда не используйте устройство в непосредственной близости от источников тепла.
- Провод не должен касаться острых краев.
- Для отключения или транспортировки прибора не тяните за кабель или за само устройство.
- Не используйте устройство дольше, чем 15 минут. Если вы не используете устройство, отключите его.
- Если Вы когда-нибудь будете утилизировать устройство, сделайте его непригодным для дальнейшего использования, отрезав кабель.
- Данное устройство запрещено использовать лицам (особенно детям) с ограниченными физическими, сенсорными или психическими возможностями, а также лицам, не имеющим достаточного опыта или знаний для обращения с устройством, кроме случаев использования устройства под контролем ответственного лица или после получения необходимой информации.

- Следите за тем, чтобы дети не использовали устройство в качестве игрушки.
- Перед чисткой всегда отключайте устройство. Во время чистки следите, чтобы жидкости не попадали на переключатели и кнопки. Устройство может использоваться только в абсолютно сухом состоянии.
- Запрещено разбирать устройство. В нем нет деталей, которые мог бы отремонтировать пользователь.
- Запрещено снимать панели устройства, т.к. ремонт внутренних компонентов может проводиться только квалифицированными специалистами.
- Не вставляйте иголки или иные острые предметы в прибор.
- Никогда не используйте данное устройство совместно с электромедицинским оборудованием, электронными системами жизнеобеспечения, такими как: аппараты для искусственной вентиляции легких или переносными медицинскими устройствами, такими как электрокардиограф. Данное устройство может стать причиной нарушений в работе вышеуказанного медицинского оборудования.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Перед использованием устройства проконсультируйтесь с врачом, если Вы:
 - беременны;
 - используете кардиостимулятор и т.п.;
 - страдаете одним из перечисленных заболеваний: грипп, лихорадка, варикозное расширение вен, тромбоз, гепатит, диабет, воспаление, ишиас, выпадение межпозвоночных дисков и др.;
 - проходите реабилитацию после операции.
- Не используйте прибор, если на теле имеются открытые раны, ожоги, гематомы, опухоли и т.п.
- Не используйте устройство, находясь под воздействием алкоголя.
- Остановите массаж, если Вы почувствуете неприятные или болезненные ощущения.
- Если после использования устройства у Вас появилась боль в нижних конечностях, немедленно прекратите использование и обратитесь к врачу.
- Нельзя оставлять работающее устройство под подушками, одеялами и т.п.
- Если шнур питания поврежден, во избежание опасности необходимо заменить его в сервисном центре или у квалифицированного специалиста.
- В устройстве имеются нагревающиеся поверхности. Лица, чувствительные к воздействию тепла, должны учитывать, что срок полезного действия устройства составляет 15 минут и использовать устройство можно только под наблюдением.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Если Вы используете накидку непосредственно перед сном, помните, что массаж может оказывать стимулирующее воздействие и вызвать бессонницу.
- Полезное действие массажа составляет 15 минут, что соответствует оптимальной продолжительности массажа, оказывающего благотворное влияние на организм.

ВНИМАНИЕ! МАССАЖНАЯ НАКИДКА НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ТОВАРОМ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ!

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА



Пульт управления




Автомобильный адаптер



Сетевой адаптер

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

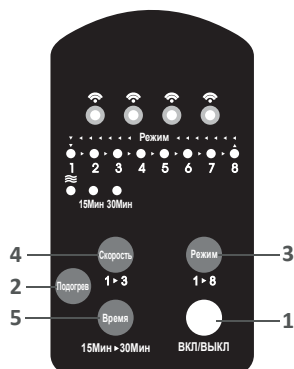

1. «Вкл/Выкл.» - кнопка включения/выключения накидки;
2. «Подогрев» - кнопка активации подогрева;
3. «Режим» - кнопка выбора одного из 8ми предустановленных режимов работы;
4. «Скорость» - кнопка выбора одного из 3х уровней интенсивности вибромассажа;
5. «Время» - кнопка выбора времени массажа (15 или 30 мин)

НАЧАЛО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Внимательно прочитайте руководство по эксплуатации. Не допускается использование массажной накидки в автомобиле во время его движения. Это может привести к серьезным телесным повреждениям.

Размещение и крепление массажной накидки

Накидку можно использовать, расположив ее на офисном кресле или стуле, домашнем кресле или на диване и на автомобильном кресле. Удобное крепление на липучке не позволяет накидке скользить во время использования.



1. Осмотрите массажную вибронакидку. Убедитесь в отсутствии повреждений на устройстве и шнуре питания.
2. Подключите адаптер питания к разъему на массажной накидке.
3. Подключите адаптер к розетке электрической сети 220 В или используйте разъем питания в автомобиле (12В) в сочетании с автоадаптером.
4. Расположите вибронакидку на сидении так, чтобы сидеть и касаться спиной массажной поверхности. Зафиксируйте массажную вибронакидку с помощью липучки на задней части спинки кресла.

5. Чтобы включить прибор, нажмите кнопку **«Вкл/Выкл»**.

6. РЕЖИМ. Для изменения режима вибромассажа нажмите кнопку **«Режим»**. Выберите подходящий Вам режим массажа.

! По умолчанию при включении прибор работает на заводских настройках.

7. СКОРОСТЬ. Вы можете выбрать одну из 3х степеней интенсивности вибромассажа. Для этого нажмите на кнопку **«Скорость»** - вибронакидка будет последовательно переключать интенсивность массажа с минимальной до максимально возможной скорости.

8. ПОДОГРЕВ. Чтобы включить подогрев, нажмите на кнопку **«Подогрев»**, при активации функция подогрева может работать в совокупности с любым режимом или самостоятельно.

9. ВРЕМЯ. По умолчанию в заводских настройках установлено время массажа - 15 мин. Чтобы изменить это значение на 30 мин, нажмите кнопку **«Время»**.

10. По истечении выбранного времени массажа накидка автоматически выключится. Чтобы выключить вибронакидку раньше установленного времени, нажмите на кнопку **«Вкл/Выкл»**.

УХОД, ХРАНЕНИЕ, ПЕРЕВОЗКА И РЕГУЛЯРНЫЙ ОСМОТР

Используйте для очистки ткань, смоченную мягким моющим средством.

Перед чисткой выключите устройство. Накидку можно снова использовать после того, как она полностью высохнет. Запрещено разбирать накидку или открывать застёжки, т.к. ремонт внутренних компонентов может проводиться только квалифицированными специалистами.

ВНИМАНИЕ! НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ АБРАЗИВНЫЕ ИЛИ АГРЕССИВНЫЕ ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА И НЕ ПОГРУЖАЙТЕ УСТРОЙСТВО В ВОДУ.

- Если Вы не используете накидку, храните ее в сухом месте.
- Прежде чем сложить накидку для хранения, дайте ей полностью остыть.
- Во время хранения не ставьте на накидку тяжелые предметы, в противном случае возможны поломки частей накидки.
- Не допускайте падения накидки. Это может привести к ее повреждению.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: SMN-100

Вес: 0,7кг

Размеры: 111*46см

Питание: 220В/50Гц

Мощность: 14 Вт



Производитель оставляет за собой право для разных партий поставок без предварительного уведомления изменять комплектующие части изделия, не влияя при этом на основные технические параметры изделия. Это может повлечь за собой изменение веса и габаритов изделия, но не более чем на +/- 5-10%.



УТИЛИЗАЦИЯ НАКИДКИ

Утилизируйте накидку согласно требованиям.

Положения об утилизации электрического и электронного оборудования. По всем вопросам по утилизации обращайтесь в соответствующую коммунальную службу.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

<p>Условия гарантии</p> <p>1. В случае обнаружения неисправности в период Гарантийного срока данное изделие подлежит обмену торговым предприятием, продавшим данное изделие.</p> <p>2. Гарантийная замена производится при наличии заполненного гарантийного талона и при условии соблюдения правил эксплуатации, описанных в инструкции по пользованию.</p> <p>3. Гарантия на изделие не распространяется в случаях:</p> <ul style="list-style-type: none">- механических повреждений;- выхода из строя изделия из-за попадания внутрь его инородных предметов и жидкостей, насекомых и т.п.;- использования изделия в условиях и режимах, отличающихся от бытовых. <p>4. Гарантия не распространяется на аксессуары и комплектующие.</p> <p>5. Гарантия также теряет силу, если в гарантийный период ремонт неисправного изделия производился не уполномоченными на то лицами.</p> <p>6. Гарантийный срок – 1 год.</p> <p>7. Срок службы – 3 года.</p> <p>Дата изготовления указана на упаковке.</p> <p>Изготовитель: «Сямынь Хелспал Электроник Ко., Лтд» Адрес производителя: №148 Бингланг Ксили, Симинг Дистрикт, Сямынь, Фуджиан, Китай</p> <p>Импортёр / Уполномоченная организация: ООО «ПАЛЛАДА» 111675 ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА РУДНЁВКА, ДОМ 4 П IV К 1,2 ОФ 1 Р 2/5, Россия Служба сервисной поддержки потребителей: +7 (495) 137-80-32</p> <p>Товар сертифицирован</p>	<p>Гарантийный талон</p> <p>Изделие: _____</p> <p>Модель: _____</p> <p>Дата продажи: _____</p> <p>Торговая организация: _____</p> <p>Изделие получил, претензий к комплектации и внешнему виду не имею, с условиями гарантии согласен. Ф.И.О. и подпись покупателя: _____</p> <p>Вскрыл упаковку, проверил и продал. Ф.И.О. продавца: _____</p> <p>М.П.</p>
--	---