


**Красота
не требует
жертв!**

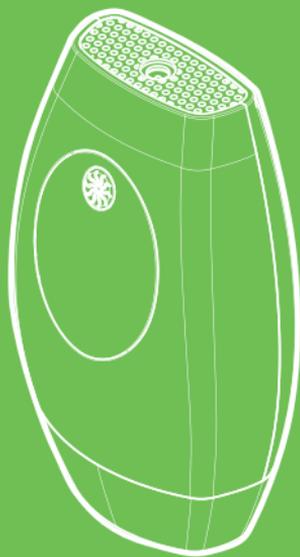

**Фотоэпилятор
КТ-3129**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	3
Устройство фотоэпилятора	5
Подготовка к работе и использование.....	7
Чистка и обслуживание	11
Уход и хранение	11
Устранение неполадок	11
Технические характеристики.....	13
Меры предосторожности.....	14

Общие сведения

Фотоэпилятор КТ-3129 поможет безболезненно и эффективно избавиться от нежелательных волос на долгое время, при этом вам не придется тратить время на посещение салона красоты.

Для профессионального удаления волос в домашних условиях в устройстве используется технология интенсивных световых импульсов (Intense Pulsed Light, IPL). Принцип действия основан на воздействии светового импульса на меланин в волосах. Меланин поглощает световой импульс и преобразует его в тепло. Тепло переходит к корню волоса, разогревает и разрушает волосяной фолликул. При использовании технологии IPL результат достигается только при удалении темных волос на коже от светлого до смуглого тона. Фотоэпилятор, использующий данную технологию, не подходит для удаления светлых, рыжих и седых волос, а также для использования на очень темной коже.

Фотоэпиляция не только избавит вас от нежелательных волос, но и улучшит упругость кожи и микроциркуляцию крови, а также уменьшит морщины за счет стимуляции выработки коллагена во время процедуры.

При прохождении курса фотоэпиляции можно добиться гладкости кожи надолго. В отличие от эпиляторов, бритвенных станков, сахарной и восковой эпиляции фотоэпиляция не повреждает кожу и при правильном проведении не вызывает никаких раздражений на коже.

Вы можете выбрать один из 8 уровней интенсивности воздействия, ориентируясь на рекомендации в инструкции и ваши собственные ощущения. В устройстве предусмотрено два режима работы: ручной и автоматический. Ручной режим предназначен для обработки небольших участков кожи: зона бикини, подмышки, колени, а автоматический режим подходит для обработки крупных участков, например, рук и ног.


Фотоэпилятор оснащен защитой от случайного включения: устройство не произведет световой импульс, если встроенный в фотоэпилятор сенсор не соприкасается с кожей. Специальные очки защитят ваши глаза от воздействия световых импульсов во время проведения процедуры.

Комплектация

1. Фотоэпилятор — 1 шт.
2. Блок питания — 1 шт.
3. Защитные очки — 1 шт.
4. Бритвенный станок с крышкой — 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
6. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство вакуумного очистителя кожи

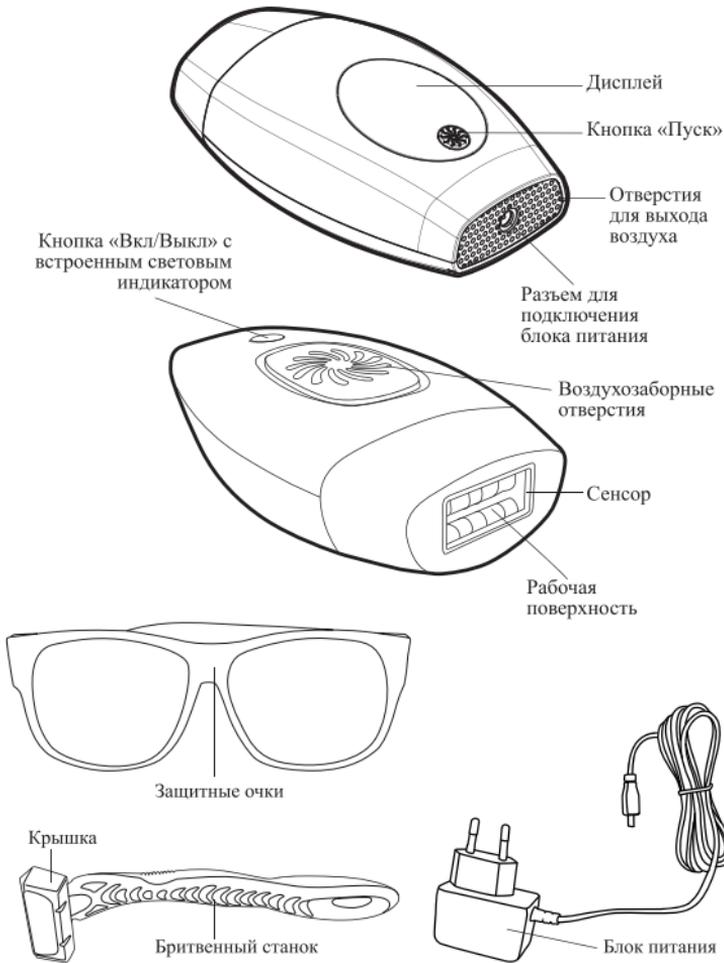

Принцип действия фотоэпилятора достаточно прост. Встроенная в устройство лампа широкополосного спектра при включении посылает мощный световой импульс (вспышку), который воздействует на меланин в волосе. Меланин поглощает световой импульс и преобразует его в тепло. Тепло переходит к корню волоса, разогревает и разрушает волосной фол-

ликул. Чем темнее волосы, тем больше меланина они содержат. Волос, содержащий большое количество меланина, поглощает больше энергии от светового импульса, поэтому волосяной фолликул разрушается легче. Процедура не эффективна для удаления рыжих, светлых и седых волос, так как в них мало или вовсе не содержится меланин. На кожу в зоне обработки не оказывается негативное воздействие, потому что в коже содержится малое количество меланина или он вообще отсутствует (исключение очень темная кожа).


Во время проведения фотоэпиляции **защитные очки** уберегут ваши глаза от вредного воздействия остаточного света от вспышек.

Перед проведением фотоэпиляции вы можете удалить волосы **бритвенным станком** из комплекта или воспользоваться своим.

Воздух попадает в устройство через **воздухозаборные отверстия**, охлаждает внутренние детали устройства и выходит через отверстия на нижней части устройства.

Во избежание несчастных случаев световой импульс (вспышка) производится, только когда **сенсор** прижат к обрабатываемому участку кожи. Сенсор расположен по периметру рабочей поверхности.

Дисплей

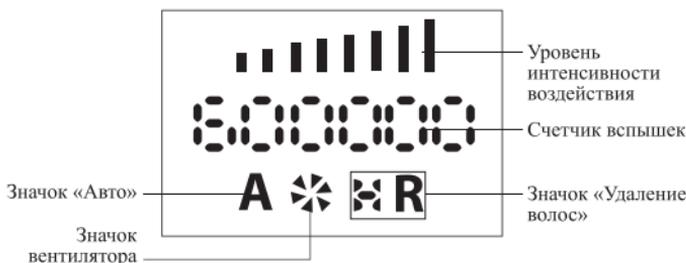

На **дисплее** отображаются уровень интенсивности воздействия, счетчик вспышек, значки автоматического режима, удаления волос и вентилятора.

Длительное нажатие на **кнопку «Вкл/Выкл»** включает и выключает фотоэпилятор, а быстрое однократное нажатие переключает уровень интенсивности воздействия от 1 до 8. Интенсивность воздействия определяется количеством энергии излучения. Чем больше уровень интенсивности воздействия, тем больше энергия излучения и сильнее воздействие. Уровню интенсивности воздействия соответствует количество делений на дисплее устройства. Значки удаления волос и вентилятора загораются на дисплее после включения устройства.

Примечание. Чрезмерное увеличение уровня интенсивности воздействия может вызвать ожоги, поэтому используйте тот уровень интенсивности, который подходит именно вашей коже.

Нажатие на **кнопку «Пуск»** включает подачу импульса в ручном режиме, а также циклически меняет режимы работы. **Значок «Авто»** появляется при выборе автоматического режима.

Счетчик вспышек показывает количество оставшихся вспышек, которое еще может произвести лампа. Лампа рассчитана на создание 600000 вспышек. Для проведения одного комплекса эпиляции, состоящего из удаления волос с рук, ног, зоны бикини и подмышек, в среднем требуется около 600 вспышек (количество вспышек индивидуально для каждого человека и зависит от типа и густоты волос, а также площади обработки). То есть ресурса лампы хватит на проведение 1000 процедур фотоэпиляции. Если предположить, что для полного курса фотоэпиляции потребуется провести 8 процедур, то ресурса лампы хватит на проведение 125 курсов.

Примечание. Когда лампа исчерпает свой ресурс и на дисплее возникнет код ошибки «ERR0», прекратите использование устройства и утилизируйте его наиболее безопасным способом, например, сдав в специальное место по утилизации.

Режимы работы

Ручной режим подходит для обработки небольших участков кожи: зона бикини, подмышки, колени.

После того, как рабочая поверхность устройства с сенсором будет прижата к коже, световой индикатор, встроенный в кнопку «Вкл/Выкл», начнет мигать — устройство готово произвести вспышку. Если световой индикатор горит непрерывно, то сенсор неплотно прилегает к коже.

Чтобы включить единичную подачу светового импульса, нажмите на кнопку «Пуск». После подачи импульса световой индикатор погаснет и загорится через 3 секунды, показывая, что устройство снова готово к использованию.

Переместите рабочую поверхность фотоэпилятора на следующий участок кожи и снова включите единичную подачу светового импульса. Таким образом обработайте всю выбранную область.

Автоматический режим удобно использовать для удаления волос с больших участков, например рук и ног.

При соприкосновении сенсора с кожей фотоэпилятор начинает подавать вспышки автоматически, при этом световой индикатор не горит. Медленно продвигайте рабочую поверхность фотоэпилятора по коже снизу вверх. Таким образом обработайте всю выбранную область.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте фотоэпилятор, блок питания, защитные очки и бритвенный станок из коробки, удалите все упаковочные материалы.

Сбрейте волосы за 1–2 дня до проведения фотоэпиляции. Для эффективного проведения фотоэпиляции длина волоса должна быть 1–2 мм. Если волос не виден, то эффекта от процедуры не будет, так как световая энергия не сможет воздействовать на волос. Если волос будет длиннее, то энергия светового импульса рассеется, пока дойдет до волосяного фолликула, и не сможет его разрушить.



Меры предосторожности при применении

Если вы не уверены в том, что вам можно проводить фотоэпиляцию, проконсультируйтесь с дерматологом.

Во избежание оказания вредного воздействия остаточного света от вспышек на глаза проводите фотоэпиляцию только в защитных очках, а также не используйте фотоэпилятор, когда рядом находятся люди или домашние животные.

За месяц до фотоэпиляции и во время проведения курса фотоэпиляции запрещается удалять волосы с помощью эпилятора, шугаринга или воска.

За месяц до фотоэпиляции и в течение 2 недель после не подвергайте кожу воздействию прямых солнечных лучей, не посещайте солярий, не проводите пилинг и скрабирование.

Во время проведения курса фотоэпиляции исключите из рациона продукты, которые могут вызывать фотоаллергические реакции (например, сельдерей, петрушка, фенхель, инжир, некоторые цитрусовые), не допускайте контакта с растениями, сок которых может повысить фоточувствительность (например, борщевик).

Запрещается проводить фотоэпиляцию несовершеннолетним.

Не используйте фотоэпилятор на коже VI фототипа по шкале Фитцпатрика.

Не используйте устройство:

- на участках, где есть татуировки, веснушки, родимые пятна, родинки или бородавки;
- на участках с экземой, псориазом, ссадинами, открытыми ранами или инфекциями (герпесом), ненормальными состояниями кожи, вызванными системными или метаболическими заболеваниями (например, диабетом);
- во время беременности и в период лактации;
- при эпилепсии, нарушении выработки коллагена или свертываемости крови, иммунодефиците;
- при заболеваниях, связанных с фото- и светочувствительностью (например, порфириновая болезнь, полиморфный фотодерматоз, солнечная крапивница, волчанка и т. п.);
- при онкологии, в том числе в течение 3 месяцев после прохождения химиотерапии;
- при наличии кардиостимулятора, нейростимулятора и др.;
- если принимаете медикаменты, влияющие на фото- и светочувствительность (например, антибиотики и гормональные препараты).

В течение 3 дней после проведения фотоэпиляции запрещается посещать баню, сауну, бассейн и рекомендуется максимально ограничить водные процедуры.

Тест перед использованием

До проведения процедуры проведите тест на чувствительность вашей кожи к фотоэпиляции. Для этого обработайте небольшой участок кожи в ручном режиме на первом уровне интенсивности, как это описано в главе «Использование». Если вы не почувствовали дискомфорта, то обработайте другие участки кожи, постепенно увеличивая уровень интенсивности воздействия, пока не достигнете самого высокого уровня, который будет комфортным для вас.

По прошествии 48 часов осмотрите кожу, на которой проводился тест. Если кожа выглядит как обычно, то вы можете пользоваться фотоэпилятором. Однако повторно обрабатывать участок кожи, на котором проводился тест, можно только через неделю после проведения теста.

Использование

1. Убедитесь, что кожа, на которой собираетесь проводить фотоэпиляцию чистая и сухая. На коже не должно быть никаких косметических средств.
2. Очистите рабочую поверхность устройства салфеткой с медицинским спиртом или ватным диском, смоченным в хлоргексидине.
3. Подсоедините блок питания к разъему на фотоэпиляторе, а сам блок питания подключите к сети. Световой индикатор начнет мигать.
4. Наденьте защитные очки.
5. Нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл», чтобы включить устройство. Загорится дисплей. Световой индикатор будет гореть непрерывно. Вы услышите звук работы вентилятора. По умолчанию выбран первый уровень интенсивности и ручной режим.
6. Нажимайте на кнопку «Вкл/Выкл», чтобы изменить уровень интенсивности воздействия. При выборе уровня интенсивности воздействия воспользуйтесь рекомендациями, приведенными в таблице в главе «Советы».
7. Нажмите и удерживайте кнопку «Пуск», пока не загорится значок «Авто», если хотите перейти в автоматический режим. Чтобы вернуться в ручной режим, однократно нажмите на кнопку «Пуск» еще один раз. Значок «Авто» исчезнет.
8. Прижмите рабочую поверхность фотоэпилятора к коже под углом 90° и обработайте выбранный участок кожи, как описано в главе «Режимы работы».

Внимание! Устройство не подаст световой импульс, если сенсор не будет прижат к коже, но остаточный свет от вспышки может нанести вред глазам. Поэтому во избежание оказания вредного воздействия остаточного света от вспышек на глаза проводите фотоэпиляцию только в защитных очках, а также не используйте фотоэпилятор, когда рядом находятся люди или домашние животные.

Примечание.

Вы можете ощущать тепло и покалывание во время фотоэпиляции и в течение нескольких минут после — это нормально. Но если ощущения слишком болезненны, уменьшите интенсивность воздействия или прекратите использование устройства и проконсультируйтесь с врачом.

9. Нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл», чтобы выключить устройство. Дисплей погаснет, световой индикатор будет мигать.
10. Отключите блок питания от электросети. Световой индикатор погаснет.

Советы

В среднем курс фотоэпиляции составляет 6–10 процедур. Проводите процедуру фотоэпиляции 1 раз в 2 недели первые 6 раз, затем 1 раз каждые 4 недели, пока не достигнете желаемого результата. При необходимости после завершения курса фотоэпиляции поддерживайте результат, проводя 1 процедуру раз в 1–2 месяца.

Длительность курса фотоэпиляции зависит от цвета и толщины волос, количества волос, находящихся в стадии роста в момент проведения фотоэпиляции, а также от биологических факторов, влияющих на рост волос.

Не проводите фотоэпиляцию на одном и том же участке кожи чаще 1 раза в неделю. Частое применение не приведет к более быстрому достижению результата, но может повысить риск повреждения кожи.

После процедуры нанесите на обработанный участок кожи регенерирующий крем (например, пантенол), чтобы избежать сухости и шелушения кожи.

3 дня после проведения фотоэпиляции запрещается посещать баню, сауну, бассейн и рекомендуется максимально ограничить водные процедуры.

Не подвергайте кожу воздействию прямых солнечных лучей, не посещайте солярий, не проводите пилинг и скрабирование 2 недели после проведения процедуры фотоэпиляции. Примите во внимание, что в начале курса фотоэпиляции процедуру проводят каждые две недели, значит первые 3 месяца не следует подвергать кожу воздействию прямых солнечных лучей, посещать солярий, проводить пилинг и скрабирование.

Во время проведения курса фотоэпиляции запрещается удалять волосы с помощью эпилятора, шугаринга или воска.

Первые 2 дня после процедуры не наносите на обработанную кожу косметические средства с содержанием спирта и жирные кремы.

Не используйте декоративную косметику в течение 2–3 дней после проведения фотоэпиляции на лице.

Несильное покраснение кожи после процедуры является нормальным явлением. Покраснение проходит в течение 48 часов. Обратитесь к врачу, если покраснение не прошло через 2–3 дня.

Вы можете ощущать тепло и покалывание во время фотоэпиляции и в течение нескольких минут после — это нормально.

В таблице ниже приведены рекомендации по проведению процедуры для разных типов кожи. Использование на любом участке кожи темного оттенка либо сравнительно более пигментированном может вызвать нежелательные явления, такие как ожоги, волдыри и изменения цвета кожи (гипер- или гипопигментацию).

Область обработки		Тип кожи по шкале Фитцпатрика				
		I и II	III	IV	V	
Подмышки	Уровень интенсивности воздействия	6–8	5–7	4–6	1–4	
	Количество вспышек	3–4	2–3	2–3	2–3	
Руки/ноги	Уровень интенсивности воздействия	6–8	5–7	1–4	1–4	
	Количество вспышек	3–4	2–3	2–3	2–3	
Лицо и шея	Уровень интенсивности воздействия	6–8	4–6	1–4	1–4	
	Количество вспышек	3–4	2–3	2–3	2–3	
Зона бикини	Уровень интенсивности воздействия	6–8	4–6	1–4	1–4	
	Количество вспышек	3–4	2–3	2–3	2–3	

Чистка и обслуживание

Очищайте фотоэпилятор мягкой влажной, а затем сухой тканью. Не погружайте устройство в воду или иные жидкости. Не допускайте попадания воды внутрь корпуса устройства, в органы управления, в разъем для подключения блока питания и в блок питания.

Протрите рабочую поверхность сначала влажной, затем сухой мягкой тканью.

Очищайте от пыли отверстия для выхода воздуха и воздухозаборные отверстия щеткой с мягким ворсом.

Уход и хранение

Храните устройство вдали от прямых солнечных лучей в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. При длительном хранении убирайте фотоэпилятор, защитные очки и блок питания в коробку или пакет для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Устройство не включается, световой индикатор не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Неисправен блок питания	Обратитесь в сервисный центр

Световой импульс не подается

Возможная причина	Решение
Сенсор не соприкасается с кожей	Во избежание несчастных случаев световой импульс подается, только когда сенсор прижат к обрабатываемому участку кожи
Выбран ручной режим	Чтобы включить единичную подачу светового импульса, нажмите на кнопку «Пуск». После подачи импульса световой индикатор погаснет и загорится через 3 секунды, показывая, что устройство снова готово к использованию



Сильная боль во время использования

Возможная причина	Решение
Выбран слишком высокий уровень интенсивности	Прекратите использование устройством. Дождитесь, пока кожа не восстановится (пройдут покраснения и раздражения). При следующем использовании выберите уровень интенсивности ниже, чем раньше

Недостаточная эффективность процедуры

Возможная причина	Решение
Выбран слишком низкий уровень интенсивности	Увеличьте уровень интенсивности воздействия. Но не устанавливайте слишком высокий уровень, чтобы не навредить коже
Волосы слишком светлые, седые или рыжие	Наилучший результат достигается при удалении темных волос
Длина волоса слишком маленькая/большая	Для эффективного проведения фотоэпиляции длина волоса должна быть 1–2 мм

Если возникла какая-нибудь неисправность, устройство выключится и отобразит сообщение об ошибке на дисплее или начнет подавать звуковой сигнал. Расшифровать код ошибки поможет следующая таблица.

Код ошибки	Возможная причина	Решение
ERR0	Истек срок службы лампы	Устройство больше не пригодно к использованию. Прекратите использование устройства и утилизируйте его наиболее безопасным способом, например, сдав в специальное место по утилизации.
ERR1	Ошибка высоковольтной части	Обратитесь в сервисный центр
ERR2	Вентилятор неисправен	Обратитесь в сервисный центр
ERR3	Устройство перегрелось и отключилось	Выключите устройство и отключите от сети. Дождитесь полного остывания устройства. Если код ошибки не пропал, обратитесь в сервисный центр
ERR4	Проблема с платой	Обратитесь в сервисный центр

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на info@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Блок питания:
 - вход: ~100–240 В, 50/60 Гц
 - выход: ~12 В, 3 А
2. Мощность: 36 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током:
 - блока питания: II
 - фотоэпилятора: III
4. Количество режимов работы: 2
5. Количество уровней интенсивности воздействия: 8
6. Энергия излучения: 1,5–3,9 Дж/см²
7. Площадь зоны эпиляции: 4,2 см²
8. Количество вспышек: 600000
9. Длина волны: 470–1100 нм
10. Уровень шума: 28–32 дБ
11. Длина шнура: 1,1 м
12. Размер устройства: 84 × 50 × 143 мм
13. Размер упаковки: 133 × 90 × 165 мм
14. Вес нетто: 0,38 кг
15. Вес брутто: 0,51 кг

Срок службы: 2 года
Срок гарантии: 1 год
Товар сертифицирован



Производитель: Шэньчжэнь АЙФАЙН Текнолэджи Ко., Лтд, 4 Флор, Хуаньань Индастри Парк, Юнфэн 4 Роуд, Байшия Ист, Фуюн Таун, Баоань Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.



Условия гарантии

Механические повреждения корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не являются гарантийным случаем.

Выход из строя устройства вследствие попадания воды внутрь корпуса устройства, в область органов управления, в область разъема для подключения блока питания и в блок питания не является гарантийным случаем.

Окончание ресурса лампы не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте фотопилактор только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите фотопилактор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении блока питания от устройства.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться фотопилактором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Во избежание оказания вредного воздействия остаточного света от вспышек на глаза не используйте фотопилактор, когда рядом находятся люди или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!

10. Кладите фотоэпилятор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Не кладите включенный фотоэпилятор на мягкие поверхности во избежание блокировки воздухозаборных отверстий и выхода из строя устройства.
11. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
12. Не допускайте падения фотоэпилятора и не подвергайте его ударам.
13. При проведении процедуры надевайте защитные очки.
14. Храните устройство в недоступных детям местах.
15. Прибор не предназначен для использования детьми, не достигшими 18 лет.
16. За месяц до фотоэпиляции и в течение 2 недель после не подвергайте кожу воздействию прямых солнечных лучей, не посещайте солярий, не проводите пилинг и скрабирование.
17. Не проводите фотоэпиляцию на коже VI фототипа по шкале Фитцпатрика.
18. Не используйте устройство:
 - на участках, где есть татуировки, веснушки, родимые пятна, родинки или бородавки;
 - на участках с экземой, псориазом, ссадинами, открытыми ранами или инфекциями (герпесом), ненормальными состояниями кожи, вызванными системными или метаболическими заболеваниями (например, диабетом);
 - во время беременности и в период лактации;
 - при эпилепсии, нарушении выработки коллагена или свертываемости крови, иммунодефиците;
 - при заболеваниях, связанных с фото- и светочувствительностью (например, порфириновая болезнь, полиморфный фотодерматоз, солнечная крапивница, волчанка и т. п.);
 - при онкологии, в том числе в течение 3 месяцев после прохождения химиотерапии;
 - при наличии кардиостимулятора, нейростимулятора и др.;
 - если принимаете медикаменты, влияющие на фото- и светочувствительность (например, антибиотики и гормональные препараты).
19. В течение 3 дней после проведения фотоэпиляции запрещается посещать баню, сауну, бассейн и рекомендуется максимально ограничить водные процедуры.
20. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
21. При повреждении блока питания его следует заменить специальным блоком питания или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.



Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87