

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
МАССАЖЕРА ДЛЯ НОГ
PLANTA**

MF-4W Massage Bliss



PLANTA

www.planta-russia.ru

ВНИМАНИЕ! СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!

Использование массажера для ног

При создании массажера MF-4W Massage Bliss были задействованы современные электронные технологии в совокупности с достижениями медицинских исследований, в т.ч. в рефлексологии. Рефлекс – произвольная реакция человека на воздействие извне. Данный массажер воздействует на особые точки на ступнях человека, обеспечивая физиологический эффект в соответствующих определенных точках частях тела и органах, помогая организму обрести баланс. Массаж ног с помощью этого массажера так же оказывает расслабляющее и стимулирующее действие, уменьшает напряжение в мышцах и снимает усталость. Данное устройство не является полноценной заменой медицинской терапии или физиотерапии. Если Вы не уверены, что этот массажер Вам подходит, проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом. Устройство предназначено для личного использования. Оно не предназначено для использования в коммерческих целях любого рода, а также для использования в лечебных учреждениях. Чтобы использовать все преимущества Вашего массажера для ног, внимательно изучите руководство по эксплуатации и следуйте правилам ухода и техники безопасности. Это продлит срок службы Вашего массажера. Сохраните это руководство по эксплуатации для использования в будущем или при передаче устройства другому лицу. Для получения дополнительной информации посетите сайт: www.planta-russia.ru

Техника безопасности

- Данное устройство работает от электросети. Поэтому на него распространяются те же правила безопасности, что и на любые другие электроприборы.
- Используйте устройство только в сети с соответствующим напряжением.
- Перед использованием убедитесь в том, что все детали устройства находятся в исправном состоянии. В случае обнаружения дефекта или неисправности выключите устройство и немедленно выньте вилку из розетки. Ремонт устройства могут проводить только специалисты авторизованных сервисов. Никогда не открывайте устройство самостоятельно. Отдельные компоненты этого устройства нельзя разбирать, ремонтировать или переустанавливать.

- Используйте устройство только в абсолютно сухих помещениях, убедившись, что Ваше тело также сухое. Запрещено использовать устройство в ванной комнате, душе, над наполненной водой раковиной, в бассейне, сауне и вне помещения.



- Никогда не используйте устройство в непосредственной близости от источников тепла.
- Кабель не должен касаться острых краев.
- Для отключения или транспортировки прибора не тяните за кабель или за само устройство.
- Если Вы не используете устройство, отключите его от электрической сети.
- Если Вы когда-нибудь будете утилизировать устройство, сделайте его непригодным для дальнейшего использования, отрезав кабель.
- Данное устройство запрещено использовать лицам (особенно детям) с ограниченными физическими, сенсорными или психическими возможностями, а также лицам, не имеющим достаточного опыта или знаний для обращения с устройством, кроме случаев использования устройства под контролем ответственного лица или после получения необходимой информации.



- Следите за тем, чтобы дети не использовали устройство в качестве игрушки.
- Перед чисткой всегда отключайте устройство от электросети. Во время чистки следите, чтобы жидкости не попадали на переключатели и кнопки.

Устройство может использоваться только в абсолютно сухом состоянии.

- Запрещено разбирать устройство. В нем нет деталей, которые мог бы отремонтировать пользователь.
 - Запрещено снимать панели устройства, т.к. ремонт внутренних компонентов может проводиться только квалифицированными специалистами.
 - Не вставляйте иголки или иные острые предметы в массажер.
 - Никогда не используйте данное устройство совместно с электромедицинским оборудованием, электронными системами жизнеобеспечения, такими как: аппараты для искусственной вентиляции легких, или переносными медицинскими устройствами, такими как: электрокардиограф. Данное устройство может стать причиной нарушений в работе вышеназванного медицинского оборудования.
 - Перед чисткой всегда отключайте устройство от электросети. Во время чистки следите, чтобы жидкости не попадали на переключатели и кнопки.
- Устройство может использоваться только в абсолютно сухом состоянии.

- Запрещено разбирать устройство. В нем нет деталей, которые мог бы отремонтировать пользователь.
- Запрещено снимать панели устройства, т.к. ремонт внутренних компонентов может проводиться только квалифицированными специалистами.
- Не вставляйте иголки или иные острые предметы в массажер.
- Никогда не используйте данное устройство совместно с электромедицинским оборудованием, электронными системами жизнеобеспечения, такими как: аппараты для искусственной вентиляции легких, или переносными медицинскими устройствами, такими как: электрокардиограф. Данное устройство может стать причиной нарушений в работе вышеназванного медицинского оборудования.

Предупреждения

- Перед использованием устройства проконсультируйтесь с врачом, если Вы:
 - беременны;
 - используете кардиостимулятор и т.п.;
 - страдаете одним из перечисленных заболеваний: грипп, лихорадка, варикозное расширение вен, тромбоз, гепатит, диабет, воспаление, ишиас, выпадение межпозвоночных дисков и др.;
 - проходите реабилитацию после операции.
- Не используйте прибор, если на ногах имеются открытые раны, ожоги, гематомы, опухли и т.п.
- Не используйте устройство, находясь под воздействием алкоголя.
- Остановите массаж, если Вы почувствуете неприятные или болезненные ощущения.
- Если после использования устройства у Вас появилась боль в нижних конечностях, немедленно прекратите использование и обратитесь к врачу.
- Нельзя оставлять работающее устройство под подушками, одеялами и т.п.

- Если шнур питания поврежден, во избежание опасности необходимо заменить его в сервисном центре или у квалифицированного специалиста.
- В устройстве имеются нагревающиеся поверхности. Лица, чувствительные к воздействию тепла, должны учитывать, что срок полезного действия устройства составляет 15 минут и использовать устройство можно только под наблюдением.

Примечания

- Если Вы используете устройство непосредственно перед сном, помните, что массаж может оказывать стимулирующее воздействие и вызвать бессонницу.
- Массажер отключается автоматически через 15 минут, что соответствует оптимальной продолжительности массажа, оказывающего благотворное влияние на организм.

Уход

Используйте для очистки ткань, смоченную мягким моющим средством.

Возможные риски

Перед чисткой выдерните вилку из розетки и дайте устройству остыть.

Устройство можно снова использовать после того, как оно полностью высохнет.



Запрещено снимать панели устройства или открывать застёжки, т.к. ремонт внутренних компонентов может проводиться только квалифицированными специалистами.




Внимание! Ни в коем случае не используйте абразивные или агрессивные чистящие средства и не погружайте устройство в воду.

ВНИМАНИЕ!

МАССАЖЕР НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ТОВАРОМ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ!

Описание:

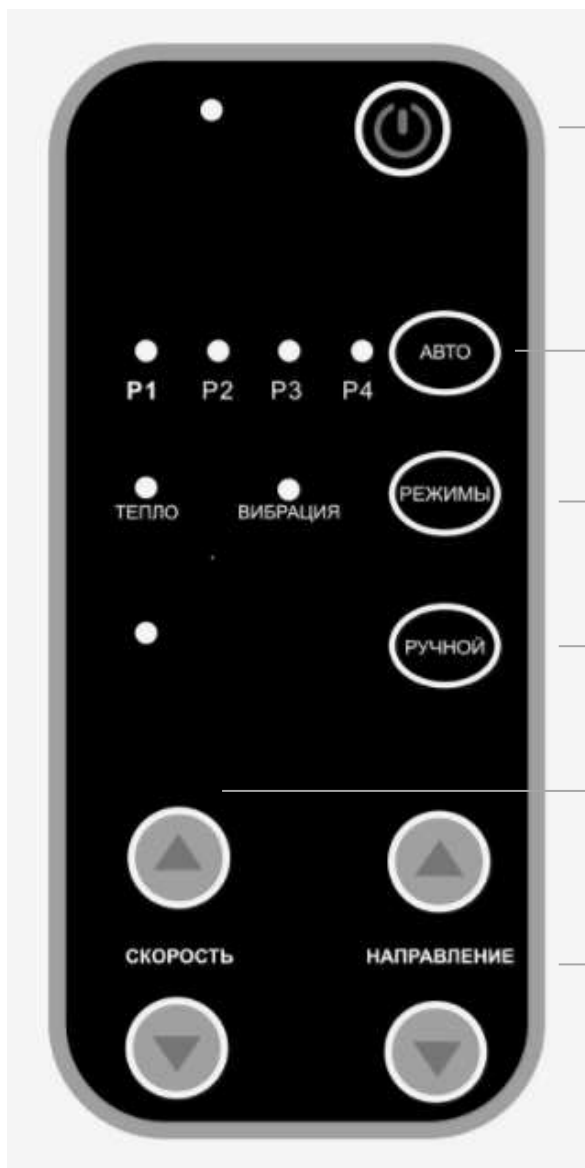

**ВКЛ/ВЫКЛ**

Кнопка включения / выключения прибора / паузы

АВТО

Выбор одной из четырех предустановленных программ (индикатор соответствует выбранной программе)

РЕЖИМЫ

Дополнительно активирует функции подогрева и/или вибрации

РУЧНОЙ режим

Позволяет самостоятельно выбрать скорость и направление массажа

СКОРОСТЬ

Выбор скорости массажа, работает только в ручном режиме

НАПРАВЛЕНИЕ

Выбор направления массажа, только в ручном режиме

Начало использования


1. Подключите устройство к розетке электрической сети 220В.
2. Поставьте массажер на полу перед собой, сядьте.
3. Поместите ступни в 2 полости для ног.
4. **ВКЛЮЧЕНИЕ.** Чтобы включить массажер для ступней ног, один раз нажмите кнопку **ВКЛ/ВЫКЛ** , первая программа запустится автоматически.
Так же кнопка включения может применяться при желании поставить устройство на паузу или остановить массаж (быстрое нажатие)
5. **ВЫБОР АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ.**
Кнопка **АВТО**. Предполагает выбор из 4х предустановленных программ массажа, при выборе программы загорается соответствующий световой индикатор.
P1 – профилактический оздоровительный массаж
P2 – массаж точек, отвечающих за голову, шею, поясничный отдел позвоночника, плечи и др.
P3 – массаж точек, отвечающих за кишечник, печень, желудок и пр.
P4 – массаж точек, отвечающих за ноги, репродуктивную и мочевыделительную систему.
6. **АКТИВАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РЕЖИМОВ.**
Кнопка **РЕЖИМЫ**. Позволяет в дополнение к любой программе активировать режим подогрева, вибрации или оба режима одновременно.
7. **РУЧНОЙ РЕЖИМ.**
При нажатии на кнопку **РУЧНОЙ**, позволяет самостоятельно выбрать кнопками со стрелками **скорость** (интенсивность, 3 уровня) и **направление** (2 варианта) массажа.
8. **ОТКЛЮЧЕНИЕ.** Чтобы отключить прибор, нажмите кнопку питания **ВКЛ/ВЫКЛ**  и удерживайте в течение 2-х секунд

Особенности

Во время массажа происходит полный охват стопы с трех сторон, создавая 3D-эффект – разминающий массаж широкими боковыми пластинами с одновременной проработкой подошвы стопы массажными роликами SHIATSU.

Массажер будет осуществлять работу в области пальцев ног, свода стоп, лодыжек. Во время массажа Вы можете плавно передвигать ноги на платформах, чтобы получать массаж именно в той области, где это необходимо.

Рекомендуемые точки:

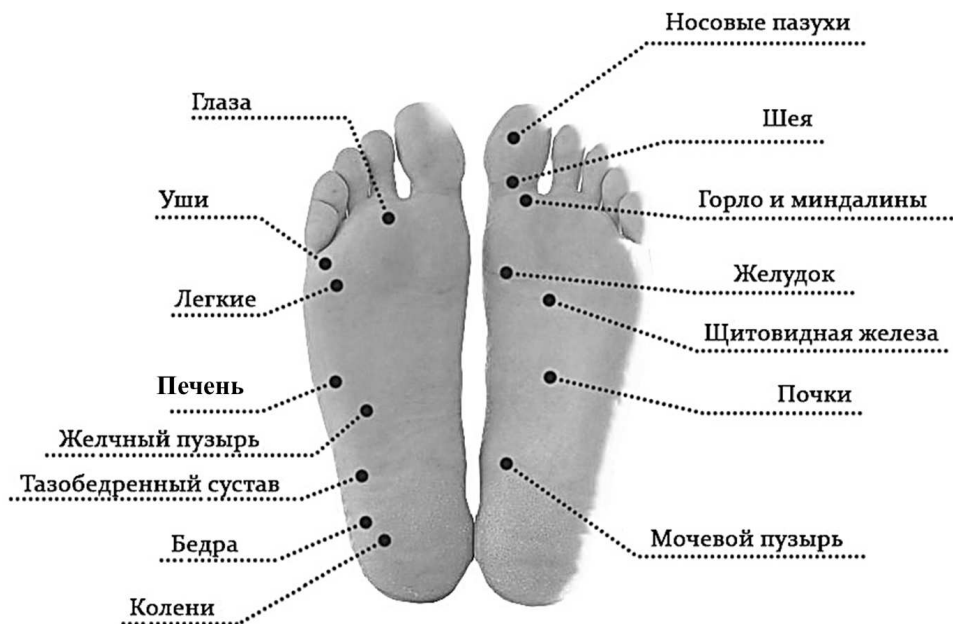

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Если прибор не используется, он автоматически отключается через 10 минут в целях безопасности. Эта функция не должна рассматриваться в качестве замены функции отключения. Не забывайте отключить прибор, если он не используется.
- Временная приостановка работы массажера при нажатии на кнопку включения/выключения; если работа массажера приостанавливается Вами более чем на 10 минут, то устройство отключается автоматически.
- НЕ пытайтесь встать (стоять) на этом массажере для ступней ног. Используйте его только тогда, когда Вы сидите.
- Функция прогрева будет работать только тогда, когда используется массаж.
- Полезная протяженность массажа составляет 15 минут. По истечении этого времени массажер автоматически отключается. Не рекомендуется использовать массажер дольше указанного времени.

Хранение, перевозка и регулярный осмотр

- Если Вы не используете массажер, храните его в сухом месте.
- Прежде чем убрать устройство для хранения, дайте ему полностью остыть.
- Во время хранения не ставьте на устройство тяжелые предметы, в противном случае возможны поломки частей устройства.
- Не допускайте падения устройства. Это может привести к его повреждению.

Технические характеристики

Модель: MF-4W

Питание: 220V/50Hz

Мощность: 50W

Габариты: 540х350х280мм

Вес: 5,8 кг

Утилизация электрооборудования

По истечении срока службы данного устройства проведите его утилизацию в соответствии с Директивой 2002/96/EC - WEEE (Утилизация электрического и электронного оборудования). Символ на изделии или на его упаковке указывает, что данный продукт нельзя утилизировать вместе с бытовым мусором, а необходимо сдать в приемный пункт переработки электрического и электронного оборудования.



Гарантия

Гарантия 1 год со дня продажи. В случае производственного брака, Вам следует обратиться в торгующую организацию продавшее товар.

ВНИМАНИЕ!

МАССАЖЕР НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ТОВАРОМ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ!

Гарантийный талон

Условия гарантии

1. В случае обнаружения неисправности в период Гарантийного срока данное изделие подлежит обмену торговым предприятием, продавшим данное изделие.
2. Гарантийная замена производится при наличии заполненного гарантийного талона и при условии соблюдения правил эксплуатации, описанных в инструкции по пользованию.
- 3.
4. Гарантия на изделие не распространяется в случаях:
 - механических повреждений;
 - выхода из строя изделия из-за попадания внутрь его инородных предметов и жидкостей, насекомых и т.п.;
 - использования изделия в условиях и режимах, отличающихся от бытовых.
4. Гарантия не распространяется на аксессуары и комплектующие.
5. Гарантия также теряет силу, если в гарантийный период ремонт неисправного изделия производился не уполномоченными на то лицами.
6. Гарантийный срок – 1 год.
7. Срок службы – 3 года.

Изготовитель:

«Юнкан Женгцы Фитнес Икуипмент Ко., Лтд.»,
 No.655, Уэст Джижоу роад, Экономик
 Девелопмент Зоун, Юнкан, Жейджанг, Китай
 Страна-производитель: Китай
 Импортер / Уполномоченная организация:
 ООО «А-маркт», 127434 г. Россия, Москва,
 Дмитровское шоссе, д.13А, эт.1, пом. III, к.1.

Служба поддержки потребителей:
 +7 (495) 641 61 39

www.planta-russia.ru

Дата производства: см. на упаковке



Товар сертифицирован по ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011

Гарантийный талон

Изделие: _____

Модель: _____

Серийный номер: _____

Дата продажи: _____

Торговая организация: _____

Изделие получил, претензий к комплектации и внешнему виду не имею, с условиями гарантии согласен.

Ф.И.О. и подпись покупателя: _____

Вскрыл упаковку, проверил и продал.

Ф.И.О. продавца: _____

М.П.