


**Волшебство
ухода за кожей!**

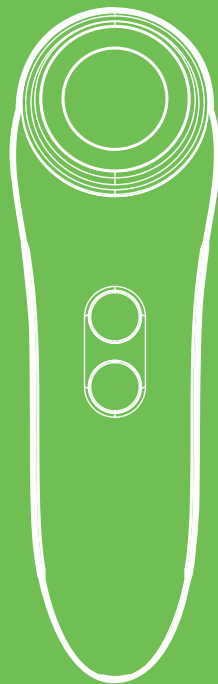

**Массажер для лица
КТ-3119**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	5
Устройство массажера	5
Подготовка к работе и использование.....	9
Чистка и обслуживание	13
Уход и хранение	13
Устранение неполадок	14
Технические характеристики	16
Меры предосторожности.....	17

Общие сведения

Массажер для лица КТ-3119 поможет подтянуть кожу, разгладить рельеф кожи, замедлить появление морщин. Массажер оснащен 6 режимами работы: «Пилинг», «Уход», «Лифтинг», «Омоложение», «Массаж», «Смягчение». В режимах комбинируется воздействие звуковых и ультразвуковых вибраций, тепла, микротоков и света. В каждом режиме вы можете выбрать один из 3 уровней воздействия звуковыми вибрациями. Управление массажером происходит двумя кнопками, расположенными на корпусе прибора. Устройство начнет работу, когда электроды на корпусе массажера соприкасаются с рукой, а электроды на рабочей поверхности прибора соприкасаются с кожей лица.

Ультразвуковые вибрации улучшают кровообращение и укрепляют сосуды, что приводит к улучшению цвета лица и снятию отеков. Под воздействием ультразвуковых волн стимулируется синтез коллагена и эластина, которые отвечают за молодость и упругость кожи. Также массаж ультразвуком способствует разглаживанию морщин, улучшению тона кожи и овала лица. Помимо этого, ультразвук помогает активным веществам из косметических средств проникать в глубокие слои кожи для глубокого питания и увлажнения кожи.

Звуковые вибрации предотвращают появление морщин и способствуют разглаживанию уже имеющихся морщин.

Массажер КТ-3119 может воздействовать на кожу синим и красным светом. Синее излучение нормализует работу сальных желез, уменьшает видимость пор. Красный свет предназначен для укрепления стенок сосудов, выравнивания тона кожи, восстановления ее гладкости, эластичности и упругости.

Микротоки вызывают ускоренное обновление клеток кожи, стимулирование кровообращения, ускорение движения лимфы. В результате кожа насыщается кислородом, запускаются регенерационные и обменные процессы в глубоких слоях кожи. Микротоковый массаж также воздействует на мышцы, приводя их в тонус.

При работе в некоторых режимах рабочая поверхность массажера нагревается до 38–42 °С. При нагреве кожи до 42 °С усиливается циркуляция крови и лимфы, улучшается кровоснабжение тканей в зоне воздействия, что приводит к повышению скорости обмена веществ.

Следует помнить, что при наличии противопоказаний или заболеваний перед применением массажера необходимо проконсультироваться с врачом. Массажер для лица КТ-3119 не является медицинским прибором и используется только в профилактических и косметологических целях.


Массажер для лица очень компактный и легкий. Вы можете брать его с собой и делать массаж в любом удобном месте.

Комплектация

1. Массажер для лица — 1 шт.
2. Кольцо-фиксатор — 1 шт.
3. Шнур USB Type-C — 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
5. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство массажера

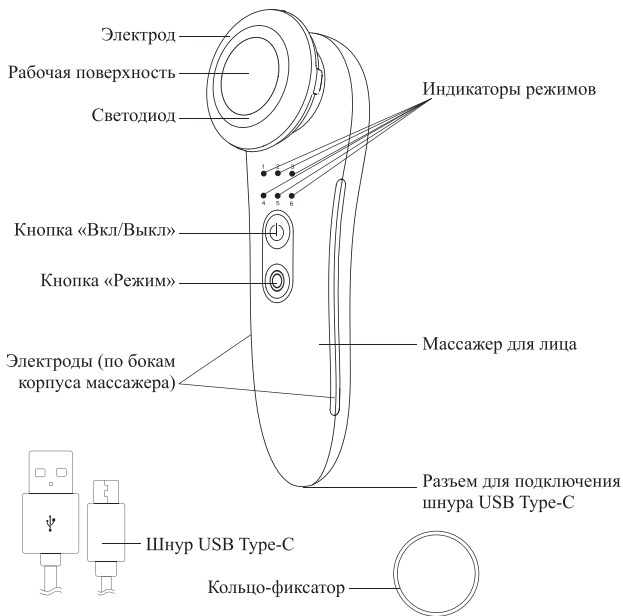



Kitfort

Нажатие на кнопки сопровождается звуковым сигналом.

Кнопка «Вкл/Выкл» включает и выключает массажер, а также настраивает уровень воздействия во время процедуры. Устройство имеет три уровня воздействия звуковыми вибрациями в каждом режиме: слабое, среднее и сильное воздействие.

Кнопка «Режим» циклически переключает режимы массажера.

Индикаторы режимов загораются при выборе соответствующего режима и показывают выбранный уровень воздействия:

- слабое воздействие — горят индикаторы режимов «1» и «4»;
- среднее воздействие — горят индикаторы режимов «1», «2», «4» и «5»;
- сильное воздействие — горят все индикаторы режимов.

Во время зарядки индикаторы режимов загораются волнообразно: сначала загораются индикаторы 1 и 4, затем индикаторы 2 и 5, далее индикаторы 3 и 6, в конце все индикаторы гаснут. Весь цикл повторяется снова, пока устройство не будет полностью заряжено. Когда массажер полностью заряжен, все индикаторы режимов непрерывно горят.

Устройство начинает работу в выбранном режиме, когда **электроды** на корпусе устройства соприкасаются с рукой, а **электрод** на рабочей поверхности прибора соприкасается с кожей лица.


Вы можете закрепить тонкий ватный диск, пропитанный вашим увлажняющим тономером или лосьоном для лица, на рабочую поверхность прибора с помощью **кольца-фиксатора**.

Режим ожидания

При включении массажера кнопкой «Вкл/Выкл» устройство перейдет в режим ожидания. Индикаторы режимов будут загораться по кругу: 4, 1, 2, 3, 6, 5. Массажер переходит в этот режим по истечении времени работы в выбранном режиме, а также при бездействии в течение 8 минут.

Режимы работы

Устройство имеет 6 режимов работы. Ниже приведено подробное описание режимов.

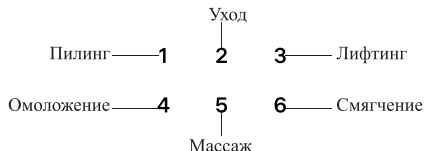

Режим «Пилинг»

При работе в этом режиме происходит одновременное воздействие звуковых вибраций, тепла и микротоков. Вредные вещества и частички грязи под воздействием тока, созданного массажером, выводятся из пор, что позволяет провести глубокую очистку кожи. Нагрев кожи до 42 °С не только усиливает циркуляцию крови, но и позволяет раскрыть поры для лучшего удаления загрязнений.

Для работы в этом режиме установите тонкий ватный диск, пропитанный вашим увлажняющим тономером или лосьоном, на рабочую поверхность прибора с помощью кольца-фиксатора.

Рекомендуется использовать данный режим не чаще 2–3 раз в неделю.

Во время работы в режиме «Пилинг» индикатор «1» горит непрерывно. Во время массажа устройство издает звуковой сигнал каждые 30 секунд. По прошествии 3 минут массажер прекратит работу и перейдет в режим ожидания.

Режим «Уход»

При работе в этом режиме массажер воздействует на кожу одновременно посредством звуковых и ультразвуковых вибраций, тепла и микротоков. Под воздействием микротоков кожа становится более проницаемой, что способствует поглощению питательных веществ из косметических средств более глубокими слоями кожи.

Перед работой в этом режиме нанесите на лицо крем или сыворотку.

Рекомендуется использовать данный режим 1–2 минуты, но не более 3 минут за сеанс. Вы можете использовать массажер для лица в этом режиме ежедневно.

Во время работы в режиме «Уход» индикатор «2» горит непрерывно. Во время массажа устройство издает звуковой сигнал каждые 30 секунд. По прошествии 3 минут массажер прекратит работу и перейдет в режим ожидания.

Режим «Лифтинг»

При работе в этом режиме происходит одновременное воздействие звуковых и ультразвуковых вибраций, тепла и микротоков. Микротоки вызывают ускоренное обновление клеток кожи, стимулирование кровообращения, ускорение движения лимфы. В результате кожа насыщается кислородом, запускаются регенерационные и обменные процессы в глубоких слоях кожи. Микротоки также воздействуют на мышцы лица, проводя микротоковый массаж. Это улучшает мышечный тонус, подтягивает овал лица.



Kitfort

Вы можете использовать массажер для лица в этом режиме ежедневно.

Во время работы в режиме «Лифтинг» индикатор «3» горит непрерывно. В течение массажа устройство издает звуковой сигнал каждые 60 секунд. По прошествии 8 минут массажер прекратит работу и перейдет в режим ожидания.

Режим «Омоложение»

При работе в этом режиме происходит попеременное воздействие синим (465 нм) и красным (623 нм) светом и звуковыми вибрациями.

Синий свет оптимально подходит для жирной, проблемной пористой кожи, с воспалительными процессами, комедонами (пробки из смеси кожного сала и отшелушенного эпителия, которые закупоривают поры) и угревой сыпью. Воздействие синим светом нормализует выработку сального секрета, уменьшает поры, восстанавливает процессы самоочищения кожи.

Красный свет разработан для стимуляции деятельности фибробластов. Фибробласты — это клетки, вырабатывающие коллаген и эластин, необходимые для упругости и молодости кожи. Воздействие красным светом приводит к укреплению стенок сосудов, выравниванию тона кожи, восстановлению ее гладкости, эластичности и упругости. Воздействие красным светом подходит для всех типов кожи и идеально сочетается с любыми омолаживающими процедурами.

Вы можете использовать массажер для лица в этом режиме ежедневно.

Во время работы в режиме «Омоложение» индикатор «4» горит непрерывно. Во время массажа устройство издает звуковой сигнал каждые 60 секунд. По прошествии 8 минут массажер прекратит работу и перейдет в режим ожидания.

Режим «Массаж»

При работе в этом режиме происходит одновременное воздействие звуковых вибраций, тепла и красного света. Воздействие красным светом приводит к укреплению стенок сосудов, выравниванию тона кожи, восстановлению ее гладкости, эластичности и упругости.

Вы можете использовать массажер для лица в этом режиме ежедневно перед сном.

Во время работы в режиме «Массаж» индикатор «5» горит непрерывно. Во время массажа устройство издает звуковой сигнал каждые 60 секунд. По прошествии 8 минут массажер прекратит работу и перейдет в режим ожидания.

Режим «Смягчение»

При работе в этом режиме происходит одновременное воздействие звуковых вибраций, тепла и синего света. Воздействие синим светом нормализует выработку сального секрета, уменьшает поры, восстанавливает процессы самоочищения кожи.

Вы можете использовать массажер для лица в этом режиме ежедневно перед сном.

Во время работы в режиме «Смягчение» индикатор «6» горит непрерывно. В течение массажа устройство издает звуковой сигнал каждые 60 секунд. По прошествии 8 минут массажер прекратит работу и перейдет в режим ожидания.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте массажер для лица и шнур USB Type-C из коробки и удалите все упаковочные материалы. Протрите корпус и рабочую поверхность сначала влажной, затем сухой мягкой тканью. Тщательно продезинфицируйте рабочую поверхность прибора: ее можно протереть ватным диском, смоченным в спирте или хлоргексидине.

Зарядка аккумулятора

Если при работе массажера для лица вибрация остановилась, у аккумулятора низкий заряд. В этом случае зарядите аккумулятор. Если при включении устройство не работает, значит, аккумулятор разряжен полностью.

Для зарядки прибора необходим шнур USB Type-C из комплекта. Рекомендуется использовать блок питания с USB-разъемом и выходными параметрами: 5 В, 1 А. Также зарядить устройство можно от сторонних источников питания: ноутбука, пауэрбанка и др.

При зарядке аккумулятора индикаторы режимов загораются «волнообразно»: сначала загораются индикаторы 1 и 4, затем индикаторы 2 и 5, далее индикаторы 3 и 6, в конце все индикаторы гаснут. Весь цикл повторяется снова, пока устройство не будет полностью заряжено.

Прибор полностью зарядится в течение 2–3 часов. Все индикаторы режимов будут гореть непрерывно, когда прибор полностью заряжен. Заряда аккумулятора хватает на 140 минут непрерывного использования.



Вы можете заряжать аккумулятор с любым уровнем разряженности — перед зарядкой не требуется предварительной полной разрядки аккумулятора. Во время зарядки массажер не работает.

Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от 5 до 40 °С. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °С.


Использование

1. Очистите кожу лица привычным средством для умывания. Затем просушите кожу лица полотенцем или бумажными салфетками.
2. Если вы собираетесь использовать режим «Пилинг», установите на рабочую поверхность прибора с помощью кольца-фиксатора тонкий ватный диск, пропитанный увлажняющим тономером или лосьоном. Для режима «Уход» необходимо нанести на лицо крем или сыворотку.
3. Нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» около 2 секунд. Прозвучит звуковой сигнал, массажер включится и перейдет в режим ожидания. Индикаторы режимов будут загораться по кругу.
4. Для выбора режима нажимайте на кнопку «Режим». Индикатор выбранного режима будет непрерывно гореть.
5. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», чтобы установить уровень воздействия звуковыми вибрациями. Кнопка «Вкл/Выкл» циклически изменяет уровень воздействия. Устройство имеет три уровня воздействия в каждом режиме:
 - слабое воздействие — горят индикаторы режимов «1» и «4»;
 - среднее воздействие — горят индикаторы режимов «1», «2», «4» и «5»;
 - сильное воздействие — горят все индикаторы режимов.
6. Возьмите массажер в руку так, чтобы электроды на корпусе прибора касались вашей ладони.
7. Прикоснитесь рабочей поверхностью к кожи лица, массажер начнет работать.


Примечание. Если устройство не используется, каждую минуту будет раздаваться звуковой сигнал. По истечении 8 минут массажер для лица перейдет в режим ожидания, индикаторы режимов будут загораться по кругу. Для продолжения работы необходимо выбрать режим работы с помощью кнопки «Режим». После 13 минут бездействия массажер полностью выключится.

8. Плавнo перемещайте массажер по массажным линиям:

- от подбородка к ушам;
- от уголков рта к вискам;
- от крыльев носа к внешней части бровей;
- от уголков губ к носу;
- от бровей к линии роста волос.

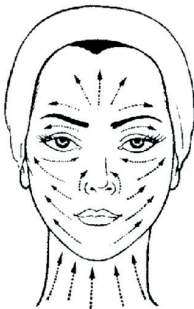

9. Для воздействия на массажные точки, показанные на рисунке, останавливайтесь на них на несколько секунд и слегка нажимайте. Не давите слишком сильно.

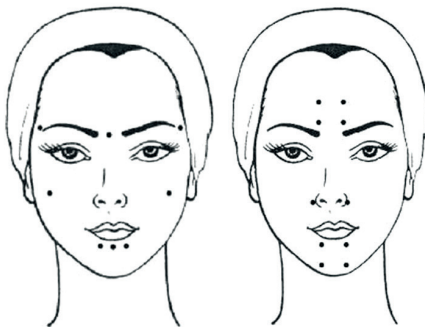



10. Чтобы отключить массажер, нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» около 2 секунд. Прозвучит звуковой сигнал, устройство выключится.
11. Очистите массажер от остатков косметических средств влажной, затем сухой мягкой тканью.

Примечание. Не используйте массажер более 8 минут за раз.

Внимание! При дискомфорте во время массажа лица прекратите процедуру и обратитесь к врачу.

Советы

Не используйте массажер в режиме «Пилинг» чаще 2–3 раз в неделю. При использовании этого режима установите тонкий ватный диск, пропитанный увлажняющим тономером или лосьоном, на рабочую поверхность прибора с помощью кольца-фиксатора.

Длительность одной процедуры не должна превышать 8 минут.

Не используйте массажер слишком часто, иначе вы можете нанести вред своей коже.

При проведении массажа двигайтесь только по массажным линиям, не растягивая кожу.

При воздействии на массажные точки не давите слишком сильно.

Для корректной работы прибора держите его так, чтобы электроды на корпусе массажера касались вашей ладони.

Вы можете установить слабый, средний или сильный уровень воздействия звуковыми вибрациями для каждого режима работы массажера. Ориентируйтесь на свои ощущения и состояние кожи.

Перед использованием убедитесь, что рабочая поверхность и корпус устройства чистые. Проздезинфицируйте рабочую поверхность прибора: ее можно протереть ватным диском, смоченным в спирте или хлоргексидине.

Обратите внимание, что **запрещается использование массажера для лица** при:

- онкологических заболеваниях кожи;
- наличии имплантированного кардиостимулятора;
- нарушениях целостности кожных покровов — ранах, ссадинах, трофических язвах, кровотечениях;
- нарушениях свертываемости крови;
- нарушениях кожной чувствительности;
- наличии имплантов, располагающихся под кожей или в мышцах (не распространяется на зубные коронки, штифты и брекеты);
- эпилепсии;

- тромбоза;
- беременности или кормлении грудью;
- наличии выраженных форм купероза (например, сетки расширенных красных сосудов на лице);
- индивидуальной непереносимости электрического тока;
- острых инфекционных заболеваниях.

При дискомфорте во время массажа лица прекратите процедуру и обратитесь к врачу.

Чистка и обслуживание

Очищайте массажер и кольцо-фиксатор после каждого использования. Протирайте корпус сухой или влажной мягкой тканью. Для чистки рабочей поверхности допускается использовать ткань или ватный диск, смоченные в мыльном растворе. Не используйте агрессивные химические средства. Не допускайте попадания жидкостей на кнопки «Вкл/Выкл» и «Режим», внутрь корпуса прибора и на разъем для подключения шнура USB Type-C.

Также рекомендуется дезинфицировать массажер перед проведением массажа. Для дезинфекции используйте ватный диск, смоченный в спирте или хлоргексидине.

Уход и хранение

Перед тем как убрать массажер на хранение, очистите его, как описано в главе «Чистка и обслуживание», и уберите в коробку или пакет для защиты от пыли. Храните массажер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Храните устройство при температуре от 5 до 40 °С. Не храните массажер под прямыми солнечными лучами или в месте с температурой выше 40 °С.

Аккумулятор массажера литий-ионный, поэтому лучше хранить его наполовину заряженным во избежание чрезмерной потери емкости. Для этого полностью разрядите аккумулятор, а затем заряжайте его примерно 1–1,5 часа. Уровень заряженности при этом будет около половины.

При длительном хранении заряжайте массажер примерно раз в 3–6 месяцев. В противном случае из-за саморазряда аккумулятора может разрядиться ниже минимально допустимого уровня.

Устранение неполадок

Устройство не включается, индикация не горит

Возможная причина	Решение
Аккумулятор разряжен	Зарядите массажер в соответствии с главой «Зарядка аккумулятора»
Аккумулятор исчерпал свой ресурс	Обратитесь в сервисный центр для замены аккумулятора

Массажер не работает, индикаторы горят по кругу

Возможная причина	Решение
Массажер находится в режиме ожидания	Нажмите на кнопку «Режим» и выберите режим работы массажера. Индикатор выбранного режима будет гореть непрерывно

Массажер не работает, индикатор режима горит

Возможная причина	Решение
Рабочая поверхность не касается кожи	Устройство начинает работу в выбранном режиме, когда электроды на корпусе устройства соприкасаются с рукой, а электрод на рабочей поверхности прибора соприкасается с кожей лица

Массажер не заряжается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Ноутбук или компьютер не включены	Для зарядки массажера от USB-порта компьютера или ноутбука их необходимо включить
Пауэрбанк разряжен или не включен	Зарядите или включите пауэрбанк
Поврежден шнур USB Type-C	Используйте другой шнур USB Type-C, рассчитанный на ток 1 А
Шнур USB Type-C неплотно вставлен в разъем на корпусе массажера или в разъем источника питания	Проверьте соединение шнура USB Type-C с разъемом на корпусе устройства или разъемом источника питания

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на info@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Питание: USB Type-C ~5 В, 1 А
2. Мощность: 3 Вт
3. Аккумулятор: Li-Ion 3,7 В, 0,8 А*ч (2,96 Вт*ч)
4. Класс защиты от поражения электрическим током: III
5. Частота ультразвуковых колебаний: 3 МГц
6. Частота вибраций: 180 Гц
7. Длина волны светодиода:
 - синий свет: 465 нм
 - красный свет: 623 нм
8. Температура нагрева: 38–42 °С
9. Время зарядки: 2–3 ч
10. Время работы от аккумулятора: около 140 мин
11. Количество режимов работы: 6
12. Длина шнура USB Type-C: 0,6 м
13. Размер устройства: 50 × 50 × 168 мм
14. Размер упаковки: 134 × 67 × 196 мм
15. Вес нетто: 0,15 кг
16. Вес брутто: 0,40 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Шэньчжэнь Кизоку Лайф Текнолэджи Ко., Лтд. 10/Ф, №71-3; 301С, №71-2, Синьтянь Кэмыюнити, Синьтянь Роуд, Фуюн Стрит, Баоань Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя массажера вследствие попадания жидкостей внутрь корпуса устройства, на разъем шнура питания или в область органов управления не является гарантийным случаем.

Повреждение корпуса устройства и рабочей поверхности вследствие чистки агрессивными моющими средствами не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте массажер только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите массажер, взявшись за шнур USB Type-C. Не тяните за шнур USB Type-C при отключении от источника питания.

6. Не используйте устройство, если шнур USB Type-C, разъем шнура USB Type-C или другие части массажера повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться массажером только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу массажера, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий массажер без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
10. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
11. Не допускайте падения массажера и не подвергайте его ударам.
12. Храните устройство в недоступных детям местах.
13. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
14. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в область разъема шнура USB Type-C и органы управления.
15. При повреждении шнура USB Type-C его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
16. При наличии хронических или острых заболеваний перед использованием прибором необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.
17. Запрещается использование массажера для лица при:
 - онкологических заболеваниях кожи;
 - наличии имплантированного кардиостимулятора;
 - нарушениях целостности кожных покровов — ранах, ссадинах, трофических язвах, кровотечениях;
 - нарушениях свертываемости крови;

- нарушениях кожной чувствительности;
- наличии имплантов, располагающихся под кожей или в мышцах (не распространяется на зубные коронки, штифты и брекетты);
- эпилепсии;
- тромбоза;
- беременности или кормлении грудью;
- наличии выраженных форм купероза (например, сетки расширенных красных сосудов на лице);
- индивидуальной непереносимости электрического тока;
- острых инфекционных заболеваниях.

IM-1



Kitfort

Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87