



print info

Print area: 350×100mm
Fold size: 70×100 mm
Paper: 128 g / uncoated paper

front cover

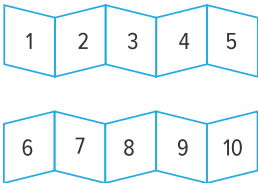

Фотоэпилятор
HE-723

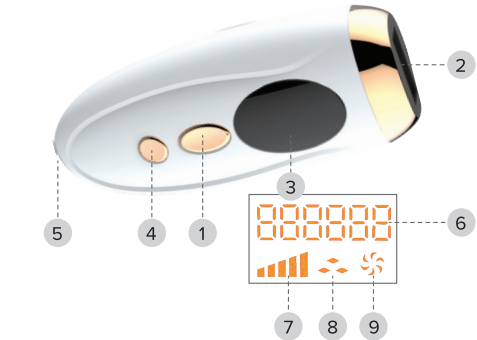

РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку изделия Hi.
Перед эксплуатацией устройства прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

Благодарим Вас за выбор продукции Hi. Перед эксплуатацией устройства прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации изделия. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

ОПИСАНИЕ

- Вспышка
- Выход светового пучка
- Дисплей
- Включение/выключение
- Разъем питания
- Количество оставшихся вспышек
- Режимы мощности
- Автоматический режим
- Значок вращения вентилятора

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Прибор предназначен для удаления волос на теле, над губами и на линии роста волос на лбу. Прибор подходит для кожи светлого, среднего и темного оттенка и волос натурального и каштанового оттенков. Обратитесь к таблице для получения конкретной информации:

Оттенок кожи	Белый	Бежевый	Светло-коричневый	Коричневый	Темно-коричневый	Черный
Цвет волос						
Белый/серый	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Рыжий	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Светлый блондин/светло-русый	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Темный блондин/русый	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Коричневый/темно-русый	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Темно-коричневый	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Черный	✓	✓	✓	✓	✗	✗

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: HE-723
ID: HI HE-723
Электропитание: DC12 В, 3 А
Мощность: 36 Вт
5 режимов
999 999 вспышек
Длина волны: 570 нм – 1100 нм
Вес: 220 г
Размер: 168 × 73 × 47 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Фотоэпилятор - 1 шт.
Блок питания – 1 шт.
Защитные очки – 1 шт.
Бритвенный станок – 1 шт.
Документация – 1 шт.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Внимательно прочтите инструкцию.
- Не используйте фотоэпилятор, если ваша кожа подвергалась естественному или искусственному загару, или обгорела на солнце.
- Не подвергайте обработанные области воздействию солнца.
- Не используйте устройство, если у вас темная кожа.
- Не используйте прибор, если ваша кожа чувствительна к солнечному свету либо вы принимаете лекарственные препараты, делающие кожу чувствительной.
- Не используйте прибор после процедуры пилинга.
- Используйте прибор строго по назначению и обрабатывайте те места, которые указаны в данном руководстве.

- Не используйте устройство, если вы перенесли рак или на вашем теле есть предраковые поражения.
- Не используйте устройство на коже с аллергическими проявлениями, экземой и другими кожными заболеваниями.
- Не используйте устройство в период беременности и кормления грудью.
- Не применяйте устройство на участках кожи с темными пятнами.
- Во время работы не смотрите прямо на источник света.
- После обработки кожа может слегка покраснеть. Это нормально.
- Не используйте абразивные средства при уходе за лампой прибора.
- Во время работы прибора запрещается наносить на кожу какие-либо косметические средства, чтобы избежать повреждения прибора.
- Для каждого участка кожи используйте рекомендованный режим.
- Увлажняйте и защищайте кожу солнцезащитными средствами с высоким SPF после использования устройства.
- Во время использования не закрывайте вентиляционное отверстие.
- Лампа фотоэпилятора может со временем потемнеть на внутренней стороне. Это является нормальным эффектом и не влияет на работоспособность устройства.
- Не беритесь за прибор мокрыми руками и не используйте прибор, если он намок.
- Не опускайте прибор в воду. Если это произошло, немедленно отключите прибор от сети.
- Не используйте прибор в ванной, в душе и других местах, где прибор может намокнуть.
- Не используйте прибор, если сетевой шнур, вилка или другие детали повреждены. Если повреждение замечено в процессе эксплуатации, то немедленно отключите прибор от сети. Для ремонта и замены обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Никогда не используйте аксессуары или детали другого производителя. Иначе гарантия станет недействительной.
- Данное устройство предназначено для использования в бытовых целях, коммерческое использование запрещено.
- Избегайте хранения в местах с сильными магнитными полями, сильной влажностью и пылью, а также в местах с высокой температурой.
- Не наносите сильных ударов по прибору и не стучите по нему.
- Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или с недостатком опыта и знаний, если только они не находятся под присмотром лица, ответственным за их безопасность.
- Следите за тем, чтобы дети не играли с устройством.

В случае возникновения неисправности необходимо немедленно отключить устройство от сети. Запрещается производить ремонт самостоятельно. Для проведения ремонтных работ необходимо обратиться в сервисный центр производителя. В противном случае гарантия на изделие прекращает свое действие. Изготовитель оставляет за собой право на изменение характеристик, не влияющих на общую функциональную принадлежность устройства без дополнительного уведомления об этих изменениях.

ТЕСТ НА КОЖНЫЕ РЕАКЦИИ

Перед первым использованием проведите тест на коже для каждого места обработки. Это необходимый шаг. Цель – проверить реакцию кожи на светочувствительность.

- Определите участок кожи, который собираетесь обработать.
- Включите прибор в сеть.
- Проложите прибор к коже и нажмите кнопку вспышки.
- После завершения подождите 24 часа, чтобы проверить реакцию кожи. Не используйте прибор, если он вызвал негативную реакцию на коже.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

- Удалите волосы с поверхности кожи, используя гель или пену для бритья. При «сухом бритье» на коже может появиться раздражение.
- Очистите кожу и убедитесь, что на коже не осталось волосков, средства для бритья и она сухая.
- Запрещается наносить какие-либо гели и кремы перед применением устройства.
- Осмотрите прибор на наличие грязи и пыли. Очистите, если необходимо.
- Вставьте блок питания в сеть и нажмите кнопку включения. При включении прибора загорится дисплей.
- Продолжайте нажимать кнопку включения для выбора режима. 1 – наименее мощный, 5 – наиболее мощный.
- После выбора режима, близко поднесите прибор местом выхода светового пучка к участку кожи, который собираетесь обрабатывать.
- Нажмите и удерживайте кнопку «Вспышка» в течение 3 секунд, чтобы войти или выйти из автоматического режима. Значок автоматического режима отобразится на дисплее при его включении.
- Нажимая кнопку «Вспышка» один раз, медленно двигаясь, обработайте участок кожи.
- После использования устройства нажмите кнопку включения/выключения, удерживая ее 3 секунды и отключите устройство от сети.
- После сеанса на лампе могут появиться небольшие темные пятна. Протрите ее салфеткой, смоченной спиртом.

- После применения кожа может быть незначительно покрасневшей, теплой или немного пощипывать. Эти реакции нормальные явления.
- Через два часа после применения устройства на кожу можно наносить крем, дезодорант и другое косметическое средство, если раздражение прошло. Если после нанесения средства, кожа покраснела или пощипывает, смойте средство теплой водой.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КУРСУ ПРИМЕНЕНИЯ

1-4 неделя	Используйте 2-3 раза в неделю	75% волос и более начнут выпадать естественным образом
5-6 неделя	Используйте 2 раза в неделю	Новые волосы выпадают и медленнее растут
7-8 неделя	Используйте 1 раз в неделю	Волосы становятся тоньше и меньше, больше не отрастают
Более 8 недель	Используйте 1-2 раза в неделю	Выборочное использование, при необходимости волосы обрабатываются повторно до тех пор, пока не прекратится рост

Рекомендуется начать с 1-2 режимов и перейти на 3-5 режимы после адаптации кожи. Интервал между процедурами зависит от скорости роста ваших волос. На разных участках тела интервал будет отличаться.

УХОД И ЧИСТКА

- Отключите устройство от сети и дайте ему остыть.
- Используйте мягкую безворсовую ткань, смоченную небольшим количеством воды для очистки фильтра и области контакта с кожей.

УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Описание проблемы	Причина	Решение
Устройство/блок питания нагревается во время работы	Это нормальное явление	–
При контакте с кожей индикатор не включается, но охлаждение работает	Перегрев	При срабатывании защиты от перегрева, вентилятор продолжает работу; не выключайте прибор, дайте ему остыть 15 минут и продолжите использование
Запах во время использования	Фильтр загрязнен	Тщательно очистите фильтр
	Волосы не были полностью удалены с кожи	Удалите волосы

При использовании кожа становится чувствительнее обычного и появляется сильная боль	Используемый режим слишком высокий	Понижьте режим
	Ультрафиолетовый фильтр при выходе поврежден	Устройство использовать нельзя
Результаты курса неудовлетворительные	Устройство используется в неподходящих местах или цвет кожи не подходит для использования прибора	Не используйте прибор на следующих частях тела: соски, ареолы, малые половые губы, влагалище, анус, ноздри, внутри уха; мужчины не должны использовать прибор на лице или мошонке
	Использование слишком низкого режима	Увеличьте режим
	Большое расстояние между обрабатываемыми участками кожи	Обрабатывайте участки кожи максимально близко друг к другу
	Устройство не подходит к вашему цвету волос	Устройство может быть не эффективным для слишком светлых, золотистых или рыжих оттенков волос; можно сократить интервал между процедурами, но не чаще, чем один раз в день
	Редкая частота использования прибора	Продолжайте использовать устройство как минимум 6 месяцев; в данный период рост волос уменьшится

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

Перед длительным хранением убедитесь, что прибор чистый и сухой. Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.п. Храните устройство в недоступном для детей месте. Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ. По окончании срока службы изделия, не выбрасывайте его вместе с остальными бытовыми отходами. Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов.

Утилизация изделий позволяет предотвратить нанесение окружающей среде и здоровью человека потенциального вреда в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. За более подробной информацией по сбору и утилизации отслужившего электрического и электронного оборудования, осуществляемым бесплатно и по вашему месту жительства, обратитесь в соответствующее управление вашего муниципального органа власти.



Не утилизируйте электрические устройства в неосортированные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные устройства выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанося вред здоровью и благополучию.

HI HE-723. Назначение товара: фотоэпилятор. Товарный знак / торговая марка: HI. Адрес пр-ва: «ДЭМ Электроникс Ко., Лимитед», Нью Сити Центр, 2 Лэй Ю Мун Роуд, Квин, 517, Квин Тонг, Коулун, Гонконг. Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Ромбика». Адрес: Россия, 115054, г. Москва, Пятницкая ул., д. 71/5, строение 2, этаж 5 оф. 500. Импортёр: ООО «Энко Рус», адрес: 143441, Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, улица 69 км МКАД, стр. 7, офис 506. Претензии от покупателей принимает ИМПОРТЕР. Произведено: Китай. Дата производства: см. на устройстве. Соответствует требованиям: ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016. Правообладателем ТЗ HI является ПАО «М.видео». Товар произведен по заказу ООО «МВМ». Руководство пользователя и инструкцию по технике безопасности см. внутри коробки. Срок гарантии: 12 месяцев. Срок службы: 24 месяца.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

- Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ.
- Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия: элементы питания, кабели, переходники, адаптеры, чехлы, ремни, документация.
- Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушения условий эксплуатации, установок изделия, изложенных в Руководстве Пользователя и другой документации; если изделие имеет след попыток неквалифицированного ремонта; если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем; если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозий, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.
- Производитель не несет ответственность за возможный вред изделия, прямо или косвенно нанесенный людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) и/или третьих лиц. Также, не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ – РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ.
СРОК ГАРАНТИИ – 12 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ.
СРОК СЛУЖБЫ – 24 МЕСЯЦА.

При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара, четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц производства, шестая и седьмая цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку и устройство. Информацию о работе технической службы по гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: support@rombica.ru Полный список адресов технических центров производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombica.ru

.....
Изделие
.....
Модель
.....
Дата продажи
.....
Серийный номер

Печать продавца

Настоящим подтверждаю проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а). С нижеложенными условиями гарантии согласен(а).

ФИО Покупателя, подпись

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

№	дата	код ремонта	сервис	мастер	клиент