

RENPHO

УМНЫЕ ВЕСЫ
С ФУНКЦИЕЙ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
СОСТАВА ТЕЛА



renpholife.ru

CS20, CS20M, 32MD, 26M


Внимание!

При использовании цифровых весов необходимо соблюдать определенные меры предосторожности:

1. Весы не следует использовать для диагностики или лечения каких-либо заболеваний. Прежде чем приступить к какой-либо диете или программе упражнений, вам необходимо проконсультироваться с врачом.
2. Не рекомендуется использовать весы во время беременности, а также лицам, страдающим остеопорозом, имеющим кардиостимулятор, искусственные суставы, портативную систему ЭКГ или другие имплантированные металлические устройства. В этих случаях используйте весы исключительно для измерения веса, а также надевайте обувь, чтобы избежать электромагнитного воздействия во время измерения.
3. Все данные о составе тела имеют справочный характер и не должны использоваться вместо консультации врача.
4. Если весы неисправны, сначала проверьте заряд батареи. При необходимости замените батарейки.
5. Проверяйте устройство перед каждым использованием. Не используйте весы, если они повреждены. Продолжительное использование поврежденного устройства может привести к травмам или неверным результатам.
6. Держите весы сухими. Будьте осторожны при использовании весов на мокрой и скользкой поверхности.
7. Весы хрупкие. Пожалуйста, обращайтесь с ним осторожно.
8. Эти весы являются высокоточным измерительным прибором. Никогда не прыгайте на них и не разбирайте.
9. Весы не являются водонепроницаемыми, поэтому никогда не погружайте их в воду. Для очистки поверхности используйте влажную ткань или стеклоочиститель. Не используйте мыло или другие химические чистящие средства.
10. Всегда используйте весы на твердой плоской поверхности и следите за тем, чтобы весы оставались полностью неподвижными во время взвешивания.
11. Не кладите тяжелые предметы на весы, когда они не используются.
12. Эти весы предназначены только для бытового использования и не предназначены для медицинского или коммерческого использования.
13. Во избежание создания помех не используйте устройство рядом с оборудованием с сильными электромагнитными полями.
14. Ни в коем случае не пытайтесь разобрать весы.

ШАГ 1



Перед первым использованием установите, соблюдая полярность, три батарейки типа ААА. Один комплект входит в состав упаковки.

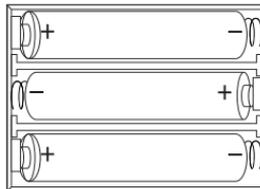

Примечание:

1. Не смешивайте старые и новые батарейки или батарейки разных производителей/типов, чтобы избежать возможные утечки электролита.
2. Батарейки, входящие в комплект весов, НЕ являются аккумуляторами. НЕ пытайтесь их заряжать.
3. При появлении сигнала «LO» на дисплее замените батарейки.

ШАГ 2

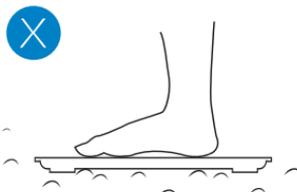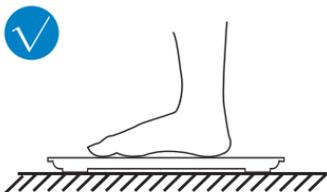

Используйте весы на плоской и устойчивой поверхности.
Избегайте любых ковровых покрытий.

ШАГ 3

Загрузите и установите бесплатное приложение Renpho Health на Ваше мобильное устройство.



Renpho Health

Renpho Health



Примечание: так как наше приложение постоянно обновляется и улучшается, его интерфейс может несколько отличаться от представленного.

ШАГ 4

Откройте приложение и следуйте инструкциям по установке и соединению:

1. Зарегистрируйте свою учетную запись в приложении Renpho Health, используя электронную почту. Вы также можете войти как «Гость», если не желаете регистрироваться.
2. Включите Bluetooth на Вашем устройстве и разрешите приложению его использовать:
 - 2.1. войдите в настройки;
 - 2.2. найдите в меню приложение Renpho Health;
 - 2.3. разрешите доступ к Bluetooth.

Примечание: подключить весы к телефону можно только через приложение Renpho Health.

ШАГ 5

Установка соединения весов RENPHO с приложением.

Способ 1



1. Встаньте на весы голыми и сухими ступнями. Подождите, пока не загорится дисплей.



2. Нажмите «Подключиться», чтобы соединить весы с приложением.

Способ 2




1. Нажмите «+» в верхнем правом углу домашней страницы.




2. Нажмите «Жир в теле».



3. Встаньте на электроды весов голыми и сухими ступнями.

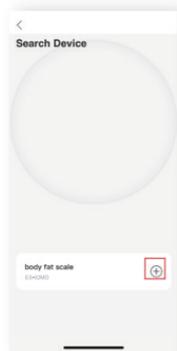

4. Когда на экране появится название прибора, нажмите «+», чтобы добавить устройство.

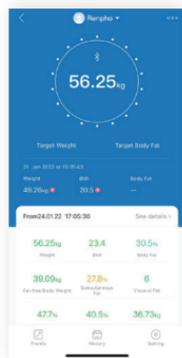

5. Продолжайте стоять на весах в течение 5–10 секунд. Сопряжение устройств выполнено, когда показания Вашего веса появятся на экране приложения Renpho Health.

Важно

Повторная калибровка

Если весы перемещались или переворачивались, их необходимо повторно откалибровать для того, чтобы обеспечить точные результаты:

1. Установите весы на твердую, ровную и устойчивую поверхность. Избегайте любых ковровых покрытий.
2. Наступите на поверхность весов одной ногой, чтобы включить их.
3. Уберите ногу, когда на дисплее появятся цифры.
4. На дисплее появится индикация «CAL», а затем «0.0» или «0.00». Калибровка завершена.



CAL → 0.00 kg

ИЛИ

CAL → 0.00 kg

Часто задаваемые вопросы

1. Почему весы не определяют содержание жира и/или другие данные?

- убедитесь, что ваши ступни сухие;
- встаньте на весы, расставив ноги, лицом к цифровому дисплею; подождите около 15 секунд, пока завершится процесс взвешивания;
- если не помогло, попробуйте нанести увлажняющий крем на ноги и снова измерьте;
- попросите кого-нибудь еще попробовать выполнить измерения на себе.

2. Я зарегистрировал учетную запись на сайте RENPHO. Почему я не могу в нее войти через приложение Renpho Health?

Поскольку веб-сайт RENPHO и приложение Renpho Health – это две разные системы, вы должны создать учетную запись именно для приложения.

Если обычное подключение к Bluetooth не удалось, попробуйте выполнить следующие шаги, чтобы установить его:

1. Убедитесь, что Bluetooth и GPS (только для Android) включены на вашем телефоне.
2. Откройте приложение Renpho Health.
3. Наступите одной ногой на поверхность весов, чтобы включить их.
4. Через несколько секунд загрузки на экране мобильного устройства появится номер модели весов. Нажмите на него.
5. Снова встаньте на весы, чтобы завершить подключение.

Гарантийные условия

Гарантия на Ваше устройство RENPHO составляет один год с момента покупки. С подробными условиями Вы можете ознакомиться на нашем сайте: <https://renpholife.ru>

Примечание: для выполнения нами гарантийных условий Вам не требуется регистрировать продукт.

Дата изготовления продукта указана на упаковке. Срок службы прибора – 2 года. Товар поставляется в собранном виде, специальных требований к перевозке и хранению не установлено. Утилизировать в соответствии с законодательством места реализации. Товар сертифицирован.

RENPHO

Импортер/Служба потребителей: ООО «Сидгроус»,
195279, Россия, город Санкт-Петербург, муниципаль-
ный округ Пороховые внутригородская территория,
Индустриальный проспект, дом 44, корпус 2,
литера А, помещение 507, рабочее место 4.
Тел. 8 (800) 300 0663.

Произведено в Китае. Производитель: «Shenzhen
Ruiyi Business Technology Co., Ltd.» / «Шэньчжэнь
Руйи Бизнес Технолоджи Ко. ЛТД», Qianhai Complex
A201, Qianwan Road 1, Qianhai Shenzhen-Hong Kong
Cooperation Zone, Shenzhen, 518000, Китай.