

RENPHO

ПЕРКУССИОННЫЙ МАССАЖЕР



renpholife.ru

RP-GM171

Благодарим вас за покупку массажного пистолета RENPHO. Массажер предлагает мощный перкуSSIONный массаж. Наслаждаясь расслаблением мышц и тела, используйте массажер с осторожностью. Чтобы обеспечить безопасность и избежать повреждения имущества, пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство и следуйте инструкциям в использовании.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ

При использовании электронных приборов всегда следует соблюдать основные меры предосторожности, в том числе следующие:

1. Этот прибор может использоваться детьми старше 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, если они используют прибор под присмотром или получили инструктаж по безопасному использованию массажера и понимают связанные с этим опасности.
2. Дети не должны играть с прибором.
3. Чистка и использование прибора не должны осуществляться детьми без присмотра.
4. Только для домашнего использования, не для медицинских или других коммерческих целей.

ОПАСНОСТЬ

Для снижения риска поражения электрическим током:

1. Всегда отключайте этот массажер из электрической розетки сразу после использования и перед чисткой.
2. **НЕ** используйте во время купания или под душем.
3. **НЕ** доставайте массажер, упавший в воду.
4. **НЕ** ставьте и не храните прибор в местах, где он может упасть или быть затянутым в ванну или раковину.
5. **НЕ** ставьте и не роняйте в воду или любую другую жидкость.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для уменьшения риска возникновения пожара, поражения электрическим током или травмирования людей следуйте инструкциям ниже:

1. Никогда **НЕ** оставляйте массажер без присмотра, если он подключен к розетке. Вынимайте вилку из розетки, когда он не используется, а также перед тем, как надеть или снять деталь.
2. **НЕ** используйте под одеялом или подушкой. Чрезмерный нагрев может привести к пожару, удару электрическим током или травме.
3. При использовании массажера детьми, на детях или рядом с ними, лицами с ограниченными возможностями необходим строгий контроль.
4. Используйте этот массажер только по назначению, как описано в данном руководстве. **НЕ** используйте насадки, не рекомендованные производителем.
5. Никогда **НЕ** используйте этот массажер, если он работает неправильно, упал, повредился или попал в воду. Верните массажер в сервисный центр для осмотра и ремонта.
6. Никогда **НЕ** используйте массажер с заблокированными воздушными отверстиями. Держите воздушные отверстия чистыми от шерсти, волос и т. п.
7. Никогда **НЕ** роняйте и не блокируйте воздушные отверстия.
8. **НЕ** используйте массажер в местах с повышенным содержанием в воздухе спреев (аэрозольных продуктов) или местах с повышенным содержанием кислорода.
9. **НЕ** используйте массажер в местах с повышенным магнитным полем – это может стать причиной разряда батареи.
10. **НЕ** используйте массажер перед сном: массаж может оказывать стимулирующее воздействие и вызвать бессонницу.
11. Избегайте попадания пальцев или волос в пространство между насадкой и основанием массажера. Остерегайтесь защемления.
12. Рекомендуется начинать массаж с низкого уровня интенсивности. **НЕ** используйте прибор дольше 30 минут одновременно. Чрезмерное использование может привести к небольшим синякам и перегреву устройства, что в свою очередь может привести к сокращению его срока службы.

13. Держите прибор вдали от высоких температур и избегайте использования в местах с высокой температурой.

14. **НЕ** используйте прибор мокрыми руками.

15. Используйте только оригинальные массажные насадки, представленные в упаковке. Использование неоригинальных насадок может привести к поломке прибора и аннулированию гарантии.

16. **НЕ** роняйте массажер, не применяйте силу при использовании во избежание неполадок и/или повреждений.

17. Если во время использования прибор сильно нагрелся или появился неприятный запах, немедленно прекратите использование и отключите от источника питания.

18. **НЕ** ремонтируйте прибор самостоятельно и не заменяйте его части.

19. Используйте только те массажные насадки, которые дают наилучший результат.

20. **НЕ** нажимайте сильно на массажную насадку и не накрывайте прибор во время использования.

21. **НЕ** используйте прибор вблизи длинных волос, свободной одежды или украшений.

22. **НЕ** делайте массаж на одной части тела в течение длительного времени.

Не используйте массажный пистолет на:

1. Чувствительной коже, опухших, воспаленных участках, в области с плохим кровообращением, в местах высыпаний на коже или области необъяснимой боли в животе;

2. Варикозных вен;

3. Голове, лицу, шейных позвонках, позвоночнике;

4. Месте опухоли;

5. Области горла;

6. Твердых частях тела, таких как голова, кости;

7. Половых органах (не используйте в сексуальных целях). Это мощный массажный прибор, который может нанести серьезные телесные повреждения;

8. спящем или находящемся без сознания человеке;
9. любых возможных местах перелома;
10. вблизи костных областей: плечевая кость, тыльная сторона стопы, тыльная сторона кисти и т. д.

Если вы попадаете в одну из следующих групп, пожалуйста, проконсультируйтесь с медицинским специалистом перед использованием:

1. Люди с застоем крови.
2. Люди с переломами.
3. Люди с заболеваниями сердца, с кардиостимулятором, дефибриллятором, с металлическими частями в теле.
4. Новорожденные, несовершеннолетние, беременные.
5. Если у вас была операция на суставах в период последних 90 дней, не используйте прибор на теле в пределах 3 дюймов от места, на котором была проведена операция. Если вы почувствовали себя плохо или необычный дискомфорт, то немедленно прекратите использование прибора.

ОБ АККУМУЛЯТОРЕ

1. Предупреждение воздействия химических веществ. Если аккумуляторный блок протекает, НЕ используйте жидкость при контакте с кожей или глазами. Если произошел контакт, промойте область большим количеством воды и обратитесь для медицинской консультации.
2. НЕ выкидывайте батарею в огонь. Использованную батарею следует запечатать в пластиковый пакет и безопасно утилизировать в соответствии с местными требованиями.
3. Срок службы аккумулятора может варьироваться в зависимости от применения и условий использования. Если прибор не используется в течение длительного периода, пожалуйста, держите его выключенным и заряжайте раз в месяц, чтобы продлить его срок службы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

ЧТО ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ

RENPHO массажный пистолет x 1
 Массажная насадка x 5
 Type-C кабель x 1
 Резиновая втулка x 2
 Руководство пользователя x 1

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА



Совет: не используйте массажные насадки на голове.
 НЕ используйте на своей голове.

	Шаровая насадка Большие группы мышц, такие как квадрицепсы, ягодицы, экстремальные мышцы и боли в суставах		У-образная насадка Для позвоночника, шеи и плеч, для чувствительных мышц и мягких тканей
	Воздушная насадка Для чувствительного тела, расслабления тела		Плоская насадка Для всех частей тела
	Пулевидная насадка Для суставов, глубоких тканей, зоны маленьких мышц, т аких как стопы, запястья		Резиновая втулка В каждую массажную насадку установлена резиновая втулка. Если она повреждена, замените ее на запасную

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАССАЖЕРА

1. Важные советы перед использованием

1.1. Зарядка

- Пожалуйста, зарядите массажер перед использованием.
- Для зарядки подключите кабель Type-C к адаптеру и в разъем устройства.
- Индикатор на массажере будет **МИГАТЬ СИНИМ ЦВЕТОМ** во время зарядки. Индикатор **ПЕРЕСТАНЕТ МИГАТЬ**, когда полностью зарядится.
- В целях безопасности массажер НЕ будет работать во время зарядки. Кроме того, массажер автоматически отключится после 10 минут непрерывного использования. Если вы хотите более длительный массаж, то включите его снова.



НЕ используйте массажер,
пока он заряжается

Компьютер

Адаптер



Renpho
массажер

1.2 Срок службы батареи



- В этом массажере есть встроенный перезаряжаемый аккумулятор. Полная зарядка занимает около 3 часов. Общее время автономной работы составляет до 150 минут после полной зарядки. Пожалуйста, зарядите массажер полностью перед использованием.
- Срок службы аккумулятора может варьироваться в зависимости от применения и условий использования. Если устройство не используется длительное время, пожалуйста, держите его выключенным и заряжайте раз в месяц, чтобы продлить срок службы батареи.
- Держите массажер вдали от высоких температур.

2. Подготовка

- Пожалуйста, полностью зарядите массажер в течение 3 часов перед использованием.
- Выберите подходящую массажную насадку для соединения с основанием массажера.

3. Инструкции по эксплуатации


1. Подключите устройство к массажной насадке. Полностью вставьте насадку в основание массажера, когда используете, и вытащите, когда перестанете использовать. Примечание: У-образную насадку следует направлять при установке. Когда замок вставлен в разъем, это означает, что установка выполнена. Если массажная насадка вставлена неправильно, есть риск ее выпадения во время использования.

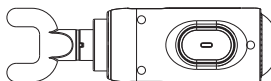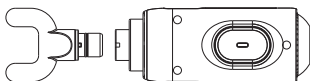


2. Нажатие кнопки  в течение 2 секунд включит массажер и начнет первую скорость. Короткое нажатие  будет переключать скорость между 1–5 уровнями. Нажатие кнопки  в течение 2 секунд  выключит устройство.

*Спустя 10 минут после начала массажа устройство автоматически выключится.


3. Используйте массажный пистолет на любом участке тела, представленном ниже, чтобы снять скованность и болезненность.

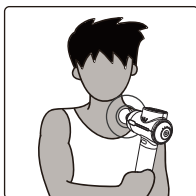

Массаж плеч

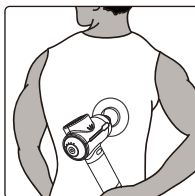


Массаж спины

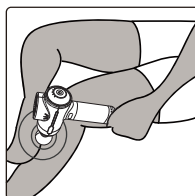


Массаж ступней



Массаж рук

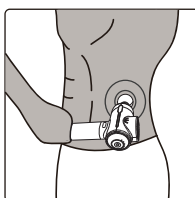

Массаж талии

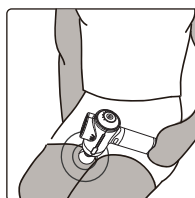

Массаж ног

УХОД ЗА МАССАЖЕРОМ

Храните массажер в прохладном сухом месте, когда он не используется.

Всегда отключайте прибор от розетки перед чисткой.

После использования протрите массажер мягкой влажной тканью, используя неабразивные чистящие средства. При необходимости используйте стерилизатор.

НЕ погружайте массажер в воду или любую другую жидкость.

Держите подальше от растворителей и агрессивных моющих средств.

НЕ принимайте попыток отремонтировать массажный пистолет. В комплекте нет запасных частей.

НЕ утилизируйте массажер в мусорку. Он содержит литий-ионную батарею и другие электрические компоненты, которые считаются опасными отходами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование: массажный пистолет

Модель: RP-GM171

Входное напряжение: 5 В/2 А

Напряжение: 7,4 В

Мощность: 25 Вт

Емкость батареи: 2500 мА

Амплитуда: 10 мм

Оборотов в минуту: макс. 3200 об/мин

Автоотключение: 10 минут

Размеры: 186*147*60 мм

Вес: 680 г

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Массажер не включается	Отключено питание	Длительное нажатие кнопки питания, чтобы включить массажер
	Низкий заряд батареи Массажер отключается после 10 минут массажа	Зарядите массажер Длительное нажатие кнопки питания, чтобы включить массажер для следующих 10 минут массажа
Массажер автоматически отключается	Защита от перегрева автоматически выключает массажер, когда он перегревается	Дождитесь, когда массажер остынет перед тем, как включить его снова
	Массажер отключается после 10 минут массажа	Длительное нажатие кнопки питания, чтобы включить массажер для следующих 10 минут массажа
Массажер не работает	Массажная насадка вставлена слишком плотно	Немного вытащите насадку и затем включите массажер

Если возникли другие проблемы, выключите устройство и свяжитесь с нами по телефону 8 (800) 300 663. Компания RENPHO не несет ответственность за любые повреждения или травмы, возникшие при попытке самостоятельной разборки или ремонта изделия.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Гарантия на Ваше устройство RENPHO составляет один год с момента покупки. С подробными условиями Вы можете ознакомиться на нашем сайте: <https://renpholife.ru>

Примечание: для выполнения нами гарантийных условий Вам не требуется регистрировать продукт.

Дата изготовления продукта указана на упаковке.

Срок службы прибора – 2 года. Товар поставляется в собранном виде, специальных требований к перевозке и хранению не установлено. Утилизировать в соответствии с законодательством места реализации. Товар сертифицирован.

RENPHO

Импортер/Служба потребителей: ООО «Сидгроус», 195279, Россия, город Санкт-Петербург, муниципальный округ Пороховые внутригородская территория, Индустриальный проспект, дом 44, корпус 2, литера А, помещение 507, рабочее место 4. Тел. 8 (800) 300 0663.

Произведено в Китае. Производитель: «Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd.» / «Шэньчжэнь Руийи Бизнес Технолоджи Ко. ЛТД», Qianhai Complex A201, Qianwan Road 1, Qianhai Shenzhen-Hong Kong Cooperation Zone, Shenzhen, 518000, Китай.