

МАССАЖЕР ДЛЯ ТЕЛА  
CS Medica VibraPulsar  
CS-r10 Mini

SHAPE × BOOST



*Выбираем  
здоровье*

№	Содержание
1	ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
2	НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП РАБОТЫ
3	ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
4	ОСОБЕННОСТИ
5	ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ
6	ВНЕШНИЙ ВИД ПРОДУКТА
7	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
8	ШИЛЬДИК
9	ДОП. ПРИОБРЕТАЕМЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
10	РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
11	ДИЗАЙН ТОВАРНОЙ УПАКОВКИ
12	УХОД И ХРАНЕНИЕ
13	УТИЛИЗАЦИЯ
14	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
15	УСТРАНЕНИЕ ОШИБОК И НЕИСПРАВНОСТЕЙ
16	РЕМОНТ
17	УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
18	ДАТА ПРОИЗВОДСТВА ПРИБОРА, СРОК ГАРАНТИИ И СРОК СЛУЖБЫ
19	СЕРТИФИКАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

## 1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

<b>Продукт</b>	Товарная категория	Массажеры для тела
	Наименование	Массажер для тела CS Medica VibraPulsar
	Модель	CS-r10 Mini SHAPE x BOOST
<b>Производитель</b>	Наименование	ZHEJIANG EKANG INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD (ЧЖЭЦЗЯН ИКАНГ ИНТЕЛИДЖЕНТ ТЕКНОЛОДЖИ КО., ЛТД)
	Адрес	No.7, Chuangye Road, Wanquan Town, Pingyang, Zhejiang, China (№7, Чуане Род, Ваньцюань Таун, Пиньян, Чжэцзян, Китай)


### Массажер для тела CS Medica VibraPulsar CS-r10 **SHAPE**x**BOOST**

выпускается производителем в следующей комплектации:

*Массажер для тела, 7 массажных скульпт-насадок (гладкая, «волна», шариковая, пальчиковая, кольцевая, лепестковая, акупунктурная), защитная насадка-сетка, чехол для хранения и переноски, руководство по эксплуатации с гарантийным талоном*

Комплектация изделия указана в руководстве по эксплуатации и на товарной упаковке продукта.

## 2. НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП РАБОТЫ

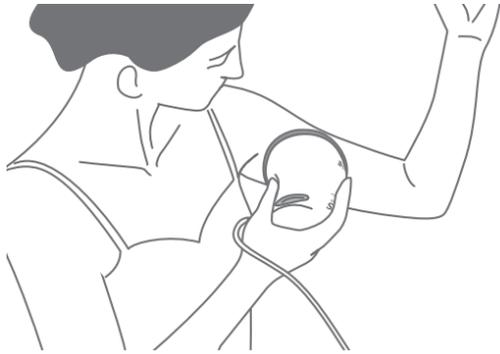

### **МАССАЖЕР ДЛЯ ТЕЛА CS-r10 Mini SHAPExBOOST –**

предназначен для проведения интенсивного ротационного массажа разных частей тела человека, помогает преодолеть усталость, напряжение, стресс, способен усилить кровообращение в отдельных зонах, оказывая воздействие на проблемные участки кожи и мышц, смоделировать контуры тела и сделать кожу более упругой и подтянутой.

Путем передачи вращательных и колебательных движений различной частоты от массажной головки к массируемому участку тела оказывается воздействие, сравнимое с техникой ручного массажа, при котором выполняются приемы пощипывания, поглаживания, похлопывания или захватывания, благодаря чему достигается положительный эффект.

При использовании прибора могут применяться массажные масла, кремы и другая антицеллюлитная косметика, а расширенный комплект насадок усилит их действие.

Используя **массажер для тела CS Medica VibraPulsar CS-r10 Mini SHAPExBOOST**, вы сможете самостоятельно проводить массажные процедуры в домашних условиях.

## 3. ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

### **Предупреждение:**

***Указывает на потенциально опасную ситуацию, развитие которой может привести к серьезным травмам или ожогам.***

- Используйте прибор только по прямому назначению, указанному в данном руководстве.
- Данный прибор не предназначен для самостоятельного использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими или умственными способностями, или с недостаточным опытом и знаниями, если они не будут обучены и проинструктированы по вопросам использования прибора лицами, ответственными за их безопасность.
- Не оставляйте прибор без присмотра, особенно, если рядом находятся дети.
- Перед каждым использованием необходимо убедиться, что прибор и его компоненты не повреждены. В случае обнаружения неисправностей или повреждений не пользуйтесь прибором и обратитесь в ближайший к Вам центр технического обслуживания продукции CS Medica, адреса которых указаны в настоящем руководстве.
- Прежде чем подключить прибор к электросети, убедитесь в том, что напряжение в сети соответствует значениям, указанным на приборе.

- Во избежание поражения электрическим током, никогда не погружайте прибор, а также сетевой шнур или штекер питания в воду или иную жидкость. В случае, если прибор оказался в воде, сразу же отсоедините его от электропитания.
- Всегда выключайте прибор и отключайте его от электрической сети сразу после каждого использования, а также при замене насадок (производите описанные действия только сухими руками).

### **Внимание:**

***Указывает на потенциально опасную ситуацию, развитие которой может привести к незначительной травме, травме средней тяжести или порче имущества.***

- Прибор предназначен только для использования в помещении.
- Ни в коем случае нельзя пользоваться прибором в ванной, под душем, а также в помещениях с повышенной влажностью.
- Перед началом эксплуатации прибора обязательно проконсультируйтесь с врачом.
- Не используйте прибор для прямого массажа головы, костей и суставов, по позвоночнику, передней части шеи, в области половых органов или почек, в области проекции щитовидной железы и крупных лимфатических узлов.
- Лица с кардиостимуляторами, искусственными суставами или электронными имплантатами должны перед использованием прибора проконсультироваться с врачом.
- Запрещается пользоваться массажером для тела в следующих случаях:
  - при острых лихорадочных состояниях;
  - при острых воспалительных процессах;
  - при нарушении кровообращения, расширении вен, тромбозе, флебите, при отечности;
  - при наличии тяжелых заболеваний сердечно-сосудистой системы;
  - при наличии диабета или онкологических заболеваний;
  - при беременности;
  - при наличии нарушений целостности кожного покрова (царапины, ссадины, открытые раны и т.д.), кожных заболеваниях (дерматозы, экземы), травмированных участков на теле (ушибы);
  - а также при гиперчувствительности кожи.
- Для лиц, страдающих заболеваниями позвоночника и/или перенёсших операцию, использование массажера противопоказано.
- Если вы чувствуете боль или получаете неприятные ощущения во время массажа, прервите использование и обратитесь к врачу.

## 4. ОСОБЕННОСТИ

### КРАСИВЫЕ ФОРМЫ ТЕЛА - ЛЕГКО!

Современная ротационная технология массажного воздействия с высокой скоростью вращения массажных скульпт-насадок (от 1900 об/мин до 3000 об/мин) для проведение интенсивного массажа с усиленным воздействием на каждый проблемный участок тела.



### УЛЬТРАКОМПАКТНЫЙ И ЛЕГКИЙ

Небольшой размер массажера, сравнимый с размером мобильного телефона, а также небольшой вес (всего 670г) позволяют максимально комфортно проводить массажные и уходовые процедуры в домашних условиях

### ШИРОКИЙ ВЫБОР ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАСАДОК

В комплект включены 7 видов скульпт-насадок различной формы и назначения, которые способны оказывать положительное воздействие на проблемные зоны тела: ягодицы, бедра, руки, икроножные мышцы, живот и др.



ГЛАДКАЯ



ВОЛНА



ШАРИКОВАЯ



ПАЛЬЧИКОВАЯ



КОЛЬЦЕВАЯ



ЛЕПЕСТКОВАЯ



АКУПУНКТУРНАЯ

## УСИЛЕНИЕ ЭФФЕКТА УХОДОВОЙ КОСМЕТИКИ

Расширенный набор скульпт-насадок позволяет увеличить функциональные возможности массажера для проведения различных видов тонизирующего и расслабляющего массажа, а также уходовых процедур за телом с применением кремов и масел.




## ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО УРОВНЯ ИНТЕНСИВНОСТИ

Плавная регулировка уровня интенсивности позволяет установить наиболее комфортный уровень вибрации для достижения наилучшего результата

## УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

Увеличенная длина шнура 2м  
Чехол для компактного хранения \  
переноски прибора и аксессуаров в комплекте

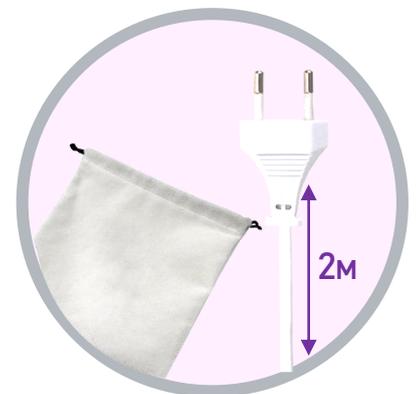

## БЕЗОПАСНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Прибор соответствует требованиям стандартов по электромагнитной совместимости и электробезопасности. Корпус прибора выполнен из качественного безопасного пластика

## ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



**Моделирование стройных  
контуров с применением  
антицеллюлитных  
масел и кремов**



**Снятие напряжения  
и усталости в мышцах**




**Придание упругости  
и эластичности кожи**



**Хорошее настроение  
и общее самочувствие**

## 5. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ

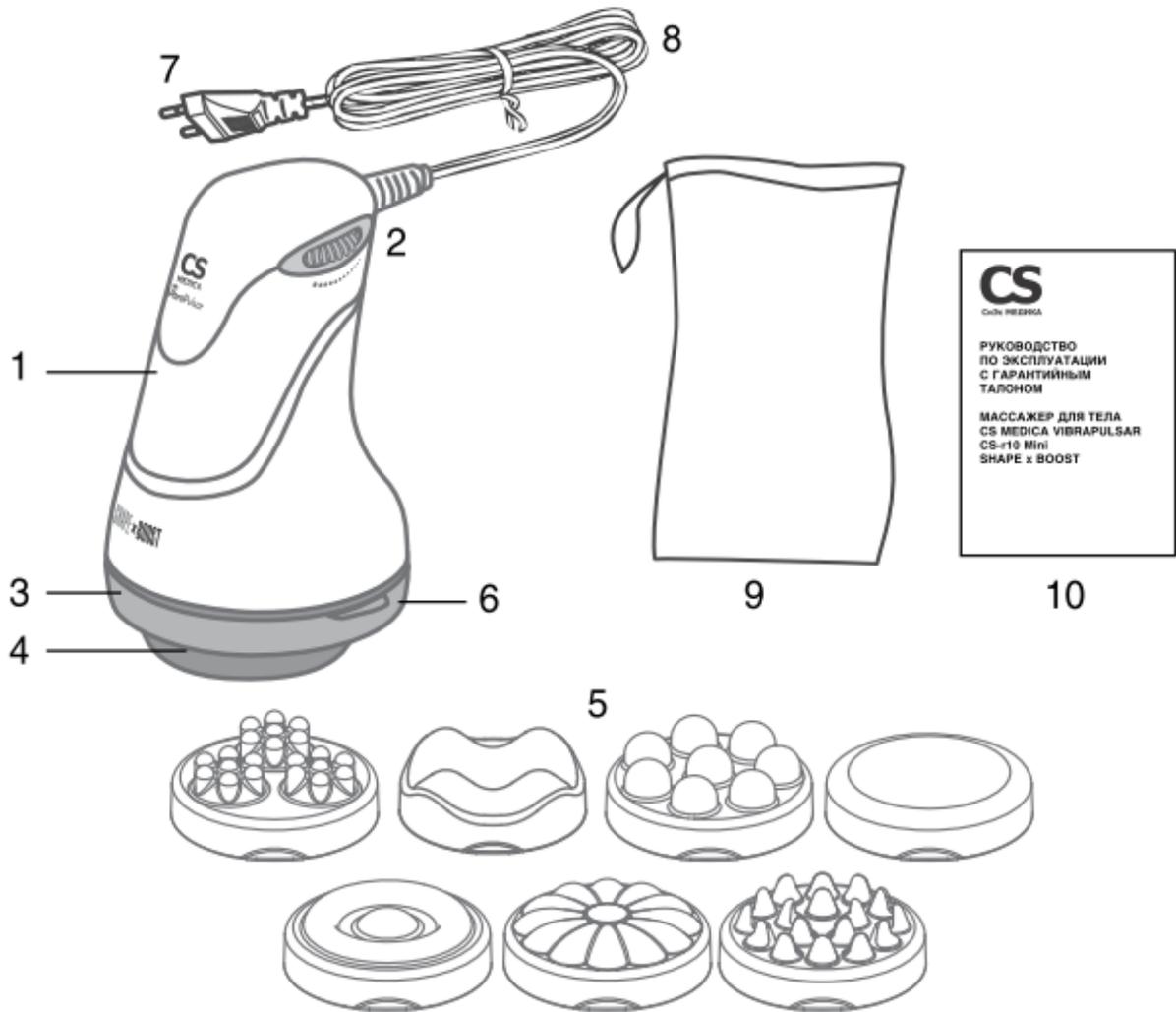

- |   |   |
|---|---|
| <p>1 – Основной прибор (электронный блок)</p> <p>2 – Поворотный регулятор вкл./выкл. прибора, плавной регулировки интенсивности массажа</p> <p>3 – Защитная насадка-сетка</p> <p>4 – Вращающийся диск для установки сменных скульпт-насадок</p> | <p>5 – Сменные массажные скульпт-насадки</p> <p>6 – Световой индикатор работы прибора</p> <p>7 – Штекер питания</p> <p>8 – Сетевой шнур</p> <p>9 – Чехол для хранения и переноски</p> <p>10 – Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном</p> |
|---|---|

## 6. ВНЕШНИЙ ВИД ПРОДУКТА



## 7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Массажер для тела CS Medica VibraPulsar
Модель	CS-r10 Mini SHAPE x BOOST
Электрические параметры	AC 220 В, ~ 50 Гц
Потребляемая мощность	28 Вт
Интенсивность	от 1900 об/мин до 3000 об/мин
Регулировка интенсивности	Плавная, поворотный регулятор
Количество массажных скульпт-насадок	7
Защита от поражения электрическим током	Класс II
Степень защиты от поражения электрическим током (токи утечки)	Тип В
Условия эксплуатации:	
температура окружающего воздуха	от +10 до +40 °С
относительная влажность	от 10 до 70 %
Условия хранения / транспортирования:	
температура окружающего воздуха	от -20 до +50 °С
относительная влажность	от 10 до 70 %
атмосферное давление	от 60 до 110 кПа
Габаритные размеры	Не более 95 x 165 x 95 мм (Ш x В x Г)
Масса	Не более 670 г
Комплектация	Массажер для тела, 7 массажных скульпт-насадок (гладкая, «волна», шариковая, пальчиковая, кольцевая, лепестковая, акупунктурная), защитная насадка-сетка, чехол для хранения и переноски, руководство по эксплуатации с гарантийным талоном

## 8. ШИЛЬДИК



**Серийный номер указывается на боковой стороне в месте фиксации насадки-сетки**

## 9. ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРИОБРЕТАЕМЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Отсутствуют

## 10. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
С ГАРАНТИЙНЫМ ТАЛОНОМ



**МАССАЖЕР ДЛЯ ТЕЛА**  
**CS Medica VibraPulsar**  
**CS-r10 Mini SHAPE x BOOST**



Благодарим Вас за приобретение массажера для тела CS Medica VibraPulsar CS-r10 Mini SHAPE x BOOST.



Внимательно ознакомьтесь с инструкцией до начала эксплуатации данного устройства. Сохраните это руководство для получения необходимых сведений в будущем.

Гарантийный талон находится в середине настоящего руководства по эксплуатации. При покупке требуйте правильного его заполнения: проставления печати продавца и даты продажи.

## 11. ДИЗАЙН ТОВАРНОЙ УПАКОВКИ



ШТРИХ-КОД 4607043673411

**Спецификация:**

Упаковка	Кол-во, шт.	Приблиз. вес, г	Прибл. размеры, мм (Ш x В x Г)
Основной прибор	1	670	95 x 165 x 95
Товарная упаковка	1	950	206 x 115 x 201
Транспортная упаковка	12	12200	430 x 360 x 420

**12. УХОД И ХРАНЕНИЕ**

- Всегда храните массажер для тела и его аксессуары в чистоте, используйте для этого чехол.
- Перед очисткой массажера извлеките штекер питания из розетки. Протирайте и очищайте прибор только мягкой чуть влажной тканью.

При необходимости смачивайте ткань в мягком моющем средстве, не допускается использование спиртосодержащих растворов.

- Не используйте для очистки летучие органические соединения, такие как бензин и растворитель. Это может испортить нанесенную краску или привести к повреждению устройства. После очистки протрите прибор насухо.
- При необходимости массажные насадки можно дезинфицировать методом кипячения (не более 5 минут).
- Обращайтесь с массажером аккуратно. Не роняйте его и не подвергайте сильному ударному воздействию.
- Прибор лучше всего хранить в оригинальной упаковке, в сухом чистом месте.
- Не допускайте игр детей с прибором. Он должен храниться в недоступном для детей месте.
- Избегайте попадания воды или иной жидкости внутрь корпуса массажера. Не храните прибор в местах, откуда он может упасть в ванну или раковину, наполненную водой.
- Храните массажер вдали от огня, высоких температур и прямых солнечных лучей.

### 13. УТИЛИЗАЦИЯ



**Надлежащая утилизация продукта (использованное электрическое и электронное оборудование)**

Этот символ на приборе или описании к нему указывает, что данный прибор не подлежит утилизации вместе с другими домашними отходами по окончании своего срока службы.

Чтобы предотвратить возможный ущерб для окружающей среды вследствие неконтролируемой утилизации отходов, пожалуйста, отделите это изделие от других типов отходов и утилизируйте его надлежащим образом для рационального повторного использования материальных ресурсов.

Для утилизации прибора обратитесь в специализированные пункты приема, расположенные в Вашем городе, или к местным органам власти для получения подробной информации о том, куда и как вернуть данный прибор для экологически безопасной переработки.

### 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Прибор не требует специального технического обслуживания.

### 15. УСТРАНЕНИЕ ОШИБОК И НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Симптом	Причина	Способ решения
Ничего не происходит при прокручивании поворотного регулятора, прибор не включается	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Штекер питания не вставлен в электрическую розетку?</li> <li>• Не плотный контакт штекера с электрической розеткой.</li> <li>• Нет питания в электрической розетке</li> <li>• Сработала защита от перегрева.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Удостоверьтесь, что штекер питания прибора вставлен в электрическую розетку. В случае необходимости извлеките штекер из розетки и вставьте его снова.</li> <li>• Убедитесь, что электричество не отключено.</li> <li>• Подключите прибор к другой розетке.</li> <li>• Отключите прибор от электрической сети и дайте ему полностью остыть в течение не менее 10 минут.</li> </ul>
Появление покраснения на коже	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Процедура продолжалась слишком долго</li> <li>• Ваша кожа слишком чувствительна к выбранной интенсивности массажа или виду насадки</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Продолжительность массажа каждого участка не должна превышать 5 минут, а общая продолжительность массажа не более 15 минут при каждом использовании.</li> <li>• Смените насадку на другую</li> <li>• Уменьшите интенсивность массажа</li> </ul>

## 16. РЕМОНТ

При обнаружении дефектов обращайтесь в ближайший к Вам центр технического обслуживания продукции CS Medica (адреса центров технического обслуживания указаны в конце данного руководства по эксплуатации).

## 17. УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Условные обозначения, значки, символы и пиктограммы, которые могут располагаться на изделии, товарной упаковке и в сопроводительной документации, имеют следующую расшифровку:

Символ	Расшифровка
	Производитель
	Знак соответствия директиве ЕС
	Единый знак обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза
	Изделие класса II Защита от поражения электрическим током
	Рабочая часть типа В. Степень защиты от поражения электрическим током (токи утечки)
	Температурный диапазон / Диапазон влажности / Ограничение атмосферного давления
	Прибор выполнен в соответствии с европейской директивой, ограничивающей содержание вредных веществ для обеспечения защиты здоровья людей и окружающей среды
	Возможность утилизации использованной упаковки: XX – цифровое обозначение материала упаковки YYYYY – буквенное обозначение материала упаковки
<b>4</b>	Полиэтилен низкой плотности
<b>22</b>	Бумага
<b>6</b>	Полистирол
<b>3</b>	Поливинилхлорид
<b>LDPE</b>	Полиэтилен низкой плотности
<b>PAP</b>	Бумага
<b>PS</b>	Полистирол
<b>PVC</b>	Поливинилхлорид

## 18. ДАТА ПРОИЗВОДСТВА ПРИБОРА, СРОК ГАРАНТИИ И СРОК СЛУЖБЫ

Дата производства зашифрована в серийном номере, который расположен на нижней части прибора, и имеет структуру – YUMNNNNN. Где YY – обозначает последние две цифры года производства, M – номер месяца производства (1–9 соответствуют месяцам с января по сентябрь, X – октябрь, Y – ноябрь, Z – декабрь), NNNNN – порядковый номер изделия.

### Сроки службы и гарантии

	Срок гарантии	Срок службы
Массажер для тела (электронный блок)	18 месяцев	3 года
Массажные скульпт-насадки гладкая, «волна», шариковая, пальчиковая, кольцевая, лепестковая, акупунктурная	18 месяцев	3 года

### \*\*\* Бесплатное пожизненное сервисное обслуживание\*\*\*

\*\*\* Бесплатное пожизненное сервисное обслуживание – сервисное обслуживание в течение установленного срока службы изделия, включающее в себя:

- проверку изделия на соответствие техническим параметрам;
- восстановление работоспособности изделия без замены деталей (необходимая замена деталей проводится за счет потребителя без взимания платы за проводимые работы, за исключением случаев ремонта по гарантии в течение действия гарантийного срока);
- консультации по использованию и хранению изделия.

## 19. СЕРТИФИКАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С CN.НА46.В.01801/21 от 25.09.2021 г.

Срок действия до 24.09.2026.

Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-CN.РА01.В.04606/21 от 23.09.2021 г.

Срок действия до 22.09.2026 г.

Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».