

ЗДРАВСТВУЙ, НАШ ДОРОГОЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Если вдруг наш товар не устроил - по любой причине - обязательно напиши нам в службу поддержки клиентов через любой удобный мессенджер: Viber, WhatsApp, Telegram по номеру +79087366073. Для звонков и связи +88003507765. Мы с радостью поможем разобраться во всем, научим пользоваться той функцией, которая оказалась непонятна и, конечно же, заменим товар, если в нем обнаружится брак.



 +7 908 736 60 73



Evo Beauty

Дарсонваль

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ВНИМАНИЕ



Замена насадок производится только в **ВЫКЛЮЧЕННОМ** приборе.

Перед началом работы проверьте, что аппарат выключен, то есть регулятор интенсивности выключен на “0”.

При работе с аппаратом нужно избегать излишнего давления на насадку. Начинайте процедуры с плавного увеличения интенсивности от “0” до необходимого значения.

Перед началом дарсонвализации следует убедиться, что на электроде (стеклянной насадке), который вы планируете использовать, нет видимых повреждений, прибор сухой и чистый.


Дарсонвализация производится на очищенной от косметики и грязи коже. Перед началом процедур рекомендуется снять все металлические и металлосодержащие украшения. Во время сеанса не прикасайтесь к металлическим поверхностям.

Что такое Дарсонваль?

У вас в руках современный физиотерапевтический прибор, принцип работы которого был изобретен в XIX веке во Франции. Дарсонваль воздействует на тело импульсами переменного тока высокой частоты (215 МГц) и малой силы (100-300 мА). Благодаря высокочастотному электрическому воздействию наблюдаются значительные изменения в области обмена веществ, кровоснабжения и оксигенации (насыщения кислородом) кожи, повышения тонуса тканей.

Дарсонваль назначают в современных клиниках и физиокабинетах для:

1. нормализации работы сальных и потовых желез;
2. снятия болевого синдрома и мышечных спазмов;
3. ускорения процессов регенерации поверхностных тканей;
4. общего омоложения кожи (нейтрализации значений pH, улучшения кровоснабжения и обмена веществ)
5. снятия постоперационных отёков и воспалений в пластической хирургии;
6. лечения акне, язв различной этиологии, растяжек, целлюлита, рубцов;
7. стимуляции волосяных фолликул, улучшения роста волос.

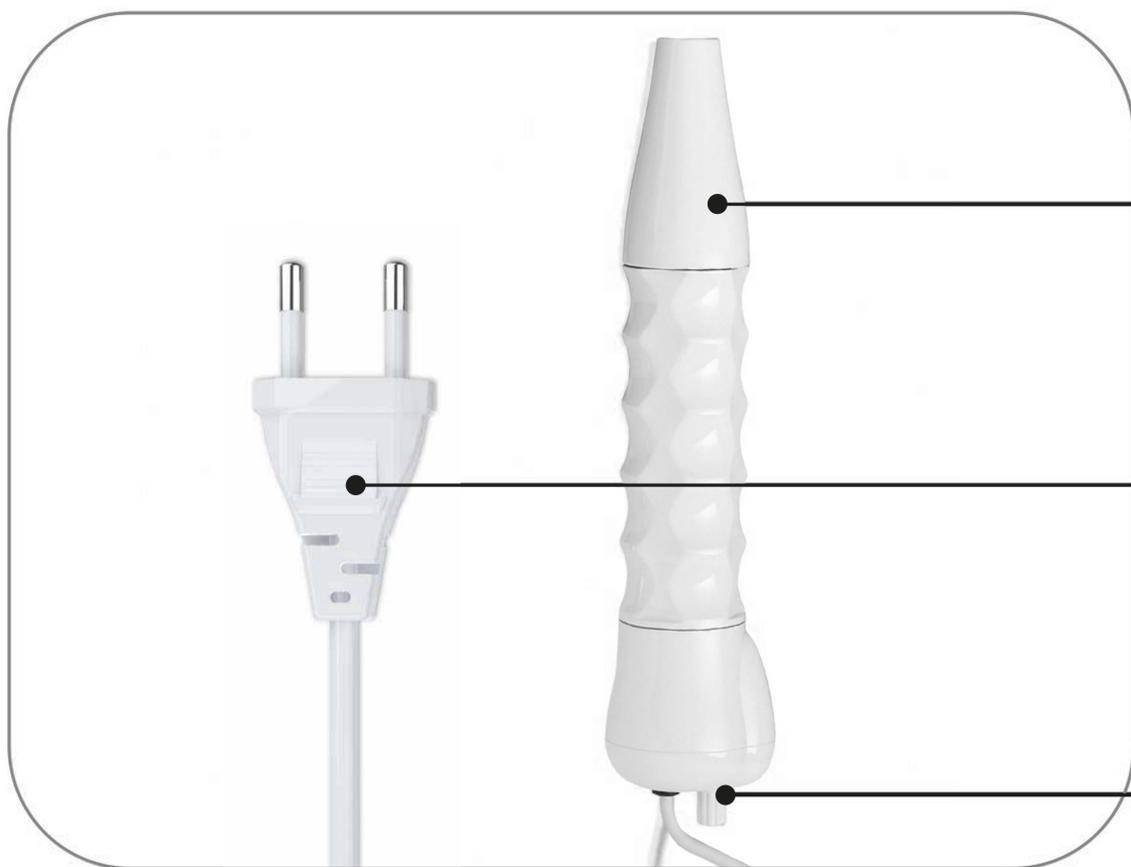


Гнездо для
крепления насадок

Вилка питания

Регулировка
мощности

Части корпуса прибора

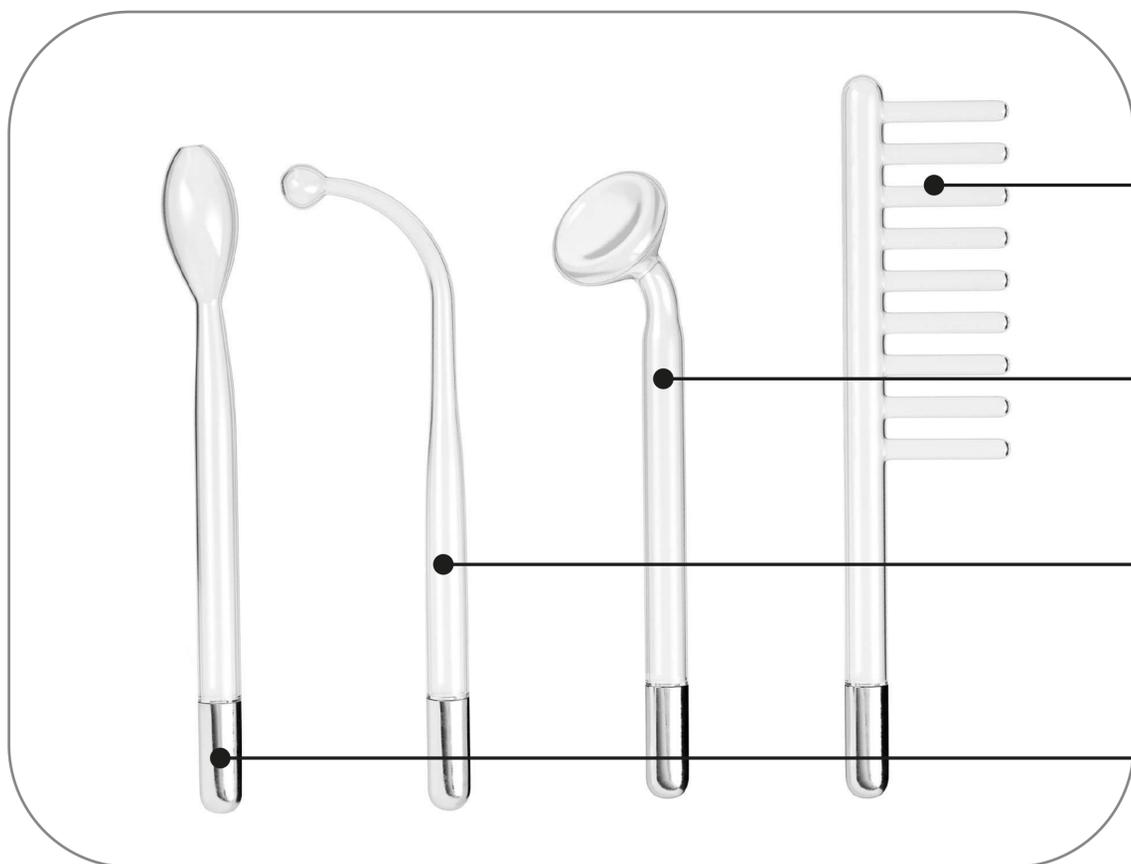

Насадка-гребешок

Грибовидная
насадка

Насадка-капля

Насадка-лепесток

Насадки-электроды

Выделяют три основных типа процедур: сухая дарсонвализация, влажная и дистанционная.

Сухая дарсонвализация

Сухая дарсонвализация позволяет повышать уровень мощности аппарата, если это рекомендовано вашим косметологом, до более высоких значений.

Мы рекомендуем использовать для сухой дарсонвализации тальки и подобные косметические присыпки, чтобы облегчить движение электрода по коже.

Влажная дарсонвализация

Предполагает нанесение на кожу крема или увлажняющего лосьона (*выбирайте крем в соответствии с ВАШИМ ТИПОМ КОЖИ*). Не используйте лосьоны, содержащие кислоты или спирт.

Для влажной дарсонвализации особенно важно начинать процедуру с того, что стеклянный наконечник должен касаться лица, и только после этого следует увеличивать интенсивность воздействия аппарата.

Дистанционная дарсонвализация

Дистанционный (бесконтактный) метод дарсонвализации рекомендуется для лифтинга кожи лица, для лечения зубной боли. Иногда дистанционную дарсонвализацию назначают для лечения обморожений или заживления ран или язв.

Прибор следует при этом держать на расстоянии от 3 до 7 мм от поверхности кожи. Эффективный курс для лифтинга состоит из 9-15 массажей.

Продолжительность курса для лечения посттравматических, дерматитных и комбустиологических поражений назначает лечащий врач.




Дарсонваль против прыщей и акне проводится с помощью насадки типа **“язычок”**. В первую очередь следует обработать воспаления: их “прижигают” острием насадки, применяя максимально интенсивный режим подачи тока в течение 10-15 секунд в зависимости от площади и глубины поражения.

Ни в одном режиме Дарсонваль не должен приносить болевых ощущений

После точечной обработки воспалений следует перейти к обработке всей поверхности лица контактным методом с применением плоской насадки.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СЕАНСА:

от 2 до 10 минут. Эффективный курс состоит из 10-15 процедур. Начиная с 5-7 сеанса (в зависимости от наблюдаемого эффекта), когда воспаления начнут заживать, во избежание образования шрамов и коллагенизации, следует применять только плоскую (грибовидную) насадку.

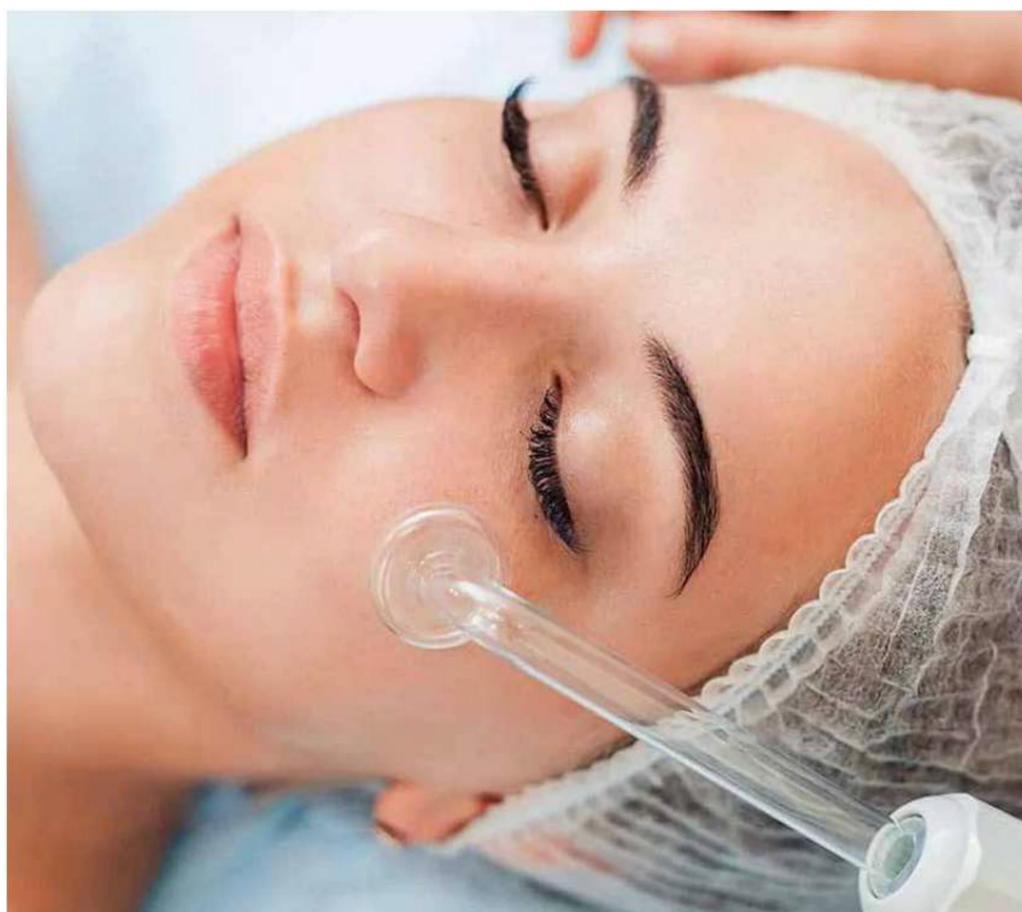

Для стимуляции роста волос, укрепления волосяных луковиц, лечения себореи и замедления выпадения волос прибор Дарсонваль применяют с **насадкой-гребешком**.

Процедура проводится на сухие чистые волосы.

Электрод медленно перемещают ото лба к затылку по всей поверхности головы, постепенно повышая мощность тока до появления ощутимого покалывания, но не достигая болезненных ощущений.

Общеоздоровительная дарсонвализация для омоложения и дезинфекции кожи проводится **грибовидной насадкой**. Используя классические карты массажа для лица, проводите насадкой по коже по ходу массажных линий — от центральной части лба до краев, от крыльев носа к вискам, от подбородка к щекам.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СЕАНСА:

в среднем составляет 7-10 минут.

Процедуру проводят через день. Полный курс состоит из 10-15 массажей.



Предостережения

1. Во избежание избыточной стимуляции чувствительной кожи вы можете попробовать прокладывать между кожей и насадкой влажные салфетки из нетканого материала или увлажненную марлю.
2. Максимальное время обработки любой точки на теле не должно превышать 15 секунд. Подразумевается, что вы можете вернуться к этой точке в течение сеанса, но не обрабатывайте одно и то же место больше 15 секунд подряд.
3. Прибор не проходил испытаний на беременных женщинах и лицах с кардиостимуляторами. Этим пациентам запрещено использовать прибор.
4. Не забывайте выкручивать регулятор интенсивности на “0” после окончания процедуры. Убедитесь в том, что он стоит на нуле перед началом работы. Также перед началом работы проверьте, что насадка (электрод) установлена правильно.
5. При всех видах процедур следует избегать дарсонвализации участков кожи с веснушками, родинками, новообразованиями любой этиологии.
6. Пожалуйста, используйте прибор только по назначению, описанному в этой инструкции. Правильная эксплуатация — залог безопасности.

Техническая спецификация:

Диапазон входного напряжения:	100 В ~ 260 В 50/60 Гц
Измерительное напряжение:	220 В 50 Гц
Входной ток:	0,71А
Входная мощность:	10 Вт
Частота затухающих колебаний:	144 кГц
Прерывистая частота:	100 Гц
Пиковое выходное напряжение:	44 кВ
Среднеквадратичное выходное напряжение:	30 кВ
Ток короткого замыкания высокого напряжения на землю (без какой-либо среды):	80 мА
Максимальный ток разряда стеклянной трубки на тело человека:	1 А (1000 н А)
Материал стекла насадок:	боросиликатное стекло
Размер:	33/21/6 см
Вес:	1 кг



Техника Безопасности

- ! Не разбирайте аппарат и не пытайтесь выполнять какие-либо другие процедуры, не указанные в нашей инструкции.
- ! Все ремонтные работы должны выполняться авторизованным профессиональным персоналом.
- ! Не включайте аппарат, находясь рядом с водой. Не берите аппарат, включенный в розетку, мокрыми руками.
- ! Не вставляйте посторонних предметов в гнездо, предназначенное для электродов, включая электроды сторонних производителей. Это может привести к пожару или поражению электрическим током.
- ! Не оставляйте прибор без присмотра в месте, доступном для детей.
- ! Не оставляйте прибор в неустойчивом положении, избегайте падений прибора и механических повреждений прибора и электродов.
- ! Не ставьте и не кладите посторонние предметы на провод питания.
- ! Вынимайте вилку из розетки после использования прибора.

Противопоказания

Также прибор противопоказан если у вас:

1. Кровотечения и нарушения свёртываемости крови;
2. Эпилепсия;
3. Период беременности;
4. Наличие электронного кардиостимулятора;
5. Индивидуальная непереносимость тока;
6. Тромбофлебит;
7. Сердечная аритмия;
8. Туберкулез лёгких в активной форме;
9. Лихорадка;
10. Злокачественные новообразования;
11. Розацеа (красная сетка сосудов);
12. Гирсутизм (или избыточный рост волос на лице).



В случае обнаружения следующих проблем свяжитесь с нами:

1. Аппарат нечаянно оказался в воде.
2. При работе прибора вы чувствуете необычный запах, из прибора пошёл дым или звук стал существенно громче, чем обычно.
3. Кабель поврежден.
4. Аппарат или электроды имеют следы механических повреждений.
5. Посторонний предмет попал в гнездо для электрода в аппарате.

ГАРАНТИЯ 6 МЕСЯЦЕВ!

Наша компания оставляет за собой право дополнять и изменять информацию в настоящей инструкции без явного дополнительного уведомления покупателей.

Новая версия инструкции будет располагаться по тому же адресу в интернете, что и предыдущая версия.