

REVYLINE

Электрическая звуковая
зубная щетка

RL 030

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



20000 звуковых
колебаний в мин.



Две сменные
насадки




Водонепрони-
цаемости IPX4



Батарейка
в комплекте



Чистящая
головка
с вентиляцией

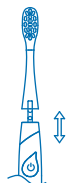

Замена насадки:

Вставьте насадку до щелчка, убедитесь в том, что она надежно зафиксирована.



Замена батарейки:

Поверните крышку отсека для батарейки против часовой стрелки, снимите ее. После замены батарейки закрутите крышку по часовой стрелке.



Комплектация:

Эргономичная рукоятка с металлическим стержнем; Две насадки с щетиной soft; Дорожный футляр; Батарейка.

Технические характеристики:

Частота вибраций: 20000 к/мин
Толщина щетинок: 0,18 мм
Мощность: 0,3 Вт
Напряжение: 1,5 В
Тип батареек: AAA

Способ применения:

Нанесите зубную пасту на чистящую головку щетки, поместите ее в полость рта и включите щетку. Во время чистки совершайте плавные движения, постепенно меняя место чистки. Мы рекомендуем выключать щетку не извлекая ее из полости рта, что позволит предотвратить разбрызгивание воды и пасты. Затем промойте щетку под проточной водой. Менять насадки рекомендуется не реже одного раза в два-три месяца.

Меры предосторожности:

Прибор предназначен исключительно для чистки зубов, не следует использовать его не по назначению, в противном случае это может привести к несчастным случаям и травмам. Не подходит для применения детям младше трех лет. Не следует использовать для очистки спиртосодержащие и другие химические вещества.

Хранение:

Стряхните остатки воды, вытрите насухо рукоятку, остальные детали оставьте на открытом воздухе для естественного высыхания. Избегайте хранения при высоких температурах и повышенной влажности.

Произведено по заказу ИП Обушенков М.А.:
г. Москва, ул. Бирюсинка, д. 13, к. 1.

Производитель: Shantou Honglong Industry Co., Ltd. Address: Beihuang South, Yiyang, Xiashan Town, Chaonan District, Shantou, Guangdong 515144, China.

8 (800) 775-38-49
www.revyline.ru

EAC