


БЕСПРОВОДНОЙ
МАССАЖЕР ДЛЯ НОГ
РОЛИКОВЫЙ МАССАЖ • ПРЕССОТЕРАПИЯ

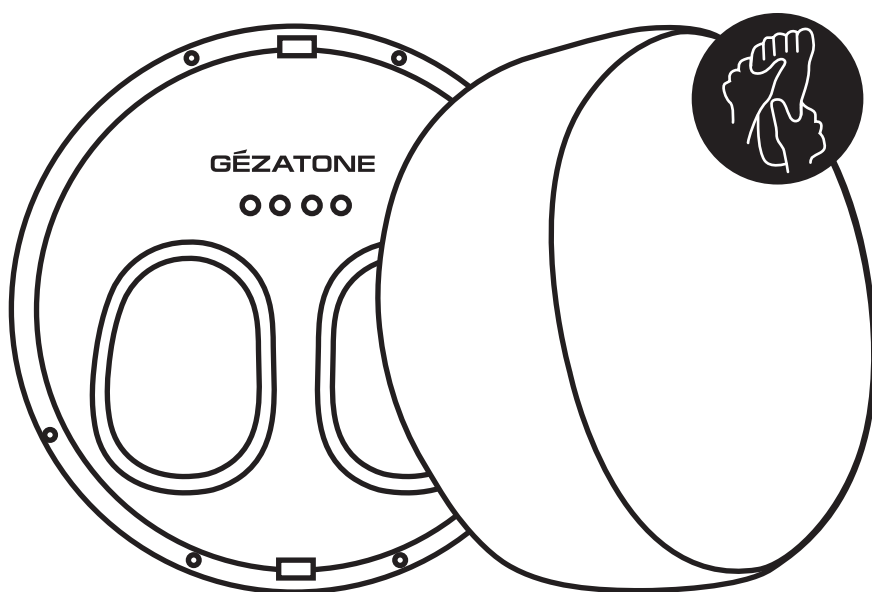

GÉZATONE

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

AMG725W

Благодарим за покупку массажера для ног AMG725W Gezatone!
Перед использованием рекомендуем тщательно ознакомиться с инструкцией.

Массажер для ног Gezatone AMG725W – это инновационный прибор, который сочетает в себе функции разминающего массажа, прессотерапии, вибрационного и восстанавливающего массажа Шиацу. Такой интенсивный глубокий массаж благотворно влияет на здоровье всего организма, стимулирует акупунктурные точки, расположенные на подошве, улучшает кровообращение, снимает усталость, улучшает самочувствие и настроение. Благодаря оригинальной конструкции и дизайну массажер станет прекрасным дополнением в Вашем интерьере!

Благодаря **массажу Шиацу** снимается напряжение в мышцах и суставах, восстанавливается нормальное кровоснабжение, стимулируется вывод застоявшейся жидкости.

Воздействие роликами на активные точки стопы производит эффект **рефлексотерапии**, открывает энергетические каналы, способствует восстановлению общей работоспособности, снимает дискомфорт и усталость ног.

Прессомассаж - методика воздействия на кожу и подкожные ткани с помощью давления воздуха, которое усиливает приток крови к тканям, помогает снять напряжение мышц, улучшает работу сосудов, превосходно снимает отеки.

Тепловое воздействие и вибромассаж улучшает местное кровообращение, стимулирует работу сосудов, устраняет дискомфорт в суставах и мышцах.

ПРЕИМУЩЕСТВА МАССАЖЕРА

1. Прессомассаж снимает спазм мышц и усталость ног.
2. Массаж Шиацу воздействует на акупунктурные точки стопы, что дает общий оздоравливающий эффект.
3. Регулярный массаж улучшает самочувствие и настроение.
4. Использование массажера для ног является прекрасной профилактикой варикоза и заболеваний суставов.
5. Прогревание устраняет дискомфорт в мышцах и суставах.
6. Массаж стоп – это идеальный способ расслабиться и снять напряжение после тяжелого дня.
7. Наличие крышки с функцией вибромассажа позволяет проводить массаж области игодиц, а положив ноги сверху - массаж икроножных мышц.
8. Возможность выбрать режим работы и настроить прибор, как это удобно Вам!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Не пользуйтесь медицинским или терапевтическим оборудованием во время использования прибора
- Прибор рассчитан на индивидуальное использование. Не пользуйтесь прибором вдвоем одновременно.
- При использовании массажера снимите украшения с лодыжек
- Перед использованием убедитесь, что все части массажера не имеют механических повреждений
- Немедленно прекратите использование массажера, если вдруг почувствовали себя плохо или ощутили заметный дискомфорт
- Рекомендованное время проведения массажа – 10 минут
- Перед использованием массажера убедитесь, что на его поверхности или внутри отсеков для ног нет домашних животных
- Не вставайте во время сеанса массажа ног! Это повредит массажер и может привести к травмам
- Массажер должен храниться в хорошо проветриваемом помещении и не подвергаться воздействию прямых солнечных лучей.

МЕДИЦИНСКИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- варикоз , тромбофлебит
- сердечные заболевания
- повышенная раздражительность, психические расстройства, эпилепсия
- нарушения свертываемости крови
- при приеме антикоагулянтов
- кожные заболевания
- гипертония
- онкология
- туберкулез
- флебит
- диабет
- травмы конечностей (без консультации врача)
- наличие медицинских искусственных частей конечностей, имплантатов, винтов, штифтов внутри
- аневризмы сосудов
- дисфункция/деформация суставов, как например, ревматизм, молоткообразный палец стопы, подагра или остеопороз


ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

- Не используйте массажер при температурах ниже 0°C.
- Не пользуйтесь массажером во влажных или пыльных помещениях, это может привести к удару током и выходу массажера из строя.
- Не пользуйтесь прибором во время грозы, если прибор в этот момент подключен к электросети – отключите зарядное устройство из розетки.
- Не используйте массажер на неровной поверхности, это может привести к его повреждению.
- Не пользуйтесь массажером рядом с нагревательными приборами или под прямыми лучами солнца.
- Не разбирайте прибор, внутри нет обслуживаемых частей. В случае неполадок обращайтесь в сервисный центр.
- Не подключайте зарядное устройство мокрыми руками.
- **Использование массажера возможно только людьми с весом меньше 120 кг.**
- Если вы не пользуетесь массажером, подзаряжайте аккумулятор каждые 60 дней во избежания его выхода из строя.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБОРА


выбор места для массажера

устанавливайте массажер на расстоянии не менее 1 метра от телевизора, радио и других видео и аудио устройств

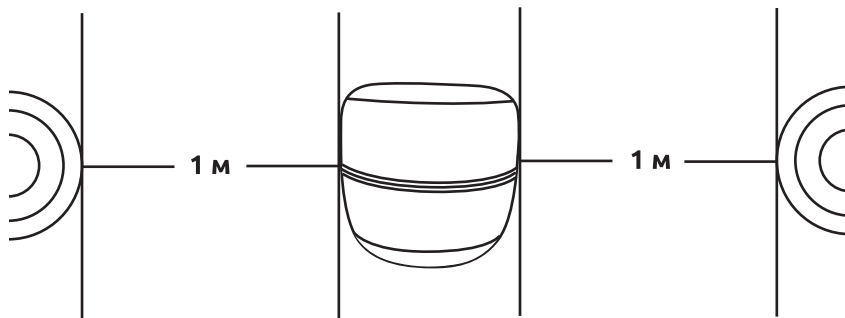

- Вставьте штекер зарядного устройства массажера в разъем в корпусе прибора (рядом с кнопкой включения вибромассажа в нижней части массажера), а вилку – в розетку 220В. Убедитесь, что во время использования провод блока питания не натянут, не перегнут, не поврежден. При подключении к сети загорится зеленый индикатор на зарядном устройстве.
- Зарядите прибор в течение не менее 3 часов. Во время зарядки можно пользоваться всеми функциями прибора, однако это увеличит время зарядки аккумулятора.
- Во время работы прибора от аккумулятора кнопка «вкл/выкл» подсвечена синим цветом, когда уровень заряда аккумулятора достаточен и красным, когда уровень заряда критически низок и прибор необходимо зарядить.
- Не используйте неоригинальное зарядное устройство.
- Не используйте массажер на неровной поверхности, во влажных помещениях (например, в ванной), рядом с обогревательными приборами.


ВНЕШНИЙ ВИД ПРИБОРА

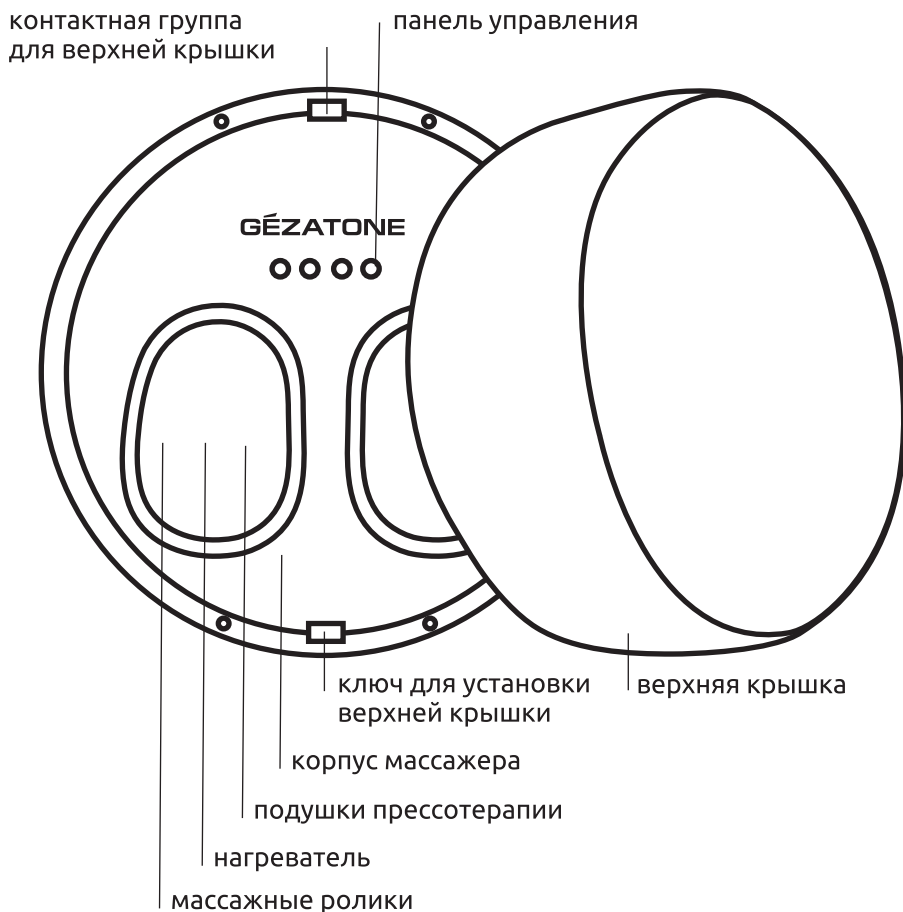


ОСОБЕННОСТИ МАССАЖЕРА

- Когда верхняя крышка закрыта, массажер может использоваться как удобное сиденье с вибромассажем и небольшим подогревом.
- Если открыть верхнюю крышку, то можно воспользоваться всеми преимуществами ножного массажера с вибрацией, подогревом, прессотерапией и несколькими программами на выбор.

ФУНКЦИИ ПРИБОРА

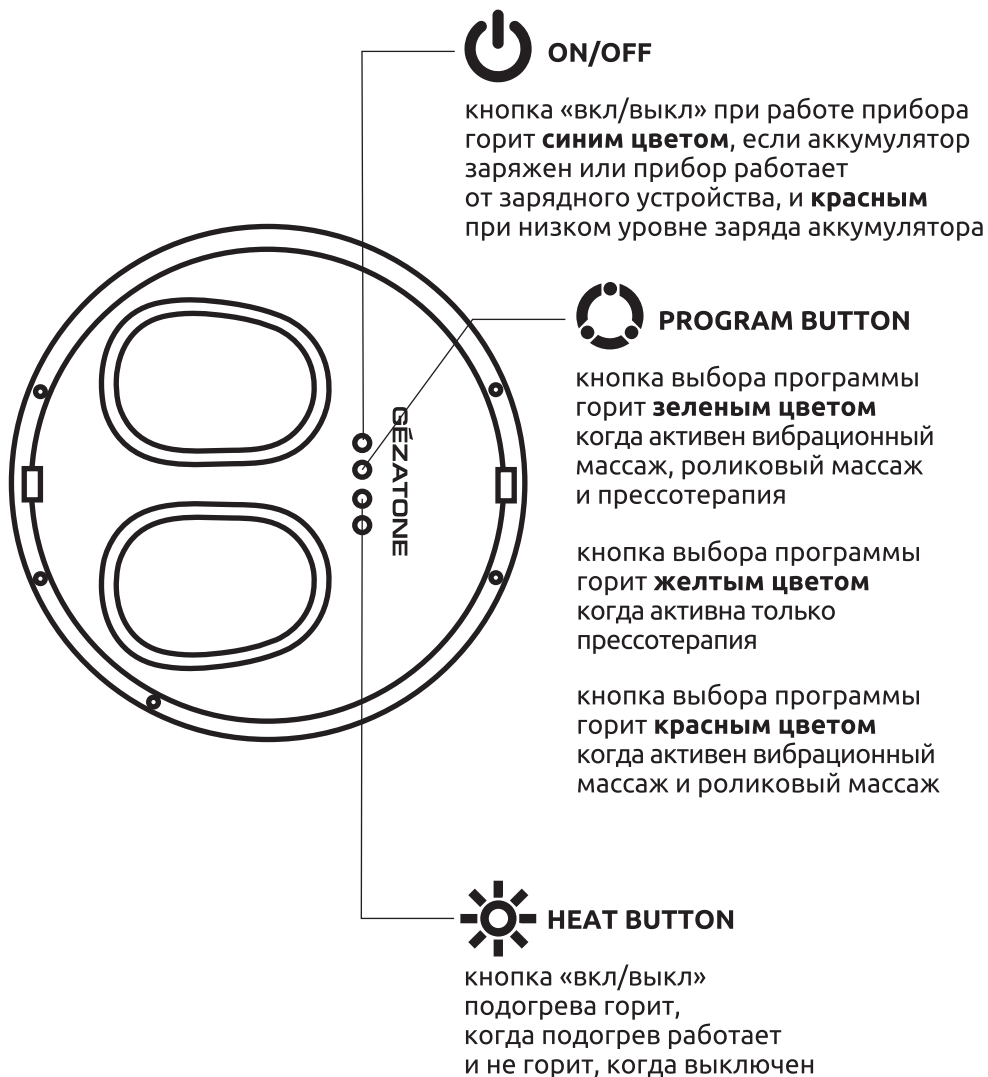


ФУНКЦИИ ПРИБОРА

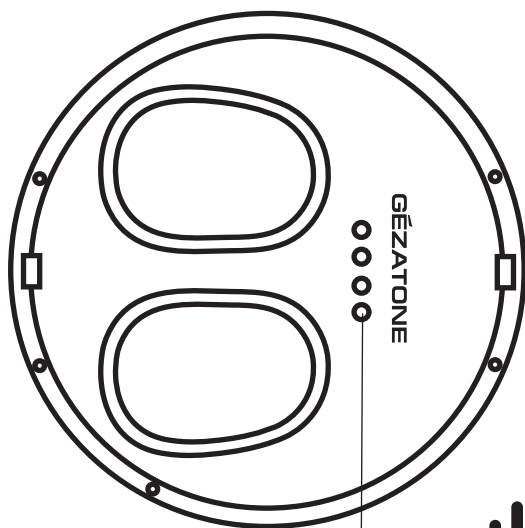

кнопка интенсивности массажа
горит **зеленым цветом**,
если выбрана
низкая интенсивность массажа

кнопка интенсивности массажа
горит **желтым цветом**,
если выбрана
средняя интенсивность массажа

кнопка интенсивности массажа
горит **красным цветом**,
если выбрана
высокая интенсивность массажа

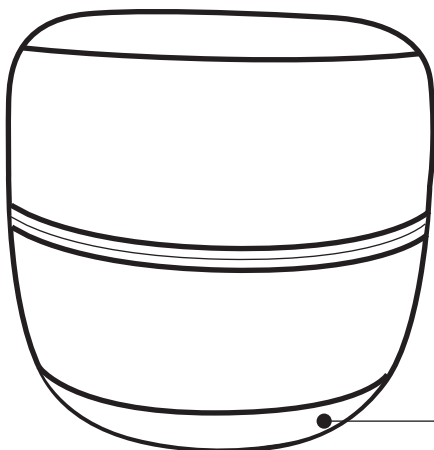

кнопка «вкл/выкл» вибромассажа
с подогревом верхней крышки

работает при полностью
закрытой верхней крышке

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

• При закрытой внешней крышке:



Так вы активируете вибромассаж с небольшим подогревом внешней крышки. Для его отключения нажмите ту же кнопку повторно.

• При снятой внешней крышке:

Нажмите кнопку «вкл/выкл» на панели управления прибора. Прибор включится в режиме по умолчанию, в установке программ работы будет выбран вибромассаж, роликовый массаж и прессотерапия, нагрев выключен, интенсивность массажа низкая.

Вы можете менять режимы работы прибора кнопкой выбора программ, выбрать один из трех уровней интенсивности и управлять подогревом во время работы массажера по вашему усмотрению.

Прибор автоматически отключится через 10 минут работы во всех режимах во избежание перегрева механизма. Не рекомендуется сразу включать его повторно, особенно, если был активирован подогрев при работе ножного массажера. Нужно дать механизму остыть хотя бы 15 минут, это продлит срок его службы.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

ПРОБЛЕМА/ВОПРОС	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Звуки постукивания или гудения во время работы массажера	Это нормальный звук при работе движущегося механизма: работа мотора, трение массажных роликов	Это нормальная ситуация
Прибор не включается	Аккумулятор разряжен	Зарядите аккумулятор

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Блок питания: AC220 В, 50 Гц / DC 24В, 2А

Время таймера автоотключения: 10 мин

Встроенный аккумулятор: 4000 мА*ч

Шумность: ≤55 дБ

Вес массажера: 12 кг

Максимальный вес пользователя: 120 кг

Размер в упаковке: 455х455х455мм

Комплектность:

Массажер для ног со съемной крышкой – 1 шт

Зарядное устройство с проводом – 1 шт

Инструкция по эксплуатации – 1 шт

GEZATONE

RU. Прибор для ухода и массажа за телом, серии (тип) AMG, модель AMG725w, бытовой электрический, т.м. Gezatone.

Изготовитель: "Gezanne I.T.C." / "Жезанн И.Т.С.", адрес: Saint Avertin 39 rue des Granges Galand, France, /Сент Авертен 39 рю де Гранж Галан, Франция. Филиал завода-изготовителя: "GREAT CATHAY PRODUCTS MFG. INC." / "ГРЭЙТ КЭТЭЙ ПРОДАКТС МФГ. ИНК" адрес: 2 fl., No. 19, Lane 160, SUNG-CHIANG RD. Taipei, Taiwan, / 2фл, Но. 19, Лэйн 160, Санг-Чианг Рд, Тайпей, (Китай), Тайвань. Импортёр/уполномоч. изготовителем орг.: ООО «МИТРИДАТ», РФ, Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 41, стр. 1, эт. 2, пом. I, ком 8, тел. (495) 225-25-83.

Срок службы: 3 года. Способ применения и дату производства: см. инструкцию.

KZ. Gezatone сауда белгісі денеге күтім жасау және массаж жасау құралы сериясы (типi) AMG, моделі AMG725w, тұрмыстық электрлік.

Дайындаушы: "Gezanne I.T.C." / "Жезанн И.Т.С.", мекенжайы: Saint Avertin 39 rue des Granges Galand, France, /Сент Авертен 39 рю де Гранж Галан, Франция. Дайындаушы зауыптың филиалы: "GREAT CATHAY PRODUCTS MFG. INC." / "ГРЭЙТ КЭТЭЙ ПРОДАКТС МФГ. ИНК" мекенжайы: 2 Fl., No. 19, Lane 160, SUNG-CHIANG RD. Taipei, Taiwan R.O.C., / 2фл, Но. 19, Лэйн 160, Санг-Чианг Рд, Тайпей, (Қытай), Тайвань. Импорттаушы/дайындаушының уәкілетті мекемесі: "МИТРИДАТ" ЖШҚ, Ресей, Мәскеу қ., Алтуфьевское тас жолы, 41 үй, 1 құрыл, 2 қабат, үй-жай I, 8 бөлме, тел. (495) 225-25-83.

