

ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ



аккуратно
извлеките
из баночки
пару патчей,
поместите
под глаза/или
над глазами

ВРЕМЯ ЭКСПОЗИЦИИ
20 минут



Пептидные патчи
против мимических
морщин с эффектом
«Ботокса»,
Beauty Style,
4515952K

аккуратно снимите патчи, легко помассируйте
для впитывания раствора



нанесите крем на контур глаз,
не наносите на подвижное веко



Омолаживающий
крем вокруг глаз
"Матриксил",
Beauty Style,
4515971K



Чтобы процедуры
с аппаратом проходили
комфортно и приносили
пользу, ЧЕТКО СЛЕДУЙТЕ
РЕКОМЕНДАЦИЯМ
И ИСПОЛЬЗУЙТЕ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ
КОСМЕТИКУ



Хотите узнать больше
о возможностях
вашего аппарата
и его функциях?
ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ
ПРОГРАММОЙ КРАСОТЫ,
РАЗРАБОТАННОЙ
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВАС



Наведите камеру на QR код
и Вы получите видеоинструкцию
и персональную программу
красоты для Вашей кожи
от косметологов Gezatone



www.gezatone.ru/410

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ АППАРАТОМ ISEE410 3D RELAX



GÉZATONE

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВАШИМ АППАРАТОМ



перед началом
использования
зарядите аппарат




очистите глаза
от декоративной
косметики,
снимите
контактные
линзы



включите прибор нажатием на кнопку включения.
Выберите нужный режим, его изображение
появится на дисплее.

ФИКСИРУЮЩИЙ
РЕМЕШЬ

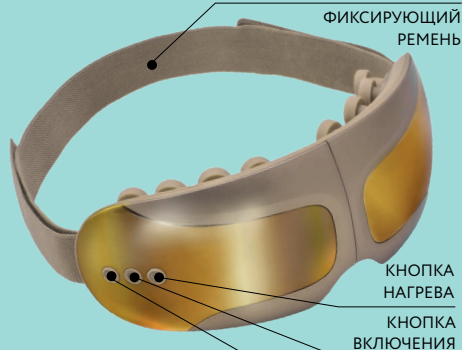


КНОПКА
НАГРЕВА

КНОПКА
ВКЛЮЧЕНИЯ

КНОПКА
BLUETOOTH

ПРОЗРАЧНОЕ
ОКОШКО

СИЛИКОНОВАЯ
МАССАЖНАЯ
ГОЛОВКА

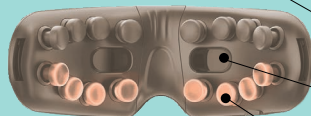

после процедуры рекомендуется
использовать патчи,
затем нанести крем

1 ДЕЛИКАТНОЕ ОЧИЩЕНИЕ/ ДЕМАКИЯЖ

Перед использованием аппарата рекомендуется
очистить кожу контура глаз от макияжа.
Необходимо снять контактные линзы



очистите кожу
контура глаз используя
увлажняющую пенку
для демакияжа



Увлажняющая пенка
для демакияжа
AKBA 24,
Beauty Style,
4515701K



нанесите небольшое
количество средства
на ватный диск и
очистите кожу контура
глаз удаляя макияж

2 МАССАЖ



наденьте очки –
массажер
и зафиксируйте
при помощи ремня.
Нажмите
и удерживайте
кнопку питания
для запуска прибора.
Выберите режим



ВРЕМЯ
ПРОЦЕДУРЫ
15 минут



можно отключить музыку,
используемую по умолчанию.

Можно включить режим Bluetooth для связи
с мобильным телефоном или компьютером.

Установив соединение через Bluetooth,
можно слушать любимые мелодии.