

GÉZATONE

5

МАССАЖНЫХ
НАСАДОК

ПЕРКУССИОННЫЙ
МАССАЖЕР
ДЛЯ ТЕЛА

AMG 144



СЕТЬ МАГАЗИНОВ МАССАЖЕРОВ, КОСМЕТИКИ, ТОВАРОВ ДЛЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

ФИЗИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА, ТЯЖЕЛАЯ РАБОТА, СПОРТИВНЫЕ ТРЕНИРОВКИ, МАЛОПОДВИЖНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ, - ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ В МЫШЦАХ БОЛИ, СКОВАННОСТИ, ОНЕМЕНИЯ, СПАЗМОВ. РАЗРАБОТАННЫЙ ДЛЯ ГЛУБОКОЙ УДАРНОЙ ПРОРАБОТКИ ТКАНЕЙ И МЫШЕЧНЫХ СТРУКТУР ПЕРКУССИОННЫЙ МАССАЖЕР AMG144 GEZATONE ОКАЗЫВАЕТ РАССЛАБЛЯЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ, ВОССТАНАВЛИВАЕТ НАРУШЕННУЮ ЦИРКУЛЯЦИЮ КРОВИ И ЛИМФЫ, ОСВОБОЖДАЯ ОТ НЕПРИЯТНЫХ ОЩУЩЕНИЙ.



ПРИ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИИ,
БОЛЕЗНЕННОСТИ МЫШЦ ВО ВРЕМЯ
СПОРТИВНЫХ НАГРУЗОК



ПРИ СКОВАННОСТИ ДВИЖЕНИЙ
И ЗАЖАТОСТИ ПРИ НАРУШЕНИИ
ОСАНКИ, СИДЯЧЕЙ РАБОТЕ




ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ,
НИЗКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ТРЕНИРОВОК.



ПРИ ДЛИТЕЛЬНОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ, МЫШЕЧНОЙ
АТРОФИИ



ОНЕМЕНИЕ И СКОВАННОСТЬ
МЫШЦ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОЙ
НЕПОДВИЖНОСТИ

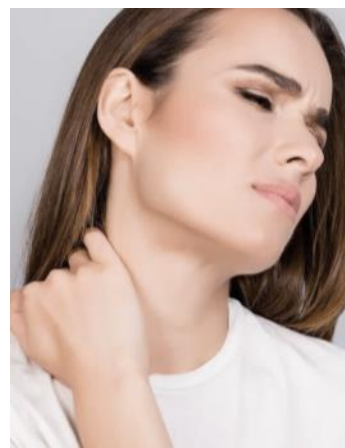

ПРИ СТРЕССЕ, ОБЩЕЙ
УСТАЛОСТИ И НЕДОСТАТКЕ
ЖИЗНЕННЫХ СИЛ

ФУНКЦИИ

ДЕЙСТВИЕ МАССАЖЕРА ОСНОВАНО НА **УДАРНОЙ ВИБРАЦИИ**, ВОЗДЕЙСТВУЮЩЕЙ НА ТКАНИ С ВЫСОКОЙ ЧАСТОТОЙ И ЗАДАННОЙ АМПЛИТУДОЙ. НАСАДКА ПЕРКУССОРА, СОВЕРШАЯ СЕРИЮ ЧАСТЫХ, ГЛУБОКО ПРОНИКАЮЩИХ УДАРОВ, РАССЛАБЛЯЕТ МЫШЦЫ И ЛИКВИДИРУЕТ ЛОКАЛЬНЫЕ МЫШЕЧНЫЕ УПЛОТНЕНИЯ.

AMG144 ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРОВЕДЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО МИОФАСЦИАЛЬНОГО МАССАЖА И ВОССТАНАВЛИВАЕТ ЕСТЕСТВЕННУЮ ПОДВИЖНОСТЬ, УСТРАНЯЯ СЦЕПКУ МЫШЦЫ И ФАСЦИИ. В РЕЗУЛЬТАТЕ УЛУЧШАЕТСЯ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ МЫШЦ И УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ДВИГАТЕЛЬНЫЙ ДИАПАЗОН.



Артикул 1301295



ПЕРКУССИОННЫЙ
МАССАЖ



ПРОГРЕВ
ТКАНЕЙ



ОХЛАЖДЕНИЕ
ТКАНЕЙ




РЕЛАКСИРУЮЩИЙ
МАССАЖ



ТОНИЗИРУЮЩИЙ
МАССАЖ

ДЛЯ КОГО РЕКОМЕНДУЕТСЯ

МАССАЖЕР СОЗДАН ДЛЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН, МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ НЕ ЗАВИСИМО ОТ ВОЗРАСТА, ПРОФЕССИИ И ОБРАЗА ЖИЗНИ.

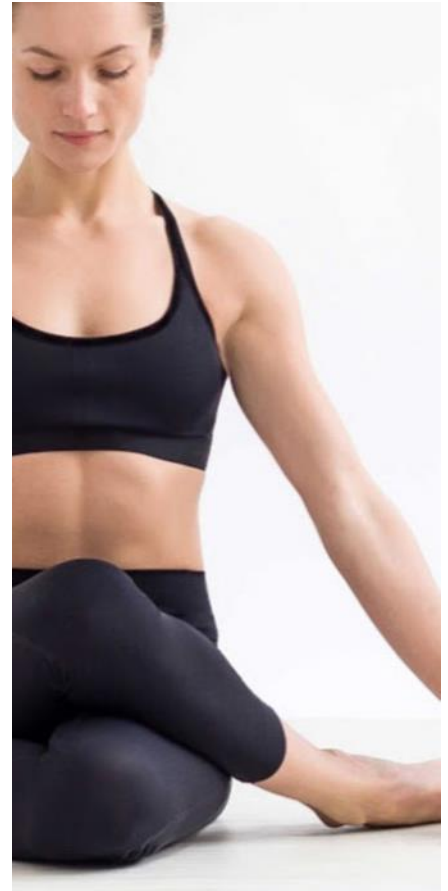

ДЛЯ АТЛЕТОВ И БОДИБИЛДЕРОВ

ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПРОФЕССИЙ С ФИЗИЧЕСКОЙ
НАГРУЗКОЙ

ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ
ЛЮБИТЕЛЕЙ И ПРОФЕССИОНАЛОВ
ЛЮБЫХ ВИДОВ СПОРТА

ДЛЯ ОФИСНЫХ РАБОТНИКОВ
А ТАКЖЕ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПРОСТО
УСТАЕТ НА РАБОТЕ

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ, КОТОРЫМ
ПРИХОДИТСЯ ЧАСТО НАГИБАТЬСЯ
И ПОДНИМАТЬ РЕБЕНКА

ПРИ МАЛОПОДВИЖНОМ ОБРАЗЕ
ЖИЗНИ

ДЛЯ ТЕХ, КТО УВЛЕКАЕТСЯ
ФИТНЕССОМ, ЙОГЕЙ

ДЛЯ МАССАЖИСТОВ И ТРЕНЕРОВ

ДЛЯ ТЕХ, КТО
ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ ПОСЛЕ
ТРАВМ ОПОРНО -
ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

ПЕРКУССИОННЫЙ МАССАЖ

ПЕРКУССИОННЫЙ МАССАЖ ОСНОВАН НА СЕРИИ БЫСТРЫХ УДАРОВ - ПОСТУКИВАНИЙ, ГЛУБОКО ПРОНИКАЮЩИХ В МЯГКИЕ ТКАНИ. СПОСОБСТВУЕТ СНИЖЕНИЮ БОЛИ, РАССЛАБЛЕНИЮ МЫШЦ И БЫСТРОМУ ВОССТАНОВЛЕНИЮ. МАССАЖ УЛУЧШАЕТ КРОВОТОК, ПОМОГАЕТ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ТОКСИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ ОБМЕНА, УВЕЛИЧИВАЕТ ДИАПАЗОН ДВИЖЕНИЯ МЫШЦ.



МАССАЖЕР ОКАЗЫВАЕТ КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ **ТОЧНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОБЛАСТИ НАПРЯЖЕНИЯ МЫШЦ**, ГДЕ МЯГКИЕ ТКАНИ НУЖДАЮТСЯ В ВОССТАНОВЛЕНИИ И ОБЛАСТИ ГДЕ ЕСТЬ УЧАСТКИ ЛОКАЛЬНОГО МЫШЕЧНОГО УПЛОТНЕНИЯ.

ЭФФЕКТЫ



УСТРАНЕНИЕ
СПАЗМОВ МЫШЦ



СТИМУЛЯЦИЯ
КРОВО-
ОБРАЩЕНИЯ



УСТРАНЕНИЕ
УЧАСТКОВ БОЛЕЗНЕННОГО
УПЛОТНЕНИЯ В МЫШЦАХ



ПОВЫШЕНИЕ
ВЫНОСЛИВОСТИ
МЫШЦ



РЕЛАКСИРУЮЩЕЕ
И АНТИСТРЕССОВОЕ
ДЕЙСТВИЕ



АКТИВИЗАЦИЯ
ЛИМФОДРЕНАЖА



ПОВЫШЕНИЕ
ОКСИГЕНАЦИИ



УСТРАНЕНИЕ
БОЛЕЗНЕННОСТИ

ПРЕИМУЩЕСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ:** для мужчин и женщин
- **ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ:** СЕАНС МАССАЖА ЗА 15 МИНУТ ИЗБАВЛЯЕТ ОТ ДИСКОМФОРТА
- НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ ЗАПИСЫВАТЬСЯ И СПЕШИТЬ К НАЗНАЧЕННОМУ ВРЕМЕНИ
- **НАСАДКИ** для воздействия на все группы мышц обладают высокой износостойкостью и легко моются
- **НАСАДКА ХОЛОД – ТЕПЛО** МОЖЕТ МЕНЯТЬ ТЕМПЕРАТУРУ В ДИАПАЗОНЕ 10 – 45 ГРАДУСОВ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР ПОМОГАЕТ ПОДГОТОВИТЬ МЫШЦЫ К НАГРУЗКАМ, А ТАКЖЕ БЫСТРО И ЭФФЕКТИВНО СНИМАЕТ СПАЗМЫ И УСКОРЯЕТ РАЗБИВАНИЕ ТРИГГЕРОВ. НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАСАДКИ ПОМОГАЕТ СНИЗИТЬ БОЛЕЗНЕННОСТЬ И ОТЕЧНОСТЬ.
- МАССАЖЕР И ВСЕ НАСАДКИ УПАКОВАНЫ В **УДОБНЫЙ КЕЙС** для хранения и транспортировки. НИЧЕГО НЕ ПОТЕРЯЕТСЯ.



3200

УДАРОВ В МИНУТУ

Артикул 1301295

5

5 НАСАДОК В КОМПЛЕКТЕ



НАСАДКА ХОЛОД - ТЕПЛО

3

3 УРОВНЯ ИНТЕНСИВНОСТИ В КАЖДОМ РЕЖИМЕ



РАБОТАЕТ ОТ АККУМУЛЯТОРА



КЕЙС ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

ПРЕИМУЩЕСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИБОР ОБЛАДАЕТ ВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ, СЕАНС МАССАЖА ОКАЗЫВАЕТ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ НЕ ТОЛЬКО НА СПАЗМИРОВАННУЮ МУСКУЛАТУРУ, НО И НА ВСЕ ТЕЛО, УСТРАНЯЯ УСТАЛОСТЬ.




3 УРОВНЯ ИНТЕНСИВНОСТИ В КАЖДОМ РЕЖИМЕ

ВОЗМОЖНОСТЬ РЕГУЛИРОВАТЬ ИНТЕНСИВНОСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОЗВОЛЯЕТ ПОДОБРАТЬ МАКСИМАЛЬНО КОМФОРТНУЮ СИЛУ МАССАЖА И ПОЛУЧИТЬ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ПРОЦЕДУРЫ.

ДЛИТЕЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ РАБОТА

ПРИБОР РАБОТАЕТ ОТ АККУМУЛЯТОРА, ВЫ НЕ ПРИВЯЗАНЫ К РОЗЕТКЕ. ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА ХВАТАЕТ НА 120 МИНУТ НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ.

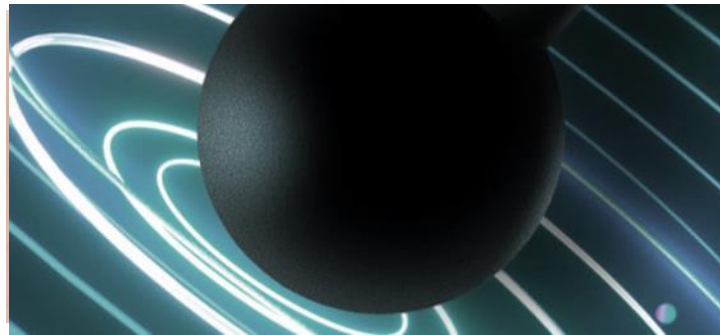

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА

МОЩНЫЙ МОТОР ИМЕЕТ НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА, МАССАЖЕР НЕ МЕШАЕТ ОКРУЖАЮЩИМ, А ТАКЖЕ ПОЗВОЛЯЕТ ПРОВОДИТЬ МАССАЖ ВО ВРЕМЯ ПРОСМОТРА ТЕЛЕВИЗОРА.



СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕРМО-НАСАДКА

НАСАДКА «ХОЛОД-ТЕПЛО», СПОСОБНАЯ МЕНЯТЬ ТЕМПЕРАТУРУ, ЧТО ПОВЫШАЕТ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПЕРКУССИОННОГО МАССАЖА. ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ОТ 10 ДО 45 ГРАДУСОВ.



МАССАЖНЫЕ НАСАДКИ

БЛАГОДАРЯ НАЛИЧИЮ ПЯТИ НАСАДОК РАЗНОЙ КОНФИГУРАЦИИ, МАССАЖЕР AMG144 ПОЗВОЛЯЕТ ПРОВОДИТЬ УДАРНЫЙ МАССАЖ ДЛЯ ПЛЕЧ, МЫШЦ ШЕИ И ГРУДИ, РУК, НОГ, ОКОЛОПОЗВОНОЧНЫХ МЫШЦ И ЛЮБОЙ ОБЛАСТИ ТЕЛА, ГДЕ ЭТО НЕОБХОДИМО.

5

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
МАССАЖНЫХ
НАСАДОК

НАСАДКА
«ХОЛОД – ТЕПЛО»



ПОМОГАЕТ ПОДГОТОВИТЬ
МЫШЦЫ К НАГРУЗКАМ,
ЭФФЕКТИВНО СНИМАЕТ
СПАЗМЫ, БОЛЕЗНЕННОСТЬ И
ОТЕЧНОСТЬ.

КРУГЛАЯ
НАСАДКА



ДЛЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА
БОЛЬШИЕ И СРЕДНИЕ
МЫШЕЧНЫЕ ГРУППЫ.

ПЛОСКАЯ
НАСАДКА



МОЖЕТ
ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ
ЛЮБЫХ МЫШЕЧНЫХ
ГРУПП.

НАСАДКА
«ПУЛЯ»



ДЛЯ ПРОРАБОТКИ
ТРИГГЕРНЫХ ТОЧЕК,
ЛОКАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА ЗОНЫ БОЛЕЗНЕННОСТИ

НАСАДКА
«ВИЛКА»



ДЛЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА
ОКОЛОПОЗВОНОЧНЫЕ
МЫШЦЫ, МАССАЖА ШЕИ И
ТРАПЕЦИИ, ИКРОНОЖНЫХ
МЫШЦ

ВНЕШНИЙ ВИД МАССАЖЕРА



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

ИСПОЛЬЗУЯ МАССАЖЕР AMG 144, МОЖНО ПРОВОДИТЬ НЕСКОЛЬКО ВИДОВ МАССАЖА



ПЕРЕД МАССАЖЕМ ЗАРЯДИТЕ АККУМУЛЯТОР, УСТАНОВИТЕ НАСАДКУ. ВКЛЮЧИТЕ МАССАЖЕР

ВЫБЕРИТЕ РЕЖИМ И УСТАНОВИТЕ САМЫЙ НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ИНТЕНСИВНОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ.

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НАСАДКИ С ФУНКЦИЯМИ ОХЛАЖДЕНИЯ И ПОДОГРЕВА, УСТАНОВИТЕ НУЖНУЮ ТЕМПЕРАТУРУ.



Артикул 1301295

РЕЛАКСИРУЮЩИЙ МАССАЖ

СПОРТИВНЫЙ МАССАЖ

ТОНИЗИРУЮЩИЙ МАССАЖ

УСТРАНЕНИЕ БОЛИ И СПАЗМА

АККУРАТНО ПРИСЛОНИТЕ К ОБЛАСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ. НЕ ПРИКЛАДЫВАЙТЕ СИЛУ И НЕ ДАВИТЕ.

ПЕРЕМЕЩАЙТЕ МАССАЖЕР СКОЛЬЗЯЩИМ ДВИЖЕНИЕМ, МЕДЛЕННО И ПЛАВНО. ПОСТЕПЕННО ПОВЫШАЙТЕ УРОВЕНЬ ИНТЕНСИВНОСТИ.

В ЗОНЕ МЫШЕЧНОГО УПЛОТНЕНИЯ (НА ТРИГГЕРНОЙ ТОЧКЕ), ЗАДЕРЖИТЕ МАССАЖЕР В ТЕЧЕНИЕ 10 – 15 СЕКУНД.


РЕЗУЛЬТАТЫ



AMG144 ВОССТАНАВЛИВАЕТ И УЛУЧШАЕТ ЦИРКУЛЯЦИЮ КРОВИ, ТКАНИ ПОЛУЧАЮТ КИСЛОРОД И ПИТАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА, ИЗБАВЛЯЮТСЯ ОТ ТОКСИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ ОБМЕНА, УСКОРЯЕТСЯ ПРОЦЕСС ВЫВЕДЕНИЯ МОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ ИЗ МЫШЦ. ВОЗДЕЙСТВУЕТ НАПРАВЛЕННО НА ПРОБЛЕМНЫЕ УЧАСТКИ И «РАЗБИВАЕТ» ТРИГГЕРНЫЕ ТОЧКИ – УЧАСТКИ СИЛЬНОЙ БОЛЕЗНЕННОСТИ В МЫШЦАХ, ВОЗНИКШИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЫСОКОГО ФИЗИЧЕСКОГО НАПРЯЖЕНИЯ.



УСТРАНЕНИЕ БОЛИ
И МЫШЕЧНОЙ
УСТАЛОСТИ

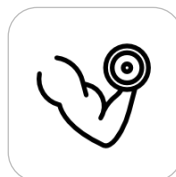

ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
ТРЕНИРОВОК




УСТРАНЕНИЕ
СПАЗМА МЫШЦ




УМЕНЬШЕНИЕ
БОЛЕЗНЕННОСТИ
В МЫШЦАХ НОГ



ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ТОНУСА МЫШЦ

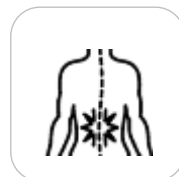

УМЕНЬШЕНИЕ
БОЛЕЗНЕННОСТИ В
МЫШЦАХ СПИНЫ

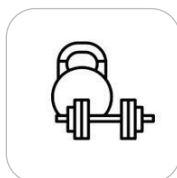

«РАЗОГРЕВ» МЫШЦ
ПЕРЕД
ТРЕНИРОВКАМИ



УЛУЧШЕНИЕ
САМОЧУВСТВИЯ,
РЕЛАКС



УЛУЧШЕНИЕ
ПОДВИЖНОСТИ И
ПОВЫШЕНИЕ
 ГИБКОСТИ.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ



- ТРАВМЫ ПОЗВОНОЧНИКА, СУСТАВОВ И КОСТЕЙ, ПЕРЕЛОМЫ, РАСТЯЖЕНИЯ И РАЗРЫВЫ СВЯЗОК
- ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
- ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ
- НАРУШЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ (РАНЫ, ЦАРАПИНЫ, ССАДИНЫ, ОЖОГИ) В ОБЛАСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ,
- НАЛИЧИЕ ДЕРМАТИТОВ, ДЕРМАТОЗОВ В СТАДИИ ОБОСТРЕНИЯ В ЗОНЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ.
- НАРУШЕНИЕ СВЕРТЫВАЕМОСТИ КРОВИ, ПРИЕМ АНТИКОАГУЛЯНТОВ, ЗАБОЛЕВАНИЯ СОСУДОВ (ВАРИКОЗ, ТРОМБОФЛЕБИТ И ДРУГИЕ)
- СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ, ГИПЕРТЕНЗИЯ
- ОСТРЫЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ
- ХРОНИЧЕСКИЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ В СТАДИИ ОБОСТРЕНИЯ
- ГРИПП, ОРВИ, ПОВЫШЕННАЯ ТЕМПЕРАТУРА
- ЗАПРЕЩЕНО ПРИМЕНЯТЬ УСТРОЙСТВО НА ПОЗВОНОЧНИКЕ, КОСТНЫХ ВЫСТУПАХ, ГОЛОВЕ, ЛИЦЕ, В ЗОНЕ ПРОЕКЦИИ СЕРДЦА И НА ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ ШЕИ.
- В ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОМ ПЕРИОДЕ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ МАССАЖЕРА НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ВРАЧОМ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ПАРАМЕТРЫ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА (в комплект не входит)	DC 5В, 2А
МОЩНОСТЬ ПРИБОРА	25 Вт (максимум 30 Вт)
ПАРАМЕТРЫ АККУМУЛЯТОРА	11,1 В 2400мА*ч
ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ ВСТРОЕННОГО АККУМУЛЯТОРА	5 ЧАСОВ
УРОВНЕЙ ИНТЕНСИВНОСТИ В КАЖДОМ РЕЖИМЕ	3
АВТООТКЛЮЧЕНИЕ ВО ВСЕХ РЕЖИМАХ	15 минут
ТЕМПЕРАТУРА ПРИ НАГРЕВЕ 1 УРОВЕНЬ / 2 УРОВЕНЬ / 3 УРОВЕНЬ	35 С / 40 С / 45 С
ТЕМПЕРАТУРА ПРИ ОХЛАЖДЕНИИ 1 УРОВЕНЬ / 2 УРОВЕНЬ / 3 УРОВЕНЬ	20 С / 15 С / 10 С
РАЗМЕР В УПАКОВКЕ	240 x 100 x 240 мм
ВЕС ПРИБОРА	620 грамм

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Перкуссионный массажер AMG144 Gezatone – 1
- Сменные насадки – 5
- Шнур для зарядки – 1
- Руководство по эксплуатации – 1
- Кейс для хранения и транспортировки – 1



ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ