

GÉZATONE



**BIOLIFT
iFACE**

ПРОГРАММА КРАСОТЫ

GÉZATONE

BIO LIFT iFACE

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВАШИМ АППАРАТОМ

БЫСТРЫЙ СТАРТ

или где у него кнопка



ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯДИТЕ АККУМУЛЯТОР
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА.



СНИМИТЕ ВСЕ УКРАШЕНИЯ,
КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ.
ОЧИСТИТЕ КОЖУ ОТ МАКИЯЖА
И ЗАГРЯЗНЕНИЙ.

ПОДГОТОВЬТЕ ПРИБОР: ОТРЕГУЛИРУЙТЕ
ЛЕВУЮ И ПРАВУЮ ЗАСТЕЖКИ НА
СИЛИКОНОВОЙ МАСКЕ. УБЕДИТЕСЬ, ЧТО
ВСЕ 10 МАССАЖНЫХ ГОЛОВОК
ПОДСОЕДИНЕНЫ.



**НАНЕСИТЕ НА ЛИЦО АППАРАТНЫЙ
ГЕЛЬ ИЛИ НЕТКАНУЮ МАСКУ;**

ПОМЕСТИТЕ СИЛИКОНОВУЮ МАСКУ
ПРИБОРА ПОВЕРХ НЕТКАНОЙ
КОСМЕТИЧЕСКОЙ МАСКИ ИЛИ ГЕЛЯ
И ЗАСТЕГНИТЕ ЗАСТЕЖКИ.



НАЧАЛО РАБОТЫ:


НАЖМИТЕ НА КОНТРОЛЛЕРЕ
КНОПКУ ВКЛЮЧЕНИЯ И
УДЕРЖИВАЙТЕ ЕЕ В ТЕЧЕНИЕ 3
СЕКУНД ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ПРИБОРА



КНОПКОЙ ВЫБОРА РЕЖИМА НА
КОНТРОЛЛЕРЕ ПЕРЕКЛЮЧАЙТЕ
РЕЖИМЫ РАБОТЫ ПРИБОРА.



ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ УДАЛИТЕ
КОНТАКТНЫЙ ГЕЛЬ, ПРОТИРИТЕ
ЛИЦО ТОНИКОМ, ЗАТЕМ НАНЕСИТЕ
СЫВОРОТКУ И КРЕМ.

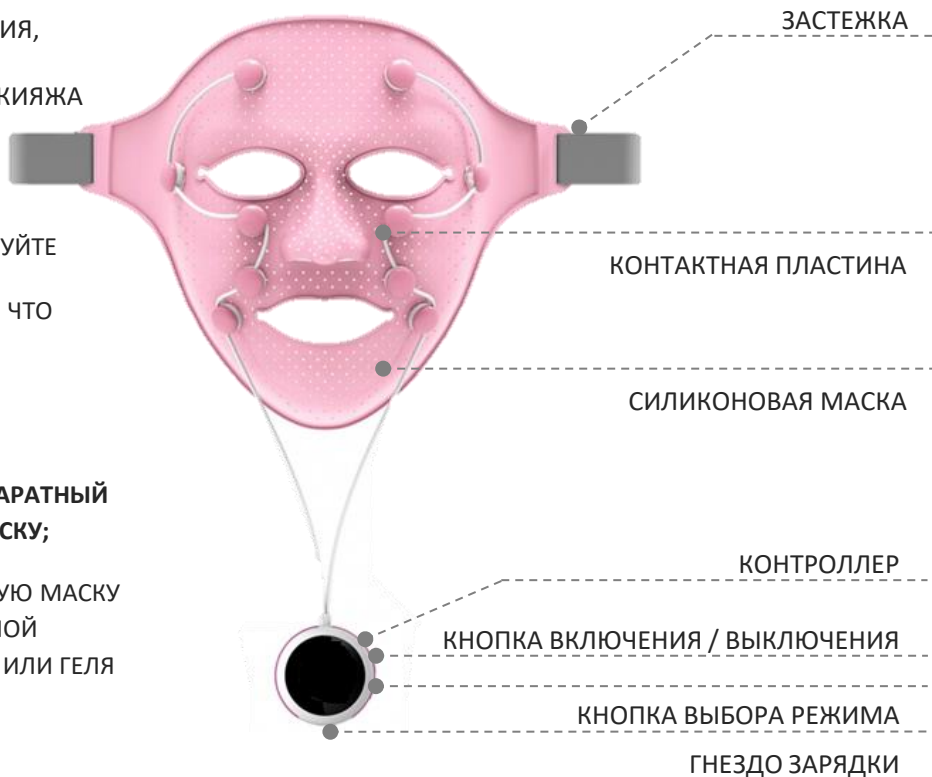

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДЛЯ
ПРОЦЕДУРЫ СПЕЦИАЛЬНУЮ
АППАРАТНУЮ КОСМЕТИКУ



GÉZATONE
BIOLIFT iFACE

ШАГ № 1

**УВЛАЖНЯЮЩАЯ ПЕНКА
ДЛЯ ДЕМАКИЯЖА «АКВА 24»**



4515701K – 200 мл

КУПИТЬ

ОЧИЩЕНИЕ И ДЕМАКИЯЖ

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АППАРАТА
НЕОБХОДИМО ОЧИСТИТЬ КОЖУ ОТ
МАКИЯЖА И ВНЕШНИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ.
ДЛЯ НАИЛУЧШЕГО ПРОНИКНОВЕНИЯ
АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ К КОЖУ,
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВОДИТЬ 1 РАЗ В
НЕДЕЛЮ ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ

ОЧИСТИТЕ КОЖУ
ИСПОЛЬЗУЯ
**УВЛАЖНЯЮЩУЮ
ПЕНКУ ДЛЯ
ДЕМАКИЯЖА**



НАНЕСИТЕ НЕБОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО НА КОЖУ
ЛИЦА И ШЕИ
ОЧИСТИТЕ КОЖУ,, УДАЛЯЯ МАКИЯЖ И
ЗАГРЯЗНЕНИЯ.
ОСТАТКИ ПРЕПАРАТА СМОЙТЕ ТЕПЛОЙ ВОДОЙ.

ЗАВЕРШИТЕ
ОЧИЩЕНИЕ С
**УВЛАЖНЯЮЩИМ
ТОНИКОМ «АКВА 24»**



НАНЕСИТЕ ПРИ ПОМОЩИ ВАТНОГО ДИСКА
НА КОЖУ ЛИЦА И ШЕИ.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ ТОНИК «АКВА 24»



4515702K – 200 мл

КУПИТЬ

GÉZATONE
BIOLIFT iFACE

СТИМУЛЯЦИЯ ЭМС + ВИБРОМАССАЖ

ШАГ № 2

РЕГУЛЯРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАСКИ, ВСЕГО ЗА 15 МИНУТ В ДЕНЬ, УКРЕПЛЯЕТ ЛИЦЕВЫЕ МЫШЦЫ, ПОДТЯГИВАЕТ И РАЗГЛАЖИВАЕТ КОЖУ, АКТИВИЗИРУЕТ КРОВООБРАЩЕНИЕ, УСТРАНЯЕТ ОТЕЧНОСТЬ И УЛУЧШАЕТ ЦВЕТ ЛИЦА.

ГЕЛЬ «УЛЬТРАЛИФТ»



4501416AR – 250 мл

КУПИТЬ

РАВНОМЕРНО НАНЕСИТЕ ГЕЛЬ НА КОЖУ ЛИЦА СРЕДНИМ СЛОЕМ.

ПОМЕСТИТЕ СИЛИКОНОВУЮ МАСКУ ПОВЕРХ СЛОЯ ГЕЛЯ И ЗАСТЕГНИТЕ ЗАСТЕЖКИ

ВКЛЮЧИТЕ АППАРАТ.

ВЫБЕРИТЕ ОДИН ИЗ ТРЕХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ.

MODE 1

- СТИМУЛЯЦИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ
- АКТИВИЗАЦИЯ ДРЕНАЖА
- ПОВЫШЕНИЕ ПРОНИКНОВЕНИЯ КОСМЕТИЧЕСКИХ АКТИВОВ
- УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА.

MODE 2

- РЕЛАКС: УСТРАНЕНИЕ СПАЗМА И ГИПЕРТОНУСА ЛИЦЕВЫХ МЫШЦ
- СТИМУЛЯЦИЯ ТОЧЕК КРАСОТЫ
- СОКРАЩЕНИЕ МОРЩИН
- УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА

MODE 3

- СТИМУЛИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ НА КОЖУ И МЫШЦЫ.
- УКРЕПЛЕНИЕ И ТРЕНИРОВКА МЫШЦ.
- ЛИФТИНГОВЫЙ ЭФФЕКТ.
- УКРЕПЛЕНИЕ ОВАЛА ЛИЦА.



ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ 15 МИНУТ

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОГО ЭФФЕКТА МОЖНО ПРОВОДИТЬ ПРОЦЕДУРУ, ИСПОЛЬЗУЯ ВСЕ 3 РЕЖИМА, КАЖДЫЙ ПО 15 МИНУТ. В ДАННОМ СЛУЧАЕ ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ СОСТАВИТ 45 МИНУТ.

GÉZATONE
BIOLIFT iFACE

ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ

ШАГ № 3

ПОСЛЕ ИНТЕНСИВНОГО УХОДА НУЖНО
СОХРАНИТЬ ВЛАГУ И ОБЕСПЕЧИТЬ КОЖЕ
НЕОБХОДИМУЮ ЗАЩИТУ ОТ ВНЕШНЕЙ
АГРЕССИИ.

ШЕЛКОВАЯ ГИАЛУРОНОВАЯ ЛИФТИНГ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА С ПЕПТИДАМИ



4501710K

КУПИТЬ



АККУРАТНО ИЗВЛЕКИТЕ МАСКУ ИЗ УПАКОВКИ,
РАЗВЕРНИТЕ И ПОМЕСТИТЕ НА ЛИЦО,
РАЗГЛАДЬТЕ И СЛЕГКА ПРИЖМИТЕ.
ВРЕМЯ ЭКСПОЗИЦИИ
20 МИНУТ.
ЗАТЕМ АККУРАТНО СНИМИТЕ МАСКУ, ЛЕГКО
МАССИРУЙТЕ ДЛЯ ВПИТЫВАНИЯ РАСТВОРА.

ДНЕВНОЙ ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ КРЕМ "МАТРИКСИЛ"



ЗАВЕРШИТЕ ПРОЦЕДУРУ
НАНЕСИТЕ ДНЕВНОЙ
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ КРЕМ
«МАТРИКСИЛ»
МАССАЖНЫМИ ДВИЖЕНИЯМИ.

4515960K – 50 мл

КУПИТЬ



GÉZATONE

BIOLIFT iFACE

ДНЕМ И НОЧЬЮ РЕГУЛЯРНЫЙ УХОД



УВЛАЖНЯЮЩИЙ ТОНИК
«АКВА 24»

4515702K – 200 мл

КУПИТЬ

УВЛАЖНЯЮЩАЯ ПЕНКА ДЛЯ
ДЕМАКИЯЖА «АКВА 24»

4515701K – 200 мл

КУПИТЬ



ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ СЫВОРОТКА
"МАТРИКСИЛ"



4515967K – 50 мл

КУПИТЬ

УВЛАЖНЯЮЩИЙ ТОНИК
«АКВА 24»

4515702K – 200 мл

КУПИТЬ



ДНЕВНОЙ ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ
КРЕМ «МАТРИКСИЛ»



4515960K – 50 мл

КУПИТЬ

НОЧНОЙ ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ
КРЕМ «МАТРИКСИЛ»

4515962K – 50 мл

КУПИТЬ



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УХОД



ПАТЧИ ПЕПТИДНЫЕ
ДЛЯ ГЛАЗ ОТ
МОРЩИН С "БОТО"
ЭФФЕКТОМ

4515952K – 60 ШТУК


КУПИТЬ



ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ
КРЕМ ВОКРУГ ГЛАЗ
"МАТРИКСИЛ"

4515971K – 50 мл

КУПИТЬ

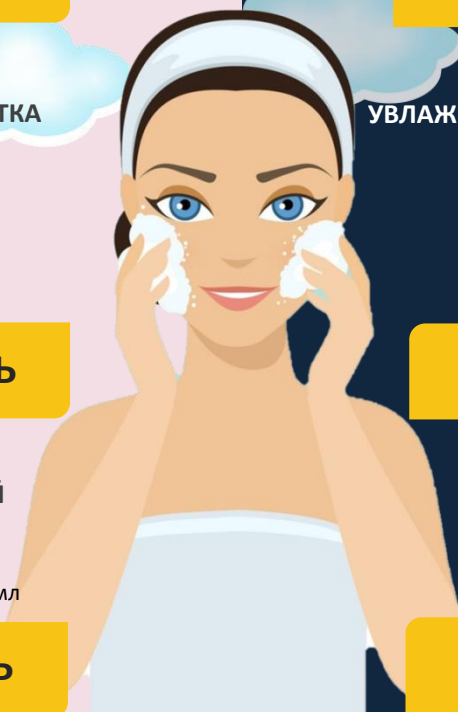

GÉZATONE

BIOLIFT iFACE

