

Eva

Аппарат для ухода
за кожей лица



ReadySkin

Руководство
по эксплуатации

Оглавление

Введение	4
Общие замечания	5
Перед применением	6
Противопоказания и ограничения к использованию	8
Внешний вид и управление аппаратом	10
Зарядка прибора	13
Проведение процедур	14
RF-лифтинг	17
EMS (Электромиостимуляция)	19
Успокаивающий массаж	21
Рекомендации по использованию прибора	22
Курсовое применения аппарата	23
Обслуживание аппарата	25
Часто задаваемые вопросы	26
Устранение неполадок	28
Правила ухода за прибором	31
Технические характеристики	32
Комплектация	33
Правила хранения, реализации, транспортировка и утилизации	34

Введение

Бытовой аппарат ReadySkin Eva не является медицинским оборудованием. Не для применения в медицинских целях.

Спасибо, что выбрали ReadySkin Eva!

Аппарат ReadySkin Eva дарит комплексный и бережный уход за кожей лица на основе современных эффективных косметологических методик с использованием RF-лифтинга, микротокового и LED воздействия. Сочетание этих методик влияет на глубокие слои кожи, обеспечивая эффект лифтинга, а также способствуют выработке коллагена и эластина, повышению тонуса кожи лица и обеспечивает свежий отдохнувший вид. Сочетая комплекс омолаживающих процедур, данный прибор является отличным средством по борьбе с возрастными изменениями.

Аппарат ReadySkin Eva достаточно прост в использовании, однако необходимо внимательно изучить данное руководство по эксплуатации и соблюдать изложенные в нем требования по работе с устройством.

Для обеспечения своей безопасности перед использованием рекомендуем внимательно изучить раздел «Меры безопасности».

Общие замечания

Бытовой аппарат ReadySkin Eva для ухода за кожей лица.

Назначение данного прибора — уход за кожей при помощи RF, EMS и LED технологий. Основные функции — восстановление тонуса лица, снятие отечности, успокаивающий массаж.

Принцип действия аппарата основан на воздействии на глубокие слои кожи радиочастотной (RF) энергией, микротоков, а также LED-излучения в инфракрасном, красном и синем спектрах.

Аппарат собран из гипоаллергенных материалов.

Степень водонепроницаемости изделия составляет IPX4 — косметологическим аппаратом можно пользоваться в ванной комнате и очищать рабочую поверхность под струей воды, однако нельзя погружать весь корпус прибора в жидкость.

Перед применением

Аппарат ReadySkin Eva достаточно прост в использовании, однако необходимо внимательно изучить руководство по эксплуатации и соблюдать изложенные в нем требования по работе с аппаратом

Проведите визуальный осмотр аппарата на предмет отсутствия механических повреждений. Убедитесь, что металлическая рабочая поверхность и корпус прибора не имеют повреждений. Убедитесь, что прибор достаточно заряжен.

Перед началом использования прибора рекомендуем внимательно изучить раздел «Меры предосторожности».

Внимание

Перед использованием косметологического аппарата полностью зарядите его. Во время зарядки прибор нельзя использовать.

Меры предосторожности

- Если вы почувствовали дискомфорт в процессе применения аппарата, прекратите его использование. При появлении на коже раздражения, ожогов, болевых ощущений, аллергических реакций во время или после использования прибора прекратите процедуры и обратитесь к врачу.
- Не обрабатывайте один участок кожи слишком долго. Во избежание ожогов постоянно перемещайте аппарат.

- Во время процедур не направляйте светодиодную лампу прямо в глаза.
- После применения режима *Успокаивающего массажа* его повторное использование возможно не раньше чем через 30 минут.
- Не протирайте прибор агрессивными по составу веществами (такими, как спирт, бензин, средство для снятия лака и другими растворителями). Они могут повредить поверхность прибора.
- Используйте косметологический аппарат только для целей, перечисленных в настоящем руководстве.
- Прибор предназначен для ухода только за кожей лица, шеи и зоны декольте. Прибор не предназначен для ухода за телом.
- В зависимости от индивидуальных особенностей кожи применение этого аппарата может вызвать аллергические реакции.
- Во избежание вреда не прикладывайте манипулу (рабочую поверхность аппарата) непосредственно к глазам.

Внимание

Фирма-производитель и торгующая организация не несут никакой ответственности за последствия применения аппарата, вызванные нарушением текущих правил эксплуатации или несоблюдением методик проведения процедур.

Противопоказания и ограничения к использованию

Перед проведением процедур рекомендуется предварительная консультация врача.

Запрещено использование прибора при следующих условиях:

- беременность и лактация;
- острые инфекционные и вирусные заболевания;
- болезни сердечно-сосудистой системы;
- онкологические заболевания;
- наличие кардиостимулятора;
- заболевания кожи и соединительной ткани (напр. склеродермия, красная волчанка);
- хронические дерматиты и дерматозы в стадии обострения;
- акне в стадии обострения;
- наличие купероза в предполагаемой зоне воздействия прибора;
- склонность к образованию келоидов;
- наличие силиконовых имплантатов, золотых нитей, металлических имплантатов в области обработки;
- тяжелые формы сахарного диабета;
- тяжелые стадии гипертонической болезни;
- детский или подростковый возраст;
- прием дерматотропных препаратов (например, роаккутан);
- грипп, ОРВИ, повышенная температура;

- при посещении солярия или в период активного солнечного загара.

В следующих случаях применение прибора рекомендуется под наблюдением специалиста:

- при наличии имплантируемого изделия или металлического протеза;
- при наличии кожных аллергических реакций, угрей, дерматита, прохождения лечения у дерматолога, а также непосредственно после косметических операций или пересадки волос.

Во время процедуры следует избегать таких областей тела, как:

- глаза;
- области сердца и щитовидной железы;
- области половых органов;
- области над силиконовыми имплантатами, области с гелевой контурной пластикой.

Внешний вид и управление аппаратом



Управление аппаратом осуществляется посредством кнопки *MODE* на корпусе.

Длительное нажатие и удержание кнопки *MODE* включает и/или отключает устройство.

Повторное нажатие кнопки *MODE* позволяет выбрать режим:

Режим 1 *RF-лифтинг*: RF-лифтинг + красный свет + инфракрасный свет (светодиоды загораются красным светом; ближний диапазон).

Режим 2 *Электромиостимуляция*: EMS + красный свет (светодиоды загораются красным светом).

Режим 3 *Успокаивающий массаж*: Охлаждение + синий свет (светодиоды загораются синим светом).

На корпусе прибора есть также индикаторы уровня мощности.

Регулировать уровень мощности режимов *RF-лифтинга* и *Электромиостимуляции* можно с помощью кнопки *LEVEL*, где 1 — малый; 2 — средний; 3 — большой уровень мощности.

Индикатор состояния прибора:

В рабочем режиме индикатор постоянно горит белым светом.

Во время зарядки индикатор мигает красным цветом, а после ее завершения переключается на белый.

После сигнала низкого заряда цвет подсветки

кнопки меняется с белого на красный. Когда батарея полностью разряжается, красный индикатор быстро вспыхивает 5 раз, после чего прибор автоматически отключается.

Ультрафиолетовая стерилизация светодиодной УФ-лампой:

В зарядной базе прибора находится ультрафиолетовый светодиодный стерилизатор. Таким образом во время зарядки устройства его рабочая поверхность автоматически дезинфицируется.

Зарядка прибора

От компьютера

Установите прибор на зарядную станцию рабочей поверхностью вниз. Включите компьютер и затем подсоедините к нему зарядную станцию прибора при помощи USB кабеля. Индикатор состояния прибора во время зарядки мигает красным светом. После завершения зарядки индикатор на корпусе загорится белым светом. Отсоедините прибор от источника питания, когда прибор полностью зарядится.

От розетки

Установите прибор на зарядную станцию рабочей поверхностью вниз. Подсоедините зарядную базу с помощью кабеля к адаптеру (входит в комплект поставки), затем подсоедините адаптер в розетку. Индикатор состояния прибора во время зарядки мигает красным светом. После завершения зарядки индикатор на корпусе загорится белым светом. Отсоедините прибор от источника питания, когда прибор полностью зарядится.

Проведение процедур

Функции аппарата

RF-лифтинг

Популярный и эффективный метод безоперационной подтяжки лица.

Принцип действия данной процедуры заключается в нагревании дермы и подкожно-жировой клетчатки токами радиоволновой частоты. Температура нагрева комфортна для верхних слоев кожи и позволяет избежать ожогов, но достаточна, чтобы нагреть дерму и подкожную клетчатку, достигая эффекта омоложения. Благодаря такому нагреву улучшается тургор кожи, а также стимулируется выработка коллагена и эластина. Данная процедура позволяет разгладить морщины, подтянуть овал лица и уменьшить отеки. Процедура RF-лифтинга имеет накопительный эффект, поэтому видимый результат проведения одной процедуры усиливается в течение прохождения курса, а затем сохраняется.

LED-воздействие в инфракрасном диапазоне

LED-воздействие (или световое воздействие) в инфракрасном диапазоне приводит к локальному нагреву кожного покрова. Инфракрасное излучение увеличивает приток крови в тканях и отток лимфы, в ткани поступает больше питательных элементов, веществ, кислорода, благодаря чему активизируется

клеточный метаболизм кожи и подкожной клетчатки. В результате улучшается тонус лица и эластичность кожного покрова.

LED-воздействие красным светом

Красный свет стимулирует синтез коллагена, способствует выравниванию тона кожи и улучшает цвет лица.

Он также уменьшает покраснения и воспаления. Кроме того, LED-воздействие красным светом повышает устойчивость кожи к воздействию агрессивных внешних факторов. Данная процедура также тонизирует, улучшает способность клеток удерживать влагу. Помимо вышеперечисленного одним из положительных эффектов воздействия на кожу красным светом является активизация восстановительных процессов клеток кожи.

Электромиостимуляция

Данная процедура является одной из самых популярных и эффективных омолаживающих процедур. В ходе данной процедуры импульсные токи воздействуют на мышцы лица. Благодаря этому улучшается кровообращение, снимаются отеки, устраняется дряблость тканей. В результате разглаживаются морщины, укрепляется и подтягивается овал лица, усиливается четкость контуров.

Охлаждение

Данная функция успокаивает и охлаждает кожу, уменьшает покраснение, раздражение и мышечное напряжение, улучшает микроциркуляцию крови. В ходе данной процедуры снижается отечность, сужаются поры, овал лица подтягивается, и лицо приобретает свежий и отдохнувший вид.

LED-воздействие синим светом

LED-воздействие синим светом является одним из самых эффективных методов в борьбе с проблемной кожей. Данный вид света эффективно устраняет воспаления, поэтому его часто используют для борьбы с акне и в уходе за проблемной кожей, склонной к высыпаниям. Кроме того, синий свет способствует сужению пор и разглаживанию морщин, стимулирует энергетический обмен в тканях.

Внимание


Во время проведения процедур RF-лифтинга и электромиостимуляции кожа лица не должна быть сухой, используйте специальные косметические средства и гели для создания контактной среды и улучшения скольжения рабочей поверхности аппарата.

RF-лифтинг

В режиме *RF-лифтинга* включаются функции RF-лифтинга, LED-воздействия инфракрасным и красным светом.

Этапы проведения процедуры

1. Очистите кожу лица от макияжа и загрязнений.
2. Нажмите и удерживайте кнопку *MODE*, чтобы включить аппарат. Автоматически включится режим *RF-лифтинга*. Рабочая поверхность аппарата загорится красным светом. Нажмите кнопку *LEVEL* для выбора и изменения уровня мощности.
3. Нанесите контактный токопроводящий гель на манипулу. При высыхании геля на коже лица в процессе процедуры допустимо смачивание его водой.
4. Плавными движениями от центра к периферии обработайте прибором кожу лица, шеи и декольте, перемещая манипулу снизу вверх как на рисунке слева. Перемещайте устройство по коже в направлении, показанном стрелками.

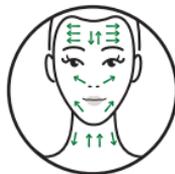

Рекомендуем использовать контактный гель для микротоковых процедур и RF-лифтинга ReadySkin Care Lifting Gel.

Рекомендации к процедуре

Плавно перемещайте прибор, как показано на схеме для режима «RF-лифтинга». Если вы чувствуете жжение, перемещайте прибор быстрее. Если на каком-либо участке вы явно ощущаете дискомфорт от тепла, перейдите к следующему участку.

Используйте режим «Успокаивающего массажа» после проведения процедуры.

5. После завершения процедуры смойте остатки контактного геля. Если дальнейшие процедуры с аппаратом не планируются, вы можете нанести любимое средство для ухода за кожей.

Примечание

Автоматическое время работы прибора в режиме «RF-лифтинга»: 8 минут.

После завершения работы в режиме «RF-лифтинга» устройство автоматически переходит в режим ожидания.

EMS (Электромиостимуляция)

В режиме EMS включаются функции электромиостимуляции и LED-воздействия красным светом.

Этапы проведения процедуры

1. Очистите кожу лица от макияжа и загрязнений.
2. Нажмите и удерживайте кнопку MODE, чтобы включить аппарат. Автоматически включится режим RF-лифтинга. Нажмите повторно кнопку MODE, чтобы перейти в режим EMS. Рабочая поверхность аппарата загорится красным светом. Нажмите кнопку LEVEL для выбора и изменения уровня мощности.
3. Нанесите контактный токопроводящий гель на манипулу. При высыхании геля на коже лица в процессе процедуры допустимо смачивание его водой.
4. Перемещайте прибор круговыми движениями, как показано на схеме для режима EMS. Перемещайте устройство по коже в направлении, показанном стрелками.
5. После завершения процедуры смойте остатки контактного геля. Если дальнейшие процедуры с аппаратом не планируются, вы можете нанести любимое средство для ухода за кожей.

Данный режим можно также использовать с уходовыми средствами на немасляной основе для их лучшего проникновения в кожу.

Используйте режим «Успокаивающего массажа» после проведения процедуры.



Примечание

Время работы в режиме «EMS»: 6 минут.


После завершения работы в режиме «EMS» устройство автоматически переходит в режим ожидания.

Успокаивающий массаж

В данном режиме включаются функции контактного охлаждения и LED-воздействия синим светом.

Этапы проведения процедуры

1. Очистите кожу, рабочую поверхность и электроды прибора от излишков геля.
2. Нажмите и удерживайте кнопку *MODE*, чтобы включить аппарат. Автоматически включится режим *RF-лифтинга*. Нажмите повторно кнопку *MODE*, чтобы перейти в режим *Успокаивающего массажа*. Рабочая поверхность аппарата загорится синим светом.
3. Перемещайте прибор, прикладывая к обрабатываемым участкам, повторяя последовательность «прижать-отпустить-перенести».
4. После завершения процедуры вы можете нанести любимое средство для ухода за кожей.

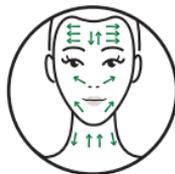

Примечание

Автоматическое время работы в режиме «Успокаивающего массажа»: 3 мин.

Устройство автоматически отключается, если в течение 3 минут не нажата ни одна кнопка.

Рекомендации по использованию прибора

1. При уходе за кожей обязательно перемещайте аппарат. Длительная обработка кожи в одной точке может привести к ожогу.
2. В режиме *RF-лифтинга/EMS* плавно перемещайте аппарат со скоростью 2 см в секунду.
3. Интенсивность ощущений зависит от индивидуальной чувствительности кожи.
4. Не используйте режим *RF-лифтинга/EMS* в зоне верхнего века.
5. Не направляйте светодиоды прямо в глаза.

В процессе обработки кожи аппаратом вы можете почувствовать легкое покалывание или легкий дискомфорт. Во время работы наблюдайте за ощущениями и состоянием кожи. При появлении ощутимого дискомфорта следует остановить процедуру и выключить аппарат, если почувствуете боль — стоит незамедлительно обратиться к врачу.

Для максимальной эффективности процедур и быстрого достижения видимого результата прибор следует использовать регулярно курсами в соответствии с рекомендациями в данном руководстве.

Эффект от процедур является накопительным и усиливается в течение 2-4 недель. Необходимое количество процедур зависит от состояния кожи и

Курсовое применения аппарата

Режим	Функции	Частота использования
RF - лифтинг	RF-лифтинг + инфракрасный свет + красный свет	2-3 раза в неделю на постоянной основе. Рекомендованы перерывы 1-2 недели
EMS	Электромиостимуляция + красный свет	2-3 раза в неделю на постоянной основе. Рекомендованы перерывы 1-2 недели
Успокаивающий массаж	Контактное охлаждение + синий свет	Используется как самостоятельная процедура, а также в качестве завершения после процедур RF-лифтинга и электромиостимуляции.

подкожно-жирового слоя. Рекомендуем проводить процедуры со специализированными косметическими средствами.

Режим *RF-лифтинга* и режим *EMS (электромиостимуляции)* рекомендуется использовать 2-3 раза в неделю с перерывом не менее 1 дня.

Внимание

Фирма-производитель и торгующая организация не несут никакой ответственности за последствия

применения аппарата, вызванные нарушением текущих правил эксплуатации или несоблюдением методик проведения процедур.

Обслуживание аппарата

Перед началом и после окончания каждой процедуры необходимо проводить антисептическую обработку рабочей поверхности прибора при помощи мягкой салфетки, смоченной в антисептическом растворе (70% раствор спирта, хлоргексидин, перекись водорода). Периодически протирайте корпус прибора мягкой салфеткой, слегка увлажненной нейтральным моющим средством (прибор при этом должен быть выключен).

После проведения процедур держите прибор на зарядной базе с встроенным автоматическим УФ-стерилизатором для дезинфекции аппарата.

Время стерилизации прибора: \approx 10-20 минут.

Внимание

Антисептическое средство и прочие жидкости не должны попадать внутрь пластикового корпуса прибора. Используйте салфетки с умеренным количеством средства.

Запрещается:

- погружать прибор в жидкость;
- использовать для протирки аппликаторов и корпуса агрессивные средства и растворители;
- применять салфетки с жестким ворсом или абразивным слоем;
- подвергать аппарат сильному механическому воздействию.

Часто задаваемые вопросы

Вопрос

Сколько геля нужно использовать за одну процедуру?

Ответ

Конструкция этого аппарата требует применения геля в режиме *RF-лифтинга* и режиме *EMS* для обеспечения скольжения. При нанесении геля следует исходить из легкости перемещения прибора по коже и отрыва от нее; если движение затруднено, нанесите больше геля или смочите лицо водой.

Можно ли использовать прибор в ванной комнате?

Это влагозащищенный аппарат, которым можно пользоваться в ванной комнате. Не допускать погружения прибора под воду.

Что делать, если во время процедуры краснеет кожа?

Этот эффект вызван радиочастотным нагревом. В случае неприятных ощущений можно использовать режим *Успокаивающего массажа* или другие способы, охлаждающие кожу.

Что делать при ощущении покалывания на лице?

Покалывание возникает из-за микро-токов при электромиостимуляции. Покалывание является нормальным и допустимым ощущением. Для уменьшения покалывания можно отрегулировать уровень мощности соответствующей кнопкой *LEVEL*. Используйте уровень мощности, который вам подходит. Во время первой процедуры или в период адаптации включите первый уровень мощности прибора.

Почему я не чувствую тепло в режиме *RF-лифтинга* с красным светом?

Попробуйте перемещать аппарат медленнее или сильнее прижимать его к коже. Возможно, вы нанесли недостаточно геля — добавьте гель.

Почему поверхность RF электродов не теплая?

Нагрев происходит не за счет поверхности электродов, а за счет электрического воздействия на подкожный слой — это нормальная ситуация.

Устранение неполадок

Если неисправность не удаётся решить самостоятельно, необходимо обратиться к продавцу изделия или на горячую линию импортера

по телефону
8 800 755-56-29

или e-mail
garotdel@mail.ru

Признаки	Возможные причины	Решение
Устройство не включается	Вы недостаточно долго удерживали кнопку вкл/выкл прибора <i>MODE</i>	Нажмите и удерживайте кнопку <i>MODE</i> в течение 3 секунд, чтобы включить прибор
	Устройство заряжается	Для использования снимите с зарядного устройства
	Батарея разряжена	Подключите прибор к зарядному устройству
После зарядки прибор работает всего несколько минут	Батарея разряжена	Подключите прибор к зарядному устройству
	Истек срок службы батареи	Обратитесь в организацию продавца
	Вы нажали не ту кнопку	Нажмите и удерживайте кнопку <i>MODE</i> в течение 3 секунд, чтобы включить прибор
Прибор не заряжается (индикатор зарядки не мигает)	Режим ожидания / автоматическое отключение	Нажмите и удерживайте кнопку <i>MODE</i> в течение 3 секунд, чтобы включить прибор
	Адаптер питания не полностью вставлен в розетку	Полностью вставьте адаптер питания в розетку
Прибор не заряжается (индикатор зарядки не мигает)	Адаптер питания не полностью вставлен в прибор	Полностью вставьте адаптер питания в прибор

Прибор нагревается	Длительное применение	Отключите питание и не используйте прибор в течение 1 часа
В режиме <i>Успокаивающего массажа</i> отсутствует ощущение прохлады	Длительное применение режима <i>Успокаивающего массажа</i> Прибор используется за пределами рекомендованного диапазона комнатной температуры	Отключите питание и не используйте прибор в течение 30 минут Используйте прибор при комнатной температуре от +15 до +30 °C
Слишком сильная электромиостимуляция (ощущение покалывания)	Установлена слишком высокая мощность Кожа обезвожена или слишком сухая	Установите нужный уровень мощности с помощью соответствующей кнопки <i>LEVEL</i> Перед процедурой увлажните кожу мицеллярной водой или увлажняющим средством
Нет ощущений в режиме <i>Электромиостимуляции</i>	Прибор не касается кожи, либо слишком низкая мощность	Прижмите манипулу к коже и отрегулируйте мощность с помощью соответствующей кнопки <i>LEVEL</i>
Слишком высокая температура в <i>RF-лифтинга</i>	Обработка одного участка кожи длительное время Слишком медленное перемещение прибора	Не оставляйте манипулу на одном участке кожи длительное время Перемещайте прибор быстрее

Нет ощущения тепла
в *RF-лифтинга*

Прибор в режиме ожидания / автоматическое отключение

Нажмите и удерживайте кнопку *MODE* в течение 3 секунд, чтобы включить прибор

Кожа обезвожена или слишком сухая

Перед процедурой увлажните кожу мицеллярной водой или увлажняющим средством

Слишком быстрое перемещение прибора

Перемещайте прибор медленнее

Правила ухода за прибором

Очищайте косметологический аппарат до и после каждой процедуры.

1. Отключите прибор и отсоедините зарядное устройство.
2. Очистите поверхность электродов дезинфицирующим средством.

Если прибор долгое время не используется, очистите его и уберите в надежное место.


Не ставьте косметологический аппарат рядом с микроволновыми печами и другими нагревательными приборами, в помещениях с высокой температурой и влажностью, а также под прямым солнечным светом.

Аппарат должен находиться в месте, недоступном для детей.

Технические характеристики

Модель	Eva
Частота	1 МГц
Температура нагрева подкожного слоя	43 °С
Мощность RF воздействия	3 Вт
Сила тока EMS	200 мА
Длина волны инфракрасного света	850 нм
Длина волны красного света	630 нм
Длина волны синего света	470 нм
Емкость аккумулятора	1400 мАч
Входное напряжение устройства	5 В / 1 А
Питание	Встроенный аккумулятор
Входное напряжение адаптера питания	100-240В
Номинальное напряжение/мощность	3,7 В / 8,4 Вт
Размеры изделия	192x90x80 мм
Время зарядки	до 3 часов


Комплектация

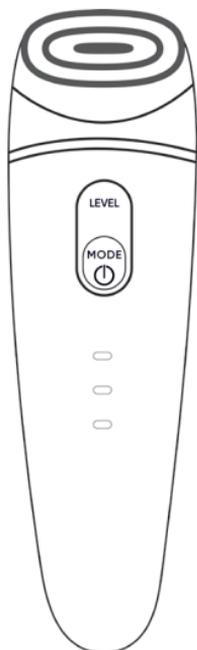

Косметологический аппарат для антивозрастных процедур Readyskin Eva



Зарядное устройство со встроенным автоматическим УФ-стерилизатором

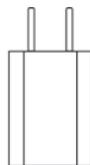

Адаптер зарядного устройства



Руководство по эксплуатации

Правила хранения и реализации

Изделие должно храниться в отапливаемом помещении при температуре воздуха от +5 до +40° и относительной влажности воздуха до 80%.

В помещениях, где хранятся изделия, не должно быть паров кислот, щелочей и других химически активных веществ, пары или газы которых могут вызвать коррозию. Реализация осуществляется в соответствии с договорами на поставку.

Правила транспортировки

Изделие и носители данных в упаковке могут транспортироваться автомобильным, железнодорожным и авиационным (в герметизированных отсеках) видами транспорта на любое расстояние, при условии защиты их от грязи и атмосферных осадков.

Транспортировка по железной дороге должна осуществляться в крытых вагонах, а при перевозке в открытых вагонах — в контейнерах.

Размещение и крепление транспортной тары с упакованными изделиями в транспортных средствах должны обеспечивать ее устойчивое положение и не допускать перемещения во время транспортировки.

Сертификация и гарантия

Гарантийный период на изделие ReadySkin Eva составляет 12 месяцев с даты получения товара.

Сертификация ReadySkin Eva соответствует требованиям технических регламентов таможенного союза 020/2011, 004/2011 и технического регламента ЕАЭС 037/2016.

Гарантия действует при условии соблюдения следующих условий:

- не нарушены правила и условия эксплуатации, изложенные в документации, передаваемой потребителю в комплекте с изделием;
- отсутствуют механические повреждения, следы некавалифицированного ремонта, изменений конструкции или схемы изделия, возникшие после передачи товара потребителю;
- отсутствуют повреждения или неисправности, вызванные пожаром, молнией или другими природными явлениями, умышленными или неосторожными действиями, небрежным обращением, воздействием высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и пр.
- наличие целостной маркировки с серийным номером и моделью изделия.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы (например, аккумуляторы), детали отделки и корпуса, аксессуары и прочие детали, обладающие ограниченным сроком использования, а также на документацию, прилагаемую к изделию.



Надлежащая утилизация продукта

Этот символ на продукте или описании к нему указывает, что данный продукт не подлежит утилизации вместе с другими домашними отходами по окончании срока службы.

Для предотвращения возможного ущерба для окружающей среды или здоровья человека вследствие неконтролируемой утилизации отходов, пожалуйста, отделите этот продукт от других типов отходов и утилизируйте его надлежащим образом для рационального повторного использования материальных ресурсов.

Домашним потребителям следует связаться с розничным торговым представителем, у которого продукт был приобретен, или местным органом власти, для получения подробной информации о том, куда и как доставить данный прибор для экологически безопасной переработки. Промышленным потребителям следует связаться с поставщиком и проверить сроки и условия контракта на закупку. Данный продукт не следует утилизировать.

Производитель

«Olansi Healthcare Co., Ltd.» Сделано в КНР

Адрес завода-изготовителя

Haiyi Street No.1 2#2nd floor, Lanhe Village, Nansha District, Guangzhou, Guangdong, China

Уполномоченное изготовителем лицо (импортер)

ООО «Р-Дистрибуция». Адрес: 195267, Санкт-Петербург, Просвещения пр-кт, дом № 86, корпус 1, офис 12-Н

39

Горячая линия

8 800 775-56-29 звонок по России бесплатный

Дата производства

3 кв. 2023 г.





ReadySkin



readyskin.su

EAC