


print info

Print area: 400*140mm
 Fold size: 100*140 mm
 Paper: 128 g / uncoated paper

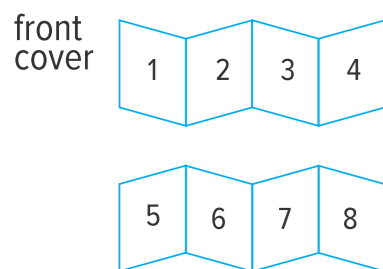

МАССАЖЕР ДЛЯ ГЛАЗ

ID: SD-MSE1

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку. Перед эксплуатацией устройства прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем. Правильное использование значительно продлит срок его службы.

1

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Кнопка питания (Вкл./Выкл./Регулировка режимов)
2. Кнопка регулировки температуры
3. Низкая температура
4. Средняя температура
5. Высокая температура
6. Индикатор вибрации
7. Индикатор Bluetooth-подключения
8. Индикатор заряда батареи
9. Корпус устройства
10. Ремешок для головы



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Мощность устройства: 5 Вт
 Питание: от встроенного аккумулятора
 Вход: microUSB 5B/1A
 Емкость встроенного аккумулятора: 1000 мАч / 3.7В
 Количество режимов: 3
 Материал: пластик, полиэстер
 Комплектация: устройство, документация, USB-кабель

2

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Включение устройства

Нажмите и держите кнопку питания (1), загоревшийся LED-индикатор подтвердит включение.

Выключение

Нажмите и держите кнопку питания (1), погасший LED-индикатор подтвердит выключение.

Управление режимами работы

Устройство обладает тремя различными режимами работы: Auto, Vitality, и Sleep.

Режим	Согревающий массаж	Вибрация	Проигрывание музыки
Режим «Auto»	+	+	+
Режим «Vitality»		+	+
Режим «Sleep»	+		+

Для последовательного переключения режимов работы коротко нажимайте на кнопку питания/переключения режимов (1). Звуковой сигнал подтвердит переключение режима работы.

Последовательное изменение температуры осуществляется коротким нажатием кнопки регулировки температуры (2).

Регулировка громкости осуществляется длинным нажатием кнопки регулировки температуры (2).

Соприжение с внешним устройством по bluetooth

Убедитесь, что устройство включено и откройте настройки Bluetooth на мобильном устройстве/компьютере, активируйте функцию Bluetooth и запустите поиск устройств. Когда ваше устройство найдет массажер, подтвердите подключение. Система может вывести на экран диалоговое окно, в котором необходимо ввести цифры «1234» или «000», или другие для создания пары.

После создания пары между вашим устройством и массажером можно наслаждаться любимой музыкой. Вы можете контролировать воспроизведение на своем устройстве.

Зарядка аккумулятора

Перед первым использованием рекомендуется полностью зарядить аккумулятор. Новый аккумулятор требует 2-3 цикла полного заряда-разряда для достижения максимальной емкости. Выключите устройство и подключите USB кабель к micro-USB разъему. Затем подсоедините USB кабель к персональному компьютеру, либо к зарядному устройству «USB-сеть» (зарядное устройство в комплект не входит).

3

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Данное устройство не заменяет лечение или рекомендации специалистов. При необходимости проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом перед использованием устройства.
2. Не используйте устройство на сухой коже. Перед использованием протрите места контакта на коже влажным полотенцем.
3. Устройство разработано для массажа в области глаз. Не пытайтесь использовать устройство для массажа других частей тела.
4. Устройство не предназначено для использования людьми с ограниченными способностями без присмотра ответственного лица.
5. Если вы перенесли инсульт или страдаете от гипертонии/гипотонии – обязательно проконсультируйтесь с врачом перед использованием устройства.
6. Не используйте устройство после употребления алкоголя, на голодный желудок, сразу после физических нагрузок, во время вождения.
7. Если вы почувствовали дискомфорт во время использования устройства – немедленно прекратите использование
8. Не используйте прибор, если у Вас присутствует хотя бы одна из перечисленных проблем:
 - отеки, воспаления, застои крови, открытые раны в области контакта устройства с кожей;
 - у вас серьезное повреждение кожи или кожная болезнь.
 - у вас плохое физическое состояние;
 - вы перенесли операции на глазах;
 - если вы страдаете от глаукомы, катаракты, отслойки сетчатки или других глазных заболеваний
9. Перед использованием убедитесь, что вы не в контактных линзах.
10. Не рекомендуется к использованию беременными, кормящими женщинами, детьми и людьми преклонного возраста. Перед использованием необходимо проконсультироваться с врачом
11. Перед подзарядкой аккумулятора убедитесь, что напряжение питания составляет 5В. Рекомендуемый адаптер 5B/1A
12. Если устройство не используется в течение длительного времени, заряжайте его раз в месяц.
13. Не пытайтесь в случае поломки открыть корпус устройства и отремонтировать его самостоятельно, обратитесь в сервисный центр.
14. Избегайте воздействия на устройство повышенной влажности, пыли и грязи. Используйте для очистки сухую мягкую безворсовую ткань. Запрещается использовать для этой цели какие-либо моющие или чистящие жидкости.
15. Не храните, не используйте устройство и не заряжайте аккумулятор рядом с источниками тепла и легковоспламеняющимися предметами, при повышенной или пониженной температуре. Зарядка может производиться только под наблюдением взрослого. Рекомендуется использовать устройство при температуре от 5 до 35 °С.
16. Не допускайте падения устройства и не подвергайте его сильным ударам.

4

17. Избегайте попадания посторонних предметов в отверстия и разъемы на корпусе устройства.
18. Обязательно выключайте устройство после использования.
19. При отсоединении кабеля от зарядного порта никогда не тяните за шнур, держитесь за штекер.
20. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
21. Стандартный ресурс аккумулятора составляет 500 циклов заряда-разряда. После превышения 500 циклов эффективная емкость аккумулятора может снижаться.
22. Эффективность хранения и передачи энергии аккумулятора зависит от температуры окружающей среды.
23. Не разбирайте устройство, не подвергайте его сильному нагреванию и не кладите его в воду, так как это может привести к нагреванию аккумулятора с большим выделением тепла.
24. Чтобы гарантировать достаточную вентиляцию и нормальную работу устройства, никогда не накрывайте работающее устройство тканью или другим материалом, так как недостаточная вентиляция может вызвать перегрев и/или сокращение срока службы изделия.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Храните в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Храните устройство в недоступном для детей месте. Не кусайте и не облизывайте устройство, это может привести к повреждению или взрыву устройства. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством.

Не утилизируйте электрические устройства в неотсортированные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные устройства выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанося вред здоровью и благополучию.

5

Назначение товара: массажер для глаз. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях. Используется для массажа в области глаз посредством электрических импульсов и нагрева. Ограничения при использовании описаны в руководстве пользователя. Изделие содержит встроенный аккумулятор. Перед транспортировкой обратитесь к местным органам власти / перевозчику для уточнения правил и условий перевозки. Товарный знак / торговая марка: SecretDate. Импортёр: ООО «Элко Рус», адрес: 143441, Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, улица 69 км МКАД, стр. 7, офис 506. Претензии от покупателей принимает ИМПОРТЕР. Уполномоченное изготовителем лицо: ООО "Ромбика". Адрес: Россия, 115054, г. Москва, Пятницкая ул, д. 7/15, строение 2, этаж 5, офис 500. Произведено: Китай. info@rombica.ru. Техническая поддержка – support@rombica.ru. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара: четвертый и пятый символы серийного номера обозначают месяц производства, шестой и седьмой символы – год производства соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку. Соответствует требованиям: TP TC 020/2011, TP EAЭС 037/2016.



6

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Условия гарантийных обязательств

1. Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ.
 2. Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия: элементы питания, кабели, переходники, адаптеры, чехлы, ремни, документация.
 3. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушения условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Руководстве пользователя и другой документации; если изделие имеет след попыток некавалифицированного ремонта; если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем; если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.
 4. Производитель не несет ответственность за возможный вред изделия, прямо или косвенно нанесенный людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) и/или третьих лиц. Также, не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации.
- ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ – РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 СРОК ГАРАНТИИ – 12 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ
 СРОК СЛУЖБЫ – 24 МЕСЯЦА

При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара, четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц производства, шестая и седьмая цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку и устройство. Информацию о работе технической службы по гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: support@rombica.ru. Полный список адресов технических центров производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombica.ru

7

Изделие _____
 Модель _____
 Дата продажи _____
 Серийный номер _____



Настоящим утверждаю проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а). С нижеизложенными условиями гарантии согласен(а).

ФИО Покупателя, подпись _____

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

№	дата	код ремонта	сервис	мастер	клиент

8