

МАССАЖЕР ДЛЯ НОГ AMG719



GÉZATONE

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

GEZATONE

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции марки Gezatone и поздравляем с удачной покупкой!

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации изделия и сохраните ее на будущее!

Массажер для ног Gezatone «SKY STEPS», модель AMG719 - это инновационный прибор, который сочетает в себе функции разминающего массажа, прессотерапии и восстанавливающего массажа Шиацу. Такой интенсивный глубокий массаж благотворно влияет на здоровье всего организма, стимулирует акупунктурные точки, расположенные на стопе, улучшает кровообращение, снимает усталость, улучшает самочувствие и настроение.

Благодаря массажу Шиацу снимается напряжение в мышцах и суставах, восстанавливается нормальное кровоснабжение, стимулируется вывод застоявшейся жидкости.

Воздействие роликами на активные точки стопы производит эффект рефлексотерапии, открывает энергетические каналы, способствует восстановлению общей работоспособности, снимает дискомфорт и усталость ног.

Прессмассаж - методика воздействия на кожу и подкожные ткани с помощью давления воздуха, которое усиливает приток крови к тканям, помогает снять напряжение мышц, улучшает работу сосудов, превосходно снимает отеки.

Тепловое воздействие улучшает местное кровообращение, стимулирует работу сосудов, устраняет дискомфорт в суставах и мышцах. Используйте массажер Gezatone «SKY STEPS», модель AMG719 всего 15 минут в день, и Вы почувствуете улучшение общего самочувствия и настроения!

ПРЕИМУЩЕСТВА МАССАЖЕРА

1. Прессмассаж снимает спазм мышц и усталость ног.
2. Массаж Шиацу воздействует на акупунктурные точки стопы, что дает общий оздоравливающий эффект.
3. Регулярный массаж улучшает самочувствие и настроение.
4. Использование массажера для ног является прекрасной профилактикой варикоза и заболеваний суставов.
5. Прогревание устраняет дискомфорт в мышцах и суставах.
6. Массаж стоп – это идеальный способ расслабиться и снять напряжение после тяжелого дня.
7. Возможность выбрать режим работы и настроить прибор, как это удобно Вам!

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ


Нельзя использовать массажер для ног:

- Во время беременности.
- Людям с электронными медицинскими устройствами в организме, как, например, кардиостимулятор.
- При туберкулезе.
- При онкологических заболеваниях.
- При флебите или тромбозе вен.
- При диабете.
- При заболевании кожи.
- При наличии медицинских искусственных частей ног, имплантатов или винтов внутри.
- При дисфункции суставов, как, например, ревматизм, молоткообразный палец стопы, подагра или остеопороз.
- При высоком риске развития повышенной свертываемости крови вследствие каких-либо причин.
- При наличии хронических заболеваний, не упомянутых в этом разделе, перед использованием прибора необходимо проконсультироваться с врачом.
- Необходимо наблюдение ответственного лица при использовании прибора людьми со сниженными физическими или умственными способностями и низкой чувствительностью и детьми моложе 12 лет.




При проведении процедуры ноги необходимо расположить так, чтобы ступня каждой ноги была перпендикулярна голени. Массаж должен быть умеренно сильным, приятным и успокаивающим. Если Вы почувствуете боль или дискомфорт, сразу же прекратите процедуру и проконсультируйтесь со специалистом.

ВНЕШНИЙ ВИД ПРИБОРА

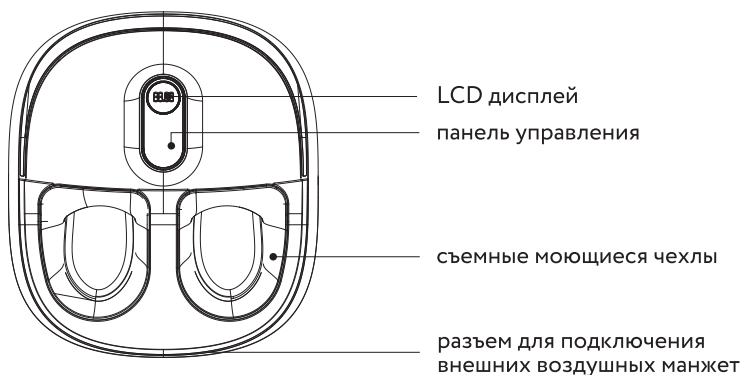

внешние
воздушные манжеты

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ПРИБОРА

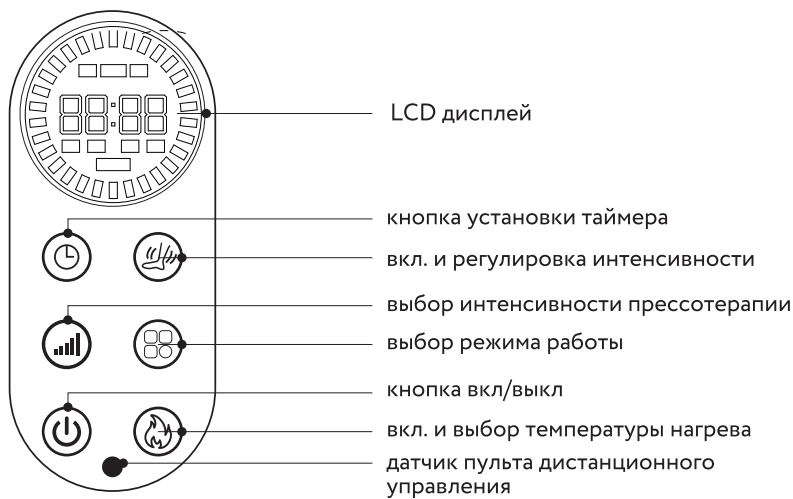

КНОПКИ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ



Кнопка вкл/выкл.



Кнопка подогрева. Коротким нажатием включите функцию подогрева, на экране появится надпись «Heat». Всего 2 режима подогрева - пониженный (H1) и повышенный (H2). По умолчанию включается повышенный подогрев (H2). Переключайтесь между режимами коротким нажатием на кнопку подогрева. Режим H0 – подогрев выключен (надпись Heat пропадает).





Кнопка таймера. Выберите время проведения массажа короткими нажатиями на кнопку. Время меняется от 5 до 30 минут с шагом в 5 минут. По умолчанию массаж длится 15 минут, после чего прибор автоматически отключается.



Кнопка включения и выбора интенсивности массажа икр с помощью внешних воздушных манжет. Нажмите на кнопку, чтобы активировать режим массажа икр и выберите режим интенсивности коротким нажатием на кнопку (на дисплее появляется надпись «Leg»). Всего 3 режима на выбор: малая интенсивность (F1), средняя интенсивность (F2), высокая интенсивность (F3). F0 – массаж икр выключен (надпись Leg пропадает). Режимы переключаются по кругу. По умолчанию включается режим средней интенсивности (F1).

ВНИМАНИЕ! Перед включением режима массажа икр подключите внешние манжеты к прибору так, как показано на рисунке:

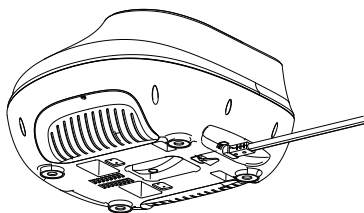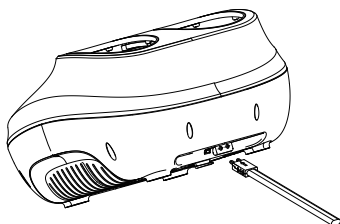


Переключение режимов массажа. Всего 5 режимов на выбор:
P1 – прессотерапия +роликовый массаж с прерывистым давлением на ступню, ролики меняют направление вращения каждые 60 сек.
P2 – прессотерапия+роликовый массаж прерывистым давлением на ступню, ролики меняют направление вращения каждые 30 сек.
P3 – прессотерапия +роликовый массаж с прерывистым давлением на ступню, ролики меняют направление вращения каждые 10 сек.
P4 – роликовый массаж, ролики меняют направление вращения каждые 60 сек. В этом режиме работает только роликовый массаж, прессотерапия отключена.
P5 – только прессотерапия, роликовый массаж отключен.



Выберите уровень давления прессотерапии. Всего на выбор 9 уровней прессотерапии, с L1 по L9. Коротким нажатием на кнопку переключайтесь с 1 по 9 уровень с нарастающей интенсивностью. При включении прибора по умолчанию выбран уровень L5. Рекомендация: Уровни с L1 по L3 больше подойдут для пожилых людей и тех, кто предпочитает менее интенсивный массаж. Уровни с L4 по L6 - массаж средней интенсивности, подходит для большинства людей. Уровни с L7 по L9 – для тех, кто предпочитает более интенсивный массаж.

ВНИМАНИЕ: при проведении массажа **ЗАПРЕЩЕНО** вставать, опираясь ногами на массажер. Это приведет к его механическому повреждению и выходу из строя.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

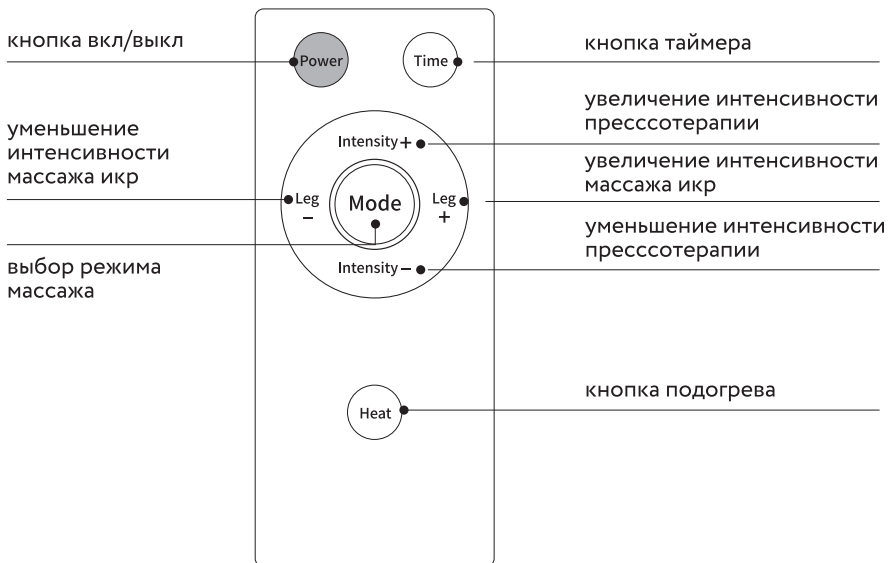

Кнопки пульта дистанционного управления дублируют кнопки панели управления прибора. Пользоваться пультом ДУ можно на расстоянии до 1,5м, наводя его в сторону датчика на панели управления прибора. Для работы пульта ДУ нужны 2 батарейки 1,5В AAA (в комплект не входят).

ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ


1. Убедитесь, что прибор не имеет механических повреждений. Установите прибор на твердую ровную поверхность и включите его в электрическую сеть. При необходимости подключите внешние воздушные манжеты. На экране появится надпись OFF, это значит, что прибор подключен и готов к использованию.
2. Сядьте рядом с прибором и поместите ноги в предназначенные для этого отверстия прибора. Не вставайте, когда ноги находятся внутри прибора, это неминуемо приведет к его выходу из строя.
3. Включите прибор нажатием на кнопку «Вкл/выкл» . По умолчанию выбран режим массажа P1, время процедуры 15 минут, интенсивность прессотерапии L5.
4. Во время процедуры вы можете менять программу массажа, интенсивность прессотерапии, пользоваться внешними воздушными манжетами для массажа икр, включать и отключать подогрев, а также менять время проведения процедуры.
5. После окончания времени проведения массажа прибор отключится. Также вы можете отключить прибор в любое время, нажав на кнопку «вкл/-выкл».

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Располагайте ноги так, чтобы ступни были перпендикулярны голням. Подключайте массажер к сети переменного тока, соответствующей указанным техническим характеристикам.
- Не вставляйте и не вынимайте вилку из розетки мокрыми руками. Ни в коем случае не оставляйте прибор без присмотра во включенном состоянии.
- Не пользуйтесь массажером под одеялом и не накрывайте чем-либо во время использования (например, подушкой).
- Данный массажер предназначен только для использования внутри помещений.
- Не вставайте и не садитесь на массажер! Запрещается вставать, когда Ваши ступни находятся внутри массажера, даже если массажер выключен!
- Не роняйте и не вставляйте посторонние предметы в открытые части прибора.
- Ни в коем случае не используйте массажер с поврежденным шнуром или вилкой.
- Не используйте с мокрыми ступнями.
- Не спите во время работы массажера.

УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Всегда отключайте массажер от розетки сразу после использования, перед чисткой и техническим обслуживанием.
- Не используйте для чистки разъедающие вещества, такие как бензин, ацетон и прочие растворители.
- Для чистки поверхности массажера пользуйтесь только мягкой сухой тканью.
- Если массажер не используется долгое время, свободно оберните шнур вокруг прибора и заверните его в ткань для защиты от пыли.
- Храните аппарат в чистом сухом месте.
- Не располагайте массажер вблизи предметов, излучающих сильное тепло, таких как нагреватели, печи, солнечные лучи.
- Обращайтесь с массажером аккуратно, избегайте сильного давления и воздействия на корпус и места для постановки ступней.
- В случае возникновения неисправностей обратитесь в уполномоченный сервисный центр. Не пытайтесь самостоятельно разбирать и ремонтировать массажер!
- Матерчатые чехлы прибора можно снимать и стирать в теплой воде с мыльным раствором. Для этого расстегните молнию на чехлах и аккуратно снимите их. После стирки чехлы поместите обратно и застегните молнию.

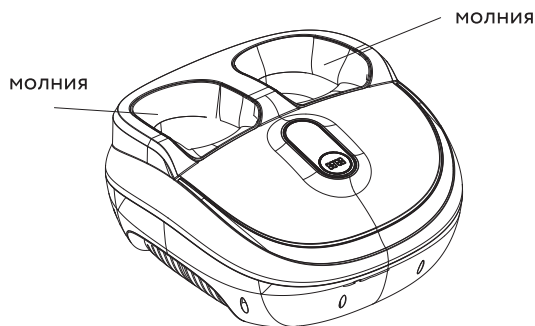

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: АС 110-220 В., 50 ГЦ.

Потребляемая мощность: 50Вт

Таймер автоотключения: 5-10-15-20-25-30 мин

Температура нагрева: 40-50°C

Температура хранения: 15-85°C

Диапазон рабочих температур:

от +10°C до +40°C при влажности от 0 до 65%

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Прибор для ухода и массажа за телом, бытовой электрический, серия (тип) AMG, модель AMG719, т. м. «Gezatone» – 1 шт.

Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

Пульт ДУ – 1 шт.

Внешние воздушные манжеты - 1 пара

GÉZATONE

ПРИБОР ДЛЯ УХОДА И МАССАЖА ЗА ТЕЛОМ, СЕРИИ (тип) AMG, МОДЕЛЬ AMG719,
БЫТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, Т.М. GEZATONE

Изготовитель: "Gezanne I.T.C." / "Жезанн И.Т.С.", адрес: Saint Avertin 39 rue des Granges Galand, France, /Сент Авертен 39 рю де Гранж Галан, Франция. Филиал завода-изготовителя: "GREAT CATHAY PRODUCTS MFG. INC." / "ГРЭЙТ КЭТЭЙ ПРОДАКТС МФГ. ИНК" адрес: 2 fl., No. 19, Lane 160, SUNG-CHIANG RD. Taipei, Taiwan R.O.C. / 2 фл., Но. 19, Лэйн 160, Санг-Чيانг Рд, Тайпей, (Китай), Тайвань. Импортёр/уполномоч. изготовителем орг.: ООО «МИТРИДАТ», РФ, Москва, Алтуфьевское ш., д. 41, стр. 1, эт. 2, пом. I, ком 8, тел.: 8 (495) 225 25 83. Срок службы: 3 года. Способ применения и дату производства: см. инструкцию.

KZ. GEZATONE САУДА БЕЛГІСІНІҢ ДЕНЕГЕ КҮПІМ ЖАСАУҒА ЖӨНЕ МАССАЖ ЖАСАУҒА АРНАЛҒАН АСПАП
СЕРИЯ (ТҮРІ) AMG, МОДЕЛЬ AMG719, ТҰРМЫСТЫҚ ЭЛЕКТРЛІК

Дайындаушы: "Gezanne I.T.C." / "Жезанн И.Т.С.", мекенжайы: Saint Avertin 39 rue des Granges Galand, France, /Сент Авертен 39 рю де Гранж Галан, Франция. Дайындаушы зауыттың филиалы: "GREAT CATHAY PRODUCTS MFG. INC." / "ГРЭЙТ КЭТЭЙ ПРОДАКТС МФГ. ИНК" мекенжайы: 2 fl., No. 19, Lane 160, SUNG-CHIANG RD. Taipei, Taiwan R.O.C. / 2 фл., Но. 19, Лэйн 160, Санг-Чيانг Рд, Тайпей, (Китай), Тайвань. Импорттаушы/дайындаушының уәкілетті мекемесі: "МИТРИДАТ" ЖШҚ, Ресей, Мәскеу қ., Алтуфьевское тас жолы, 41 үй, 1 құрыл., 2 қабат, үй-жай I, 8 бөлме, тел.: 8 (495) 225 25 83.

