



SOOCAS

Руководство пользователя

Ирригатор Soocas

Модель W3 Pro

EAC



Спасибо за выбор серии по уходу за полостью рта

### Ирригатор Soocas W3 Pro

Пожалуйста, внимательно прочтите это руководство перед его использованием и правильно научитесь пользоваться ирригатором Soocas W3 Pro, чтобы в полной мере использовать его выдающиеся характеристики и добиться лучших результатов.

Сохраните это руководство и обратите внимание на QR-код на его лицевой стороне, чтобы мы могли лучше обслуживать вас в будущем.



Публичный аккаунт Soocas WeChat

## Оглавление

•Меры предосторожности-.....	01
•Описание товара-.....	03
•использовать-.....	04
•поддержание-.....	09.
•Исправление проблем-.....	11
•Защита окружающей среды-.....	12
•Название и содержание опасных веществ в продукте-.....	14
•Послепродажное обслуживание и поддержка-.....	15

## **Меры предосторожности**

### **заявление**

Чтобы обеспечить правильное и безопасное использование этого продукта и избежать травм или потери имущества, пожалуйста, внимательно прочтите все инструкции и предупреждения в руководстве перед использованием этого продукта.

### **\*предостережение**

**1. Лица (в том числе дети), у которых нет соответствующего опыта и знаний (включая детей) с нездоровыми конечностями и психическими расстройствами, должны использовать, чистить и обслуживать этот продукт под наблюдением и руководством своих опекунов;**

**2. Запрещается заряжать во влажной среде;**

**3. Запрещается использовать этот прибор в качестве игрушки;**

4. Если вы не понимаете рабочих процедур и инструкций по безопасности, пожалуйста, не используйте продукт, чтобы избежать травм, вызванных неправильной эксплуатацией;

5. Пользователи, которые страдают заболеваниями пародонта или перенесли челюстно-лицевую операцию в последние шесть месяцев, пожалуйста, используйте только после согласования с стоматологом;

**6. Пожалуйста, не подключайте и не отключайте адаптер питания и кабель для зарядки мокрыми руками, иначе это может привести к поражению электрическим током;**

**7. Перед зарядкой убедитесь, что порт зарядки и зарядный кабель сухие, иначе это вызовет короткое замыкание;**

8. Используйте данное устройство по назначению;

9. Не наливайте в резервуар для воды горячую воду с температурой выше 40 °C, чтобы избежать ожогов;

10. Этот продукт не подходит для детей или инвалидов для эксплуатации и использования, если он не находится под наблюдением или под руководством лица, отвечающего за безопасность;

11. Перед тем, как выбросить устройство, необходимо вынуть аккумулятор из устройства;

12. Перед извлечением аккумулятора прибор должен быть выключен;

13. Аккумулятор следует утилизировать безопасным образом.

**14. Если шнур питания поврежден, его необходимо заменить на специальный шнур или специальный компонент, приобретенный у его производителя или в отделе обслуживания;**

### **\*Запретить**

1. Пожалуйста, не используйте этот продукт для других целей, кроме очистки полости;

2. Пожалуйста, не нажимайте насадкой с силой на десны или зубы, чтобы избежать повреждения;

3. Не повреждайте, не изменяйте, не сгибайте, не тяните и не перекручивайте зарядный кабель;

4. Для зарядки используйте безопасный совместимый адаптер питания

5. Отсоедините адаптер питания и кабель для зарядки перед использованием, очисткой и обслуживанием;


## **\*Важно**

1. Пожалуйста, не помещайте продукт в жаркое или влажное место и избегайте прямых солнечных лучей;
2. Этот продукт имеет встроенную перезаряжаемую батарею, пожалуйста, не кладите его в огонь, не нагревайте, не заряжайте, не используйте или не помещайте в место с высокой температурой, в противном случае это вызовет перегрев, возгорание или взрыв;
3. Не разбирайте и не модифицируйте этот продукт, в противном случае это может привести к пожару или травмам. Если вам нужен ремонт, обратитесь в сервисную службу;

## **\*Заметки**

1. Пожалуйста, не используйте этот продукт без насадки;
2. Пожалуйста, храните этот продукт в недоступном для детей и младенцев, а не в качестве игрушки;
3. Если есть рана во рту или языке, пожалуйста, не используйте этот продукт. Чтобы избежать ненужных повреждений, перед использованием проконсультируйтесь со стоматологом;
4. Если вы не используете этот продукт в течение длительного времени, его необходимо полностью заряжать и хранить, а также полностью заряжать раз в 6 месяцев;
5. Во избежание выгрузки во время зарядки, Обязательно, положите устройство для чистки зубов и зарядите;
6. Убедитесь, что подключили источник питания, соответствующий его номинальному напряжению, иначе это может вызвать поражение электрическим током или возгорание;
7. Не роняйте посторонние предметы в порт зарядки, иначе это вызовет поражение электрическим током или короткое замыкание;
8. При подключении или отключении источника питания обязательно держите адаптер питания вместо кабеля для зарядки;
9. Отсоедините адаптер питания и кабель для зарядки, если вы не используете его в течение длительного времени, в противном случае это может привести к поражению электрическим током или возгоранию из-за ухудшения экологических характеристик;
10. После использования обязательно слейте оставшуюся воду в резервуаре для воды, а затем запустите устройство на несколько секунд на холостом ходу, чтобы слить воду, чтобы избежать роста бактерий, специфического запаха и неисправностей;
11. Все иллюстрации продукта, аксессуаров, пользовательского интерфейса и т. Д. В руководстве являются схематическими диаграммами, только для справки. Из-за обновлений продукта фактический продукт может немного отличаться от схематической схемы. Пожалуйста, обратитесь к фактическому продукту.

## Описание товара

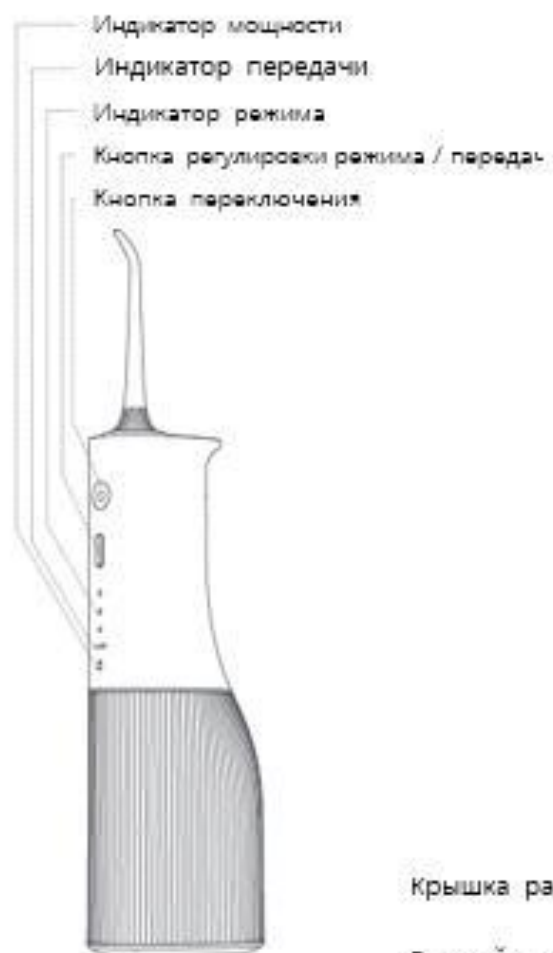

Кнопка разблокировки сопла  
 Зарядная вилка



Стандартное сопло  
 Насадка для чистки языка  
 Ортодонтическая насадка  
 Насадка для пародонтального кармана



Крышка радиатора  
 Водный танк




Ящик для хранения насадок

Руководство



Зарядный кабель

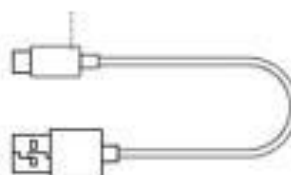

## Инструкция по применению:

### Перезарядка


- Пожалуйста, зарядите перед использованием в первый раз;
- Убедитесь, что изделие и руки сухие, подключите зарядный кабель Type-C к зарядному порту, подключите адаптер питания (продается отдельно) и включите питание.

### Описание индикатора батареи

Состояние	Состояние индикатора батареи	Мощность
Рабочий статус	Постоянный зеленый свет	100%-30%
	Горит красный свет	30%-10%
	Красный свет быстро мигает (не включается)	<10%
зарядка	Постоянный зеленый свет	100%
	Мигает зеленым	100%-30%
	Мигает красным	<30%


Примечание: Заряжайте при комнатной температуре от 15 ° C до 35 ° C. При зарядке при низкой температуре (ниже 15 ° C) время использования будет относительно короче; при слишком низкой температуре (ниже 5 ° C) зарядка может быть невозможна.

Во избежание опрокидывания во время зарядки обязательно разложите промывочную машину для зарядки.

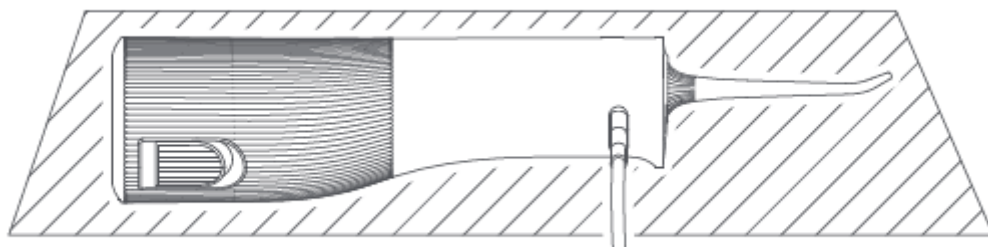


### Добавьте воду в резервуар для воды

- Откройте крышку резервуара для воды, налейте необходимое количество воды и закройте крышку резервуара для воды, чтобы начать использование.
- Внимание · Рекомендуется использовать теплую воду или проточную воду из-под крана ниже 40 °C;
- не вводите химические продукты, такие как зубная паста, соль или другие твердые таблетки для полоскания рта, в противном случае машина может быть заблокирована или повреждена.

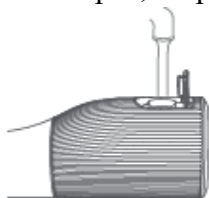

## Сопло

- Стандартная насадка: эффективно удаляет остатки пищи, зубной камень, зубной налет между зубами, ямками и трещинами, предотвращает кариес и зубной камень;
- Насадка для чистки языка: эффективно удаляет налет с языка и предотвращает попадание бактерий в организм;
- Ортодонтическая насадка: для брекетов, Протрите и очистите труднодоступные части, такие как скобы;
- Насадка для пародонтального кармана: эффективно удаляет бактерии в пародонтальном кармане, массирует десны и предотвращает гингивит и атрофию десен

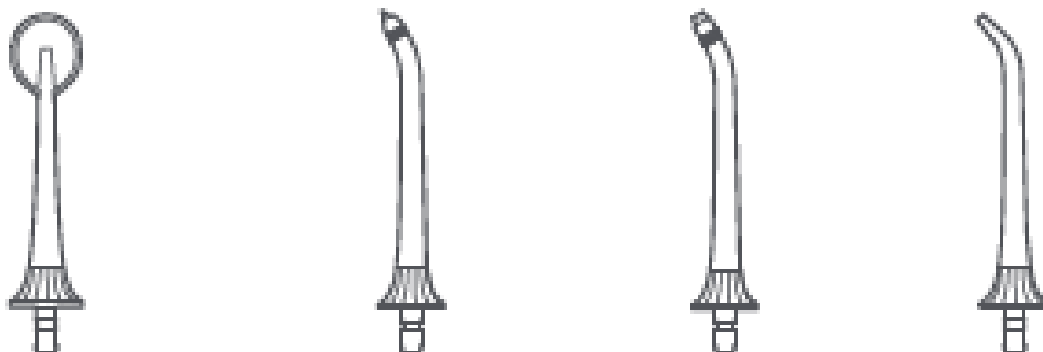

Насадка для чистки языка\_Насадка для пародонтального кармана\_Ортодонтическая насадка\_Стандартное сопло

## Установить / снять форсунку

- Вставьте насадку в монтажное отверстие насадки, услышав "щелчок", установка завершена;
- Нажмите и удерживайте кнопку освобождения сопла и потяните сопло вверх, чтобы снять его.



Примечание : Во время использования не нажимайте кнопку разблокировки сопла, чтобы избежать случайной травмы из-за выброса сопла.

## Переключатель машины

- Короткое нажатие на кнопку переключателя для включения и выключения;
- Этот продукт оснащен механизмом защиты с таймером на 2 минуты. После 2 минут использования продукт автоматически отключится; если вам нужно продолжить его использование, кратковременно нажмите кнопку переключателя, чтобы включить его;
- Стандартная емкость резервуара для воды составляет около 150 мл, а время использования будет варьироваться в зависимости от режима очистки.



Совет: во избежание роста бактерий после каждого использования включайте его, чтобы удалить остатки воды внутри механизма, резервуара для воды и насадки.

### Переключить режим



·Короткое нажатие на кнопку переключения режимов позволяет переключаться между режимами очистки ;

·Стандартный режим: Стандартный напор воды, эффективная чистка, подходит для ежедневной чистки зубов

·Режим защиты десен: Частотно-импульсное давление воды, подходящее для массажа десен и укрепления зубов;

· Мягкий режим: Низкое давление, подходит для тех, у кого повреждены или кровоточат десна.

Совет: Этот продукт имеет функцию режима памяти, при следующем включении он будет по умолчанию в том режиме, в котором он был выключен в последний раз.

**Режим блокировки:** в выключенном состоянии нажмите и удерживайте кнопку переключателя более 3 секунд, индикатор батареи загорится и дважды мигнет.

**Разблокировка:** в заблокированном состоянии нажмите и удерживайте кнопку переключателя более 3 секунд, индикатор батареи загорится и дважды мигнет

### Рекомендации для новичков

- Держите ирригатор вертикально, поместите насадку в рот, нацельтесь на щель между зубами или деснами и слегка приоткройте рот, чтобы вода могла плавно вытекать после очистки рта;
- Чистите зубы по порядку, медленно двигаясь по зубам;
- Насадка выровнена по линии десны и перпендикулярна десне;
- **Не распыляйте воду прямо на пародонтальный карман, иначе это может вызвать кровотечение десен;**
- Не нажимайте на насадку с силой зубами, иначе в стандартном режиме ирригатор может перейти в состояние защиты от блокировки, устройство перестанет работать, а 3 индикатора режима будут мигать в течение 10 секунд. После того, как индикатор погаснет, перезапустите машину, чтобы вернуться в нормальное состояние.




#### **Заметка:**

- В основной части изделия (резервуар для воды, всасывающая труба и т. Д.) может быть немного дистиллированной воды для проверки работоспособности. Это нормальное явление, будьте уверены в использовании;
- При первом использовании этого продукта даже здоровые десны могут испытывать раздражение или кровотечение. Это связано с тем, что десны не привыкли к такому воздействию. Это состояние -исчезнет в течение 1-2 недель;
- Пользователям впервые рекомендуется использовать щадящий режим в течение недели, а затем использовать другие режимы после привыкания;
- Если вы чувствуете себя плохо в течение более 2 недель, прекратите использование этого продукта и обратитесь к стоматологу.


### Ежедневное обслуживание

- После ежедневного использования необходимо открыть крышку резервуара для воды и слить оставшуюся воду в резервуар для воды;
- Кратковременно нажмите кнопку переключателя, чтобы включить ирригатор, и автоматически слейте воду в движении и резервуаре для воды, затем коротко нажмите кнопку переключателя, чтобы выключить, а затем закройте крышку резервуара для воды;
- Выньте насадку и положите в ящик для хранения насадок;
- Держите корпус одной рукой, а резервуар для воды другой. После вращения резервуар для воды можно снять, чтобы очистить;
- После очистки протрите резервуар для воды и корпус тканью
- Верните резервуар для воды к фюзеляжу

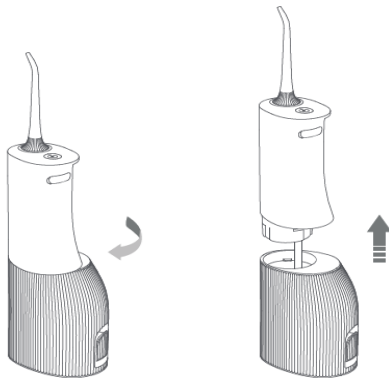

### Ежедневная очистка

- Если вам нужно очистить резервуар для воды, вытащите резервуар для воды с небольшим усилием. После отделения его от продукта его можно промыть чистой водой. Накипь внутри резервуара для воды можно очистить щеткой, а затем протереть тканью;
- При очистке поверхности продукта используйте влажную ткань, чистую воду или средство. Очистите и протрите моющим средством. Не используйте жидкости с температурой выше 40 ° C, агрессивные жидкости, разбавители, спирт и т. д. для очистки продукта;
- Если он не используется в течение длительного времени, очистите продукт и храните его после того, как он высохнет.

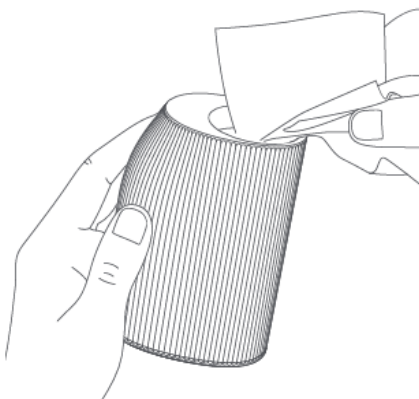

## Поддерживайте резервуар для воды

Наполните резервуар для воды теплой водой с температурой не выше 40 ° C, добавьте столовую ложку белого уксуса, включите устройство и дайте ей поработать, пока резервуар для воды не опустеет, затем выключите его, затем снова налейте чистую теплую воду в резервуар для воды и включите его для фильтрации.

## Подсказка:

·Очищайте и обслуживайте резервуар для воды каждые 1-3 месяца, чтобы обеспечить наилучшую производительность продукта;

·Пожалуйста, заменяйте форсунку каждые 6 месяцев; если кончик форсунки деформирован, замените ее новой форсункой, в противном случае это приведет к неисправности.

## Технические характеристики

Наименование товара: Ирригатор

Модель продукта: W3 Pro

водонепроницаемый уровень:IPX7

Номинальная мощность:12W

Номинальное напряжение:5V=1A

Время зарядки: около 4 часов

Рабочее напряжение:3.7V=

Сделано в Китае

Изготовитель: Shenzhen Soocas Technology Co., Ltd

Адрес: Китай, 1101,1102,1103,1104,401,402, Building 2, Nanshan Zhiyuan Chongwen Park, 3370 Liuxian Avenue, Fuguang Community, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen

Импортер: ООО "Рустон"

Адрес: 143441, Россия, Московская область, г. Красногорск, деревня Путилково, территория Гринвуд, строение 17, этаж 1, помещение 94

Дата изготовления нанесена на этикетку товара.

Гарантийный срок 1 год

Срок эксплуатации 3 года

Продукт сертифицирован в соответствии с требованиями ТР ТС 020/2011 и 037/2016.

№

## №Исправление проблем

Явление отказа	возможная причина	Решение
Индикатор батареи не загорается при зарядке	Подключение питания не нормальное	Пожалуйста, подключите питание правильно
Слишком короткое время работы после зарядки	Температура окружающей среды слишком низкая	Заряжайте и используйте в помещении при температуре от 15 °C до 35 °C

Не включается	Время зарядки слишком короткое	Зарядите продукт
	Недостаточно мощности	Зарядите продукт
Давление воды слишком низкое	Засорилась грязь в сопле	Заменить сопло
	Отверстие форсунки повреждено	Заменить сопло

## Защита окружающей среды

Когда срок службы ирригатора Soocas подходит к концу, в соответствии с законами и постановлениями страны или региона необходимо извлечь внутреннюю батарею. Если батарею невозможно извлечь, отправьте продукт в центр утилизации, назначенный правительством, или в отдел обслуживания.

Отдел обслуживания разбирает и утилизирует аккумулятор

### Предостережение:




- Не бросайте аккумулятор в огонь, чтобы аккумулятор не взорвался или не выделил токсичные и опасные вещества.
- Не допускайте короткого замыкания аккумулятора во избежание возгорания аккумулятора.
- Не разбирайте продукт самостоятельно, если вы не хотите его выбросить: слишком ранняя разборка приведет к повреждению продукта.
- При эксплуатации необходимо соблюдать основные правила техники безопасности: перед извлечением аккумулятора необходимо отключить питание

### Снимите аккумуляторную батарею


- После снятия резервуара для воды используйте инструмент, чтобы снять резьбовую крышку на нижней крышке, а затем с помощью крестовой отвертки открутите 4 винта на нижней крышке.
- Используйте инструмент, чтобы снять верхнюю металлическую декоративную крышку, и Отверткой Phillips выверните два винта из верхней крышки.



- Используйте инструменты, чтобы снять верхнюю крышку, выньте другие части под верхней крышкой, а затем с помощью отвертки Phillips извлеките остальные части под верхней крышкой

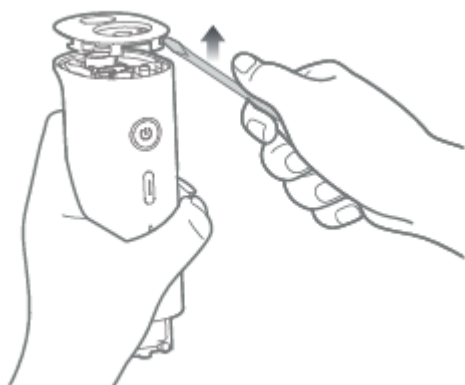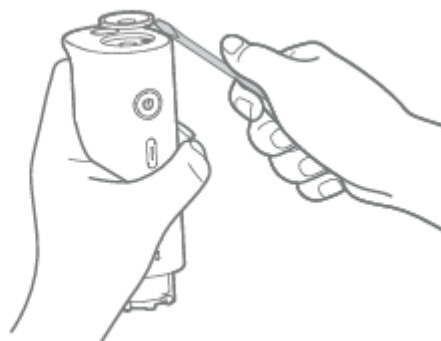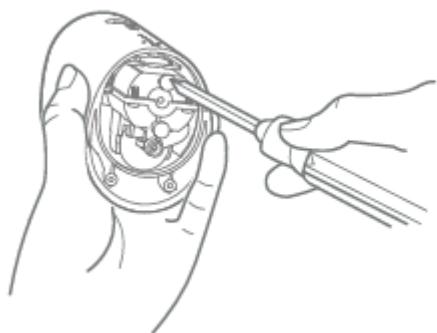

- Выньте механизм, ножницами перережьте соединительную линию от батареи к основной плате корпуса и извлеките батарею.
- Извлеките аккумулятор и храните его в месте, указанном правительством

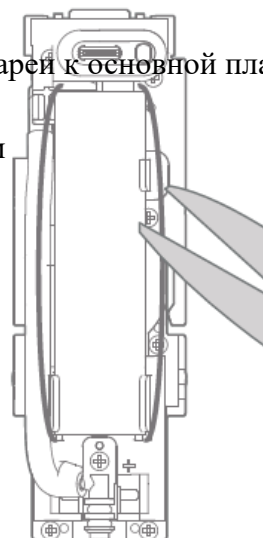

## Название и содержание опасных веществ в продукте

Наименование	вредные материалы					
	Pd	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
сопло	○	○	○	○	○	○
Тело зубов	× <sup>a</sup>	○	○	○	○	○
Водный танк	○	○	○	○	○	○
Коробка для хранения	○	○	○	○	○	○
аккумулятор	○	○	○	○	○	○
Туре-С Зарядный кабель	○	○	○	○	○	○
приложение	○	○	○	○	○	○

Эта форма составлена в соответствии с SJ / T 11364.

○: Это означает, что содержание опасного вещества во всех однородных материалах детали ниже предельного требования, указанного в GB / T 26572.

×: Это означает, что содержание опасного вещества по крайней мере в определенном однородном материале детали превышает предельное требование GB / T 26572.

a: Содержание опасных веществ в материалах компонентов соответствует ограничениям для предметов, не подпадающих под действие директивы EC RoHS (2011/65 / EU).

— «Опасные вещества» и соответствующие компоненты, показанные в этой таблице, не будут оказывать вредного воздействия на человеческий организм и окружающую среду при нормальном использовании продукта. Они используются для предоставления потребителям и специалистам по переработке соответствующих описаний веществ, которые помогут продукту Надлежащая утилизация во время утилизации.

## Послепродажное обслуживание и поддержка

### 1.Гарантийная Политика

В течение периода действия трех гарантий вы можете пользоваться бесплатными услугами по возврату, обмену и ремонту в соответствии с настоящими правилами. Ремонт, обмен и возврат должны производиться по счетам.

(1). Через 7 дней со дня получения квитанции (канал покупок в электронной коммерции) без объяснения причин расходы на логистику несет пользователь;

(2). В течение 8-15 дней со дня получения квитанции у этого продукта появится "Ирригатор Soocas». Сбои производительности, перечисленные в «Таблице сбоев производительности», определяются центром послепродажного обслуживания Soocas, и вы можете пользоваться бесплатной заменой или обслуживанием;

(3). В течение 1 года со дня подписания квитанции, если этот продукт имеет сбой в работе, указанный в «Таблице сбоев в работе ирригатора Soocas W1», он был протестирован и подтвержден центром послепродажного обслуживания Soocas и вы можете пользоваться бесплатными услугами по техническому обслуживанию.

Совет: сотрите защитное покрытие и введите код защиты от подделки, чтобы проверить подлинность продукта.

Метод запроса продукта: <http://www.soocas.com> или через общедоступный аккаунт Soocas WeChat

## 2.Содержание гарантии

Корпус	1 год
Зарядный кабель	1 год

Совет: Сопло-это расходный материал, который поставляется вместе с продуктом, и на него не распространяется гарантия.

### 3.Таблица сбоев в работе ирригатора Soocas

название	Сбой производительности
Ирригатор Soocas	1. Аномальный переключатель
	2.Световой индикатор неисправности
	3. Аномальное давление воды

## 4.Негарантийные правила

- (1).Несанкционированное обслуживание, неправильное использование, столкновение, небрежность, злоупотребление, попадание жидкости, авария, изменение, неправильное использование принадлежностей, не относящихся к продукту, или разрыв или изменение этикеток или знаков защиты от подделки;
- (2).Срок действия трех упаковок истек;
- (3). Повреждения, вызванные форс-мажорными обстоятельствами;
- (4).Несоблюдение требований к производительности, перечисленных в «Таблица сбоев в работе Ирригатор Soocas»;
- (5). По причинам искусственного происхождения этот продукт и его аксессуары приводят к сбоям в работе, перечисленным в «Таблица сбоев в работе Ирригатора Soocas».

## 5.Подсказка

1.Поскольку упаковочная коробка необходима для обеспечения безопасности транспортировки продукта во время транспортировки, рекомендуется хранить упаковочную коробку не менее 30 дней с даты получения;



Подпишитесь, чтобы присоединиться к эксклюзивному сервису и продлить гарантию на один месяц

Добро пожаловать на домашнюю страницу службы SOOCAS [WWW.SOOCAS.COM](http://WWW.SOOCAS.COM)





Телефон: 400-788-4008

Производитель: Shenzhen Soocas Technology Co., Ltd

Адрес: Китай, 1101,1102,1103,1104,401,402, Building 2, Nanshan Zhiyuan Chongwen Park, 3370 Liuxian Avenue, Fuguang Community, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen

