




МАССАЖЕР ВИБРАЦИОННЫЙ
ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА
DAY JOY



ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
KZ 1422

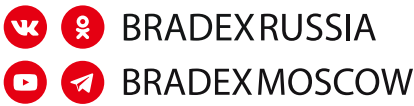

Массажер вибрационный для лица и тела «Day Joy» – беспроводной двусторонний массажер для проведения согревающего, освежающего, вибрационного массажа лица и тела в домашних условиях. 3 режима и 3 уровня мощности позволяют подобрать оптимальный вариант с учетом индивидуальных особенностей кожи. Горячий расслабляющий лифтинг-массаж подтягивает кожу лица, шеи и декольте, способствует устранению морщин, брылей и второго подбородка. Холодный тонизирующий массаж снимает отечность, сокращает расширенные поры, повышает упругость и эластичность кожи, стимулирует лимфодренаж и тканевое дыхание. Вибрационный массаж тела расслабляет мышцы, снимает напряжение, усталость, стимулирует кровообращение, подтягивает кожу, оказывает антицеллюлитный эффект. Вибромассажер подходит для профилактики артрита, мышечной атрофии. Он отлично помогает восстановиться после активных тренировок в спортзале, после напряженного трудового дня людям, которые проводят целый день на ногах: учителя, врачи, продавцы, или выполняют сидячую работу: офисные работники, водители. Компактный массажер удобно брать с собой: он не занимает много места, заряжается через USB.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ:

- Убедитесь, что технические параметры массажера соответствуют напряжению электросети, к которой подсоединен прибор.
- Во избежание удара электрическим током, не подключайте и не отсоединяйте USB-кабель для зарядки мокрыми или влажными руками. Это может привести к поражению электрическим током или несчастному случаю.
- При низком уровне заряда батареи LED-индикатор кнопки включения начинает мигать. После этого устройство отключается автоматически.
- Мигание индикатора красным светом означает процесс зарядки устройства. Когда индикатор светится постоянно фиолетовым светом, зарядка завершена.
- Зарядка устройства через USB-кабель занимает 4-6 часов.
- Не используйте устройство во время зарядки. Массажер обладает системой защиты, которая блокирует включение устройства в процессе зарядки.
- Во время согревающего массажа поверхность устройства нагревается. На это следует обратить внимание людям, которые нечувствительны к нагреву.
- Если во время использования массажера, вы почувствовали дискомфорт, в том числе на коже, немедленно прекратите использование прибора.
- Устройство не является водонепроницаемым, его запрещено погружать воду.
- Не эксплуатировать в помещениях с повышенной влажностью. Используйте устройство только в абсолютно сухих помещениях.
- Не эксплуатировать устройство при попадании на его корпус воды или иных жидкостей. Удалите жидкость с корпуса мягкой сухой тканью или салфеткой.
- Никогда не используйте устройство в непосредственной близости от источников тепла.

- Не роняйте и не ударяйте массажер.
- Не располагайте на устройстве тяжелые предметы.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Чувствительная кожа, болезни кожи, в том числе острые гнойные воспаления, раны, сильный солнечный ожог на коже, онкология, склонность к кровотечениям, сердечно-сосудистые заболевания, наличие кардиостимулятора, лихорадка, инфекционные заболевания, беременность, менструация.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь с врачом.

Товар не является медицинским изделием.

ПРИМЕНЕНИЕ:
СОГРЕВАЮЩИЙ, РАССЛАБЛЯЮЩИЙ
МАССАЖ ЛИЦА И ТЕЛА

1. Включите массажер, нажав на кнопку
2. Выберите функцию согревающего массажа, нажав на кнопку . LED-индикатор массажной поверхности загорится красным светом.
3. Прогревающий режим имеет 3 уровня интенсивности: они переключаются нажатием на кнопку .

При изменении температуры индикатор меняет цвет:
- синий — 30-35°C
- фиолетовый — 35-40°C
- красный — 40-45°C.
4. Длительность режима составляет 3 минуты. Для возобновления процедуры нажмите кнопку .

ОСВЕЖАЮЩИЙ, ТОНИЗИРУЮЩИЙ
МАССАЖ ЛИЦА И ТЕЛА

1. Включите массажер, нажав на кнопку .
 2. Выберите функцию охлаждающего (крио) массажа, нажав на кнопку . LED-индикатор массажной поверхности загорится голубым светом.
 3. Охлаждающий (крио) режим имеет 3 уровня интенсивности: они переключаются нажатием на кнопку .
- При изменении температуры индикатор меняет цвет:
- синий — 15-20°C
- фиолетовый — 10-15°C
- красный — 5-10°C.
4. Длительность режима составляет 3 минуты. Для возобновления процедуры нажмите кнопку .

ВИБРОМАССАЖ ЛИЦА И ТЕЛА

1. Включите массажер, нажав на кнопку .
2. Функция вибромассажа запускается автоматически при включении аппарата.
3. Функция вибромассажа имеет 3 уровня

интенсивности, которые выбираются нажатием на кнопку .

4. Приложите устройство массажной головкой к телу и водите по массажным линиям, надавливая на акупунктурные точки в зоне воздействия для стимуляции кровообращения, лимфотока, снятия отечности, расслабления и тонизации мышц, достижения антицеллюлитного эффекта.
5. Длительность вибрационного массажа составляет 10 минут. Для возобновления сеанса массажа снова нажмите на кнопку .
4. После завершения массажа отключите устройство, нажав на кнопку .

СПОСОБЫ ОЧИСТКИ:

Выключите устройство, нажав на кнопку . Протрите мягкой сухой тканью. Не погружать в воду! Не использовать абразивные чистящие средства, щетки, бензин, керосин, полироли или их растворы. Положите массажер в сухое, проветриваемое место. Используйте защитную металлическую насадку.

ХРАНЕНИЕ И УХОД:

Не храните устройство в помещениях с повышенной температурой и влажностью. После перемещения аппарата в теплое помещение с холода его эксплуатация разрешается не ранее, чем через 1 час. Не эксплуатировать устройство при попадании на его корпус воды или иных жидкостей. Удалите жидкость с корпуса мягкой сухой тканью или салфеткой. Никогда не используйте устройство в непосредственной близости от источников тепла. Хранить в недоступном для детей месте.

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Допускается в производственной упаковке.

УТИЛИЗАЦИЯ:

Данное изделие следует утилизировать отдельно от бытовых отходов.

Массажер вибрационный для лица и тела
«Day Joy» Артикул KZ 1422

Материал: ABS-пластик, ТПР, металл.
Цвет: белый, серый.
Размер: 28 x 6,5 x 6 см.
Номинальное напряжение: 5V DC.
Емкость аккумулятора: 3.7B 2600 мА*ч.
Время зарядки: 4-6 часов.
Напряжение зарядного устройства: Входное напряжение USB 5V, 1000мА*ч.
Произведено по заказу «BRADEX» ISRAEL.
Trans East Metal Ltd, POB 9101, Haifa 31091, Israel. Tel: +972-4-8521824, fax: +972-3-7256059. www.bradex.co.il.
Импортер на территории РФ: ООО «Технологии здоровья». Российская Федерация, 117405, Москва, ул. Варшавское шоссе, д.145, корп. 8. Тел.: 8 (495) 647-09-59, 8 (495) 648-26-66, www.bradex.ru.
Импортер на территории Республики Беларусь: ООО «БРАДЕХ», 220019, г. Минск, ул. Монтажников, д. 9 комн. 34/4. УНП 192409754. Сайт: www.bradex.by.
E-mail: info@bradex.by.
Страна происхождения: Китай.
Изготовитель: Джецзян Нью Вижн Импорт энд Экспорт Кампани Лимитед. Адрес: Синьцзянь Роуд, 5, Индустриальная зона Бэйтанг, город Нинбо, КНР, 315708. тел:+86-574-6560937, факс:+86-574-6560938. e-mail: zhejiangnewvision.china@gmail.com.


Мощность: 10 Вт.
Рабочая температура: 5-45°C (±5°C).
Количество режимов: 3.
Количество уровней интенсивности: 3.
Функции: Вибрационный, охлаждающий и согревающий массаж.
Вес: 370 г.
Комплектация: массажер – 1 шт., USB-провод, инструкция.

Международная торговая марка

«BRADEX». Рег. №1419183.
Израиль - Рег. №204012.
Россия - Рег. №444287, №683532

Дату производства смотреть на упаковке.

ТОВАР НЕ ЯВЛЯЕТСЯ МЕДИЦИНСКИМ ИЗДЕЛИЕМ.

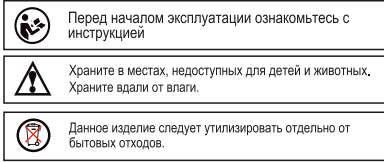

Дату производства смотреть на упаковке.

Срок эксплуатации: 1 год.
Гарантийный срок: 1 год.

