



МАССАЖЕР ДЛЯ ТЕЛА МАССАЖНЫЙ ПИСТОЛЕТ TRIANGLE



ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
KZ 1423

BRADEXRUSSIA
BRADEXMOSCOW



Массажер для тела, Массажный пистолет «TRIANGLE», 12 насадок – современный перкуссионный массажер для быстрого восстановления работоспособности после физических нагрузок, насыщенного рабочего дня, для проведения оздоравливающего массажа и укрепления мышц тела в домашних условиях. Массажный пистолет оснащен 5 режимами с ударной вибрацией. Каждый режим имеет 6 уровней интенсивности. В комплекте предусмотрено 12 сменных насадок для эффективной проработки различных групп мышц на теле, а также для выполнения расслабляющего массажа лица и головы. Регулярное использование спортивного массажера снимает болевой синдром в мышцах, суставах, восстанавливает кровоток и лимфодренаж, облегчает боль в триггерных зонах, снимает головные боли. После ударной терапии ощущается легкость в теле и общий прилив сил, улучшается подвижность суставов, активнее выводится молочная кислота после интенсивных мышечных нагрузок. Массажный пистолет удобно брать с собой: он не занимает много места, заряжается через USB.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ:


- Убедитесь, что технические параметры массажера соответствуют напряжению электросети, к которой подсоединен прибор.
- Во избежание удара электрическим током, не подключайте и не отсоединяйте USB-кабель для зарядки мокрыми или влажными руками. Это может привести к поражению электрическим током или несчастному случаю.
- Не оставляйте массажер без присмотра, когда он подключен к сети.
- Не используйте массажер под одеялом, подушкой или в любом другом месте, где вентиляция может быть недостаточной.
- Устройство не является водонепроницаемым, его запрещено погружать в воду.
- Не эксплуатировать в помещениях с повышенной влажностью. Используйте устройство только в абсолютно сухих помещениях.
- Не эксплуатировать устройство при попадании на его корпус воды или иных жидкостей. Удалите жидкость с корпуса мягкой сухой тканью или салфеткой.
- Никогда не используйте устройство в непосредственной близости от источников тепла.
- Не используйте насадки, не рекомендованные производителем.
- Не носите массажер за шнур и не тяните за шнур резко.
- Не роняйте и не ударяйте массажер.
- Не располагайте на устройстве тяжелые предметы.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Раздраженная кожа, болезни кожи, в том числе острые гнойные воспаления, наличие опухших или воспаленных участков (переломы, ушибы, порезы), варикозное расширение

вен, онкология, сердечно-сосудистые заболевания, наличие кардиостимулятора, лихорадка, инфекционные заболевания, беременность, менструация. С осторожностью: в области головы, лица, шейного отдела позвоночника, большеберцовой кости, тыльной стороны стопы и кисти. Если во время использования массажера, вы почувствовали дискомфорт, в том числе на коже, немедленно прекратите использование прибора. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь с врачом. Товар не является медицинским изделием.

ЗОНЫ ПРОВЕДЕНИЯ УДАРНОЙ ТЕРАПИИ

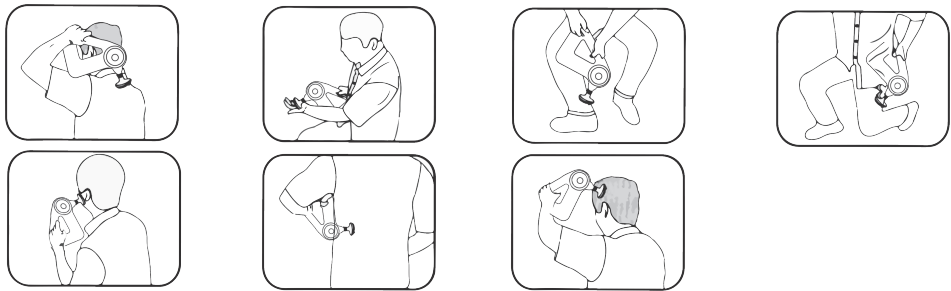

ВИДЫ СМЕННЫХ НАСАДОК

- | | | | |
|--|---|--|--|
| | Игольчатая насадка
Используется для стимуляции акупунктурных точек на теле, особенно в области бедер, стоп, ладоней. | | Четырехпальчиковая насадка
Используется для имитации мягкого точечного ручного массажа. |
| | Насадка-пуля
Для глубокого массажа сухожилий, ладоней, стоп, а также для проработки триггерных точек. | | Акупунктурная насадка
Используется для глубокого точечного массажа определенной области. |
| | Конусовидная насадка
Для точечного массажа шеи, спины с активацией биологически активных точек. | | Сферическая насадка
Для массажа больших групп мышц, бедер, икроножных мышц, ягодиц, живота, плеч. |
| | Насадка для мягкого вибромассажа
Для расслабления мышц в чувствительных зонах, в том числе на внутренней стороне бедра. | | Плоская насадка
Используется для глубокой проработки мышц. |
| | Трехточечная массажная насадка
Активная точечная стимуляция всего тела. | | Насадка для лифтинг-массажа лица
Используется в сочетании с кремом для лица, массажным маслом или гелем. |

- | | | | |
|---|---|--|--|
| | Насадка для массажа головы
Эффективный расслабляющий массаж, облегчение головных болей, спазмов, восстановление полноценного сна. | | Плоская насадка для расслабляющего массажа тела
Используется в сочетании с массажным маслом или гелем. |
| ПРИМЕНЕНИЕ:
1. Рекомендуется проводить массаж через 1 час после пробуждения, через 1 час после принятия пищи и сразу после интенсивных физических нагрузок.
2. Выберите необходимую массажную насадку и ее закрепите на массажере.
3. Включите устройство, нажав на кнопку ON/OFF.
4. Крепко держите массажный пистолет за рукоятку и выберите комфортный режим и интенсивность воздействия, нажимая на кнопку выбора скорости.
5. Для эффективного массажа начните с рук, ног, затем спины и боков.
6. После завершения процедуры выключите массажер, нажав на кнопку ON/OFF.
7. Выпейте стакан чистой воды. | | | |
| СПОСОБЫ ОЧИСТКИ:
Выключите устройство и протрите мягкой сухой тканью. Не погружать в воду!
Не использовать абразивные чистящие средства, щетки, бензин, керосин, полироли или их растворы. Положите массажер в сухое, проветриваемое место. | | | |

- ХРАНЕНИЕ И УХОД:**
Не храните устройство в помещениях с повышенной температурой и влажностью. После перемещения аппарата в теплое помещение с холода его эксплуатация разрешается не ранее, чем через 1 час. Не эксплуатировать устройство при попадании на его корпус воды или иных жидкостей. Удалите жидкость с корпуса мягкой сухой тканью или салфеткой. Никогда не используйте устройство в непосредственной близости от источников тепла. Хранить в недоступном для детей месте.
- ТРАНСПОРТИРОВКА:**
Допускается в производственной упаковке.
- УТИЛИЗАЦИЯ:**
Данное изделие следует утилизировать отдельно от бытовых отходов.

- Массажер для тела, Массажный пистолет «TRIANGLE», 12 насадок**
Артикул KZ 1423
Материал: ABS-пластик.
Цвет: черный.
Аккумулятор: 2000мАч, 7,4 В.
Входное напряжение: 8,4 В/1 А.
Мощность: 25 Вт.
- Произведено по заказу «BRADEX» ISRAEL.**
Trans East Metal Ltd, POB 9101, Haifa 31091, Israel. Tel: +972-4-8521824, fax: +972-3-7256059. www.bradex.co.il.
Импортер на территории РФ: ООО «Технологии здоровья». Российская Федерация, 117405, Москва, ул. Варшавское шоссе, д.145, корп. 8. Тел.: 8 (495) 647-09-59, 8 (495) 648-26-66, www.bradex.ru.
Импортер на территории Республики Беларусь: ООО «БРАДЕХ», 220019, г. Минск, ул. Монтанников, д. 9 комн. 34/4. УНП 192409754. Сайт: www.bradex.by.
E-mail: info@bradex.by.
- Страна происхождения: Китай.
Производитель: Джецзян Нью Вижн Импорт энд Экспорт Кампани Лимитед. Адрес: Синьцзянь Роуд, 5, Индустриальная зона Бэйтанг, город Нинбо, КНР, 315708.
тел:+86-574-6560937, факс:+86-574-6560938. e-mail: zhejiangnewvision.china@gmail.com.

- Время зарядки: 4-5 часов.
Размер массажера: 24 x 23 x 7 см.
Номинальная частота: 2100~3200 об/мин.
6 уровней мощности.
5 режимов массажа.
12 массажных головок.
Комплектация: массажер – 1 шт., массажные головки – 12 шт., адаптер, инструкция.

- Международная торговая марка «BRADEX».** Рег. №1419183. Израиль - Рег. №204012. Россия - Рег. №444287, №683532
- ЕАС**
- ТОВАР НЕ ЯВЛЯЕТСЯ МЕДИЦИНСКИМ ИЗДЕЛИЕМ.
- | | |
|--|---|
| | Перед началом эксплуатации ознакомьтесь с инструкцией |
| | Храните в местах, недоступных для детей и животных. Храните вдали от влаги. |
| | Данное изделие следует утилизировать отдельно от бытовых отходов. |
- Дату производства смотреть на упаковке.
Срок эксплуатации: 1 год.