

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ:

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ И РЕШЕНИЯ
Массажер не функционирует	Убедитесь, что устройство правильно подключено к соответствующей розетке и включено. Если устройство подключено, но массажер не работает, пожалуйста, обратитесь в службу поддержки клиентов.
Массажер внезапно выключается	1. Убедитесь, что устройство подключено к сети и включено. 2. Лимит времени достигнут. Устройство автоматически отключится после 15 минут использования. 3. Устройство перегрелось, и для отключения устройства была активирована функция защиты от перегрева. Подождите, пока устройство полностью остынет, прежде чем возобновить использование. 4. К массирующим частям внутри устройства было приложено слишком большое усилие. Не вставляйте во время использования устройства и не прилагайте чрезмерных усилий к внутренним механизмам устройства.

ГАРАНТИЯ:

Мы гарантируем профессиональное обслуживание и предоставляем бесплатную гарантию на товар в течение 1 года с даты покупки. При выявлении неисправностей свяжитесь со службой поддержки клиентов.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:

- Гарантия распространяется на обслуживание и ремонт тех частей изделия, в которых обнаружены производственные дефекты.
- В случае обнаружения производственного брака в период гарантийного срока, компания бесплатно устраним дефект, либо заменит изделие на эквивалентный аналог.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:


- На повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией прибора, либо возникшие в результате несчастного случая.
 - В случае модернизации прибора, внесения изменений в устройство прибора или неправильного его подключения.
 - В случае обнаружения следов вскрытия или ремонта прибора до обращения в специализированный сервисный центр.
 - В случае несоблюдения рекомендаций по эксплуатации и техническому обслуживанию прибора, прописанных в инструкции.
- Условия реализации гарантийных прав зависят так же от законодательства, действующего в месте приобретения товара.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал: АБС пластик, полиэстер, металл.
Цвет: серый.
Входное напряжение: 220~240 В.
Потребляемая мощность: 30 Вт.
Частота - 50Гц-60Гц.

Размер массажера: 36,5х39,98х22,68 см.

Температура нагрева во время работы: от +10 °С до 40°С.
Комплектация: массажер — 1 шт., адаптер сети — 1 шт., инструкция, пульт управления.

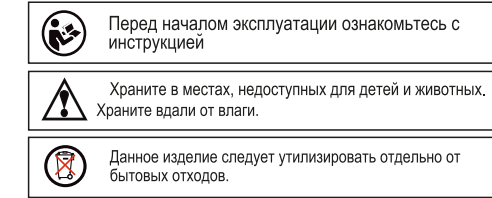

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Допускается в производственной упаковке.

Произведено по заказу «BRADEX» ISRAEL.

Trans East Metal Ltd, POB 9101, Haifa 31091, Israel. Tel: +972-4-8521824, fax: +972-3-7256059. www.bradex.co.il.

Импортер на территории РФ: ООО «Технологии здоровья». Российская Федерация, 117405, Москва, ул. Варшавское шоссе, д.145, корп. 8. Тел.: 8 (495) 647-09-59, 8 (495) 648-26-66, www.bradex.ru.

Импортер на территории Республики Беларусь: ООО «БРАДЕХ», 220019, г. Минск, ул. Монтажников, д. 9 комн. 34/4. УНП 192409754. Сайт: www.bradex.by. E-mail: info@bradex.by

Страна происхождения: Китай.
Изготовитель: Джецзян Нью Вижн Импорт энд Экспорт Кампани Лимитед. Адрес: Синьцзянь Роуд, 5, Индустриальная зона Байтанг, город Нинбо, КНР, 315708. тел:+86-574-6560937,- факс:+86-574-6560938. e-mail: zhejiangnewvision.china@gmail.com.

Международная торговая марка «BRADEX».

Рег. №1419183.
Израиль - Рег. №204012.
Россия - Рег. №444287, №683532

Срок эксплуатации: 1 год.

Гарантийный срок: 1 год.

Дату производства смотрите на упаковке.

ТОВАР НЕ ЯВЛЯЕТСЯ МЕДИЦИНСКИМ ИЗДЕЛИЕМ.



09



KZ 0569
МАССАЖЕР ДЛЯ НОГ
РОЛИКОВО-КОМПРЕССИОННЫЙ
«СЕН СИП»

KZ 0478
МАССАЖЕР ДЛЯ СТОП И ИКР
«БЛАЖЕНСТВО ЛЮКС»

KZ 0562
МАССАЖЕР ДЛЯ СТОП И ЛОДЫЖЕК
«БЛАЖЕНСТВО КОМФОРТ»

10



KZ 0575
МАССАЖНАЯ ПОДУШКА
«БЛАЖЕНСТВО КОМФОРТ»

KZ 0568
МАССАЖЕР ДЛЯ ТЕЛА,
BRADEX, БЕСПРОВОДНОЙ, ТАЙ ЧИ
И ШИАЦУ МАССАЖ, 8 НАСАДОК

KZ 0561
МАССАЖЕР ВИБРАЦИОННЫЙ ДЛЯ ТЕЛА
«МАССАЖНЫЙ ПИСТОЛЕТ»

11



МАССАЖЕР ДЛЯ СТОП И ЛОДЫЖЕК ФУДЖИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

KZ 1173



Усовершенствованный массажер для стоп и лодыжек «ФУДЖИ» - незаменимый помощник дома и на работе, поможет снять напряжение и восстановить силы после тяжелого дня. Два вида массажа в комбинации с инфракрасным нагревом прекрасно расслабляют и способствуют комплексному оздоравливающему эффекту. Система роликов интенсивно разминает мышцы, глубоко прорабатывая все рефлекторные точки стопы. Деликатное воздействие компрессионного массажа, благодаря смене интенсивности давления, содействует лучшему кровоснабжению и лимфотoku, уменьшению болевых ощущений и отечности ног. Источники инфракрасного нагрева мягко прогревают и расслабляют мышцы и связки, запуска обменные процессы, которые помогают полноценно питать ткани организма, благотворно влияя не только на внешний подтянутый вид тела, но и нормализацию работы внутренних процессов. Массажер для ног прекрасно справится с посттравматическим восстановлением организма, а также снимет психоэмоциональное напряжение, избавит от тревожности и вернет здоровый сон. Массажер компактен и прост в применении. Интуитивно понятное сенсорное управление поможет с легкостью выбрать подходящий уровень воздействия роликов и интенсивность компрессионного давления. Благодаря низкому уровню шума и компактным размерам массажер можно удобно разместить под рабочим столом в офисе и при этом не доставлять неудобств своим коллегам. В комплекте с устройством поставляется пульт управления, который добавит комфорта в процесс массажа, ограждая от дополнительных телодвижений в момент расслабления. Массажер неприхотлив и не требует особого ухода. Съемные чехлы легко стираются, а поверхность устройства можно быстро протереть сухой салфеткой.

УСТРОЙСТВО БУДЕТ ПОЛЕЗНО ЛЮДЯМ ЛЮБОГО ВОЗРАСТА И СТАНЕТ ИДЕАЛЬНЫМ СРЕДСТВОМ:

- для снятия болевого синдрома после регулярных физических нагрузок и стоячей работы;
- для снятия эмоционального и мышечного напряжения;
- при малоподвижном образе жизни или длительном нахождении в сидячем положении;
- для профилактики варикозного расширения вен;
- для уменьшения отечности ног;
- для улучшения общего состояния организма;
- для профилактики плоскостопия.

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАССАЖЕРА:

- во время беременности;
- после недавно перенесенных травм;
- при отеках различного рода;
- при онкологических заболеваниях;
- при сосудистых заболеваниях;
- при склонности к тромбообразованию;
- при следующих заболеваниях: остеопороз, расстройство сознания, эпилепсия, туберкулез, сердечная дисфункция или кровотечение;
- при ранах и других повреждениях кожи стопы;
- при грибковых поражениях стопы;
- при крайних стадиях варикозного расширения вен;
- при воспалительных процессах;
- при повышенной температуре тела;
- при гипертонии и других проблемах с артериальным давлением;

В каждом из перечисленных случаев требуется консультация врача.

Регулярное использование массажера для стоп и лодыжек «ФУДЖИ» поможет своевременно снять накопившееся напряжение, избавит от хронической бессонницы и обеспечит улучшение общего состояния организма. Кроме того, частое применение массажера стимулирует защитные функции организма, повышая его иммунный статус.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Многофункциональное массажное устройство;
- Современный эргономичный дизайн;
- Функция ИК-нагрева;
- Управление Touch screen и пульт дистанционного управления;
- 3 скорости роликов, 3 уровня компрессии;
- Таймер на 15 минут;

ИНСТРУКЦИЯ

Характеристики:

- Усовершенствованный массажер для ног обеспечивает массажирование обеих стоп, икр и лодыжек одновременно или по отдельности.
- Универсальный вращающийся массажный узел обеспечивает комфортный профессиональный массаж.
- Облегчение боли. Когда устройство включено, подвижные узлы начинают массировать подошвы и свод стопы, в то время как ритмичное сжатие воздуха сильно сдавливает стопы, улучшая кровообращение и снимая мышечное напряжение, для достижения максимального расслабления.

02

- Три режима массажа. Представлены три уровня интенсивности сжатия воздуха и три скорости массажа, таким образом, каждый раз вы получаете необходимую интенсивность давления.
- Функция нагрева. Встроенная функция нагрева позволяет разогреть пальцы ног во время массажа, что делает массажер идеальным устройством для людей, которым всегда холодно.
- В комплект входят многозарядные чехлы. Устройство имеет две отдельные камеры для ног с моющимися тканевыми чехлами, которые изготовлены из экологически чистых материалов.

Технические характеристики:

Материал: АБС пластик, полиэстер, металл.
Цвет: серый.
Входное напряжение: 220~240 В.
Потребляемая мощность: 30 Вт.
Частота - 50Гц-60Гц.
Размер массажера: 36,5х39,98х22,68 см.
Температура нагрева во время работы: от +10 °С до 40°С.
Комплектация: массажер — 1 шт., адаптер сети — 1 шт., инструкция, пульт управления.

Комплектация:

Массажер для ног — 1 шт.
Пульт дистанционного управления — 1 шт.
Руководство пользователя — 1 шт.



03

Меры предосторожности:

- Данное изделие не рекомендуется использовать лицам с ограниченными физическими возможностями, легко возбудимым, с психическими расстройствами или отсутствием соответствующего опыта и знаний.
- Не рекомендуется использовать массажер детям без контроля со стороны родителей.
- Будьте осторожны, если вы чувствительны к теплу, так как поверхность нагревается.
- Если шнур питания поврежден, во избежание опасности он должен быть отремонтирован специалистом сервисной службы производителя или аналогичного подразделения.
- Прекратите использование массажера, если вы почувствуете недомогание при использовании устройства. Не используйте устройство, если кабель питания или вилка повреждены или облиты водой.
- Для людей, чьи стопы чувствительны к массирующему воздействию, этот массажер вначале может показаться немного болезненным. Мы предлагаем немного приподнимать стопы, и постепенно, после нескольких применений ноги адаптируются к массажеру.
- Не используйте устройство во влажной или запыленной среде, чтобы избежать повреждения.
- Не оставляйте устройство, когда температура в помещении превышает 30°С.
- Не оставляйте устройство на улице.
- Не ставьте устройство вблизи электронагревательных приборов, плит или в местах попадания прямых солнечных лучей.

Рекомендации по отключению питания:


- Пожалуйста, отключайте питание при возникновении следующих ситуаций:
- При попадании воды или другой жидкости в прибор;
 - Если чувствуете неприятную боль во время использования массажера;
 - Если во время использования прибор работает некорректно;
 - Если выключатель вышел из строя;
 - Во время грозы с молнией.

ВАЖНО! ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТКЛЮЧАЙТЕ МАССАЖЕР ИЗ СЕТИ ПИТАНИЯ ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

04

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:

- Кнопка питания «ON/OFF» (Вкл./Выкл.): Нажмите кнопку, чтобы включить или выключить устройство.
- Кнопка скорости «SPEED» (Скорость): Режим по умолчанию - R1 с массажером на более низкой скорости вращения. Нажмите кнопку один раз, чтобы перейти на массаж со средней скоростью R2, и дважды нажмите кнопку, чтобы перейти на массаж с высокой скоростью R3. R0 означает отключение роликового массажа, только интенсивность сжатия воздуха.
- Кнопка интенсивности «INTENSITY» (Интенсивность): Интенсивность по умолчанию равна L1 при низкой интенсивности сжатия воздуха. Нажмите один раз, чтобы увеличить до средней интенсивности сжатия воздуха L2, и дважды нажмите, чтобы увеличить до высокой интенсивности сжатия воздуха L3. L0 означает отсутствие интенсивности сжатия воздуха, только воздействие роликового массажа.
- Кнопка нагрева «HEAT» (Нагрев): Режим нагрева по умолчанию выключен, вы можете нажать кнопку нагрева, чтобы включить его.
- Кнопка времени «TIMER» (Таймер): Режим по умолчанию - таймер на 15 минут. Нажмите один раз, чтобы увеличить время на 5 минут. 30 минут — Максимальная продолжительность времени массажа. Когда таймер равен 30 минутам, можно нажать один раз, чтобы уменьшить время на 5 минут. 5 минут - самая короткая продолжительность времени массажа.

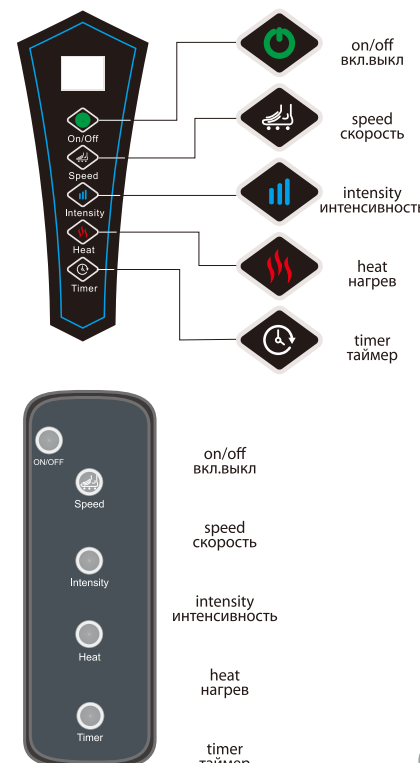

05

1. Чистка.

- 1.1 Перед чисткой убедитесь, что аппарат выключен, и выньте вилку из розетки.
- 1.2 Используйте сухую ткань для очистки поверхности изделия. Никогда не используйте агрессивные чистящие средства, такие как бензол или разбавитель.
- 1.3 Убедитесь, что многоразовый чехол для ног высушен и может использоваться в устройстве.

2. Хранение.

- 2.1 Убирайте устройство в коробку и храните в безопасном, прохладном, сухом и проветриваемом помещении.
- 2.2 Не перекручивайте шнур питания.
- 2.3 Избегайте повреждения поверхности изделия острыми предметами. Не размещайте данное изделие под прямыми солнечными лучами или при высоких температурах.
- 2.4 Никогда не подвешивайте устройство за шнур питания.
- 2.5 Если вы не используете устройство в течение длительного времени, для предотвращения попадания пыли внутрь используйте крышку.

06

07

08

01