

REVYLINE


RL 660 *New*

PORTABLE ORAL IRRIGATOR

ПОРТАТИВНЫЙ ИРРИГАТОР
для полости рта



Revyline is your professional
care of teeth and gums at home
Профессиональная защита зубов и десен
в домашних условиях

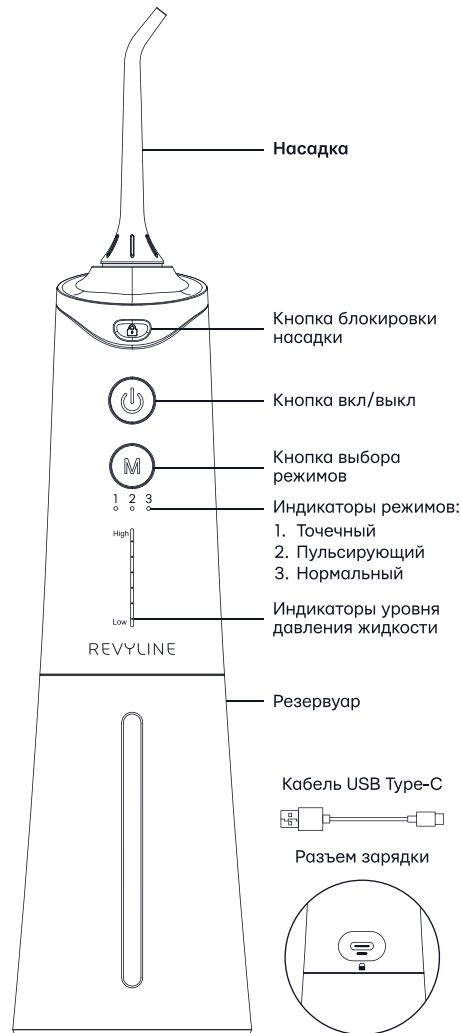

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОРТАТИВНЫЙ ИРРИГАТОР
для полости рта REVYLINE
Модель: RL 660

Предназначен для профилактики
болезней зубов и десен.

- 3 режима работы
- 6 уровней давления
- Емкость резервуара: 200 мл
- Уровень давления жидкости: 207–827 кПа
- Частота пульсации: 1800 в мин.
- Литиево-ионный аккумулятор: 1500 mAh
- Время полной зарядки – 4 ч.
- Уровень влагозащиты: IPX7
- Потребляемая мощность: 10 Вт
- Гарантия – 2 года
- Средний срок службы – 5 лет
- Хранить при комнатной температуре

Более подробная информация о мерах
предосторожности, предупреждениях
медицинского характера, зарядке
аккумулятора, процессе чистки, уходе
за ирригатором, гарантийных случаях –
на сайте.

www.revyline.ru

СОБЕРИ СВОЮ ЛУЧШУЮ

ЛИНЕЙКУ СРЕДСТВ ГИГИЕНЫ

для полости рта REVYLINE

Электрические звуковые зубные щетки



Электрическая звуковая зубная
щетка благодаря интенсивности
колебаний щетинок улучшает
качество чистки зубов, полирует
эмаль, эффективно очищает
межзубные промежутки, зубодес-
невую линию.

Мануальные щетки



При выборе мануальной щетки
важно обращать внимание на
следующее: у вашей щетки
должна быть высокая плотность
щетины (не менее 5000–6000
щетинок), кончики щетинок
должны быть скругленными,
а головка – компактной.

Монопучковые щетки



Монопучковая щетка используется
для точечного очищения зубов,
особенно дальних, межзубных
промежутков, а также придесневой
линии. Она незаменима при
уходе за брекетами и другими
ортодонтическими конструкциями.

Зубные пасты



Зубная паста – дополнительное
средство ухода за полостью рта.
К ее выбору нужно подходить
индивидуально, учитывая состав,
предназначение, уровень абразивности
и прочее.

Зубные нити



Нить эффективно очищает
пространства между зубами.
В ассортименте Revyline – плоские и
круглые, вощеные и невоощеные нити.

Скребки для языка



Скребок удаляет бактериальный
налет с поверхности языка, что
предотвращает развитие целого ряда
стоматологических заболеваний.

Межзубные ершики



Ершик эффективен при очищении
межзубных промежутков и боковых
поверхностей зубов, незаменим при
уходе за несъемными ортодонтиче-
скими конструкциями, имплантатами
и оголенными шейками зубов.

Бальзамы и ополаскиватели



Бальзамы и ополаскиватели предназ-
начены для гигиенического ухода,
профилактики и лечения стоматологи-
ческих заболеваний. Используются как
средства для ополаскивания полости
рта и для приготовления растворов для
процедур ирригации.

REVYLINE

Спасибо, что выбираете Revyline!

Благодаря вам мы не просто развиваем наш бренд –
мы делаем гигиену полости рта эффективной,
осознанной и доступной каждому, мы получаем
возможность поддерживать школы и детские сады,
больницы и детские дома, а также – самые разные
благотворительные и учебные проекты.



Вместе с вами
мы дарим улыбку тем,
кому она особенно
необходима!

Максим Обушенков,
врач-стоматолог,
руководитель компании
Revyline (основана в 2013 году)



Каждый товар Revyline имеет
сертификат качества.



Гарантия на все электрические приборы
бренда Revyline – 2 года.



Сервисные центры Revyline есть на всей
территории России.

Напишите о Ваших впечатлениях о купленном
приборе на той площадке, где Вы приобрели его,
пришлите ссылку на опубликованный отзыв
в WhatsApp +7 969 010 30 87

и получите **200 руб.**
на Ваш телефон за отзыв!

Если вдруг что-то пойдет не так, просто позвоните:

+7 969 010 30 87

Всегда с Вами, Ваш Revyline

8 (800) 775-38-49 @ www.revyline.ru



Поздравляем!

Уважаемый клиент, вы стали обладателем высокотехнологичного устройства, которое позволит вашим зубам и деснам быть здоровыми и красивыми. Ощутите новый уровень чистоты уже после первого применения.

ИНСТРУКЦИЯ

Зарядка аккумулятора

Для зарядки аккумулятора используйте кабель USB Type-C, входящий в комплект.

Перед первым использованием прибора аккумуляторную батарею необходимо зарядить полностью. Во время зарядки три индикатора режимов поочередно загораются красным цветом.

Когда аккумулятор зарядится полностью, индикаторы загораются белым цветом одновременно.

Время полной зарядки аккумулятора составляет 4–5 часов в зависимости от источника питания.

Внимание! Во время зарядки аккумулятора пользоваться устройством нельзя.

Насадки в комплекте

В базовой комплектации портативного ирригатора RL 660 2 стандартные сменные насадки.

Внимание! Насадка должна быть строго индивидуальной. Совместное использование одной насадки различными пользователями не рекомендуется.

Установка и замена насадки

Установите насадку в разъем, расположенный на верхней части ирригатора, и, надавливая, вставьте ее до щелчка. Для удаления насадки удерживайте нажатой кнопку блокировки и извлеките насадку из корпуса прибора.

Внимание! Не нажимайте кнопку извлечения насадки во время работы устройства.

Установка и снятие резервуара для жидкости

Удерживайте корпус ирригатора левой рукой, а правой поверните резервуар по часовой стрелке и, потянув, отделите от корпуса. Чтобы установить резервуар, совершите обратные действия.

Примечание: В резервуаре вы можете заметить некоторое количество жидкости. Это дистиллированная вода, оставшаяся после заводской проверки. Она не представляет никакой опасности для вашего здоровья.

Наполнение резервуара

Снимите резервуар и наполните его кипяченой очищенной водой. Заливайте в резервуар воду, температура которой не выше +40 °С, или раствор, рекомендованный лечащим врачом-стоматологом.

Включение и выключение прибора

- 1 Для включения прибора один раз нажмите кнопку питания ON/OFF.
- 2 Для выключения ирригатора нажмите один раз на кнопку ON/OFF.

Выбор режима работы

Выбор режима осуществляется с помощью длительного нажатия кнопки «М», что подтверждается включением соответствующего светового индикатора на корпусе устройства.

Портативный ирригатор RL 660 позволяет использовать 3 режима работы:

Нормальный – предназначен для регулярного использования, эффективно удаляет остатки пищи и бактериальный налет из межзубных промежутков и с поверхности зубов.

Пульсирующий – ирригатор подает струю жидкости, чередуя высокое и низкое давление. Режим рекомендован для массажа десен и ежедневного применения.

Точечный – ирригатор подает пульсирующую струю жидкости под давлением, затем следует пауза и цикл повторяется. Режим эффективен для устранения частиц пищи из межзубных промежутков.

Прибор может работать в режиме чистки (ирригации) с различными уровнями давления.

Выбор уровня давления осуществляется короткими нажатиями кнопки «М», что подтверждается количеством высвеченных делений на индикаторе.

После включения ирригатор будет работать в том режиме, какой использовался последним перед отключением устройства.

Внимание! В начале применения прибора рекомендуется использовать прибор на низком давлении. Это поможет адаптироваться к ирригационной чистке и избежать риска появления воспаления и кровоточивости десен.

Режим ирригации


Расположите насадку под углом 45 градусов к поверхности зуба.

Включите ирригатор, направьте водную струю на область чистки.

Вода должна естественным образом стекать из полости рта в раковину.

Для получения лучших результатов вначале обработайте область боковых зубов, а затем передних.

Продвигайте насадку вдоль контура десны, задерживая ее в межзубных промежутках.

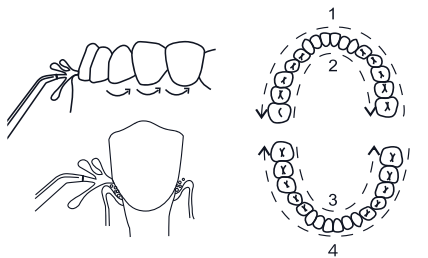

После завершения ирригации

Нажмите кнопку выключения питания. Слейте оставшуюся в резервуаре жидкость. При необходимости зарядите аккумуляторную батарею.

Ни в коем случае не погружайте ирригатор в какую-либо жидкость!

Резервуар

После каждой процедуры ирригации сливайте из резервуара оставшуюся в нем жидкость. Такие меры предосторожности при длительном использовании прибора помогут избежать образования известкового налета на его деталях и возникновения неприятного запаха.

Уход и обслуживание

Запрещено хранить жидкость в резервуаре, а также использовать прибор в горизонтальном положении.

Используйте мягкую ткань и мягкий неабразивный очиститель для очистки поверхности прибора.

В процессе эксплуатации из-за жесткой воды на деталях прибора могут образовываться известковые отложения. Для их устранения используйте специальное средство Revyline для очистки ирригатора, согласно инструкции по его применению.

Производитель рекомендует проводить чистку ирригатора от одного до трех раз в три месяца в зависимости от жесткости воды.

Гарантия

Гарантия на прибор – 2 года

Гарантированное техническое обслуживание прибора осуществляется в течение действующего гарантийного срока бесплатно. Далее обслуживание щетки осуществляется за счет покупателя.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Основной блок ирригатора
- 2 сменные насадки
- Кабель USB Type-C
- Дорожная сумка
- Инструкция по эксплуатации
- Гарантийный талон

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Название организации _____

Дата продажи _____

Место для печати

По всем вопросам обращайтесь на горячую линию:

8 (800) 775-38-49 www.revyline.ru

Импортер: ООО "МГАДЖЕТ", 140002, г.Люберцы, Октябрьский проспект 20, корп. 2
Импортер в Казахстан: ТОО "МГАДЖЕТ КЗ", г. Алматы, ул. Толе би 23А, офис 24
Дата производства: Декабрь 2023

Производитель:
Shenzhen Yuxinyuan Electronic Technology Co.,Ltd
301, No. 2, Hualangjia Industrial Park, No. 28,
Tongfuyu Industrial Area, Kukeng Community,
Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen, China