

REVYLINE

RL 450 *New*


PORTABLE ORAL IRRIGATOR

ПОРТАТИВНЫЙ ИРРИГАТОР
ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА



Revyline is your professional care of teeth and gums at home

Профессиональная защита зубов и десен в домашних условиях

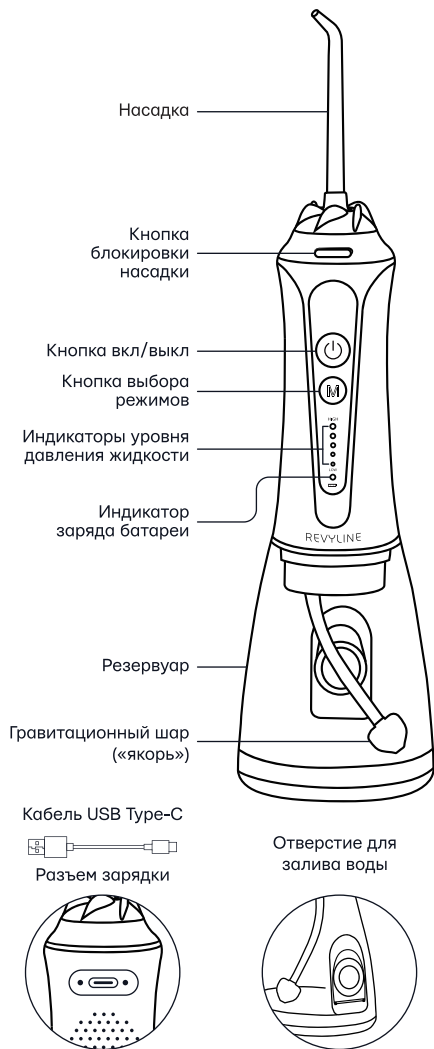

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОРТАТИВНЫЙ ИРРИГАТОР
ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА REVYLINE
Модель: RL 450

Предназначен для профилактики
болезней зубов и десен.

- 5 режимов работы
- Емкость резервуара: 300 мл
- Уровень давления жидкости: 275–758 кПа
- Частота пульсации: 1200 в мин.
- Литиево-ионный аккумулятор: 2000 mAh
- Время полной зарядки: 5 ч.
- Уровень влагозащиты: IPX7
- Потребляемая мощность: 21 Вт
- Материал корпуса: ABS-PC
- Гарантия: 2 года
- Средний срок службы: 5 лет
- Хранить при комнатной температуре

Более подробная информация о мерах предосторожности, предупреждениях медицинского характера, зарядке аккумулятора, процессе чистки, уходе за ирригатором, гарантийных случаях – на сайте.

www.revyline.ru

СОБЕРИ СВОЮ ЛУЧШУЮ

ЛИНЕЙКУ СРЕДСТВ ГИГИЕНЫ

ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА REVYLINE

Электрические звуковые зубные щетки



Электрическая звуковая зубная щетка благодаря интенсивности колебаний щетинок улучшает качество чистки зубов, полирует эмаль, эффективно очищает межзубные промежутки, зубодесневую линию.

Мануальные щетки



При выборе мануальной щетки важно обращать внимание на следующее: у вашей щетки должна быть высокая плотность щетины (не менее 5000–6000 щетинок), кончики щетинок должны быть скругленными, а головка – компактной.

Монопучковые щетки



Монопучковая щетка используется для точечного очищения зубов, особенно дальних, межзубных промежутков, а также при десневой линии. Она незаменима при уходе за брекетами и другими ортодонтическими конструкциями.

Зубные пасты



Зубная паста – дополнительное средство ухода за полостью рта. К ее выбору нужно подходить индивидуально, учитывая состав, предназначение, уровень абразивности и прочее.

Зубные нити



Нить эффективно очищает пространства между зубами. В ассортименте Revyline – плоские и круглые, вощеные и невоощеные нити.

Скребки для языка



Скребок удаляет бактериальный налет с поверхности языка, что предотвращает развитие целого ряда стоматологических заболеваний.

Межзубные ершики



Ершик эффективен при очищении межзубных промежутков и боковых поверхностей зубов, незаменим при уходе за несъемными ортодонтическими конструкциями, имплантатами и оголенными шейками зубов.

Бальзамы и ополаскиватели



Бальзамы и ополаскиватели предназначены для гигиенического ухода, профилактики и лечения стоматологических заболеваний. Используются как средства для ополаскивания полости рта и для приготовления растворов для процедур ирригации.

REVYLINE

Спасибо, что выбираете Revyline!

Благодаря вам мы не просто развиваем наш бренд – мы делаем гигиену полости рта эффективной, осознанной и доступной каждому, мы получаем возможность поддерживать школы и детские сады, больницы и детские дома, а также – самые разные благотворительные и учебные проекты.



Вместе с вами мы дарим улыбку тем, кому она особенно необходима!

Максим Обушенков,
врач-стоматолог,
руководитель компании
Revyline (основана в 2013 году)



Каждый товар Revyline имеет сертификат качества.



Гарантия на все электрические приборы бренда Revyline – 2 года.



Сервисные центры Revyline есть на всей территории России.

Напишите о Ваших впечатлениях о купленном приборе на той площадке, где Вы приобрели его, пришлите ссылку на опубликованный отзыв в WhatsApp +7 969 010 30 87

и получите **200 руб.**
на Ваш телефон за отзыв!

Если вдруг что-то пойдет не так, просто позвоните:

+7 969 010 30 87

Всегда с Вами, Ваш Revyline



8 (800) 775-38-49 @ www.revyline.ru



Поздравляем!

Уважаемый клиент, вы стали обладателем высокотехнологичного устройства, которое позволит вашим зубам и деснам быть здоровыми и красивыми. Ощутите новый уровень чистоты уже после первого применения.

ИНСТРУКЦИЯ

Зарядка аккумулятора

Для зарядки аккумулятора используйте кабель USB Type-C, входящий в комплект.

Перед первым использованием прибора аккумуляторную батарею необходимо зарядить полностью.

В процессе зарядки индикатор заряда батареи мигает красным цветом.

Когда аккумулятор зарядится полностью, индикатор заряда батареи загорится зеленым цветом.

Время полной зарядки аккумулятора составляет 4–5 часов в зависимости от источника питания.

Внимание! Во время зарядки аккумулятора пользоваться устройством нельзя.

Насадки в комплекте

В базовой комплектации портативного ирригатора RL 450 5 сменных насадок в прозрачном пластиковом пенале.

Внимание! Насадка должна быть строго индивидуальной. Совместное использование одной насадки различными пользователями не рекомендуется.

2 стандартные насадки для регулярного использования.

Пародонтальная насадка с резиновым наконечником для очищения десневых карманов.

Ортодонтическая насадка для ухода за брекетами и другими системами.

Насадка для очищения поверхности языка.

Установка и замена насадки

Установите насадку в разъем, расположенный на верхней части ирригатора, и, надавливая, вставьте ее до щелчка. Для удаления насадки удерживайте нажатой кнопку блокировки и извлеките насадку из корпуса прибора.

Внимание! Не нажимайте кнопку извлечения насадки во время работы устройства.

Установка и снятие резервуара для жидкости

Удерживайте корпус ирригатора левой рукой, а правой поверните резервуар по часовой стрелке и, потянув, отделите от корпуса. Чтобы установить резервуар, совершите обратные действия.

Примечание:

В резервуаре вы можете заметить некоторое количество жидкости. Это дистиллированная вода, оставшаяся после заводской проверки. Она не представляет никакой опасности для вашего здоровья.

Наполнение резервуара

Наполнять резервуар удобнее всего через боковое отверстие. Для этого откройте заглушку резервуара и налейте чистую воду. Закройте заглушку.

Заливайте в резервуар воду, температура которой не выше +40 °C, или раствор, рекомендованный лечащим врачом-стоматологом.

Включение и выключение прибора

1 Для включения прибора один раз нажмите кнопку питания ON/OFF.

2 Для выключения ирригатора нажмите один раз на кнопку ON/OFF.

Выбор режима работы

Выбор уровня давления в режиме чистки осуществляется кнопкой MODE, что подтверждается включением соответствующего светового индикатора на корпусе устройства.

- Портативный ирригатор RL 450 может работать в режиме чистки (ирригации) с различными уровнями давления:
- – 758 кПа
 - – 690 кПа
 - – 550 кПа
 - – 415 кПа
 - – 275 кПа

После включения ирригатор будет работать в том режиме, который использовался последним перед отключением устройства.

Внимание! В начале применения прибора рекомендуется использовать прибор на низком давлении. Это поможет адаптироваться к ирригационной чистке и избежать риска появления воспаления и кровоточивости десен.

Режим ирригации


• Расположите насадку под углом 45 градусов к поверхности зуба.

• Включите ирригатор, направьте водную струю на область чистки.

• Вода должна естественным образом стекать из полости рта в раковину.

• Для получения лучших результатов вначале обработайте область боковых зубов, а затем передних.

• Продвигайте насадку вдоль контура десны, задерживая ее в межзубных промежутках.

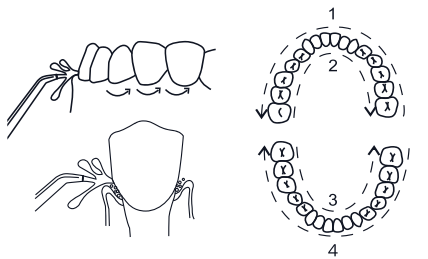

После завершения ирригации

Нажмите кнопку выключения питания. Слейте оставшуюся в резервуаре жидкость. При необходимости зарядите аккумуляторную батарею.

Ни в коем случае не погружайте ирригатор в какую-либо жидкость!

Резервуар

После каждой процедуры ирригации сливайте из резервуара оставшуюся в нем жидкость. Такие меры предосторожности при длительном использовании прибора помогут избежать образования известкового налета на его деталях и возникновения неприятного запаха.

Уход и обслуживание

• Запрещено хранить жидкость в резервуаре, а также использовать прибор в горизонтальном положении.

• Используйте мягкую ткань и мягкий неабразивный очиститель для очистки поверхности прибора.

• В процессе эксплуатации из-за жесткой воды на деталях прибора могут образовываться известковые отложения. Для их устранения используйте специальное средство Revyline для очистки ирригатора, согласно инструкции по его применению.

• Производитель рекомендует проводить чистку ирригатора от одного до трех раз в три месяца в зависимости от жесткости воды.

Гарантия

Гарантия на прибор – 2 года

Гарантированное техническое обслуживание прибора осуществляется в течение действующего гарантийного срока бесплатно. Далее обслуживание щетки осуществляется за счет покупателя.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Основной блок ирригатора

5 сменных насадок в пенале

Кабель USB Type-C

Дорожная сумка

Инструкция по эксплуатации

Гарантийный талон

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Название организации _____

Дата продажи _____

Место для печати

По всем вопросам обращайтесь на горячую линию:

8 (800) 775-38-49 www.revyline.ru

Импортер: ООО "МГАДЖЕТ", 140002, г.Люберцы, Октябрьский проспект 20, корп. 2
Импортер в Казахстан: ТОО "МГАДЖЕТ КЗ", г. Алматы, ул. Толе би 23А, офис 24
Дата производства: Декабрь 2023

Производитель:
Shenzhen BFT Electrical Appliances
Manufacturing Co., Ltd 3F, bldg 10, Changxing
S&T park, Wanan Rd, Shayi, Shajing Town,