

Smartwave®

Аппарат прессотерапии Smartwave 400

Smartwave®



Manufacturer's address: Dongguan Sunbright Electric Appliance Co., Ltd. № 102, Shangdong
Yiheng East Road, Qishi Town 523455 Dongguan City, Guangdong Province, China.

www.smartwave-europe.eu



Инструкция по эксплуатации

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию
перед использованием и сохраните ее
для дальнейшего использования.

СОДЕРЖАНИЕ

Общая информация и показания	2-2
Техника безопасности и противопоказания	2-3
Порядок использования	4-6
После использования аппарата	6-7
Часто задаваемые вопросы	7-8
Устранение неисправностей	9-9
Хранение и обслуживание	10-10
Правила утилизации	10-10
Комплектность	10-10
Технические характеристики	11-11

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ПОКАЗАНИЯ

Благодарим Вас за выбор аппарата для прессотерапии Smartwave 400!

Аппарат для прессотерапии Smartwave 400 служит для проведения процедур лимфодренажного массажа (прессотерапии) в домашних условиях. Принцип действия основан на нагнетании сжатого воздуха по заданной программе в секции манжет, которые надеваются на тело. За счет последовательного накачивания секций в манжетах достигается массажный эффект, значительно усиливается циркуляция крови и лимфы. Лимфодренажный массаж (или прессотерапия) позволяет снять усталость в ногах, избавиться от отеков, улучшить кровоснабжение и микроциркуляцию в тканях. Лимфодренажный массаж особенно показан при состояниях и заболеваниях, которые связаны с малоподвижным образом жизни.

Области применения аппарата Smartwave 400:

ЗДОРОВЬЕ



- снятие усталости, стресса;
- снятие отеков;
- улучшение кровообращения;
- улучшение циркуляции лимфы;
- профилактика варикозного расширения вен;
- прочее.

КРАСОТА



- борьба с лишним весом;
- борьба с целлюлитом;
- повышение тонуса кожи;
- уменьшение видимых вен;
- прочее.

СПОРТ



- быстрое восстановление;
- повышение спортивных результатов;
- лечение травм;
- прочее.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь со следующими мерами предосторожности, чтобы обеспечить безопасную и правильную эксплуатацию аппарата.

Предупреждения и противопоказания:

Не допускается переоборудование аппарата.

1. Если во время процедуры вы испытываете боль, какие-либо необычные или неприятные симптомы или хотите снять манжеты в экстренной ситуации:
 - Нажмите кнопку питания, чтобы отключить устройство и отсоединить шланги;
 - Снимите манжеты и проконсультируйтесь с врачом.
2. Проконсультируйтесь с врачом перед использованием аппарата, если у вас имеются противопоказания:
 - воспаление, инфекция, боль неизвестного происхождения в зоне массажа или вблизи неё;
 - переломы костей, вывихи, открытые травмы в обрабатываемой зоне;
 - остеопороз;
 - кардиостимулятор или одновременно-используемые другие медицинские приборы, чувствительные к электрическим помехам;
 - злокачественные опухоли;
 - заболевания сердца;
 - серьезная периферическая невропатия, дисфункция или нарушения чувствительности, вызванные диабетом;
 - высокая температура;
 - обострение хронических заболеваний.
3. Храните аппарат в месте, недоступном для младенцев, детей младшего возраста и людей, не имеющих возможности правильно использовать его самостоятельно.
4. Не повреждайте, чрезмерно не сгибайте, не тяните и не перекручивайте электрический кабель адаптера питания. В противном случае это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
5. Запрещается использовать аппарат, если адаптер питания неисправен или поврежден.
6. Не подключайте и не отсоединяйте адаптер питания мокрыми руками.
7. Не накрывайте ничем аппарат и не используйте аппарат при высокой температуре.
8. Запрещается переделывать, разбирать или ремонтировать аппарат самостоятельно.
9. Используйте источник питания, входящий в комплект поставки системы. Использование другого источника питания может привести к неправильной работе системы.
10. Не используйте аппарат в ванной комнате или в других местах с повышенной влажностью.
11. Храните аппарат в недоступном для детей месте.
12. Отключайте адаптер питания от сети, когда вы не пользуетесь аппаратом.


13. Не оставляйте аппарат, блок питания или какие-либо аксессуары там, где они могут быть повреждены детьми, домашними животными, или подвержены другому негативному воздействию.
14. Аппарат предназначен для проведения процедуры одновременно только одному человеку.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

АППАРАТ




ЭКРАН

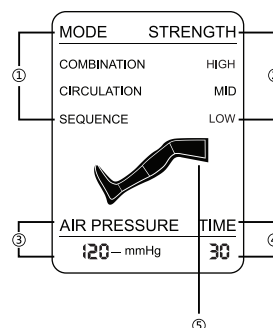


- ①. Текущий режим
- ②. Уровень давления
- ③. Текущее давление
- ④. Таймер
- ⑤. Индикация камер

ШЛАНГИ

1. Т-коннектор для шлангов.
2. Коннектор для подключения манжет к аппарату

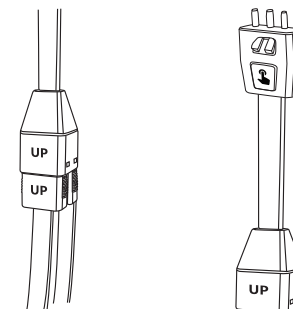

АДАПТЕР

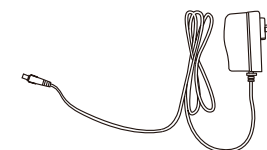


МАНЖЕТЫ




1. Все соединения должны быть герметичными.


* Для правильной работы прибора обе манжеты должны быть подсоединены.

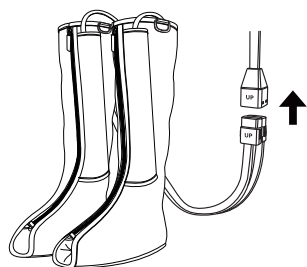


2. Вставьте до конца коннектор воздушного шланга в аппарат (будет слышен щелчок).

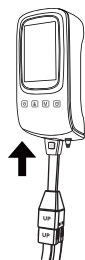

3. Надежно подсоедините адаптер к розетке и аппарату, раздастся звуковой сигнал, экран будет мигать в течение 1 секунды.

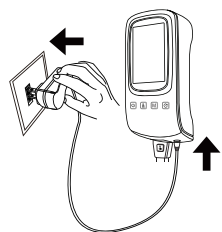

4. Правильно наденьте манжеты на ноги.

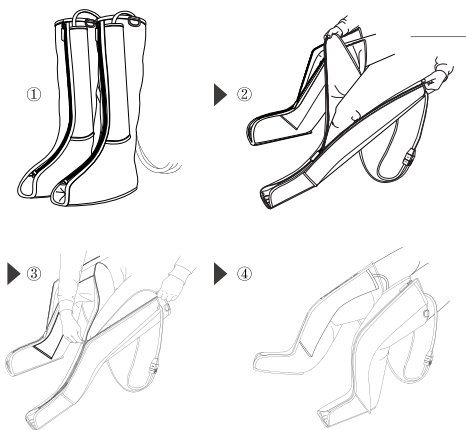


Советы:

- Пожалуйста, убедитесь, что молния полностью застегнута перед массажем, никогда не пытайтесь использовать систему с частично или полностью расстегнутой молнией.
- Для удобства, при надевании, вы можете использовать D-образное кольцо на верхней части манжеты.





5. Найдите удобное для себя положение сидя, полулежа или лежа. Нажмите кнопку включения.

- При включении будет слышен сигнал, экран засветится и отобразит текущую настройку.




• По умолчанию при включении аппарата, выбран Режим 1 (последовательный), уровень давления - минимальный, время 20 минут.

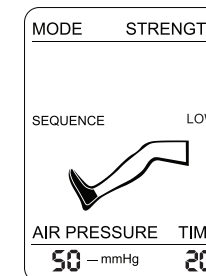

6. Нажмите кнопку изменения режимов чтобы изменить режим работы аппарата. Для выбора доступны 3 режима работы. Разницу между режимами можно посмотреть в разделе «Часто задаваемые вопросы».

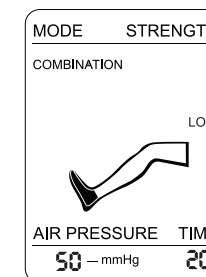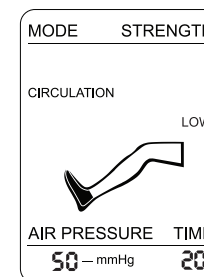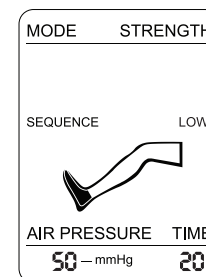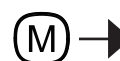

7. Нажмите кнопку регулировки давления чтобы отрегулировать давление в манжетах, возможна установка 8 уровней давления.
* Мы рекомендуем вам начать с низких уровней давления при первом использовании, постепенно увеличивая его в соответствии с Вашими ощущениями.

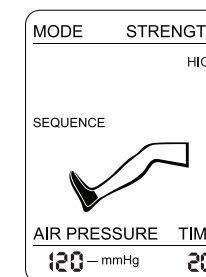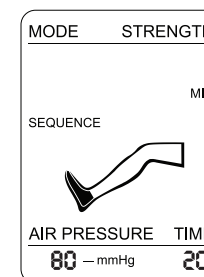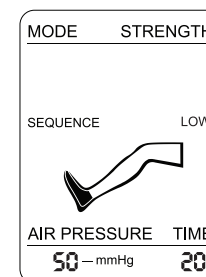

8. Нажмите кнопку изменения времени чтобы изменить время процедуры: 20, 25 или 30 минут. Время может быть изменено в любое время во время работы прибора. Отсчет времени начинается заново после нажатия кнопки.



MODE	STRENGTH
SEQUENCE	LOW
AIR PRESSURE	TIME
50 — mmHg	20


MODE	STRENGTH
SEQUENCE	LOW
AIR PRESSURE	TIME
50 — mmHg	25

MODE	STRENGTH
SEQUENCE	LOW
AIR PRESSURE	TIME
50 — mmHg	30

9. Устройство автоматически отключится по истечении времени процедуры, вы можете нажать кнопку включения, если захотите продлить процедуру или закончить массаж раньше в любое время.

ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АППАРАТА

1. Если вы закончили пользоваться аппаратом, выключите аппарат, нажав кнопку питания, и отсоедините адаптер от аппарата и розетки.
2. Отсоедините воздушный шланг от аппарата, нажав на кнопку в верхней части коннектора и потянув его на себя.
3. Отсоедините манжеты от Т-коннектора.
4. Упакуйте все аксессуары в оригинальную упаковку или в сумку для хранения.

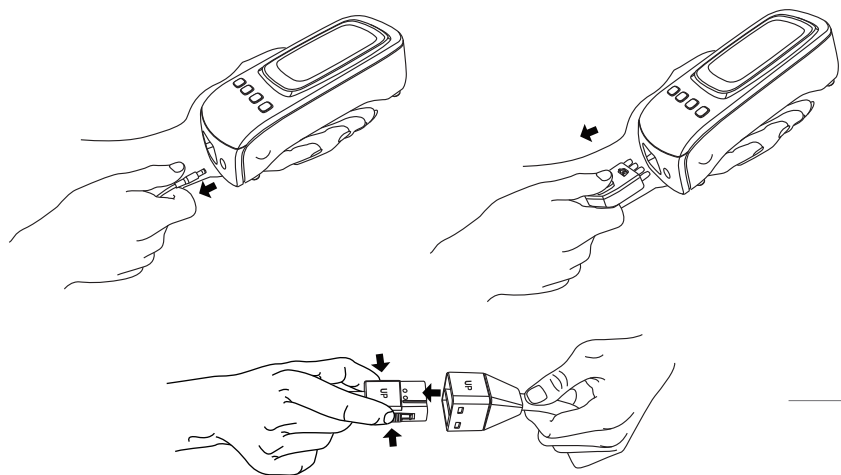

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ


Вопрос 1: Как работает аппарат?

Ответ 1: Аппарат по нескольким отдельным каналам подает сжатый воздух в манжеты, которые надеваются на тело. 4 воздушные камеры (стопа, нижняя часть икры, верхняя часть голени и бедро) надуваются и сдуваются в сложной последовательности для стимуляции максимального притока крови в ногах и по всему телу, что помогает улучшить кровоток и лимфоток в ногах и во всем теле.


Вопрос 2: Сколько режимов массажа и в чем разница?

Ответ 2: Существует 3 режима массажа:


Режим 1: Последовательный режим

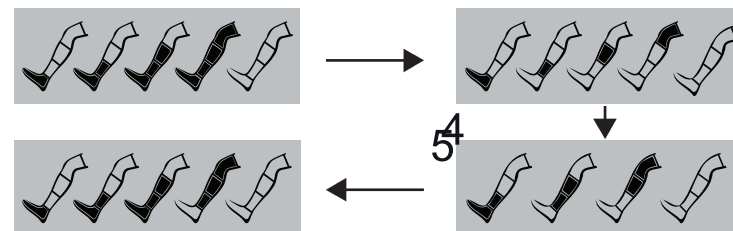

Режим 2: Циркуляционный режим

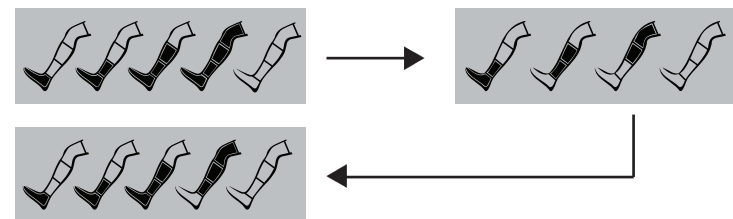

Режим 3: Комбинированный режим

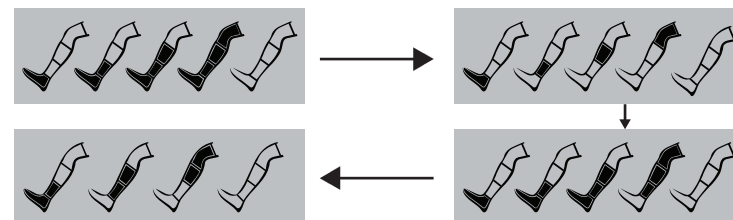

Вопрос 3: Что мне следует сделать, если я чувствую, что давление слишком низкое или слишком высокое?

Ответ 3: Аппарат имеет 8 уровней интенсивности массажа, пожалуйста, выберите тот, который подходит именно вам. Процедура должна быть комфортна. Если вы чувствуете, что при самом низком уровне давления, воздействие слишком сильное и доставляет дискомфорт, прекратите использование аппарата, в этом случае мы рекомендуем проконсультироваться с врачом прежде чем использовать аппарат далее.

Вопрос 4: В какое время суток следует использовать аппарат?

Ответ 4: Вы можете использовать аппарат в любое удобное для вас время по необходимости и самочувствию. Можно проводить массаж несколько раз в день. При каждодневном применении аппарата, рекомендуется периодически делать перерывы в использовании на несколько дней.

Вопрос 5: Сколько времени должна длиться процедура массажа для максимального эффекта?

Ответ 5: Рекомендуется применять аппарат один или два раза в день, не более 30 минут за сеанс. Но сеанс массажа может быть и дольше, если чувствуете в этом необходимость.

Вопрос 6: Могу я использовать только одну манжету на ногу?

Ответ 6: Чтобы прибор работал корректно, обе манжеты должны быть подключены, но вы можете надеть только одну из манжет, а другую положить рядом. Манжета также будет надуваться / сдуваться одновременно, даже если эта манжета не надета. Мы рекомендуем использовать обе манжеты одновременно, чтобы получить максимальный эффект от массажа.

Вопрос 7: Почему аппарат издает звук во время работы, нормально ли это?

Ответ 7: Звук издает работающий воздушный компрессор в аппарате, который непрерывно подает воздух к камерам в манжетах, это негромкий звук и это нормально.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Возможная причина	Решение
Аппарат не работает, не светится экран.	1.Питание не включено. 2.Адаптер питания подключен не надёжно. 3.Неисправна настенная розетка.	1.Нажмите кнопку питания, чтобы включить аппарат. 2.Убедитесь, что адаптер питания надёжно подключен к аппарату и настенной розетке. 3.Проверьте, работает ли настенная розетка.
Экран светится, но манжеты не накачиваются.	1.Подсоединена только одна из манжет к аппарату. 2.Воздушные шланги подсоединены ненадежно. 3.Манжеты повреждены.	1.Аппарат корректно работает только в том случае, если к нему подсоединены 2 манжеты. Подсоедините 2-ю манжету. 2.Проверьте, правильно ли и полностью ли подсоединены воздушные шланги к аппарату (обратите внимание на отметку UP - "ВЕРХ" на коннекторе). 3.Проверьте манжеты на предмет утечки воздуха (по характерному звуку). Если утечка есть, обратитесь в нашу службу поддержки.
Работа аппарата прерывается и/или манжеты перестают накачиваться.	1. Воздушные шланги подсоединены ненадежно. 2.Адаптер питания отсоединяется. 3. Время сеанса истекло.	1.Пожалуйста, проверьте, правильно ли и полностью ли подключены воздушные шланги к аппарату (обратите внимание на отметку UP - "ВЕРХ"). 2.Убедитесь, что адаптер питания надёжно подключен к аппарату и розетке. 3.Аппарат автоматически выключается по истечении заданного времени, при необходимости нажмите кнопку питания, чтобы начать новый сеанс.

ХРАНЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Не разбирайте аппарат самостоятельно. Если требуется техническое обслуживание или ремонт, пожалуйста, свяжитесь с нашим клиентским сервисом.
2. Храните аппарат в недоступном для маленьких детей месте, а также людей, не имеющих возможности правильно использовать его самостоятельно.
3. Не храните аппарат при высокой температуре и влажности.
4. Избегайте попадания прямых солнечных лучей.
5. Избегайте соприкосновения манжет и шлангов с острыми предметами.
6. Не ставьте на аппарат тяжелые предметы.
7. Следите за тем, чтобы в шланги и коннекторы не попадали посторонние предметы, пыль.
8. Не допускайте скопления ворса или пыли на аппарате или соединительных элементах шлангов. При скоплении ворса или пыли, перед использованием, протрите загрязненные места сухой тканью.

ОЧИСТКА:

Перед очисткой устройства обязательно отключите питание.

1. В случае загрязнения, протрите все части аппарата и манжеты влажной чистой тканью.
2. Тщательно вытрите насухо чистой тканью.
3. Не используйте бензин, спирт, растворитель и другие агрессивные жидкости для протирания любых элементов прибора. Это может привести к неисправности или повреждению устройства.
4. Не допускайте попадания посторонних предметов и пыли в шланги.
5. Не проводите химчистку манжет.

УТИЛИЗАЦИЯ

Пожалуйста, соблюдайте местные правила при утилизации упаковки и оборудования.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- 1 шт. - Аппарат (блок управления)
- 2 шт. - Манжеты (с присоединёнными шлангами)
- 1 шт. - Коннектор для подключения манжет к аппарату
- 1 шт. - Адаптер питания AC100~240V, 50/60Гц; DC12V1A
- 1 шт. - Инструкция по эксплуатации
- 1 шт. - Сумка для переноски и хранения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Smartwave 400
Название	Аппарат для прессотерапии и лимфодренажа
Питание	Входное напряжение: 100~240 В , AC 50/60 Гц Выходное напряжение: 12 В 1 А DC
Мощность номинальная	12 Вт
Режимы	3 режима: последовательный, циркуляционный, комбинированный
Уровни давления	8 уровней давления: низкое - 50 / 60 / 70 мм рт.ст. среднее - 80 / 90 / 100 мм рт.ст. высокое - 110 / 120 мм рт.ст.
Время	3 установки: 20 / 25 / 30 минут
Вес аппарата с манжетами	3 кг
Полный вес с упаковкой	3,2 кг
Тип манжет	4-х камерные
Размер манжет для ног (М)	Длина по внутреннему шву: 85 см. Максимальный обхват бедра: 72 см. Максимальный обхват стопы: 35 см.